

歯科材料 03 義歯床材料  
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン (70825000)

## インプレロン

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】\*

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。


#### 【形状・構造及び原理等】\*

##### 1. 概要

本品は、歯科用装置(スプリント、チンキャップ、個人トレー、バイトプレート)の作製に用いるプラスチック板である。歯科技工用成型器により成形して使用する。

##### 2. 形状

標準形状は図のとおり。

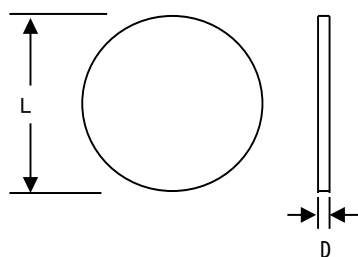

- L (直径): 125.0mm  
D (厚さ): 2.0、3.0mm

##### 3. 原材料

ポリスチレン成形用及び押出用材料、顔料

#### 【使用目的又は効果】

歯科用装置(スプリント、チンキャップ、個人トレー、バイトプレート)の作製

#### 【使用方法等】\*\*\*

1. 歯科技工用成型器として、SCHEU-DENTAL 社製のバイオスター(※1)又はミニスター(※2)を使用する場合。
  - 1) 成型器の使用・操作方法に従って、直径125mmの本品を成型器にセットする。
  - 2) 石膏模型を成型器にセットする。
  - 3) セットした製品固有のCODE(※3)を入力する。又は成型器にバーコード(※3)を読み取らせ、成形条件(加熱時間と冷却時間)を設定する。
  - 4) 本品を加熱した後、加圧成形する。
  - 5) 冷却後、模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
  - 6) 辺縁等を仕上げ、装置が完成する。

※1 販売名「バイオスターVII」(届出番号: 13B2X00107000040)  
製造販売業者: 株式会社 JM Ortho

※2 販売名「ミニスターS scan II」(届出番号 27B1X00109000325)  
製造販売業者: 株式会社モリタ

※3 成形条件を示す3桁のCODEとバーコードは本品表面に印字されている。また、CODE、加熱時間、冷却時間は包装ラベルに表示されている。

#### 2. 1. で指定した歯科技工用成型器以外を使用する場合

- 1) 使用する成型器に本品の直径が適合するのを確認し、セットする。
- 2) 石膏模型を成型器にセットする。
- 3) 成型器に使用方法・操作方法に従って加圧成形を行う。
- 4) 以下は1.の5)と6)と同様。

#### 【使用上の注意】\*\*\*

##### <重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・成形の際は使用する成型器の取扱説明書に従うこと。(SCHEU-DENTAL 社製加圧成型器(※1、※2)の使用を推奨する。)
- ・SCHEU-DENTAL 社製加圧成型器(※1、※2)を使用する場合、成形条件はLOTごとに設定されているため、プレート又は包装に表示されたバーコード及びCODEに従うこと。
- ・3Dプリンタで作製した模型に対して使用する場合は、模型を十分に重合乾燥させてから使用すること。また、分離用シートの使用を推奨する。(推奨: イソフォランフイル/SCHEU-DENTAL 社製)
- ・成形の際は過加熱に注意すること。
- ・成形は風通しの良い場所で行うこと。
- ・バーコードスキャン機能を持つバイオスター(※1)及びミニスター(※2)でプレート上のバーコードをスキャンする時、CODEを読み取れない場合がある。この場合、プレートに印字された3桁のCODEを手入力すること。
- ・熱変形防止のため、本品から作成した装置は熱湯消毒しないこと。ぬるま湯ですすぐ又はリテーナー洗浄剤を使用すること。
- ・本品を廃棄する場合には「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】\*\*

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・加熱機器(ストーブ等)周辺には保管しないこと。
- ・埃、水分等が付かないようにすること。
- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

#### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売業者: 株式会社 JM Ortho  
住 所: 東京都千代田区神田駿河台 2-2  
御茶ノ水杏雲ビル 14F  
電 話 番 号: 03-5281-4711  
F A X 番 号: 03-5281-4716  
製 造 業 者: SCHEU-DENTAL GmbH (ドイツ)