



INSTRUMENT



10

インスツルメント

- ケア & メンテナンス 170
- インスツルメントの主な種類と使用目的 171
- カuttingプライヤー 172
- アライナー矯正用プライヤー 174
- ユーティリティープライヤー 177
- ベンディングプライヤー 178
- ボンディングインスツルメント 181
- リガッティングインスツルメント 183
- リガッティングインスツルメント／
シンチバックインスツルメント 185
- シンチバックプライヤー／フッククリンピングプライヤー／
キャップリムービングインスツルメント 186
- バンディングインスツルメント／
オリジナルインスツルメント 187
- リムービングプライヤー／
ディボンディングプライヤー 188
- アーチターレット／コントラアングルドライバー／
金冠バサミ／メンテナンス用品 189
- ストリッピングインスツルメント／プライヤースタンド 190

〈お知らせ〉

本章掲載製品の薬事関連情報は章末(P191～)に
まとめて掲載しております。

ケア&メンテナンス

インスツルメントのお手入れ

ステンレススティール

ステンレススティールは耐腐食性に優れている鋼材のひとつですが、化学物質の種類、酸性濃度などの条件により変色や腐食の原因となることがあります。

超硬付インスツルメント（インサート付）

超硬部分はカーボンが多く含まれているため耐腐食性はステンレススティールと比較するとなんて低くなっています。したがって、洗浄・乾燥・滅菌等の処理を行う場合には必ずステンレススティールと分けて実施して下さい。また滅菌前には防錆剤を使用して下さい。

ジョイント付インスツルメント

洗浄・滅菌過程においてジョイント部の油膜がなくなると、金属同士の摩擦抵抗が増したり錆によりスムーズな動きを損なう恐れがあります。洗浄・乾燥・滅菌の過程では必ずジョイントを広げた状態で行い、**IMS潤滑剤**や**スムーサー**を施して下さい。

インスツルメントの洗浄と滅菌について

洗浄

流水下で洗浄して下さい。その際に、インスツルメントの突起部、刃先など鋭利な部分でケガをしないよう十分注意して行って下さい。洗浄剤を使用する場合には、低発泡性中性洗剤を使用して下さい。その際、各洗浄液の『使用上の注意』を必ずよくお読み下さい。また、ケガを防止する手段として、効率良く汚れを落とすことができる超音波洗浄をお勧めします。薬液で洗浄・消毒を行った場合には、流水で薬液を除去して下さい。

乾燥

汚れが除去できたことを確認し、器具同士が重ならないよう配慮し、乾燥させて下さい。水分が残っている場合、錆の原因になります。

滅菌

滅菌は、すべての微生物を死滅させるための工程です。代表的な熱による滅菌方法は次の通りです。

熱による滅菌方法	標準滅菌時間と温度*	利点	注意点・欠点
オートクレーブ滅菌	121℃/20分 132℃/10分	短時間で完了 蒸気の浸透性が良い	コンテナが使用できない プラスチックやシリコーンは破損しやすい ステンレス以外の器具は錆びやすい 硬水の場合、付着物が残留する
乾熱滅菌	160℃/60～120分	腐蝕性がない 滅菌後の乾燥不要 コンテナが使用できる	時間がかかる 液体自体の滅菌不可 プラスチックやシリコーンは破損しやすい 事前乾燥が必要

*滅菌時間と温度に、滅菌器のウォームアップタイプ時間は含まれていません。滅菌前にIMS潤滑スプレーやスムーサーを施して下さい。
また滅菌する器具のボリュームや特性によっても異なります。
各歯科医院内において、日常の細菌試験結果により滅菌方法を設定してください。

JM Orthoではホルムアルデヒドガス消毒器（ホルステリ20RM）によるインスツルメントの消毒を推奨しています。詳しくは本カタログの220ページをご参照ください。ホルステリの場合は消毒後にIMS潤滑剤スプレーを施して下さい。

その他

薬液消毒を使用する場合、条件によりステンレススティールに対して腐食の原因となる成分*が含まれている場合がありますのでご注意ください。

*次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・グルコン酸クロロヘキシジン・ヨードチンキ・ヨードホルム

超酸性水などの機能水による殺菌は、器具の素材を腐食させる原因となります。

水道水には、不純物が含まれている場合がありますので、滅菌・消毒には精製水を使用して下さい。

シャープニング、アライメントについて

シャープニング、アライメントの必要がある場合は、販売店にご相談下さい。



インスツルメントの主な種類と使用目的

本章掲載インスツルメントの主な種類と使用目的についてのご紹介です。

カテゴリー	主な名称	特長や使用目的	掲載ページ
カッティングブライヤー	ピンカッター マイクロカッター リガチャーカッター	先端が細く、比較的細い結紮線(リガチャーワイヤー)やエラストックなどを切断できるブライヤーです。ヘッドがコンバクトなもの、用途に合わせた角度がついているもの、パネツキのものなどもございます。	172
	ディスタルエンドカッター	ワイヤーの最遠心部を切断するために使用するブライヤーです。リンガル矯正でも使用しやすいよう長い持ち手と角度がついたタイプや、下記のような機能がついたものもございます。 ・セーフティーホールド 切断後の短いワイヤーが口腔内に飛びにくく設計されています。 ・フラッシュカット 切断時、バックルチューブの遠心側とほぼ同一面で切断できるよう設計されています。	173
アライナー矯正用ブライヤー	クリアコレクションシリーズ アライナーブライヤーシリーズ など	矯正用アライナーにアクチベーションを付与したり、切り込みをいれたり、矯正用アライナーに多彩な可能性を与えるブライヤーです。目的に合わせてお選びいただけます。	174~176
ユーティリティーブライヤー	ウィンガルト(ウィンガルト) ホー(ホウ、ハウ)	その名の通り、様々な目的で使えるブライヤーで、アーチワイヤーやニューSTロック、3Dシステムなどの着脱や、ワイヤーベンディング時のワイヤーの把持など、様々な場面でご使用いただけます。	177
ベンディングブライヤー	ループフォーミング ツイードアーチ バードピーク ホローチョップ スリージョー ライトワイヤー GEAWブライヤー GMトルキングブライヤー	ワイヤーベンディングに用いるブライヤーです。アーチワイヤーに様々なループやトルクを付与するもの、アーチの形態を整えるものがあります。 その他に技工物の製作に用いるブライヤーもございます。	178~180
ボンディングインスツルメント	ブラケットプレーサー ピンセット ブーンゲージ	ブラケットやチューブを接着する際に便利なインスツルメントです。 ブラケットの接着位置を決定するゲージや、ブラケットやチューブの把持を得意とするインスツルメントなどを掲載しています。	181~182
リガッティングインスツルメント	ツイスター タイニングブライヤー モスキート 持針器 リガチャーディレクター リガチャータッカー	結紮線(リガチャーワイヤー)や結紮用O-リングなどのリガチャーモジュールを装着するときに便利なインスツルメントです。結紮線の切れ端を頬粘膜にあたらないように調整する(ディレクト)機能をもったブライヤーもございます。	183~185
シンチバックインスツルメント	シンチバックブライヤー ハンマーヘッド	アーチワイヤーがチューブから抜けてしまったり、頬粘膜に当たらないように屈曲する(シンチバック)ために使用するブライヤーです。	185~186
バンディングインスツルメント	バンドプッシャー バンドシーター カンタリングブライヤー	バンドの調整や装着に使用するブライヤーです。	187
リムービングインスツルメント	リムービングブライヤー ディボンディングブライヤー	ブラケット・チューブ・バンドの除去、そして歯面に残った接着材を除去するためのインスツルメントです。目的に合わせた形状になっており、様々な工夫が施されています。	188

その他、矯正治療中の様々な用途に合わせたインスツルメントを多数掲載しております。

カッティングプライヤー

マイクロミニピン&リガチャーカッター ヒューフレディ(アルファメッド)



切断許容径：.012" / 0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-107

206850009

ロングハンドルタイプ

678-107L

206850777107L

スリムマイクロカッター ヒューフレディ(アルファメッド)



スレンダーチップにより結紮線・
エラスティック除去がより容易
になりました。
従来品に比べ先端の大きさを縮
小したことで、より広い視野を
とることが可能です。

オフセット15°

切断許容径：.008"~.012" / 0.20mm~0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-500

206850124

マイクロカッター ヒューフレディ(アルファメッド)



ハンドルが小さくデザイン
されているため、特に手の
小さい方にお勧めします。

オフセット15°

切断許容径：.012" / 0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-110

206850777110

ピン&リガチャーカッター TASK (シオダ)



切断許容径：.016" / 0.41mm

TS-15

206860021

ピン&リガチャーカッター TASK (シオダ)



バネ付

切断許容径：.016" / 0.41mm

30-604WK

206860248

ピン&リガチャーカッター(ミニチュア) TASK (シオダ)



バネ付

切断許容径：.016" / 0.41mm

30-605WK

206860249

リガチャーカッタークラシック TASK (シオダ)



切断許容径：~.016"

CUT001TC

206860132

リガチャーカッター15° アングルショート TASK (シオダ)

※超硬付



コンパクトなアングルヘッド（15°）と
ショートハンドルのデザインにより、
操作性にすぐれています。
バネ機構の採用により、
作業効率が向上します。

全長：114mm

切断許容径：~.015"

CUT001AT

206850191

ピン&リガチャーカッター(スリム)15° アングル TASK (シオダ)

バネ付



切断許容径：~.015"

60-607

206860250

ピン&リガチャーカッター(スリム) TASK (シオダ)



切断許容径：~.015" / 0.38mm

60-605S

206850145

ND-605 リガチャーカッター (超硬付) YDM



切断許容径：~.012"

151505

201510505

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



カッティングプライヤー

ディスタルエンドカッター ヒューフレディ(アルファメッド)

セーフティーホールド機能付きでカットしたワイヤーが飛びにくい構造です。



切断許容径：.012"～.021"×.025"/0.30mm～0.53mm×0.64mm

678-101 206850003

ロングハンドルタイプ

678-101L 206850004

エンドカッターセイフティ YDM

サイズは先端からハンドル部の末端までの長さを示しています。



切断許容径：角ワイヤー～.016"×.016"～.028"×.028"/丸ワイヤー～.012"～.016"

124mm 201510507 201510507

147mm 201510508 201510508

ディスタルエンドセーフティカッター TASK (シオダ)



横から見た図

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/丸ワイヤー～.020"/ツイストワイヤー～.016"

30-551US 206860251

ディスタルエンドセーフティカッター・フラッシュカットタイプ(ロングハンドル) TASK (シオダ)



超硬付き

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/～0.56mm×0.71mm/丸ワイヤー～.020"/～0.51mm/ツイストワイヤー～.021"×.025"/～0.53mm×0.64mm

30-550FL 206850136

ディスタルエンドセーフティカッター ノーリング ロングハンドル TASK (シオダ)

30-553のロングハンドルタイプ。ハンドルに10°の角度がついています



超硬付き

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/～0.56mm×0.71mm/丸ワイヤー～.020"/～0.51mm

30-554 206860388

ディスタルエンドセーフティカッター スリム(ロング) TASK (シオダ)




超硬付き

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/～0.56mm×0.71mm/丸ワイヤー～.020"/～0.51mm

30-551USL 206860719

ディスタルエンドセーフティカッター・スリム(ロングハンドル) TASK (シオダ)

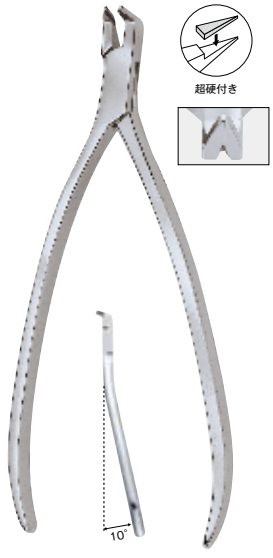

超硬付き

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/～0.56mm×0.71mm/丸ワイヤー～.020"/～0.51mm/ツイストワイヤー～.016"/～0.41mm

30-550SL 206850137

ディスタルエンドセーフティカッター フラッシュカット TASK (シオダ)



■付属
ホールド
リング…3

切断許容径：角ワイヤー～.022"×.028"/～0.56mm×0.71mm/丸ワイヤー～.020"/～0.51mm/ツイストワイヤー～.021"×.025"/～0.53mm×0.64mm

30-550SF 206860550



By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type



交換用ホールドリング(10個入) TASK(シオダ)
30-950 206860611

(30-550SF/30-550FL共用)

ディスタルエンドセーフティカッター ノーリング TASK (シオダ)



フラッシュカットタイプ
ホールドリングの交換不要

切断許容範囲：丸ワイヤー .010"～.020"/角ワイヤー～.022"×.028"

30-553 206860035

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

カッティングプライヤー／アライナー矯正用プライヤー

パワーカッター TASK(シオダ)



切断許容径：1.5mm

60-004

206860007

フラットカッター



先端部
($\phi 0.6 \sim 1.0\text{mm}$)、
側面部
($\phi 1.0 \sim 1.2\text{mm}$)

切断面の比較



フラットカッター

ワイヤーニッパー

- バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られることによって、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
- 2箇所の切り口（先端・側面）を使い分けることで、 $\phi 1.0\text{mm}$ まであるいは $\phi 1.2\text{mm}$ までのフラットカットができます。
- 手が小さな方でも扱いやすいよう、ハンドル最大開口幅を狭めに設計しています。

45-020

206850138

アライナープライヤー(キーホールタイプ) TASK (シオダ)



60-736

206850195

クリアコレクション バイトプレーンプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)



アライナーの上顎前歯部舌側に突起を作るプライヤーです。
上顎前歯部に圧下する力を付与するため、前歯部のディープバイトを是正し、開いた臼歯部のバイトを閉じる効果をもたらします。

678-809

206850230

クリアコレクション ブーツストラッププライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)



クリアアライナーの辺縁部に長方形のカットアウトを付与し、ボタンの正確な装着のためのウィンドウを作成します。従来の半月板のカットアウトに比べ、ボタンが移動するスペースを増やすことができるため、よりブーツストラップ法に適したモデルとなっています。ブーツストラップ法は、アライナーを装着した状態で舌側と唇側のボタンに矯正用エラスティックをかけ、歯牙に対してアライナーが浮いてしまっている場合に、アライナーをフィットさせるサポートをします。また、歯肉を圧迫するプラスチックの切り取りにもご使用いただけます。

678-810

206850231

クリアコレクション プレジジョンアライナーパンチプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)




クリアアライナーの臼歯部の頬側及び舌側の辺縁部に三角形のカットアウトを付与できるプライヤーです。ベース形状が三角形のアライナーボタンや小さなアライナーボタンを配置するために対照的なウィンドウを作成可能です。また、歯肉を圧迫するプラスチックの切り取りにもご使用いただけます。スプリング付。

678-812

206850232

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

クリアコレクション クロックワイズウェッジプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

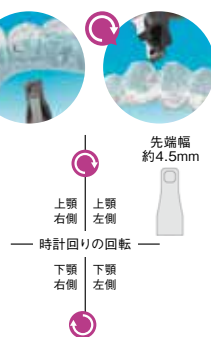

クロックワイズウェッジプライヤーは、特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることににより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。時計回りに回転させる際に使用されます。



使用方法はこちらから
ご覧いただけます。
(英語)

678-808

206850227

クリアコレクション カンタークックワイズウェッジプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)



カンタークックワイズウェッジプライヤーは、特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることににより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。反時計回りに回転させる際に使用されます。



使用方法はこちらから
ご覧いただけます。
(英語)

678-807

206850226



アライナー矯正用プライヤー

Clear Collection™ Instruments

クリアコレクション (Clear Collection™) シリーズは、バイオメカニクスの特徴を用いた「目立ちにくい」アライナー矯正治療を個々の患者さんに合わせ、熱処理を必要とすることなく、最適化できるよう設計された革新的なインスツルメントです。

クリアコレクション ホールパンチプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

アライナーの辺縁に半月状のスペースを作り、リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の装着位置を確保します。

先端幅
約8mm
直径6mm




678-803

206850176

クリアコレクション ペティートパンチプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

アライナー辺縁で起こり得る歯間乳頭などへの干渉や刺激を緩和するトリミングにも使用することができます。

先端幅
約6.5mm
直径4.5mm

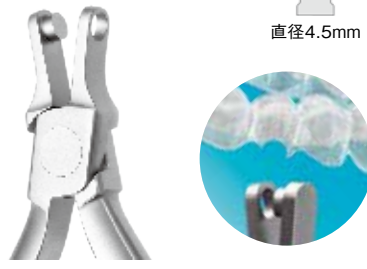

678-805

206850225

アライナープライヤー TASK (シオダ)



60-731

206860625

クリアコレクション ティアドロッププライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

アライナー装着中、エラスティックを牽引するための切り込みを付与します。この切り込みがあることで、患者さん自身でエラスティックを交換することが容易になります。


先端幅
約3.2mm



678-800

206850173

アライナープライヤー TASK (シオダ)

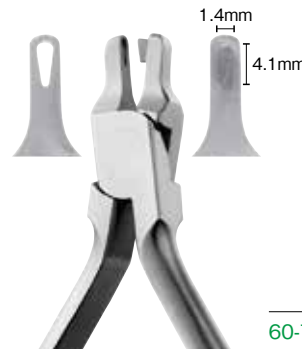


●アライナー歯頸部辺縁にエラスティックを取付ける際の涙滴状の穴を開けることができます。

60-734

206860628

アライナーアジャスターアングル (スリム) YDM

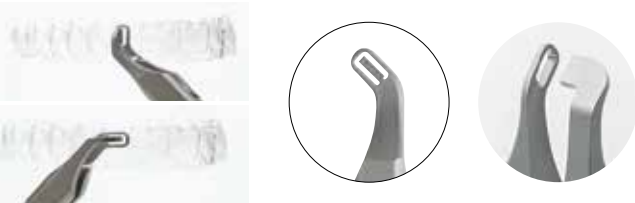

CUTAAA

206860324

アライナー類の歯牙近心や遠心側の垂直方向にアクチベーション（くぼみ）を入れることで、ローテーションコントロールを促進します。また歯頸側に水平方向のアクチベーションを入れることでルートトルクの促進も可能です。



アライナーアジャスター水平 (スリム) YDM



CUTAAH

206860325

受け側を薄くデザインしたことで、アライナー類の歯牙のより先端部に水平的アクチベーション（くぼみ）を入れることが可能になりました。歯頸側にもアクチベーションを入れることができ、トルクコントロールを促進します。



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

アライナー矯正用プライヤー

クリアコレクション パーティカルプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

パーティカルプライヤーは、特定の歯牙の頬側面や舌側面、近心または遠心隅角にくぼみを作成することにより、ローテーションのオーバーコレクションを調整します。また、アタッチメントのすぐ傍にくぼみを作ることでアライナーをアタッチメントとより良くフィットさせるために使用することもできます。



先端幅
約3.6mm



678-801

206850174

アライナープライヤー

TASK (シオダ)



1.2mm
3.6mm

60-733

206860627

クリアコレクション ホリゾンタルプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

ホリゾンタルプライヤーは、くぼみを付与して個々のルートトルクを調整します。また、アライナーを接着されたアタッチメントにしっかり接着させるために、歯牙のアンダーカットに対して、もしくはアタッチメントの下にくぼみを作成することにより、アライナーやリテーナーの保持力を高めます。



先端幅
約5.3mm



678-802

206850175

アライナープライヤー

TASK (シオダ)



3.0mm
1.0mm

60-732


206860626

クリアコレクション スポットプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

スポットプライヤーは、小さな個々の歯牙の移動やアライナーの保持力を高める点接触を作成するために、ごく小さな丸いくぼみを付与します。一般に、わずかに「押し出す」ことのみを必要とする歯牙の移動を促進するために使用します。スポットプライヤーの小さな陥凹を歯肉鼓形空隙の近くに付与することにより、アライナーやリテーナーの保持力を高めることもできます。



先端幅
約4.4mm

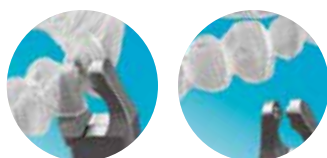


678-804

206850224

クリアコレクション イレイサープライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

イレイサープライヤーは、クリアコレクション(Clear Collection™)シリーズのその他のインスツルメントにより作成された不要なくぼみを元に戻す、または取り除くために設計されています。イレイサープライヤーは、意図せず陥凹が付与してしまった場合やアクセントが必要でなくなった箇所をブラスチックを平らにするために設計されています。

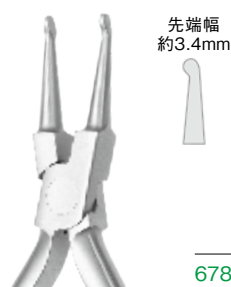

先端幅
約3.4mm



678-811

206850228

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。




ユーティリティープライヤー

ウイングルトユーティリティープライヤー
スリムヘッド TASK (シオダ)



CUT003T 206850188


ウイングルトユーティリティープライヤー
TASK (シオダ)

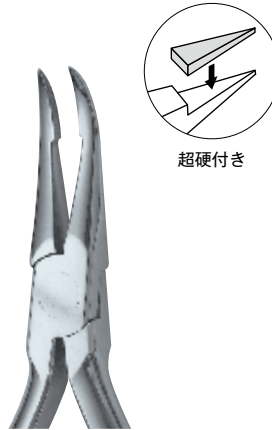

60-501T 206860017

ユーティリティープライヤークラシック
TASK (シオダ)

ハンドルが他のユーティリティープライヤーに比べ丈夫に設計されており、ニューSTロックの適合や着脱に適しています。

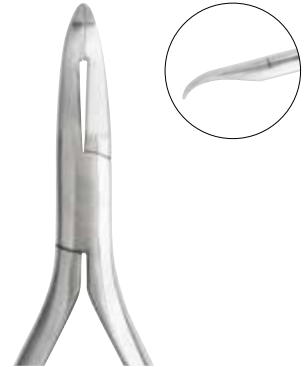

CUT003TC 206860133

マイクロユーティリティNeo
TASK (シオダ)



CUT003YA 206350183

ウイングルトユーティリティープライヤー・
スモール TASK (シオダ)



60-504 206860257

リングルユーティリティープライヤー
(ロングハンドル) TASK (シオダ)



P-300 206860255

スリムウイングルトプライヤー
ヒューフレディ(アルファメッド)


20° アングル付



ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-202 206850010

ホウプライヤー
TASK (シオダ)

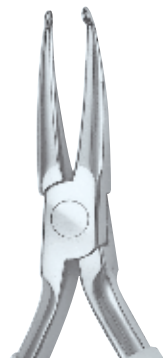

60-306 206860253

ホーププライヤー ストレート
ヒューフレディ(アルファメッド)



ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-203 206850011

ホーププライヤー オフセット付
ヒューフレディ(アルファメッド)

舌側や屈みにくい部分の作業に適した
40° アングル付き。




ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-204 206850023204

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ベンディングプライヤー

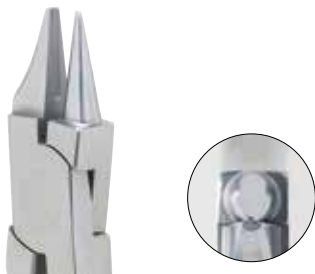ループフォーミングプライヤー(ツイード)
TASK (シオダ)

CUT007TPT

206860178

ツイードループフォーミングプライヤー
TASK (シオダ)

Ⓢ
ヘッド
クローズ時



屈曲許容径: .022" / 0.56mm

60-304

206860260

ループフォーミングプライヤー
TASK (シオダ)

屈曲許容径: .022" / 0.56mm

60-305

206850141

バードビークプライヤー
TASK (シオダ)

↓ ↓
□ ○
.035" .035"



屈曲許容径: .030" / 0.75mm

60-314

206860259

バードビークプライヤー
TASK (シオダ)

↓ ↓
□ ○
.040" .040"



屈曲許容径: .032" / 0.81mm

30-314T

206850134

バードビークプライヤー
ヒューフレディ(アルファメッド)

ラウンドワイヤーのループ
成形プライヤーです。
リテーナーやクラスプ線の
屈曲に便利です。



屈曲許容径: .030" / 0.76mm

678-304

206850015

バードビークプライヤー
ヒューフレディ(アルファメッド)

テーパータイプで、
多様なループを成形できます。



屈曲許容径: .022" × .025" / 0.56mm × 0.64mm

678-326

206850023326

ライトワイヤープライヤー
TASK (シオダ)

↓ ↓
□ ○
.027" .027"


屈曲許容径:
.020" / 0.50mm

30-316T

206860003

30-315T(ミゾ付き)

206860076

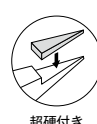

超硬付き

ライトワイヤープライヤー(カッター付)
TASK (シオダ)

↓ ↓
□ ○
.028" .028"


屈曲許容径:
.020" / 0.50mm

30-316C

206860002

30-315C(ミゾ付き)

206860077

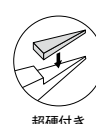

超硬付き

ヤングプライヤー
TASK (シオダ)

屈曲許容径: .040" / 1.02mm

60-074


206860008

キムプライヤー カッター付き
TASK (シオダ)

屈曲許容径: 角ワイヤー .016" × .022" / 0.41mm × 0.56mm

60-430CK

206850144

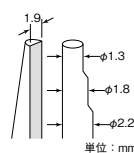

単位: mm

ナンスクロージングループプライヤー
TASK (シオダ)

Ⓢ
ヘッド
クローズ時



屈曲許容径: .022" / 0.56mm

60-302

206860011


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ベンディングプライヤー


パーティカルループ&ステップバンドプライヤー(GEAWプライヤー) TASK (シオダ)

パーティカルループ&ステップバンドプライヤーはGEAW systemを達成させるために考案されたGUMMETALワイヤー専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーでShort FormとRegular Formの高さが違うので、組み合わせることで1mm〜3mm刻みでステップの差をつけることができます。

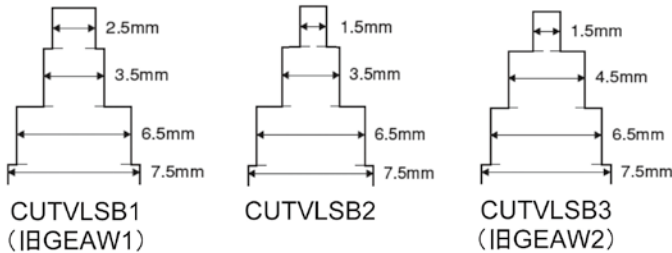


※写真は実寸大ではありません。

CUTVLSB1	206860126
CUTVLSB2	206860690
CUTVLSB3	206860411

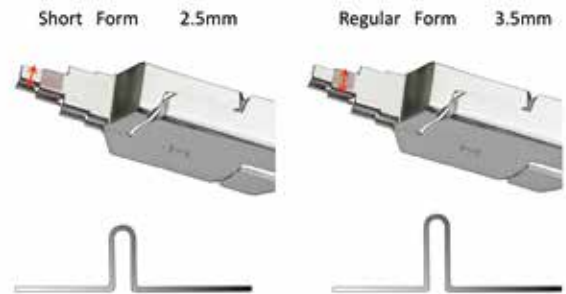

Short FormとRegular Formの形態 (例: CUTVLSB1)
一段目で屈曲されるパーティカルループをShort Form (2.5mm)、二段目で屈曲されるパーティカルループをRegular Form (3.5mm) と呼ぶ。

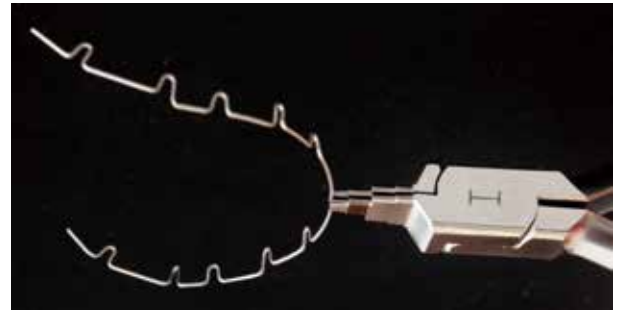

機能的咬合構築を目指す 不正咬合の矯正治療



著者 佐藤貞雄 白数明義
出版社 第一歯科出版
出版年 2014年
サイズ/ページ A4判変型 240ページ
商品番号 DSP001
208660000

GMトルキングプライヤー

TASK (シオダ)

GMTP2 206850814

ツイードのアーチベンディングプライヤーを横に倒した形で目安となる20度の口角が使いやすさを演出します。



GUMMETALベンダー

TASK (シオダ)

CUTGMB 206850653



溝の部分にゴムメタルフロッシュやゴムメタルストレート(巻線)に沿わせ、微調整をすることができます。
刃のエッジに丸みがあるため、ゴムメタルを傷つけにくくなっています。

ベンディングプライヤー

トルクインディケートアーチベンダー TASK(シオダ)

ブレード厚み
1.2mm

20°~60°



アーチベンディング
プライヤーと併用



屈曲許容径: ~.025"

CUT006T

206860144

ツイードアーチベンディングプライヤー TASK(シオダ)



屈曲許容径: .022"×.028"/0.56mm×0.71mm

60-303

206860012

ホローチョッププライヤー TASK(シオダ)

7.0mm



屈曲許容径: .022"/0.56mm

60-006

206850139

タイニロイVベンドプライヤー ラウンド TASK(シオダ)

タイニロイワイヤーをはじめとする超弾性NiTi合金のラウンドワイヤーにVベンド(センターベンド)を付与するための専用プライヤーです。



CUTTNVB

206860730

ストッププライヤー(Vベンド) TASK(シオダ)



超硬付き



60-224T


206860039

ステッププライヤー TASK(シオダ)



超硬付き

- ハンマーヘッドタイプ
- ステップ幅は1.0mm

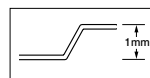

屈曲許容径: .022"×.028"

60-228

206860038

NiTiベンダー ヒューフレディ(アルファメッド)

NiTiワイヤーがまるでステンレスワイヤーのようにベンディングできます。通常NiTiワイヤーはNiTiワイヤー特有の復元力で元に戻ろうとする力が働きますが、NiTiベンダーを使用すれば120度以上の角度のベンディングが可能になります。(注: ワイヤーサイズによって角度は異なります。)



屈曲許容径: .020"/0.51mm

678-322

206850023322

スリージョープライヤー TASK(シオダ)

ヘッド
クローズ時



屈曲許容径: .028"/0.71mm

60-313

206860016

ヘビースリージョープライヤー TASK(シオダ)



屈曲許容径: .036"/0.9mm

60-313L

206850142

アングルドスリージョープライヤー 右 TASK(シオダ)



屈曲許容径: .036"/0.9mm

60-201R

206860024

アングルドスリージョープライヤー 左 TASK(シオダ)




屈曲許容径: .036"/0.9mm

60-201L

206860025

ヘッドギアプライヤー TASK(シオダ)

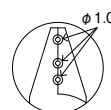

屈曲許容径: .051"/1.3mm

60-009

206850140

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ボンディングインスツルメント

ブーンブラケットポジショニング ゲージ TASK(シオダ)



ポジショニングハイト：
3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm
60-830 206860019

HASEGAWAゲージ



近遠心の辺縁隆線を結んだラインから一定の高さにス
ロットの位置を決め、ブラケットポジショニングを行いま
す。近遠心の辺縁隆線に対して平行にポジショニン
グをするため、アンギュレーションが自動的に決まります。

HBPG

フジデンタル

小白歯用



大臼歯用



※板の厚さは1.0mmです

臼歯部において辺縁隆線の近遠心を基準に最
適なブラケットポジションを測定するための
インスツルメントです。



ブラケットプレーサー TASK(シオダ)

BP1 206860407



ユーティリティツイザー Type II

TASK(シオダ)

CUTUT2 206850190



ブラケットをポジショニングする時やセルフライゲータリングブラケット(特にリンガル)
開閉時のワイヤーディレクトに便利です。




ワイヤーをしっかりと把持
しトルクを効かせます。



ネジの調整で様々
なブラケット幅に
対応します。

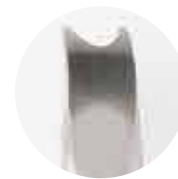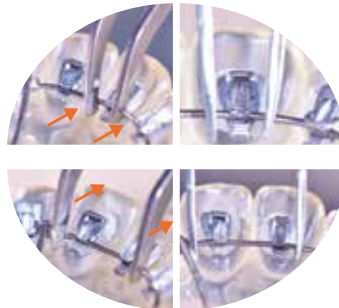

セルフライゲータリング
ブラケットの蓋のオープ
ナーとして使用できます。

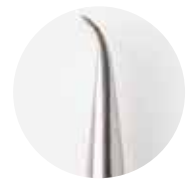

ブラケットプレーシングツイザー TASK(シオダ)

TASK(シオダ)

先端が細い設計になっています。



60-824

206860036

スリムダイレクトボンドブラケットツイザー ヒューフレディ(アルファメッド)



678-504



678-504

206850128

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ボンディングインスツルメント

ブラケットポジショニングツイザー

TASK (シオダ)



全長：189mm

GMP7

206850579

時計など精密機械用として使用されている#7 ピンセットの形をそのままに、歯科用に柄を長くして持ちやすく、使いやすくなりました。



先端が細くブラケットのウィングを把持したり、チューブの穴に差し込んで使用することができます。

ダイヤモンドピンセット

TASK(シオダ)



08275

206850133

ブラケット セッティング ツイザー

TASK(シオダ)



60-890

206850146

WAKEYAMAツイザー

TASK (シオダ)


CUT000T

206850187



後端を上げるとき

後端を下げるとき

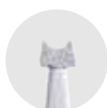

タングステンコーティングヘッド 滑りにくく、しっかり押しつける事が可能です。チューブのポジショニングに最適です。




角度は20°

ブレード

ブラケット
ポジショニングも
有効です。

厚さは.014"

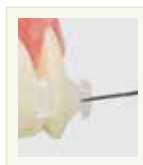

プレジジョンチューブツイザー TC付

TASK (シオダ)

CUTPTT2

206860436



先端の片側を .018"×.025" スロットに挿入できます

全長：127mm

スリムバックルチューブボンダーツイザー ヒューフレディ(アルファメッド)

678-505

206850129



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



リガティングインスツルメント

リガティング&ディレクター

TASK (シオダ)

ピンあり 60-817

206860029

ピン無し 60-817N

206860143

ヘッド形状




ヘッド形状

リガチャタイングプライヤー

TASK (シオダ)

先端部側面

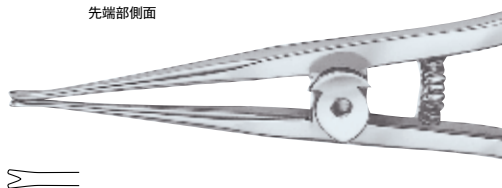

60-102

206860273

リガチャタイングプライヤー

ヒューフレディ(アルファメッド)

クーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用です。



ワイヤー使用許容径：.015"/0.38mm

678-211

206850024

クイックリガチャープレーサー

JM Ortho



NK1

206350747

結紮用O-リングをブラケットに装着するための専用インスツルメントです。反対側のV字カットの入った先端は、結紮の微調整やO-リングの除去などにお使いください。



エラスティックブレーシングプライヤー・フック付き

TASK (シオダ)



60-216

206850153

エラスティックブレーシングプライヤー

TASK (シオダ)



ヘッド形状



60-218

206850154

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

リガッティングインスツルメント

モスキートスリムストレート

フジデンタル

先端をスリムに加工




CUTMSS

206850908

モスキートスリムアングル

フジデンタル

先端をスリムに加工

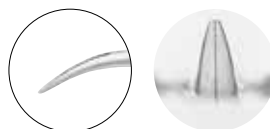

CUTMSA

206850183

モスキート ヘモスタット

ヒューフレディ(アルファメッド)

(Marcotte)



H4

206850025

マチュータイプ

TASK(シオダ)



ヘッド形状

N-215

206860274

SHダイヤモンドディレクター

フジデンタル



SHDD (ポイントS1個入)

206850897

交換用ポイントS (3本入)

SHDDPS

206850898



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。




リガティングインスツルメント／シンチバックインスツルメント

両頭リガチャーディレクター

TASK(シオダ)

60-823

206860078

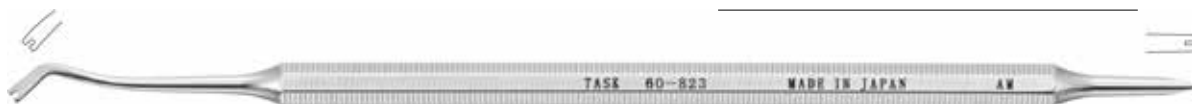


リガチャーディレクター

TASK(シオダ)

60-816

206860079

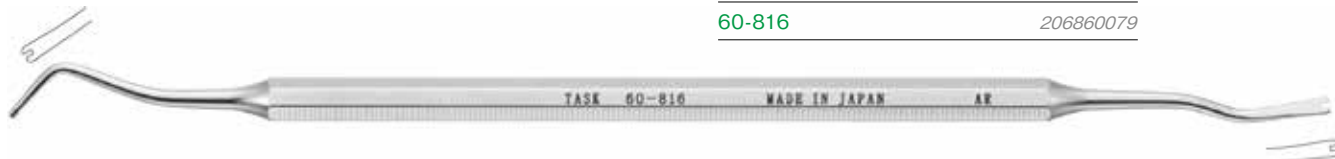

リガチャーディレクター

ヒューフレディ(アルファメッド)

LDG2

206850785LDG2

使用許容径: $\sim .015^{\circ}/0.38\text{mm}$



リンガル リガチャー ディレクター

ヒューフレディ(アルファメッド)

678-706

206850171

ワイヤー使用許容径: $.021^{\circ} \times .025^{\circ}/0.53 \times 0.64\text{mm}$



ブラケットオープナー

TASK(シオダ)

60-827

206850196


- 両先端部には滑り止め加工を施しており、リガチャーワイヤーをしっかりと押し込むことができます。
- 探針形状の先端は、セルフライゲーションブラケットの開閉にもお使いいただけます。



ディスタルシンチバックハンドインスツルメント ヒューフレディ(アルファメッド)

スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

NiTiワイヤーを熱処理せずに曲げることができます。

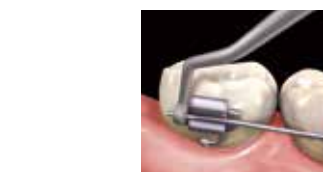

屈曲許容径: $.021^{\circ} \times .025^{\circ}/0.53\text{mm} \times 0.64\text{mm}$

屈曲許容径: $.025^{\circ}/0.64\text{mm}$

678-506

206850130

678-502

206850126

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

シンチバックプライヤー／フッククリンピングプライヤー／キャップリムービングインスツルメント

シンチバックプライヤー For Ni-Ti


TASK (シオダ)

屈曲許容径：～.016" ×.022"

NiTiワイヤー専用

NiTiワイヤーのエンドをシンチバックする際に、受け側C型にギザギザ加工を施し、ワイヤーを把持しやすくなっています。
片方のヘッドの両先端部をスリムに加工したことで、歯牙とワイヤーの隙間（咬合面から見て）にも挿入しやすくなっています。

※イメージ

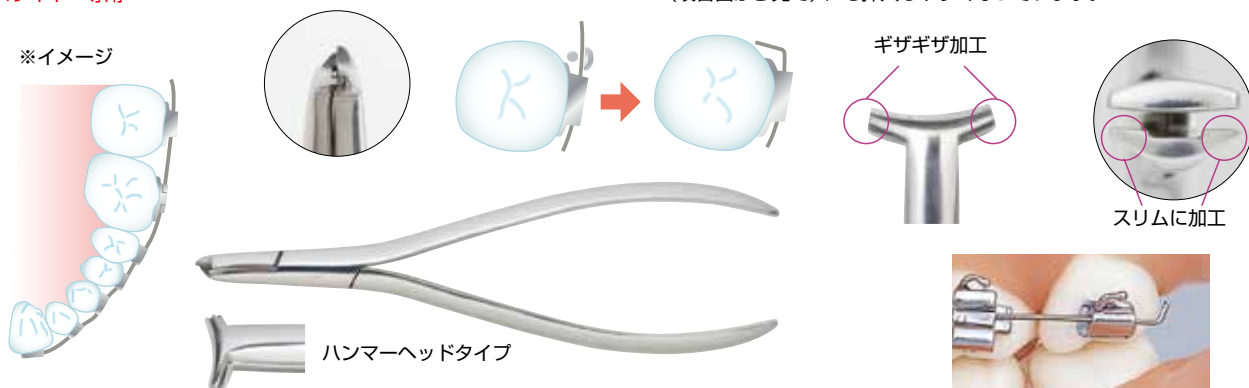

ハンマーヘッドタイプ

CUTNTCBDN

206860406




使用方法是こちらから
ご覧いただけます。

- 左右のヘッドとハンドルの握り方を
変えれば、上下顎、左右側でも歯頸、
舌側方向にシンチバックできます。

マルチクリンピングプライヤー

TASK(シオダ)

先端にある4つのピークでフックをワイヤーに圧接します。
この上下4つのピークで圧接する構造が、ワイヤーの変形や歪みを軽減します。
従来品は、設計上、一定方向からの圧接しかできませんが、本商品は上下を気にすることなく、圧接することが可能です。

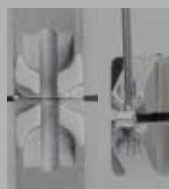

Ni-Ti, GUMMETAL 用

在庫限りで販売終了

*ステンレス、コバルトクロム
ワイヤーには使用できません

CUTMCDN

206860131

フッククリンピングプライヤー
TASK(シオダ)

圧接機構（正面）

超硬付き

P-220

206860270

コンバーチブルキャップリムービングプライヤー

TASK(シオダ)



交換用チップ



交換用レンチ



刃先をバックルチューブ近心の
スロットに挿入。



そのままの状態ではハンドルを
ゆっくりと握ると刃先がスロッ
ト方向にスライドし、キャ
ップが容易に剥がれて撤去で
きます。

60-105	本体	206860622
60-960	交換チップ（5枚入り）	206860629
60-961	チップ交換用レンチ1.3mm（1本入）	206860630

※本体（60-105）には交換チップ1枚と交換用レンチ1本が付属
しています。

キャップリムーバブルインスツルメント

RMO

i00557	本体・交換ブレード	206350623
i00559	交換ブレード（5枚入）	206350624




■付属
ブレード……………10枚

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



バンディングインスツルメント／オリジナルインスツルメント

エラスティックセパレーティングブライヤー TASK (シオダ)

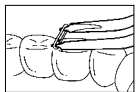

60-701

206860018

モジュールセパレーティングブライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

歯間分離用モジュール
装着用です。



678-210

206850014

バンドコンタリングブライヤー TASK (シオダ)



60-208

206860010

バンドシーター

TASK(シオダ)

60-800

206860028

耐熱温度：132℃／オートクレーブ滅菌可能
全長：約129mm



ダイヤモンドバンドブッシャー

TASK(シオダ)

CUTDBPHW

206850189



コーティング
なし



ダイヤモンド
コーティングあり

先端部にダイヤモンドコーティング
を施しているため、バンドの試適・
装着時に滑りにくなっています。



バンドブッシャー TASK(シオダ)

60-810

206850155



バンドブッシャー・三角ハンドル TASK(シオダ)

60-811

206850157




バンドブッシャー・シリコンハンドル TASK(シオダ)

60-810A

206850156

販売終了

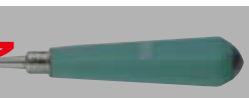

バンドブッシャー／スケーラー ヒューフレディ(アルファメッド)

BPS2

206850782



3Dシステム専用インスツルメント 3Dリムーバー

YDM

3DRP

206860239



使用方法是こちから
ご覧いただけます。



3Dリングルアーチや3Dクウッドヘ
リックスなど、このインスツルメント
“1本”で撤去可能です。
先端部の厚みや滑りにくいラバーハン
ドルなど術者にやさしいデザインです。

3Dアジャスタブルブライヤー TASK (シオダ)



3DP

206850734

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

リムービングプライヤー／ディボンディングプライヤー

ブラケットリムービング プライヤー

TASK(シオダ)



P-200

206860031



●刃先がブラケットベース下部と接着歯面の間に入り込む設計です。刃先は、ブラケット側面への接触ではなく、ブラケットの角2点への接触ですから、抵抗が少なく容易にコントロールできます。

ダイレクトボンディングブラケットリムービング
プライヤー-スリット TASK(シオダ)

60-335TG

206860718

ブラケットリムーバー
ヒューフレディ(アルファメッド)

メタル、プラスチック、セラミック等すべての素材のブラケットのディボンディングに適しています。




678-219

206850023219

ダイレクトボンドアタッチメントリムービング
プライヤー-アングル TASK(シオダ)

TS-26

206860277

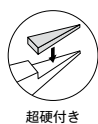

超硬付き

ブラケットリムーバー-アングル付
ヒューフレディ(アルファメッド)

アングル付きで特に臼歯部のブラケットのディボンディングに適しています。



678-220L

206850023220L

リンガル ディボンディング プライヤー ヒューフレディ(アルファメッド)

舌側矯正用のブラケットの取り外しに適しています。独特なデザインにより、患者さんの快適性を損なうことなく、矯正装置を素早くディボンディングできます。



もう一方のくさび型アームをブラケットの歯面の接着境界に差し込むようにしながら、タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。プライヤーを握ると、くさび型アームが歯牙の舌側面に挿入され、ブラケットを剥離します。



ディボンディングプライヤーの一方のフック型アームが舌側のブラケット下部に届くようにあてます。

678-709

206860413

アドヒーズリムービングプライヤー
ヒューフレディ(アルファメッド)

ブラケットディボンディング後の歯面に残った接着材除去用プライヤーです。



■付属
ブレード……………1
チップ1/4"……………1
交換用
ヘックスレンチ……………1

678-206

206850012

交換ブレード、ヘックスレンチ (各1本入)

678-001

206850772

交換チップ1/4" (6個入)

678-014A

206850775

交換用ブレード、交換チップと交換用のヘックスレンチは678-206に付属しています。

ボンドリムービングプライヤー
TASK(シオダ)

P-210

206860282

交換用ピークチップ (3個入)

60-983

206860279

交換用超硬チップ (1個入)

P-211

206860283

チップ交換用六角レンチ (1個入)

60-971

206860284



超硬付き

リンガルボンドリムービングプライヤー
TASK(シオダ)

P-700

206860285

(KommonBase™) 臼歯用
交換用ピークチップ (3個入)

60-983

206860279

(KommonBase™) 臼歯用 交換用チップ (1個入)

P-701

206860286

チップ交換用六角レンチ (1個入)

60-971

206860284



超硬付き

■付属
ピークチップ……………1
臼歯用チップ……………1
交換用六角レンチ……………1

臼歯用バンドリムービングプライヤー
TASK(シオダ)

60-104

206860009

交換用アルミチップ (3個入)

60-986

206860020

■付属
アルミチップ…1

バンドリムーバー ショート
ヒューフレディ(アルファメッド)

臼歯バンド撤去用です。



678-208

206850013

交換チップ1/4" (6個入)

678-014

206850773

交換チップ3/16" (6個入)

678-036

206850776

■付属
チップ1/4"……………1
チップ3/16"……………1

スリムバンドリムーバー
ヒューフレディ(アルファメッド)

678-503

206850127

交換チップ1/4" (6個入)


678-014

206850773

交換チップ3/16" (6個入)

678-036

206850776

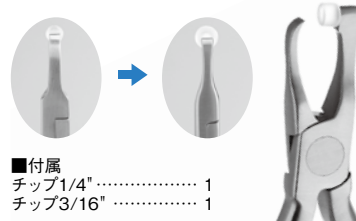

■付属
チップ1/4"……………1
チップ3/16"……………1

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



アーチャーレット／コントラアングルドライバー／金冠バサミ／メンテナンス用品

ゴムメタルアーチャーレット

TASK(シオダ)

ゴムメタルワイヤーのターレットとしてだけでなく、10°、20°の溝を設けているので、ゴムメタルワイヤーにトルクを付与するツールとしてもお使いいただけます。



CUTGMAT

206860695

ゴムメタルアーチャーレットZERO TASK(シオダ)

ゴムメタルのアーチフォーミングに使用するターレットで、トルクは全て0°です。



(スロットサイズ)
.016"×.022"/.017"×.022"/.017"×.025"/.018"×.022"
/.018"×.025"/.019"×.025"/.021"×.025"

CUTGMATZ

206860180

スタンダードアーチャーレット TASK(シオダ)



CUTPTAT

206860179

スロットサイズ	トルク	代表的な使用例
.017"×.022"	0°	アーチフォームの屈曲
.018"×.022"	0°	アーチフォームの屈曲
.017"×.022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.018"×.022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.019"×.025"	10°	前歯部トルクの屈曲
.017"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.018"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.019"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲

注意事項：

1. ゴムメタルワイヤー以外のワイヤーには使用しないで下さい。
2. ゴムメタルワイヤーは、他のワイヤーと異なり超弾性的性質を有するため、各スロットに表示しているトルク角は各ワイヤーサイズにおける100%のトルク角の屈曲が得にくいことがあります。本来のワイヤーサイズよりも大きいサイズのスロットを選択し、スロット内のがたつきを利用して、強めのトルクを屈曲することも可能です。

アーチャーレット TASK(シオダ)



.016"/.017"/.018"/.019"/.021"/.022"/

60-841

206860268

リンガルアーチャーレット TASK(シオダ)



60-850

206860269



●芯棒にもワイヤーサイズとトルクが刻印されています。

・サイドバーを付与し、従来品より曲げやすくなりました。

・ステンレス製の芯棒にワイヤーサイズとトルクを刻印し一目で分かりやすくなりました。

トルクコントロール(手動式コントラアングルドライバー)

クロスフィールド



トルク設定の変更は
後端のダイヤルを回すだけです。

一体型で7種類の締め付けトルク

7種類のトルク値 10/15/20/25/30/32/35N・cmが1本で可能

軽量=135g 小径ヘッド(高さ=11.35mm/径=9.2mm)

●機能

トルクコントロールは10~35N・cmの間で設定されたトルク値を超えると、クラッチが空回りしてスクリューに力が伝わなくなります。

●操作性

100°のヘッドはスクリューへの到達を容易にします。135℃オートクレーブが可能、メンテナンスも簡単です。

※滅菌の際は必ず滅菌バッグを使用してください。

※消毒液に浸漬しないでください。

IST-TC01

金冠バサミ 直・曲 TASK(シオダ)



直 S-210

206860290

曲 S-211

206860291

金冠バサミ 曲 TASK(シオダ)



S-611

206860292

スムーサー(防錆・潤滑・シャープニングオイル) TASK(シオダ)



IMS潤滑スプレー

ヒューフレディ(アルファメッド)



IMS潤滑スプレー

内容量	商品番号
スムーサー 40mL	19100 206860646


シャープニングやインスツルメントの防錆、潤滑にご使用いただけます。ジョイント部を有するプライヤー(鉗子)、持針器、ハサミなどにはオートクレーブ滅菌前に少量塗布してください。錆の発生を抑制するだけでなく、動きも軽くなり、器具の寿命が向上します。

内容量	商品番号
IMS潤滑スプレー 236mL	ILS 206860158

IMS潤滑スプレー(ILS)はヒンジ部の動きをスムーズにします。IMS潤滑スプレーにはシリコンは含まれていません。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ストリッピングインスツルメント／プライヤースタンド

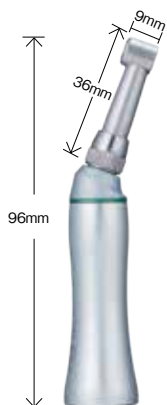

ストリッピング コントラアングル(TASK STR-50VT)

TASK(シオダ)

●ストリッピング専用のコントラアングルハンドピース

●信頼の日本国内生産・低振動・低ノイズ

※ストリッピングバーは別売りとなっております。

〈製品特長〉

・上下運動タイプ(減速4:1)

・ストローク幅: 約1.3mm

・各メーカーのEVAシステム用ストリッピングツール対応

・オートクレープ滅菌(135℃)対応

・JIS T5904:1933 (ISO3964:1982) 形式モーターに接続対応しております。

ヘッド直径8.0mm

74920

206860635

医療機器認証番号 225ALBZX00008000 管理/特管



オートストリッピングバー

TASK(シオダ)

- ・ブレード両面にダイヤモンド粒子をコーティングしてあります。
- ・付与されたホイールは、目詰まりや発熱を抑制する効果があります。
- ・ブレードが脱落しないように、留め金は堅牢設計になっております。

両面

ダイヤモンド粒子
ブレード厚

15μm 0.08mm
25μm 0.12mm
40μm 0.15mm
60μm 0.19mm
90μm 0.29mm

単品

ダイヤモンド粒子	包装	商品番号	
15μm	3	74931	206860637
25μm	3	74932	206860638
40μm	3	74933	206860639
60μm	3	74934	206860640
90μm	3	74935	206860641



片面L

片面R

		包装	商品番号	
片面Lセット	各種1枚(計5枚)		74981	206860434

単品	厚さ (mm)	包装	商品番号	
15μm	0.06	3	74961	206860448
25μm	0.08	3	74962	206860449
40μm	0.10	3	74963	206860450
60μm	0.14	3	74964	206860451
90μm	0.17	3	74965	206860452

		包装	商品番号	
片面Rセット	各種1枚(計5枚)		74982	206860435

単品	厚さ (mm)	包装	商品番号	
15μm	0.06	3	74971	206860453
25μm	0.08	3	74972	206860454
40μm	0.10	3	74973	206860455
60μm	0.14	3	74974	206860456
90μm	0.17	3	74975	206860457

オートストリッピングバースタンド(15本立)
TASK(シオダ)

縦50mm×横50mm×高さ45mm


74912

206860464

オートストリッピングプッシュボタン
TASK(シオダ)

74913

206860465

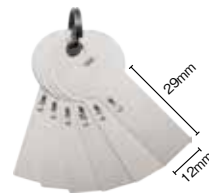オートストリッピングゲージ
TASK(シオダ)

(0.1mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm)

74911

206860463

プライヤースタンド
TASK(シオダ)

プライヤーを6～8本掛けることができます。
※プライヤーのサイズにより、掛けられる本数は異なります。



19741

206860293

プライヤースタンド Aタイプ
RMO Europe

寸法: 250×95×110mm

ECM0822

206850575

プライヤースタンド Bタイプ
RMO Europe

寸法: 120×105mm

ECJ0450

206850572

G&Hプライヤースタンド円筒形
G&H

寸法: 120×105mm

S41101

206850929

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

インスツルメント章 薬事番号一覧

本章で掲載しておりますインスツルメントのうち、医療機器として医療機器認証 / 届出番号を取得している商品の薬事情報を、商品番号順にて一覧にしております。
電子添文等につきましては、弊社ウェブサイトまたは PMDA の電子添文検索にてご確認ください。
製造販売業者の所在地につきましては、本カタログ7ページに記載しております。

商品番号	販売名	一般の名称	医療機器承認 / 認証 / 届出番号	医療機器分類	製造販売業者名
08275	ダイヤモンドピンセット	歯科治療用ピンセット	09B2X00010000005	一般医療機器	株式会社シノダ
151505	リガチャーカッター ND	歯科矯正用プライヤ	11B1X1000639D123	一般医療機器	株式会社 YDM
201510507	ディスタルエンドカッターセイフティ ND	歯科矯正用プライヤ	11B1X1000639D149	一般医療機器	株式会社 YDM
201510508	ディスタルエンドカッターセイフティ ND	歯科矯正用プライヤ	11B1X1000639D149	一般医療機器	株式会社 YDM
30-314T	バードビークブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000122	一般医療機器	株式会社シノダ
30-315C	ライトワイヤーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000123	一般医療機器	株式会社シノダ
30-315T	ライトワイヤーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000123	一般医療機器	株式会社シノダ
30-316C	ライトワイヤーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000123	一般医療機器	株式会社シノダ
30-316T	ライトワイヤーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000123	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550FL	ディスタルエンドセーフティカッター(フラッシュカットタイプロングハンドル)	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000331	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550SF	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550SL	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-551US	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-551USL	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-553	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-554	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-604WK	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
30-605WK	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
3DP	3D アジャスタブルブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010R00003	一般医療機器	株式会社シノダ
3DRP	スリーディリムバー 3DRP	歯科矯正用結さつ器	11B1X1000658D215	一般医療機器	株式会社 YDM
45-020	フラットカッター	歯科技工用鉗子	09B2X00010000102	一般医療機器	株式会社シノダ
60-004	パワーカッター	歯科技工用鉗子	09B2X00010000100	一般医療機器	株式会社シノダ
60-006	ホローチョップブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000133	一般医療機器	株式会社シノダ
60-009	ヘッドギアブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000125	一般医療機器	株式会社シノダ
60-074	ヤングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000114	一般医療機器	株式会社シノダ
60-102	リガチャータイミングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000142	一般医療機器	株式会社シノダ
60-104	臼歯用バンドリムーピングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000135	一般医療機器	株式会社シノダ
60-105	コンバーチブルキャップリムーピングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000363	一般医療機器	株式会社シノダ
60-201R、L	アングルドスリージョブブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000131	一般医療機器	株式会社シノダ
60-208	バンドコンタリングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000136	一般医療機器	株式会社シノダ
60-216	エラストックプレッシングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000144	一般医療機器	株式会社シノダ
60-218	エラストックプレッシングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000144	一般医療機器	株式会社シノダ
60-224T	ストップブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000128	一般医療機器	株式会社シノダ
60-228	ステップブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000361	一般医療機器	株式会社シノダ
60-302	ナンスクロージングループブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000120	一般医療機器	株式会社シノダ
60-303	ツイードアーチベンディングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000121	一般医療機器	株式会社シノダ
60-304	ツイードループフォーミングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000117	一般医療機器	株式会社シノダ
60-305	ループフォーミングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000116	一般医療機器	株式会社シノダ
60-306	ホウブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000112	一般医療機器	株式会社シノダ
60-313	スリージョブブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000126	一般医療機器	株式会社シノダ
60-313L	スリージョブブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000126	一般医療機器	株式会社シノダ
60-314	バードビークブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000122	一般医療機器	株式会社シノダ
60-335TG	ダイレクトボンドブラケットリムーピングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000151	一般医療機器	株式会社シノダ
60-430CK	キムブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000119	一般医療機器	株式会社シノダ
60-501T	ウイングートユーティリティブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000544	一般医療機器	株式会社シノダ
60-504	ウイングートユーティリティブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000544	一般医療機器	株式会社シノダ
60-605S	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
60-607	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
60-701	エラストックセパレーティングブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000139	一般医療機器	株式会社シノダ
60-731	アライナーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-732	アライナーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-733	アライナーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-734	アライナーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-736	アライナーブライヤー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-800	バンドシーター	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010Y00058	一般医療機器	株式会社シノダ
60-810	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000211	一般医療機器	株式会社シノダ
60-810A	バンドブッシャー シリコンハンドル 60 - 810A	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000788	一般医療機器	株式会社シノダ
60-811	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000211	一般医療機器	株式会社シノダ
60-816	リガチャーディレクター	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000212	一般医療機器	株式会社シノダ
60-817、817N	リガッキング&ディレクター	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000148	一般医療機器	株式会社シノダ
60-823	リガチャーディレクター	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000212	一般医療機器	株式会社シノダ
60-824	ブラケットプレッシングツイザー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000140	一般医療機器	株式会社シノダ
60-827	ブラケットオープナー	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000375	一般医療機器	株式会社シノダ
60-830	ブーンブラケットポジショニングゲージ	歯科矯正用位置測定器具	09B2X00010000141	一般医療機器	株式会社シノダ
60-890	ブラケットセッティングツイザー	歯科矯正用プライヤ	09B2X00010000075	一般医療機器	株式会社シノダ
678-101	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-101L	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-107	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-107L	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-110	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-202	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-203	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-204	ブライヤー	歯科矯正用プライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド

商品番号	販売名	一般の名称	医療機器承認 / 認証 / 届出番号	医療機器分類	製造販売業者名
678-206	ブライヤー（緩衝材付）	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12102	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-208	ブライヤー（緩衝材付）	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12102	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-210	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-211	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-219	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-220L	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-304	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-322	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-326	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-500	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-502	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-503	ブライヤー（緩衝材付）	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12102	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-504	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-505	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-506	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10238G35101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-706	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10238G35101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-709	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-800	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-801	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-802	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-803	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-804	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-805	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-807	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-808	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-809	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-810	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-811	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
678-812	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10238G12101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
74-920	ストリップングコントラアングル	ストレート・ギアードアングルハンドピース	225ALBZX00008000	管理医療機器 / 特管	中村デンタル株式会社
74-930 ～ 935	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-961 ～ 965	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-971 ～ 975	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-981 ～ 982	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
BP1	BP-1 ブラケットプレースー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00006	一般医療機器	株式会社シオダ
BPS2	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	13B3X10238G29101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
CUT000T	WAKEYAMA ツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00007	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT001AT	リガチャーカッター 15°アングルショート	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00011	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT001TC	リガチャーカッタークラシック	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00015	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT003T	ワインガルトユーティリティブライヤー（スリムヘッド）	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00008	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT003TC	ユーティリティブライヤークラシック	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00016	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT003YA	マイクロユーティリティ Neo	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00022	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT006T	トルクインディケートアーチベンダー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00020	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT007TPT	ループフォーミングブライヤー（ツイードオリジナルシェイプ）	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00019	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTAAA	アライナーアジャスター	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D145	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTAAH	アライナーアジャスター	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D145	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTDBPHW	ダイヤモンドバンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010R00009	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTGMB	GUMMETAL ベンダー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00013	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTMCDN	マルチクリンピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00017	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTMSA	モスキート	鉗子	13B3X10059000350	一般医療機器	フジデンタル株式会社
CUTMSS	モスキート	鉗子	13B3X10059000350	一般医療機器	フジデンタル株式会社
CUTNTCBDN	シンチバックブライヤー for NiTi	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000368	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTPTT2	プレジジョンチューブツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000358	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTTNVB	タイニロイ Vバンドブライヤー ラウンド	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00021	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTUT2	ユーティリティツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00005	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTVLSB1 ～ 3	バーティカルループ&ステップバンドブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000370	一般医療機器	株式会社シオダ
GMP7	ブラケットポジショニングツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000345	一般医療機器	株式会社シオダ
GMTP2	GMトルキングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00012	一般医療機器	株式会社シオダ
H4	止血鉗子	鉗子	13B3X10238G43103	一般医療機器	株式会社アルファメッド
HBPg	長谷川ゲージ	歯列矯正用位置測定器具	13B3X10059000351	一般医療機器	フジデンタル株式会社
i00557	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B2X00107000A01	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
IST-TC01	トルクコントロール	歯科用インプラント手術器具	13B1X00133Z00028	一般医療機器	株式会社吉田製作所
LDG2	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10238G35101	一般医療機器	株式会社アルファメッド
N-215	マチュータイプ	持針器	09B2X00010000073	一般医療機器	株式会社シオダ
NK-1	クイックリガチャープレースー	歯科矯正用結さつ器	13B2X00107000A02	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
P-200	ブラケットリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000149	一般医療機器	株式会社シオダ
P-210	ボンドリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000153	一般医療機器	株式会社シオダ
P-220	フッククリンピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000154	一般医療機器	株式会社シオダ
P-300	リングルユーティリティブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000323	一般医療機器	株式会社シオダ
P-700	リングルボンドリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000337	一般医療機器	株式会社シオダ
S-210	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
S-211	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
S-611	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
SHDD, SHDDPS	P 式 SH ディレクター	歯列矯正用結さつ器	13B3X10059000352	一般医療機器	フジデンタル株式会社
TS-15	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シオダ
TS-26	ダイレクトボンドアタッチメントリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000150	一般医療機器	株式会社シオダ