

- スーパーボンド 132
- エムシーピーボンド／LC オルソマイト 134
- クラスパーF／ドライフィールド／
チューイングブラシ 135
- オーソクリスタル／オーソソープ／
オーソマックス 136
- オドントシル 137
- リテーナーシャイン顆粒／その他 138
- オーソフロス／ハピカ 139
- オーラルワイダー／ワイドビューアー／
各種口角鉤 140
- リケッツテンプレート／オーソトレース／その他 ... 141
- オーソフレーム／その他 142
- タイポドント模型／スタディーモデル 143
- タイポドント咬合器／模型／
toothsome 君フィギュア 144
- 患者説明用模型 145
- モデルボックス／SW フラックス／
口腔内撮影用ミラー 146



JM ORTHO

スーパーボンド

サンメディカル



Super-Bond 矯正用接着材
ORTHOMITE
オルソマイト

「スーパーボンド オルソマイトセット」は矯正用アタッチメント(ブラケット、チューブなど)を直接歯面に接着させるダイレクトボンディングシステム用に開発された歯科用接着材です。
フィラーを含まないのでディボンディングが容易です。
ブラッシュオンテクニックだけでなくプレプライムドアタッチメントを使用することでプレプライムドテクニックにも対応しています。

スーパーボンド オルソマイトセット

- ①ティースプライマーで 20 秒表面処理
②筆積法で接着 硬化時間 5 ～ 6 分 37℃
③ワイヤーの装着はブラケット圧接から 10 分以上経過

接着歯数	クイックモノマー液	キャタリスト V
1 ～ 2	4 滴	1 滴
3 ～ 5	8 滴	2 滴

※従来のボトル入り表面処理材レッドは 134 ページに記載しています。

※セットのエッチング材はティースプライマーになります。

内容量 / 入数	商品番号	
スーパーボンド オルソマイトセット (キット内容 / 単品)	SBOSET	206350304
スーパーボンド キャタリスト V	0.7mL	SBCV 204610580
スーパーボンド クイックモノマー液	10mL	SBQM 204610399
スーパーボンド ポリマー粉末筆積 F3	3g	SBPF3 204610403
ティースプライマー	3mL	SBTP 204610705
スポンジ (L・S)	S160 粒 / L80 粒	SBS 204610218
ダッペンスタンド (3 穴)	1 個	SBDS 204610569
ディスボダッペンカップ	40 枚入	SBDSC 204610568
ディスボ用筆柄 (曲)	1 本	SBDSC 204610463C
ディスボチップ筆積 L (ピンク)	10 本入	SBDTL 204610572
ディスボチップ筆積 S (緑)	10 本入	SBDTS 204610571

医療機器認証番号 221AABZX00115000

表面処理材 ティースプライマー



表 引張接着強さ


適用部位	前処理材	接着強さ (MPa)
エナメル質	ティースプライマー	13
	表面処理材 高粘度レッド	13
象牙質	ティースプライマー	13
	表面処理材 高粘度グリーン	14

出典：サンメディカル株式会社測定データ




エナメル質・象牙質兼用のセルフエッチングプライマーです。
20 秒の塗布後、エアブローのみで水洗が不要になりました。
接着性能は従来の「表面処理材レッド」、「表面処理材 高粘度レッド」と同等の性能です。

内容量	包装	商品番号
ティースプライマー	3mL	1 SBTP 204610705

医療機器認証番号 222AFBZX00100000 管理

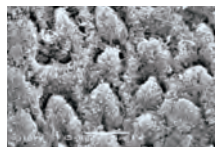

人歯エナメル質のエッチング処理面(左)とティースプライマー処理面(右)
エッチングは表面処理材 高粘度レッド使用。ティースプライマーのエッチング効果はマイルドで非処理面と変わらない。

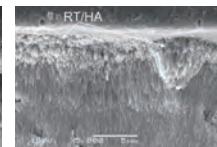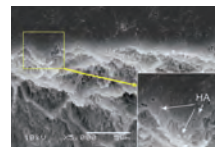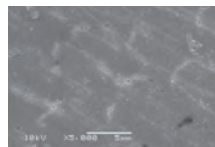

接着した人歯エナメル質の一部を酸で溶解すると、どちらの接着界面近傍にも耐酸性のレジタタグ (RT) とアパタイト (HA) が残る。

液材 クイックモノマー液

主成分に MMA/4-META を使用した接着材の液材です。4-META は拡散促進モノマーで歯質に高い接着性を示します。従来の「モノマー液」と操作時間は同等ですが、硬化時間が短縮します。



内容量	包装	商品番号
スーパーボンド クイックモノマー液	10mL	1 SBQM 204610399

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

重合触媒 キャタリスト V

「TBB」を主成分とした重合開始剤です。
化学重合タイプですので照射光が届きにくい「ブラケット」のアンダーカットの陰も硬化不良になることはありません。完全乾燥の困難な口腔内でも安定した接着性能を示します。



内容量	包装	商品番号
スーパーボンド キャタリスト V	0.7mL	1 SBCV 204610580

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理



スーパーボンド

サンメディカル

粉材 ポリマー粉末筆積 F3


矯正ブラケットの接着に適したポリマー粉末です。
フッ素を配合した筆積用ポリマー粉末で、適用面周辺の脱灰抑制を期待できます。




フッ素徐放による耐酸性評価〈エナメル質〉

- ・被験者：10～15歳の矯正治療患者 15名
- ・金属バンドをフッ素配合スーパーボンドとスーパーボンドで頬側面以外を装着して4週間後に抜歯し、スーパーボンド周辺部（頬側面）の脱灰の程度を測定した。

フッ素配合スーパーボンド適用面周辺

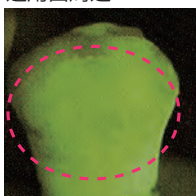



スーパーボンド適用面周辺

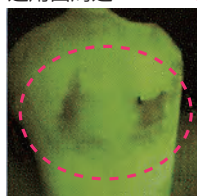

観察面



SB 接着面

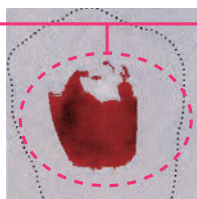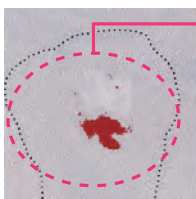

脱灰された部分が赤色で表示される。
フッ素配合スーパーボンド適用面周辺はスーパーボンド適用面周辺よりも脱灰されている面積が小さい。

QLF 法による分析結果

スーパーボンドと比較して、フッ素配合スーパーボンド塗布面周辺部は脱灰される程度が低かった。このことからフッ素配合スーパーボンドはエナメル質の脱灰を抑制できると考えられる。

* QLF法（初期むし歯画像診断システム）視診や触診では発見できないようなごく初期のう蝕を、特殊な青い光で歯を照らすことによって簡単に見つけた方法。

* スウェーデン・イェテボリ大学 フッ素を含有したスーパーボンド試作品研究より

P.LINGSTRÖM, P.PENNY, S.TRAN/EUS, H.KJELLBERG, D.BIRKHED: A NEW Fluoride-Containing Bonding Material for Orthodontic Brackets in Vivo; #0157, AADR/CADR Meeting, March 8-11, 2006

液材 モノマー液



スーパーボンド PZ プライマー



筆積法による硬化時間比較

クイックモノマー液	5～6分	モノマー液	7～8分
-----------	------	-------	------

内容量	包装	商品番号
スーパーボンド モノマー液	10mL	1 SBM 204610401

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

「スーパーボンド PZ プライマー」は、ポーセレン、ジルコニア、コンポジットレジンに対応した表面処理材です。メタルボンドやオールセラミックス、硬質レジン前装冠など化学的な結合を求める場合に使用します。 ※ブラケット被着面はアンダーカットがあるため必ずしも塗布する必要はありません。

内容量	包装	商品番号
スーパーボンド PZ プライマー セット		SBPZP 204610407
スーパーボンド PZ プライマー A 液	5mL	1 SBPZPA 204610408
スーパーボンド PZ プライマー B 液	5mL	1 SBPZPB 204610409

医療機器認証番号 224AFBZX00102000 管理

①陶材面の清掃、表面処理材レッド 30 秒、水洗乾燥 ②調整、A 液 B 液混和 ③陶材面に塗布→接着操作

V-プライマー

スーパーボンドの貴金属類に対する接着性を向上させる接着前処理材です。口腔内で使用できますので補綴物装着中の患者さんの矯正が可能になります。



スーパーボンド 筆洗い液Ⅱ

「スーパーボンド」使用後の筆クリーナーです。



内容量	商品番号
V-プライマー	3mL 461453 204610453

医療機器認証番号 20600BZX00452000 管理

内容量	商品番号
スーパーボンド 筆洗い液Ⅱ	100mL 461334 204610334

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

エムシーピーボンド／LC オルソマイト

エムシーピーボンド サンメディカル



- ①エッチング 30 秒
- ②リキッドとアクチベーター等量混和
- ③筆積法で接着

「エムシーピーボンド」は、「4-META」含有の化学重合型歯科矯正用接着材料でエナメル質と矯正用アタッチメント（メタル、セラミック、プラスチック）に対し高い接着力を発揮します。

パウダーにフィラーを含んでいませんので「スーパーボンド」と同様にディボンディングも容易です。

	内容量 / 入数	商品番号	
エムシーピーボンド セット		MCPBSET	206350300
〈キット内容 / 単品〉			
エムシーピーボンド アクチベーター	7mL	MCPBA	206350301
エムシーピーボンド リキッド	7mL	MCPBL	206350302
エムシーピーボンド パウダー	3g	MCPBP	206350303
表面処理材レッド	5mL	SBEN	204610460
ダッペンディッシュ (陶器)	1 個	SBD	204610217
スポンジ (L・S)	S160 粒 / L80 粒	SBS	204610218
ディスボ用筆柄 (直)	1 本	SBDIFS	204610463S
ディスボ用筆柄 (曲)	1 本	SBDIFS	204610463C
ディスボチップ筆積用 L (ピンク)	10 本	SBDTL	204610572
ディスボチップ筆積用 S (緑)	10 本	SBDTS	204610571

医療機器認証番号 227AFBZX00052000 管理

表面処理材レッド

サンメディカル



	内容量	商品番号	
表面処理材レッド	5mL	SBEN	204610460

医療機器認証番号 21600BZZ00588000 管理

表面処理材 高粘度レッド

サンメディカル



	内容量 / 入数	商品番号	
表面処理材 高粘度レッド	3mL	SBES	204610566
ニードルチップ (23G)	50 個	SBEST	204610575

※ニードルチップ (SBEST) にはニードルキャップ (赤) 2 個が付属しています。

医療機器認証番号 21200BZZ00294000 管理

LC オルソマイト サンメディカル



LC オルソマイトは光重合型矯正用接着材です。

リン酸エステル系モノマー配合によって安定した接着強さが得られます。

各種矯正用アタッチメント（セラミックス、プラスチック、ステンレス）に対し高い接着力があります。

	内容量 / 入数	商品番号	
LC オルソマイト セット		LCOSET	206350312
〈キット内容 / 単品〉			
LC オルソマイト ペースト	4g	LCOP	206350313
LC オルソマイト エッチャント	5mL	LCOE	206350314
プラスチックダッペン	30 枚	LCOD	204610321
スポンジ (L・S)	S160 粒 / L80 粒	SBS	204610218

医療機器認証番号 226AFBZX00126000 管理



クラスパー F / ドライフィールド / チューイングブラシ

クラスパー F クラレノリタケデンタル



- ① エッチング 40 秒水洗乾燥
- ② F ボンド塗布光重合 10 秒
- ③ ブラケットの接着ペースト塗布近遠心から光重合各 20 秒

クラスパー F はフッ素徐放性成分が配合された光重合型接着材です。F ボンドにはフッ素徐放性ポリマー (MF-MMA 共重合体) とフッ化ナトリウム (NaF) が配合され長期にわたり微量のフッ素を溶出しエナメル質をガードします。一方フッ素徐放後材料強度が低下することにより歯面と F ボンド部分で脱離され、コンポジットレジンが歯面に残りにくくなります。またペーストには低硬度のフィラーを採用しているため、万一歯面にレジンが残った場合でも容易に研磨が行えます。短時間の接着操作、確実な接着と容易なディボンディングかつエナメル質の予防を考慮した完成度の高い光重合型接着材です。

内容量 / 入数		商品番号	
クラスパー F セット	* 1	212090	202120090
〈キット内容 / 単品〉			
クラスパー F F ボンド	* 2	2mL	212093 202120093
クラスパー F ペースト	* 2	4g	212094 202120094
クラスパー F K- エッチャントゲル	* 2	6mL	212013 202120013
クラスパー F 小筆 (エッチング用)	1 本	212921	202120921
クラスパー F 混和皿	1 個	212902	202120902
遮光板	1 個	212900	202120900

セットには小筆が二本入っています。

* 1 医療機器承認番号 21800BZZ10035000 管理

* 2 医療機器承認番号 20400BZZ01069000 管理

NOLA ドライフィールドシステム グレートレイクス



NOLA ドライフィールドシステムはプラスチック製パーツで構成された組み立て式の排唾機能付開口器で、口腔内をドライに保つ大変便利なシステムです。

※オートクレープ滅菌可能 (推奨設定温度 121℃)

サイズ	カラー	包装	商品番号	
スモール	レッド	1	300-400	206850470
ラージ	ホワイト	1	300-401	206850471

パーツ	包装	商品番号	
タングガード スモール	2	300-413	206850477
タングガード ラージ	2	300-403	206850472
チークリトラクター スモール (赤)	1	300-414	206850478
チークリトラクター ラージ (白)	1	300-406	206850473
“Y” コネクターのみ	4	300-408	206860658
ローボリュームアダプター付き “Y” コネクター	4	300-409	206850474
ハイボリュームアダプター付き “Y” コネクター	4	300-411	206850475
シリコンチューブ (内径 2mm / 長さ 31cm)	10	300-412	206850476
パーズングシリンジ	1	300-416	206860659
コネクティングアームインサート	10	300-402	206860657

医療機器届出番号 13B2X00107000A20 一般

チューイングブラシ

藤原歯科産業



日常の歯磨き効果に加え、繰り返し噛むことにより顎骨や口腔周囲の軟組織の新陳代謝を高め、咀嚼機能系の回復や正しい咬合トレーニングに効果的です。(シリコン製)

内容	包装	商品番号	
大人用柄付	1	104300	201040300
大人用	1	104301	201040301
子供用柄付	1	104302	201040302
子供用	1	104303	201040303

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

オーソクリスタル／オーソソープ／オーソマックス

オーソクリスタル

ニッシン



オーソクリスタルは矯正用即時重合レジンでフリカケ法、混和法、筆積法に使用できます。特にフリカケ法に用いたとき広い面積を迅速に処理できる仕様としています。硬化時間は21℃で6分です。硬化後の透明度が高く変色が少ないため、粘膜面、歯牙、ワイヤー装置などの状態がよくわかります。

セット	カラー	内容量	包装	商品番号
普通セット	ピンク	100g+100mL	1	OCSETPN 206350084P
	クリアー	100g+100mL	1	OCSETCN 084C
実習セット	ピンク	20g+15mL	1	OCUNIV 206850690
単品	カラー	内容量	包装	商品番号
液	ピンク	100mL	1	OC100P 206350079P
	クリアー	100mL	1	OC100C 079C
	ピンク	250mL	1	OC250P 083P
	クリアー	250mL	1	OC250C 083C
粉		100g	1	OC100 080
		500g	1	OC500 081

医療機器承認番号 21700BZZ00271000 管理



オーソソープ

下村石膏



オーソソープは模型を約5分原液に浸すだけでソーピング処理ができます。オーソマックスのような白い石膏の白さを引き立て、黄色くありません。またソーピング液特有の臭いをなくし、さわやかな青りんごの香りで快適にご利用いただけます。

- ①乾燥させた模型を原液に5分浸す。
- ②模型を取り出し柔らかなブラシやガーゼで泡立つように磨く。
- ③40℃の温水で泡とともに模型表面のオーソソープを洗い流し再度磨く。
- ④再度乾燥させる。

	内容量	包装	商品番号
オーソソープ	4L	1	OS 206350068

オーソマックス

下村石膏



オーソマックスは矯正用に開発された硬石膏です。

1. 矯正模型で発生する歯列部と台付け部との境界部で生じるラインや色調の差をなくしました。
2. 高度な純白さを追求した白色硬石膏でソーピングによる艶出し効果が良好です。
3. 適度な強度を与えたことによりトリミングが容易で、模型のエッジ出しがシャープに、ペーパー等での切削面もきれいに仕上がります。

	内容量	包装	商品番号
エコボックス	10kg	1	OM10 206850691
アルミパック	3kg	6	OM18 692
エコボックス徳用	18kg	1	OM18E 693

医療機器届出番号 11B3X00042000004 一般

オーソマックスII

下村石膏



オーソマックスより硬さのある矯正用白色硬石膏です。

1. 流し込み、盛り付け時に適度のチキソトロピー性があり操作性が良い。
2. 高度の純白性があり、歯列部と台付け部の色調の差が出ません。
3. 模型の表面がシャープで精度のある模型ができます。

	内容量	包装	商品番号
エコボックス	10kg	1	OM II 10 206850149
アルミパック	3kg	6	OM II 18 150
エコボックス徳用	18kg	1	OM II 18E 151

医療機器届出番号 11B3X00042000027 一般

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

なお、オーソソープ、オーソマックス各種についてはメーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。お届けまでにお時間をいただく場合がございます。



オドントシル

リンカイ

オドントシル



オドントシルは常温重合型シリコーン材で最新の技術により、収縮が少なく、透明性、耐摩耗性、靱性などが高いことから矯正用ポジショナー、マウスガード、インダイレクトボンディングなど幅広い用途にご利用いただけます。

重合後の硬度がショア硬度で比較的軟らかい50と硬い60の2種類あり目的により使い分けすることが可能です。

	内容量	包装	商品番号
オドントシル 50 クリアー	50mL	2	5038150
	50mL	8	5038229
オドントシル 60 クリアー	50mL	2	5038160
	50mL	8	5038227
ミキシングチップ*1		60	641521L
カートリッジディスペンシングガン II *2		1	641522

医療機器認証番号 228AGBZX00015000 管理

*1 医療機器届出番号 27B1X00109000201 一般 (JMA)

*2 医療機器届出番号 27B1X00109000202 一般 (JMA)



グラインディングキャップ、グラインディングホルダー

はさみ等では落としきれないバリを落とす時、きれいな研削が可能です。



	サイズ	規格	包装	商品番号	
グラインディングキャップ 1	7.0mm	5	38230S1		206850852
グラインディングキャップ 2	10.0mm	5	38230S2		853
グラインディングキャップ 3	14.5mm	5	38230S3		854
グラインディングホルダー 1	6.5mm	1	38230T1		855
グラインディングホルダー 2	9.5mm	1	38230T2		856
グラインディングホルダー 3	14.0mm	1	38230T3		857

ウルトラトリム

オドントシルの最終研磨に使用します。



	包装	商品番号
ヘビー	6	43751
ミディアム	12	43752
ライト	12	43753

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

リテナーシャイン顆粒／その他

リテナーシャイン顆粒

JM Ortho



ボトルキャップの使い方

- 1回さかさに傾けると1回分の量が出てたまります。
(最初の1回は計量のみで中身は出てきません。)
- 1回分を出す度に計量の分量が計量キャップ部にたまりま



リテナーシャイン顆粒は、歯科矯正用のリテナーや床装置などのブラークコントロールのために開発された洗浄剤です。漂白成分やタンパク質分解酵素によるすぐれた洗浄力で、汚れやイヤな臭いを取り除きます。

矯正装置の金属部分に対し、悪影響を及ぼすことが少なく、ワイヤーの黒変やロウ着部の剥離がおきません。また、アクリル、ポリエステル、PET-G、シリコンなどの樹脂にもやさしく、TMJスプリント、ナイトガード、マウスガード、「ムーシールド」「マルチファミリー」などの歯列矯正用咬合誘導装置、矯正用マウスピース(アライナー)など、様々な装置の洗浄にも適しています。

【使用方法】

- ①コップにリテナーなどの装置が完全に浸る量(約180ml)の水またはぬるま湯(約40℃)を入れます。
- ②付属のスプーン1杯(軽く盛るくらい)約2.5g)をすくいコップに入れます。
- ③装置をすぐに入れ、溶液の色が青から脱色されたら洗浄は終了です(約30分)。
- ④装置を取り出し、流水で充分すすいでから口腔内に装着します。
- ⑤使用後はフタを必ず閉めてください。



使用方法の動画はこちら

【成分表示】

- ・洗浄成分
ペルオキシ硫酸水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、タンパク質分解酵素
- ・色素成分
ブルグロブルー

ボトルキャップは別売りです。

内容量：150g(1回2.5g：60回分)

	包装	商品番号
リテナーシャイン 顆粒	24	RSK
リテナーシャイン ボトルキャップ	1	RSC

206850800

リテナーケース

RMO



開閉が容易で、使い易いヒンジ付きのデザインです。毎日の使用に耐え、衝撃にも強い安全設計。4箇所の通気口で、リテナーを清潔に保ちます。

サイズ (W×D×H mm)	カラー	包装	商品番号
スタンダード	トロピカルピンク	20	J01320
	メロン (サーモンオレンジ)	20	J01321
(内寸76×60(52)×24)	メタリックブラック	20	J01323
ラボ (内寸76×60(52)×34)	ベリーブルー	12	J01324

2068509111320

206850921

2068509111323

206850912

エメラルド・パワープラス

菱化デンタル

販売名 エメラルド歯磨剤
医薬部外品



エメラルド・パワープラスは緑柱石を含む自然の土の力に高濃度フッ素を配合し、歯や歯肉を包み込む薬用歯磨き材です。歯周炎、歯肉炎、虫歯の発生・進行を予防します。
※高濃度フッ素1450ppm配合のため、6歳未満のお子様にはご使用にならないでください。

【成分】

基 材：水
研磨材：重質炭酸カルシウム、ベントナイト
湿潤剤：濃グリセリン、マルチトール
清掃剤：ラウロイルメチルタウリンNa、ラウロイルサルコシンNa
有効成分：グリチルリチン酸2K、フッ化ナトリウム
着香剤：L-メントール、ハッカ油
粘結剤：カラギーナン
着色剤：酸化チタン
保存剤：安息香酸Na

	内容量	包装	商品番号
エメラルド・パワープラス	100g	1	EPP

206860544



オーソフロス／ハピカ

オーソフロス

オーソケア



オーソフロスは矯正用に開発されたフロスで、先端に設けられたガイドにより矯正装置の隙間を容易に通すことができますので、手軽なフロッシングが可能になりました。ホルダータイプとフロスタイプの2種類あります。

	包装	商品番号
オーソフロス フロスタイプ	10本×10	OCF 206350067



	包装	商品番号
オーソフロス ホルダータイプ	1箱 (50ホルダー)×24	OCH 206350066



ハピカ

ミニマム

<本体>



ホワイト



ブラック



ハローキティ



ミッキー



ミニー

ハピカは高周波洗浄を参考に開発された電動付歯ブラシで、毎分7000回の超微細タタキ振動による歯グキの血行の促進と歯垢の除去効果が高く、コストパフォーマンスに優れています。

Vカットタイプは中央部を凹んだ形に植毛し、歯を1本1本包み込み、より効果的なブラッシングとマッサージを実現します。

Fカットタイプは超微細な毛先とよりコンパクトなヘッドにより矯正中でもスムーズなブラッシングが可能になりました。

子ども用は超コンパクトヘッドで小さな口もすみずみまできれいに磨けます。大ブラシは、3度の傾斜がついた特大ヘッドと超極細加工毛で磨きやすくなっています。

替ブラシは4種類の毛先があり、ハピカシリーズの全機種に取り付けが可能です。

【仕様・定格】

電源：DC1.5V単3乾電池×1

振動数：約7,000回/分（無負荷時）

サイズ：幅25mm、奥行き21mm（付属ブラシを含む高さは価格表内に記載）

重量：約60g

主材質：ABS樹脂

	本体色	付属ブラシ	高さ	包装	商品番号
ハピカVカットタイプ	ホワイト	Vカット	180mm	1	HPV 206350150
ハピカFカットタイプ超極細	ホワイト	Fカット	180mm	1	HPF 206850900
ハピカFカットタイプ（ハローキティ）	ピンク	Fカット（ピンク）	171mm	6	HPFP 206860344
DBF-5P（ET）					
こどもハピカ（ミニー）	ピンク	子ども用	173mm	6	HPKPK 206860347
DBK-5B（MK）					
こどもハピカ（ミッキー）	ブルー	子ども用	173mm	6	HPKBL 206860346
DBK-5P（MK）					
ハピカ大ブラシプラス3	ブラック	大ブラシ	177mm	12	HPD 206860342
DBFP-5K					

<替ブラシ>



Vカットタイプ



Fカットタイプ



子ども用



大ブラシ

	包装	商品番号
ハピカ替ブラシVカットタイプ BRT-6T	2個入り×1パック	HPBV2 206350151
ハピカ替ブラシFカットタイプ超極細 BRT-8	2個入り×1パック	HPBF 206850901
ハピカ替ブラシFカットタイプ超極細（ピンク） BRT-8P	2個入り×12パック	HPBFP 206860345
ハピカ替ブラシ子ども用 BRT-7T	2個入り×12パック	HPBK 206860348
ハピカ替ブラシ大ブラシ BRT-12	2個入り×12パック	HPBD 206860343

オーラルワイダー／ワイドビューアー／各種口角鉤

オーラルワイダー ザイコインターナショナル



ロングセラーのシンプルな開口器です。頬が邪魔にならず、広い視野で口腔ケアができます。

規格・サイズ(色)	材質	包装	商品番号
ハード(クリア)	ポリカーボネート	1	OWH 207990287
		2	OWH2 207990328
ソフト(ブルー)※	ポリプロピレン	1	OWS 207990288
		2	OWS2 207990329
ミニソフト(ブルー)※	ポリプロピレン	1	OWMS 207990289
		2	OWMS2 207990330

※オートクレープ滅菌可能(推奨設定温度121℃)

ワイドビューアー 新東工業



片手で簡単に装着でき、臼歯部まで広い術野を確保できる装着感のやさしい開口器です。ウイング部が頬粘膜を押し上げ、臼歯部まで広い術野が確保できるので、治療や写真撮影など様々な場面で使用できます。装着後はフリーハンドで使用できるため、治療時などにアシスタントが保持する必要がなく、術者は一人でも治療に専念できます。

サイズ	材質	包装	商品番号
Lサイズ(一般用)	ポリプロピレン	2	246001 202460001
Sサイズ(小学生用)	ポリプロピレン	2	246002 202460002
アソート	ポリプロピレン	S、L 各1	246003 202460003

※オートクレープ滅菌、EOG滅菌、紫外線滅菌は樹脂の劣化の原因となるので行わない。

医療機器届出番号 20B2X00004000005 一般

口角鉤ピジョン YDM



口唇に接する部分がなめらかに彎曲しているため、明瞭に最深側部を露出させることができます。


サイズ	材質	包装	商品番号
SSサイズ	TPX	1	101915SS 201010915SS
Sサイズ	TPX	1	101915S 201010915S
Mサイズ	TPX	1	101915M 201010915M

※耐熱温度160℃

※乾熱滅菌・紫外線殺菌はお避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般

口角鉤 シオダ

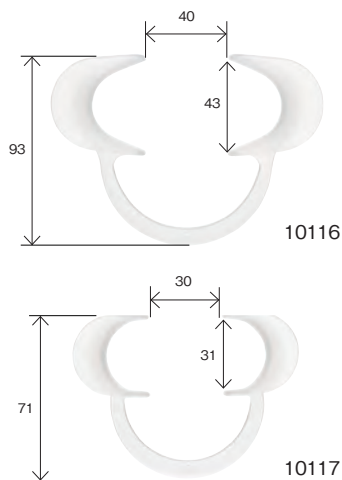

リップワイダー

サイズ	材質	包装	商品番号
M-2	ポリプロピレン	2	10116 206860618
S-2	ポリプロピレン	2	10117 206860619

※乾熱滅菌、紫外線殺菌等はお避け下さい。

※オートクレープ滅菌可能(115～118℃で30分、121℃で15分のいずれか)

医療機器届出番号 27BX00268000008 一般



片頭リトラクター

サイズ	材質	包装	商品番号
M	ポリプロピレン	2	10123 206860620
S	ポリプロピレン	2	10124 206860621

※乾熱滅菌、紫外線殺菌等はお避け下さい。

※オートクレープ滅菌可能(115～118℃で30分、121℃で15分のいずれか)

医療機器届出番号 27BX00268000008 一般

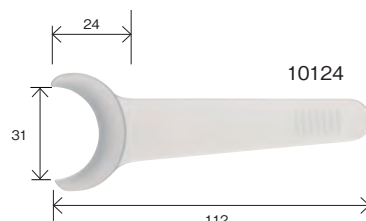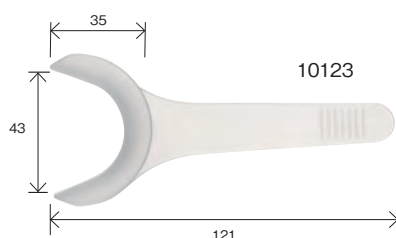

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。




リケッツテンプレート／オーソトレース／その他

リケッツテンプレート

RMO

Dr.リケッツ考案のセファロトレーシングに用いるテンプレートです。

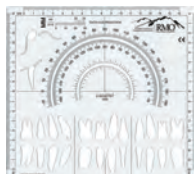


包装	商品番号
1	i00512 206350611

ペンタモフィックアーチフォームセクター

RMO

Dr.リケッツ考案の模型からアーチ形状を選択するテンプレートです。

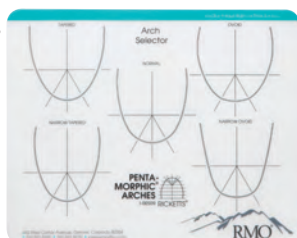


規格(mm)	包装	商品番号
254×203	1	i00509 206350610

アーチマーカ

カラダッシュ

クレヨンタイプで金属面にくっきりマーキングできます。

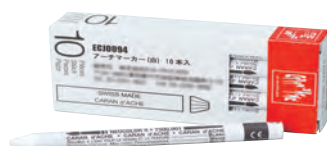


規格(mm)	カラー	包装	商品番号
120×9	赤	10	ECJ0093 206350665R
120×9	白	10	ECJ0094 W

TMJトリメジャー

RMO Europe

TMJの診断に必要な変位量(最大開口量、前方運動量、側方運動量)を簡単に計測できる正三角形のプラスチック製メジャーでオートクレーブ可能です。

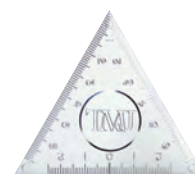

包装	商品番号
1	ECM0070 206850574

オーソトレース

RMO

厚さ0.076mmのアセテート製のレポート用紙タイプのトレーシングペーパーです。表面はマット処理になっており細かい線もシャープに描けます。裏面は光沢仕上げで見えにくい箇所も鮮明に再現します。(8"×10")



規格(mm)	包装	商品番号
203×254	100	J00086 206350666

アーチマーカディスペンサー付

RMO

ディスポーザブルの赤色マーカが1本ずつ出てくるディスペンサーが付いています。




	包装	商品番号
ディスペンサー付	1	J00096 206350669
ディスポーザブルマーカのみ	100	J00095 206350670

ゴールドンディバイダー (黄金分割定規)

RMO Europe


R.M. Rickettsは、顔貌の審美性について黄金分割 (Golden section) に着目し、バランスの良い顔貌にはこの法則がある程度適用するとしてゴールドンディバイダーの活用を推奨しています。バランスの良い正貌では、主に右図の部分(左図)がほぼ一定の関係比率(1:1.618)にあることが望ましいとされています。

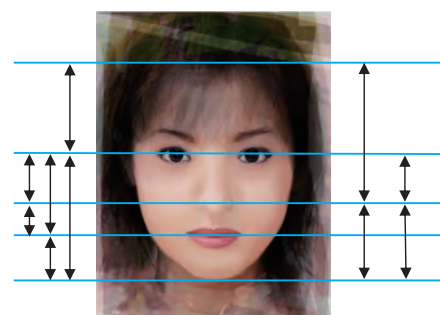

包装	商品番号
1	ECI0394 206860308

オーソフレーム／その他

オーソフレーム（ガスボンベ付）センジョー

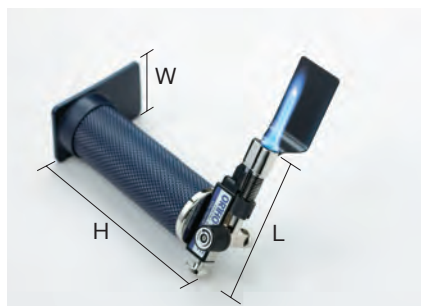

デンタルバーナーで、取扱いが便利なボタンガスを使用します。
内炎が鋭利になるよう設計されているので、自在鑑着など必要な部分に熱を加えられ効率的に作業が行えます。
付属のスクリーンにより炎の確認が容易です。
また、専用スタンドにより角度を自由に選択できます。



工場出荷時にガスは充填されています。
ガスの過剰充填は着火不良の原因となりますのでご注意ください。

	内容量	商品番号
オーソフレームセット	本体、ガスボンベ、スタンド、スクリーン	OF 206350090
〈単品〉ガスボンベ	130g	OFG 206350089

【仕様】

ボディーグリップ：φ36mm
連続使用時間：約70分（最大炎）
寸法：85 (L)×143 (H)×46 (W)mm
容量：26g
重量：214g
ガスボンベ：130g

ブラッシュキット

藤原歯科産業



ブラッシュキットで、先端は極細加工のため細部作業も簡単にできます。ホルダーの形態はストレートとアングルの2種類があります。

内容	商品番号
ブラッシュホルダー (直・曲)	2
ブラッシュ	10 104141 201040141
ハンドル	2
〈単品〉	
補充ブラッシュ	20 104143 201040143
補充ブラッシュホルダー 直	1 104145S 201040145S
補充ブラッシュホルダー 曲	1 104145C 201040145C
ミラーハンドル SC型	1 101916 201010916

カタメナ

下村石膏



カタメナは、タニタ社製のデジタル混水計量器です。計算不要で、誰でも簡単に正確な計量を行うことができます。

混水率は最大4件まで登録可能で任意設定機能も付いています。

また、防塵防水保護等級は「IP65」で水洗いも可能です。

※詳しくは取扱説明書をご確認下さい。

※本商品は弊社と直接お取引のある歯科医院様等への販売のみとさせていただきます。

型式	KW-010
製品寸法	D216×W143×H39 (mm)
計量範囲	1~1000g
最小表示 (目量)	0.1g (1~100g) 0.2g (100~200g) 0.5g (200~500g) 1g (500~1000g)

※本器で計測された数値は診断・公的な証明等には使用できません。

混水率表示 (%)	範囲	0.0%～3000.0%	
	10%～50% の最小表示	合計量が20g以上40g未満	0.5%
		合計量が40g以上	0.2%
	51%～90% の最小表示	合計量が20g以上80g未満	0.5%
合計量が80g以上		0.2%	
混水率設定 (%)		登録4件 (初期設定は24%,25%,20%,40%) 混水率任意設定 (10～90% 1%単位)	
防塵防水保護等級		IP65	
電源		DC3V 単4形乾電池×2	
オートパワーオフ		約2分、5分、10分、連続 (初期設定は約2分)	

包装	商品番号
カタメナ	1 KW010

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。



タイポドント模型／スタディーモデル

ニッシン

全顎タイポドント模型

タイポドント実習に便利な全顎レジン模型を各種ご用意しています。3つの仕様から実習内容に合わせてお選びいただけます。なお受注生産のため、納品にお時間をいただきます。予めご了承下さい。

規格	商品番号	
D1D-RM33	D1D-RM33	206350741
D1D-RM35	D1D-RM35	206350742
D1D-RM38	D1D-RM38	206350743

D1D-RM33 混合歯列

D1D-RM35 混合歯列

D1D-RM38 永久歯列



【仕様】

D1D-RM33 混合歯列
歯牙：A8-407H植立
右側 2級、上顎前突
C欠損

D1D-RM35 混合歯列
歯牙：A8-407H植立
#11,12,21,22をFKO形態
C欠損

D1D-RM38 永久歯列
歯牙：A1-26T.2植立
正常咬合

スタディーモデルゴム枠（石膏模型の外形、形成用ゴム枠）

【形態】

H12-A 永久歯顎用 角大型
H12-B 乳歯顎用 角小型
H12-C 永久歯顎用 丸型

【包装】

1組（上下入り）

【材質】

シリコン製

【色調】

ブルー




スタディーモデル D13PP-RM24A

エポキシ歯牙を正常咬合に配列した 1 色レジン模型で、上下顎は PP 咬合板によりネジ止めされています。患者説明用、あるいは実習用にご利用いただけます。



商品番号
D13PP-RM24A 206850659

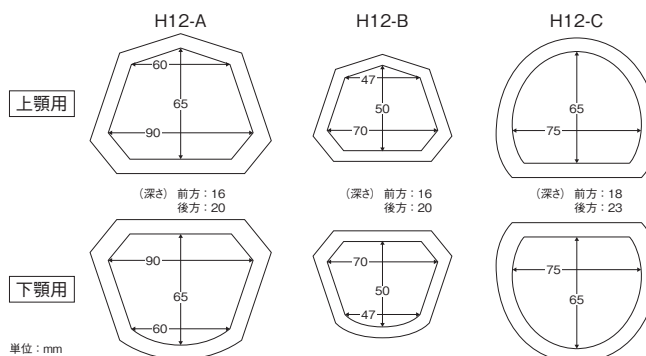

商品番号
H12-A 204520523A
H12-B 204520523B
H12-C 204520523C

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

タイポドント咬合器／模型／toothsome君フィギュア

タイポドント咬合器

YDM

顎外部にフック（維持部）を組み込み、顎外固定装置を牽引する位置をできるだけ生体に近づけました。前後、側方運動における微調整が可能です。また第二大臼歯までの非抜歯症例の際、十分配列できるようトレイに余裕を持たせています。



商品番号

TYPO

206350734

メタルティースホワイトクラウン

ニッシン

メタルをベースに歯冠部をウレタン加工したメタルティースで、ブラケット等の接着性が良好です。



商品番号

MTW

206350735

ブラッシング指導用模型

ニッシン

ブラケット付2倍大模型で右側に透明ブラケット、左側にメタルブラケットが接着されていますので審美的な違いが一目で判別できます。



商品番号

PE-ORT002

204520616

緑色の商品番号は取り寄せ商品です。

ワックスフォーム

ニッシン

タイポドント咬合器（TYPO）専用のワックスフォームでタイポドントのトレイにぴったり装着でき調整が最小限で済みます。（ワックスブロック付）



商品番号

正常咬合

DN3-RM19

206350060

I 級

DN3-RM20

206350061

II 級 1 類

DN3-RM21

206350062

II 級 2 類

DN3-RM22

206350063

III 級

DN3-RM23

206350064

メタルティース

ニッシン

ボンディングに便利な維持孔として凹みが歯面に設けられており、安心してご利用いただけます。



商品番号

MT

206350733

toothsome君フィギュア

造形作家 杉山・桂大氏がハンドメイドで一つ一つ丁寧に造り上げています。

代表作：『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』『ドラムカンナの大冒険』その他 映画 舞台 CM PV、造形物 多数 製作

受注生産品 納期 約 1 ヶ月半



素材：レジンキャスト
高さ：約11cm

商品番号

DK001



患者説明用模型 <取り寄せ商品>

筑波総合歯研

●患者説明用模型は受注生産品につき納品までお日にちをいただきます。ご了承下さい。

3Dリンガルアーチ上顎



TS001
206860050

3Dリンガルアーチ下顎



TS002
206860051

3Dクワドヘリックス



TS003
206860052

3Dクワダクション



TS004
206860053

ホーレータイプリテーナー



TS005
206860054

ベッグタイプリテーナー



TS006
206860055

上顎側方拡大プレート



TS007
206860056

下顎側方拡大プレート



TS008
206860057

ファンタイプ拡大プレート



TS009
206860058

咬合挙上板



TS010
206860059

咬合斜面板



TS011
206860060

FKO



TS012
206860061

患者説明用模型ケース

アクリル製で模型が美しく見えます。



TS013
206860062

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY
TREATMENT

INTRAORAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

Isolation

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

モデルボックス／SWフラックス／口腔内撮影用ミラー

ANDYモデルボックス

JM Ortho



サイズ（外寸）230×164×70(mm)

包装	商品番号
50	ANDY050 206860680

SAMモデルボックス

JM Ortho

SAM咬合器にマウントした模型がそのまま入ります。



サイズ（外寸）240×160×80(mm)

包装	商品番号
20	SMB20 206850719

SWフラックス

YAMAKIN

ペーストタイプのフラックスで鑲着時に使用します。活性温度は、400～900℃です。




内容量	商品番号
40g	SWF 206350655

口腔内撮影用ミラー（ステンレス製・直接反射式）

シオダ

- 口腔内を傷つけないよう、全体が丸みを帯びた形状になっています。
- 鏡面にはロジウムをコーティングしてあります。
- 厚みは各種共に1mmです。

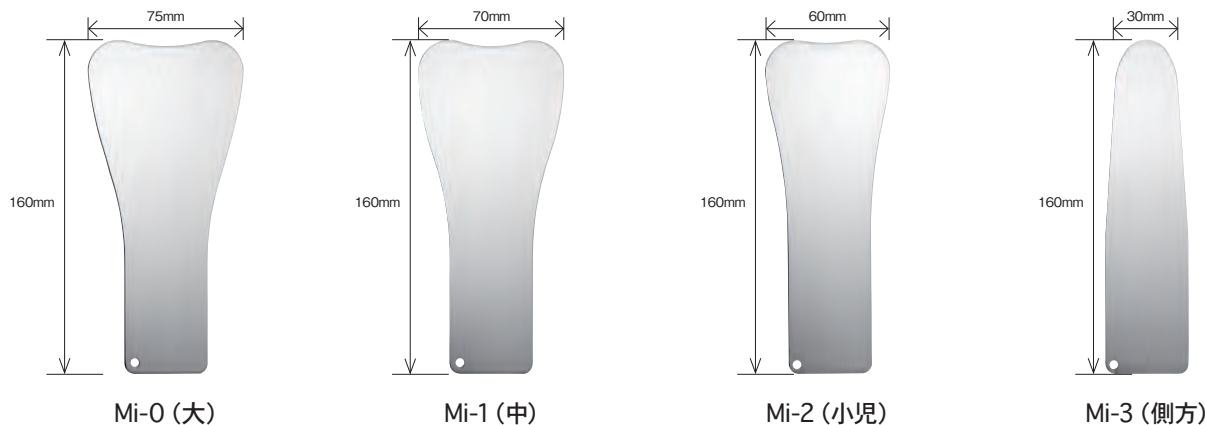

〈使用上の注意〉

- ・超音波洗浄はミラー表面にキズがつきますので、ご使用できません。
- ・薬液消毒後は、温かくしたマイクロファイバーなど柔らかい布で薬液を十分に洗い落とししてください。
- ・オートクレープ内の残留水がミラー表面を変質させる恐れがありますので、定期的な水の交換をお勧めします。
- ・曇るときは、お湯の中に入れるなどし、体温程度に温めてからご使用ください。
- ・保管は付属の布もしくは滅菌パックに入れて行ってください。
- ・本品にコーティング剥離・表面キズ・破損等を認めたときは、ご使用をお避けください。

〈別売品〉

滅菌用布ケース

滅菌対応の布ケース付きます。
保管の際にも、ご使用いただけます。



サイズ・用途等	包装	商品番号
大 (Mi-0)	1	74900 206860631
中 (Mi-1)	1	74901 206860632
小児 (Mi-2)	1	74902 206860633
側方 (Mi-3)	1	74903 206860634
滅菌用布ケース	1	74999 206860642

医療機器届出番号 09B2X00010000334 一般