

ジルコニアセラミックブラケット

JM ORTHO

# Sincere Brace II



ジルコニアセラミックブラケット「シンシアブレース」が、色調新たに「シンシアブレースII」として生まれ変わります。

従来品と同じく歯冠色になじみやすいA2カラーで、より発色の安定した製法を採用しています。

形状はクラシックかつ結紮しやすい形そのままです。




## ジルコニアの高い強度と粘り強さ

シンシアブレースIIはジルコニアセラミック製ブラケットで、高い強度としなやかさが特長です。その優れた強度と性質から「白いメタル」とも呼ばれ、その特長を活かしてスマートなシルエットになっています。ジルコニアセラミックは生体親和性に優れており、金属アレルギーをお持ちの方にも使用できます。

## 結紮しやすい形状

ウイングの厚みが薄く長く作られており、結紮線や結紮用Oリングが入りやすくなっています。ハイトは2.1mm\*です。 \*ロスタイプ 上顎側切歯のみ2.2mm

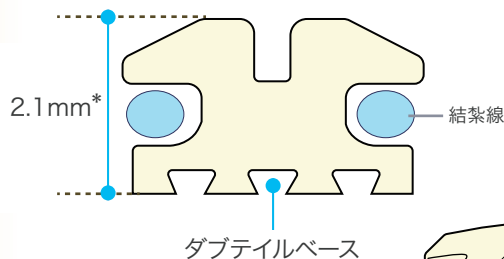


## 安定した接着力

ダブルテイルベース(逆三角形のアンダーカット)を採用し、接着剤の種類に左右されることなく安定した接着力を発揮します。

### <ロスタイプについて>

これまでロスタイプのベースは「近遠心方向」への曲面のみでしたが、犬歯～小臼歯部位に「切端～歯頸部方向」のカーブを付与し、より歯面にフィットするようリデザインしました。

新たに曲面構造を付与しました

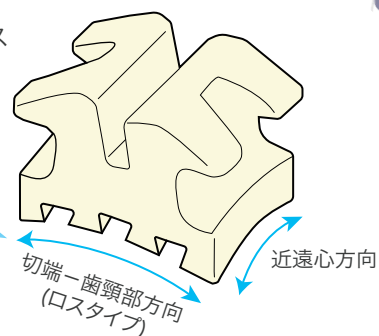

# Sincere Brace II

## スタンダードタイプ

### シンシアブレース II スタンダード .018 1症例キット

部位	包装	商品番号
5 ~ 5	20個	SISK1000 206860644
3 ~ 3	12個	SISK1010 206860645

### シンシアブレース II スタンダード .018 部位単品

包装：10個

部位(左右共通)	スパン(mm)	商品番号
1   1	3.4	SIS1010 2068606431010
2   2	3.0	SIS1020 2068606431020
3   3	3.0	SIS1030 2068606431030
5 4   4 5	3.0	SIS1040 2068606431040
2 1   1 2	2.9	SIS1050 2068606431050

## ロスタイプ

### シンシアブレース II ロス .018 1症例キット

部位	包装	商品番号
5 ~ 5	20個	SISK2000 206860484
3 ~ 3	12個	SISK2010 206860485

### シンシアブレース II ロス .018 部位単品

包装：10個

部位	トルク	アンギュレーション	ローテーション	スパン(mm)	Right / Left	商品番号
1   1	12°	5°	0°	3.4	R	SIS2010 2068604832010
1   1					L	SIS2011 2068604832011
2   2	8°	9°	0°	3.0	R	SIS2020 2068604832020
2   2					L	SIS2021 2068604832021
3   3	-2°	11°	0°	3.0	R	SIS2030 2068604832030
3   3					L	SIS2031 2068604832031
5 4   4 5	-7°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2040 2068604832040
2 1   1 2	0°	0°	0°	2.9	R / L	SIS2050 2068604832050
3   3	-11°	7°	0°	3.0	R	SIS2060 2068604832060
3   3					L	SIS2061 2068604832061
4   4	-17°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2070 2068604832070
5   5	-22°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2080 2068604832080

販売名：シンシアブレース II 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
医療機器認証番号：302AKBZX00056000 医療機器の分類：管理医療機器（クラス II）

## ご案内

- ・「シンシアブレース II」.018スロット ロスタイプは、2022年3月22日発売です。
- ・「シンシアブレース II」は.018スロットのみの販売となり、.022スロットの販売は未定です。

【 発売 】 株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F  
T：03-5281-4711 F：03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】 横手精工株式会社 平鹿事業所

〒013-0106 秋田県横手市平鹿町中吉田字下藤根 34

\*仕様・価格は2022年3月21日現在のものです。 \*消費税は含まれておりません。 \*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。