




# 機器・器具

<ul><li>ホルステリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	224
• スポットウェルダー部品/	
矯正用コンパクトキャビネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	226



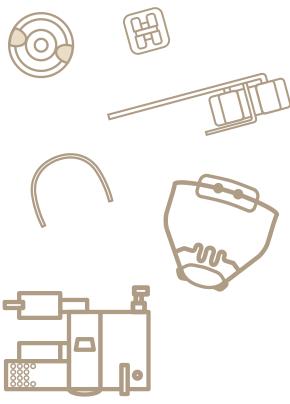

### ホルステリ アスカメディカル

# 人と職場に優しい消毒器です。

# 器具を傷めないガス消毒器 真空定量ガス方式採用

**EQUIPMENT** 

- ●減圧により100分で滅菌パック消毒処理
- ●消毒庫20Lの大容量
- ●残臭なく快適

### ■ホルムアルデヒドガス消毒器

### [第2類物質] ガン等の慢性障害を引き起こす物質

(平成20年3月26日付け事務連絡)

医療、歯科医療の現場において密閉式のホルムアルデヒドガス消毒器でかつ装置内での自動中和 処理により消毒対象器具を取り出す際にホルムアルデヒドが別の化学物質に変化していることから 残存しない状態になっている装置がある。このような消毒器を稼働させ医療器具、歯科医療器具 等消毒作業を行った場合において特化則の主な措置の適用について下記のとおりである。

(密閉方式のホルムアルデヒドガス滅菌器等に関する特定化学物質障害予防規則の適用について) より

[作業環境] ・発散抑制装置について ガスが発散しない構造のため不要 作業主任者について 必要(機器の運用・保持に関しては不要) 作業環境測定について 常時作業に該当しないため不要 特定化学物質健康診断 不要(通常の年1回の健康診断)

※ホルマリンのご使用に関しては「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」の資格が必要です。

# 強い消毒力

適正に使用したホルムアルデヒドガスにより 全ての微生物が死滅することは立証されてお り、(枯草菌芽胞 1×10° が死滅する消毒器 です。) エチレンオキサイドガス (EOG) に 匹敵する効力を持っています。

## 経済的なランニングコスト

ホルステリ 20RM の消毒1回のコストは器 具モードで約 190 円です。(ホルマリン液、 精製水、アンモニア液、中和消臭液) ※バクテリアフィルター、ホルマリンチェック カード、電気代を除く

## 二重パックでのチューブ消毒

内径 0.5mm~5.0mm× 長さ 3m までの 各種チューブの内・外筒を二重パック内で消 毒。庫内気圧をコントロールすることで実現 しました。(TB モード時)



設置時に左右各20cm、背面に10cm、天井に15cm、正面に40cm のスペースをおとりください。

- 中和消臭液の使用可能日数・回数表示
- ホルマリン・アンモニアの補充が一目でわかる



矯正用プライヤー棚(幅250mm×高さ101mm)




ホルマリン液自動注入装置



滅菌パック使用時 イメージ

### ホルステリ アスカメディカル

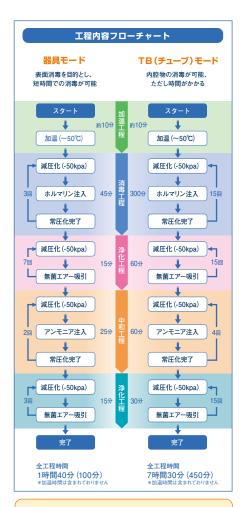

# ○ ホルマリン消毒有効微生物

- ○一般細菌 ○真菌 ○梅毒トレポネーマ
- 緑膿菌 ○芽胞 ○脂質を含む中間
- ○結核菌 ○MRSA サイズウイルス
- HIVウイルス ○脂質を含まない
- HBVウイルス 小型サイズウイルス

## 🗙 消毒できない物

- × 耐熱温度が50℃未満の製品
- × 耐圧が60kPa(絶対)未満の製品
- × 細い内筒を持つ製品(ハンドピース等)

### 特定化学物質等障害予防規則(特化則)

労働安全衛生法の関連規則で労働者の有害化学 物質による健康障害を予防するための規則です。 平成13年にEOGが第2類物質(ガン等の慢性 障害を引き起こす物質)に改正され、今回 (20.3.1施行) ホルムアルデヒドも第2類物質に 改正されました。

平成20年3月26日厚生労働省は都道府県労働 局労働基準部労働衛生主務課長宛で密閉方式の ホルムアルデヒドガス滅菌器等に関する特定化 学物質等障害予防規則の適用について事務連絡 を通知され、一部の医療機器において適応除外 とされました。





- ※主電源スイッチは背面にあります。
- ※排液が必要なため、15cm以上の高さを確保できる台の上に 置いて下さい。



仕様	
一般的名称	ホルムアルデヒドガス消毒器
クラス分類	管理医療機器 (クラスⅡ)
商品名	ホルステリ20RM
電源	交流 単相100V 50/60Hz
消費電力	650VA
外形寸法	465mm (幅) ×480mm (奥行) ×590mm (高さ)
本体重量	46kg
消毒庫寸法	390mm (幅) ×285mm (奥行) ×180mm (高さ)
消毒庫容量	20L
消毒庫温度	50℃
消毒庫材質	SUS304
電磁両立性	EMC適合 JIS C 1806-1
本体	ASK20RM 206350730
設置	ASK999 206860607

医療機器認証番号 220AIBZX00062000 管理 ・ホルステリ20RMは精密機器であり、調整して出荷している関係上、納品後の返品はお受けいたしかねますのでご注意下さい。

・在庫状況により納品までにお時間をいただく場合がございます。



(— <u>u</u> p)			
別売品	包装	商品番号	
ホルステリ矯正用プライヤー棚	1個	ASK250	206350731
ホルステリ専用中和液300mL(アンモニア液)	1本	ASK190	206350729
ホルステリ専用中和液 (赤)・消臭液 (緑) 500mL	各5本	ASK180	206350728
バクテリアフィルター	10個	ASK040	201240010
ホルマリンチェックカード	100枚	ASK220	206350723
ホルステリ20RM用パッキン	1個	ASK330	206860409
ホルステリ 20RMホルマリン液取替えキャップ (プラスティックボトル用)	1個	ASK310	206860679
ホルステリ 20RMホルマリン液取替えキャップ (ビンボトル用)	1個	ASK320	206860678
ホルステリ 20RMホルマリン調合ボトル (キャップ付)	1個	ASK290	206860608

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

# スポットウェルダー部品/矯正用コンパクトキャビネット

## スポットウェルダー タイプ700 JM Ortho



発売以来長きにわたりご愛顧いただきました「スポットウェルダー タイプ700」なら びにオプション品である「フットスイッチ」「ヒートトリートテーブル」「ウェルディング ツィーザー」は、2022年初夏をもちまして販売終了となりました。

消耗品やメンテナンスに必要な部品につきましては、当面の間の在庫を確保しておりま すので、引き続きご購入いただけます。

## くご案内>

- \*「スポットウェルダー タイプ700」の修理につきましては、引き続き受付しており ますが、修理部品の在庫状況によっては、修理ができない場合もございます。 予めご了承ください。
- \*「スポットウェルダー タイプ660」の修理につきましては、2013年4月をもって 終了させていただきました。

スポットウ	フェルダー用部品	JM Ortho	包装:各1個入
	商品名	商品番号	
	ロアーラウンドヘッドエレクトロード	SWH101E	206860617
	アッパーグルーブエレクトロード	SWH105	206850117
	ロアーアンビルエレクトロード	SWH103	206850115
	アッパーブラントエレクトロード	SWH107	206850118
	ロアーポイントエレクトロード	SWH104	206850116
	アッパーポイントエレクトロード	SWH108	206850119
	ロアーポイントエレクトロード L	SWH202	206850120
	アッパーポイントエレクトロード L	SWH206	206850121
	SW700用ヒューズ	WEWFU	206860601

関連商品			YAMAKIN
	商品名	商品番号	規格
SW 75+92	SWフラック	ス SWF	ペーストタイプ 206350655

歯科用銀ろう (ソルダリングワイヤー) オーソソルダーⅡ モリタデンタルプロダクツ			
	ワイヤーサイズ	商品番号	
液相点 650℃	0.5mm 0.6mm	SDR05 SDR06	20688018205
	医療機器認証番	号 304AGBZX000	066000 管理

### 矯正用コンパクトキャビネット JM Ortho



矯正用コンパクトキャビネットは、矯正材料を効率よく収納するために、数々の工夫が 盛り込まれたモービルタイプのキャビネットです。天板には、ワイヤーを立てるための 専用ホルダーが埋め込んであり、引き出しはプラスティック板で仕切られているなど、 使いやすさを重視した設計になっています。

仕様	
商品番号	CC 206850660
外装	抗菌性メラミン樹脂化粧板(艶加工)
カラー	ホワイト
寸法	510 (W)×350 (D)×850 (H)mm
重量	27kg