

セラミック製セルフライゲーションブラケット



JM ORTHO

A-line®

NEW

機能と審美性を兼ね備えた セルフライゲーションブラケット誕生

患者さんの快適性を追求した 丸みのあるボディとウイング

ハイトが低く、丸みのあるボディで患者さんの不快感を軽減します。また、NP 表面処理*により滑らかな輪郭構造を実現しました。

*NP 表面処理：ナノ粒子セラミック研磨表面処理



高純度セラミック AC800 を採用

99.99% 高純度セラミックの採用で、矯正治療中によるワイヤーのトルクや咬合力、剥離応力におけるブラケットの破損が少なく、術者と患者さん双方のストレスを軽減します。


安定した接着強度を追求した ブラケットベース

ベースの切端側と歯頸部側の2カ所に施した25°のアンダーカット設計により、安定した接着強度とストレスの少ないディボンディングが期待できます。



審美性の高い アクティブクリップ


研究を重ねて設計・最適化されたクリップの構造が、他の器具や食べ物、外力による変形を軽減します。2層の特殊コーティングが施されており、天然歯に馴染みやすい色合いで、変色しにくく審美性を長く保持します。

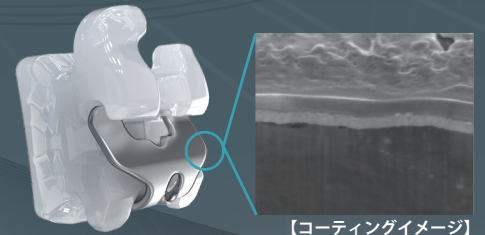

【コーティングイメージ】

A-line 専用オープニングツール

先端の形状によって2通りの開け方が可能です。
・クリップ上にあるホール（穴）にツールの先端を引っ掛けて開ける
・上部にあるボール部分を押すことで開ける

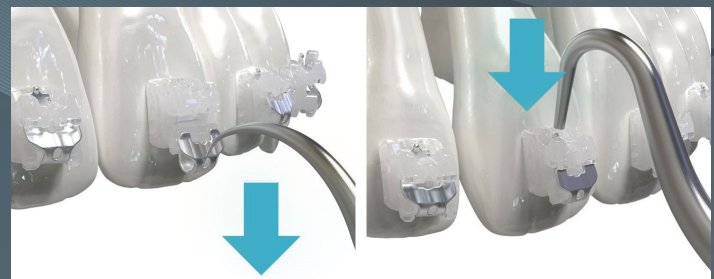

【製造販売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

TEL : 03-5281-4711 FAX : 03-5281-4716

https://www.jmortho.co.jp

【輸入元】BIOCETEC CO., Ltd.

●仕様・価格は2024年1月21日現在のものです。

●価格に消費税は含まれておりません。

●デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

A-line ロスタイプ 単品								包装：10 個			
部位	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン (mm)	Right/Left	フック	.018 スロット		.022 スロット		
1 1	12	5	0°	3.6	R		AR18-1112	206350475UR1	AR22-1112	206350471UR1	
					L		AR18-2112	206350475UL1	AR22-2112	206350471UL1	
2 2	8	8	0°	3.4	R		AR18-1208	206350475UR2	AR22-1208	206350471UR2	
					L		AR18-2208	206350475UL2	AR22-2208	206350471UL2	
3 3	2	13	4°	3.5	R	フック付	AR18-1302H	206350475UR3H	AR22-1302H	206350471UR3H	
					L	フック付	AR18-2302H	206350475UL3H	AR22-2302H	206350471UL3H	
54 45	-7	0	0°	3.6	R	フック付	AR18-1407H	206350475UR45H	AR22-1407H	206350471UR45H	
					L	フック付	AR18-2407H	206350475UL45H	AR22-2407H	206350471UL45H	
21 12	-1	0	0°	3.2	R		AR18-4101	206350475LR12	AR22-4101	206350471LR12	
					L		AR18-3101	206350475LL12	AR22-3101	206350471LL12	
3 3	-11	7	2°	3.6	R	フック付	AR18-4311H	206350475LR3H	AR22-4311H	206350471LR3H	
					L	フック付	AR18-3311H	206350475LL3H	AR22-3311H	206350471LL3H	
4 4	-17	0	4°	3.6	R	フック付	AR18-4417H	206350475LR4H	AR22-4417H	206350471LR4H	
					L	フック付	AR18-3417H	206350475LL4H	AR22-3417H	206350471LL4H	
5 5	-22	0	4°	3.6	R	フック付	AR18-4522H	206350475LR5H	AR22-4522H	206350471LR5H	
					L	フック付	AR18-3522H	206350475LL5H	AR22-3522H	206350471LL5H	

A-line ロスタイプ 1 症例キット

部位	包装	フック	.018 スロット	.022 スロット
3 ~ 3	12 個	犬歯のみフック	AR18-33H 206350476	AR22-33H 206350472
5 ~ 5	20 個	犬歯・小白歯フック	AR18-55H45 206350477	AR22-55H45 206350473
上顎 5 ~ 5 / 下顎 3 ~ 3	16 個	上顎犬歯・小白歯 / 下顎犬歯フック	AR18-53H45 206350478	AR22-53H45 206350474

A-line MBT タイプ 単品

包装：10 個

部位	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン (mm)	Right/Left	フック	.018 スロット	.022 スロット
1 1	17	4	0°	3.6	R		—	AM22-1117 206350467UR1
					L		—	AM22-2117 206350467UL1
2 2	10	8	0°	3.4	R		—	AM22-1210 206350467UR2
					L		—	AM22-2210 206350467UL2
3 3	0	8	0°	3.6	R	フック付	—	AM22-1300H 206350467UR3H
					L	フック付	—	AM22-2300H 206350467UL3H
54 45	-7	0	0°	3.6	R	フック付	—	AM22-1407H 206350467UR45H
					L	フック付	—	AM22-2407H 206350467UL45H
21 12	-6	0	0°	3.2	R		—	AM22-4106 206350467LR12
					L		—	AM22-3106 206350467LL12
3 3	0	3	0°	3.6	R	フック付	—	AM22-4300H 206350467LR3H
					L	フック付	—	AM22-3300H 206350467LL3H
4 4	-12	0	0°	3.6	R	フック付	—	AM22-4412H 206350467LR4H
					L	フック付	—	AM22-3412H 206350467LL4H
5 5	-17	0	0°	3.5	R	フック付	—	AM22-4517H 206350467LR5H
					L	フック付	—	AM22-3517H 206350467LL5H

A-line MBT タイプ 1 症例キット

部位	包装	フック	.018 スロット	.022 スロット
3 ~ 3	12 個	犬歯のみフック	—	AM22-33H 206350468
5 ~ 5	20 個	犬歯・小白歯フック	—	AM22-55H45 206350469
上顎 5 ~ 5 / 下顎 3 ~ 3	16 個	上顎犬歯・小白歯 / 下顎犬歯フック	—	AM22-53H45 206350470

販売名：BCT セラミックブラケット 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：301AKBZX00035000 医療機器の分類：管理医療機器（クラス II）

A-line 専用オープニングツール

	商品番号
A-line 専用オープニングツール	ALOT 206350479

販売名：BCT オープニングツール 一般的名称：歯列矯正用結さつ器 医療機器届出番号：13B2X00107000045 医療機器の分類：一般医療機器（クラス I）