




12

技工関連製品

- オーソクリスタル／オーソソープ／オーソマックス 212
- オドントシル 213
- バキュームフォーマー／角型プレート／コピープラスト／
コピープラスト C／バイオプラスト／デュラン 214
- フィニッシングバー／デモ／その他 215
- ブロックアウト用材料／セットアップワックス／
フィグゼーター 216
- ジョージゲージ 217
- 睡眠時無呼吸症候群とは？ 218
- TAP-T／TAP-T Reverse／myTAP 219
- IST 関連器材／OPM キット 220
- オーソフレーム／SW フラックス 221
- モデルボックス／スタディーモデル 222

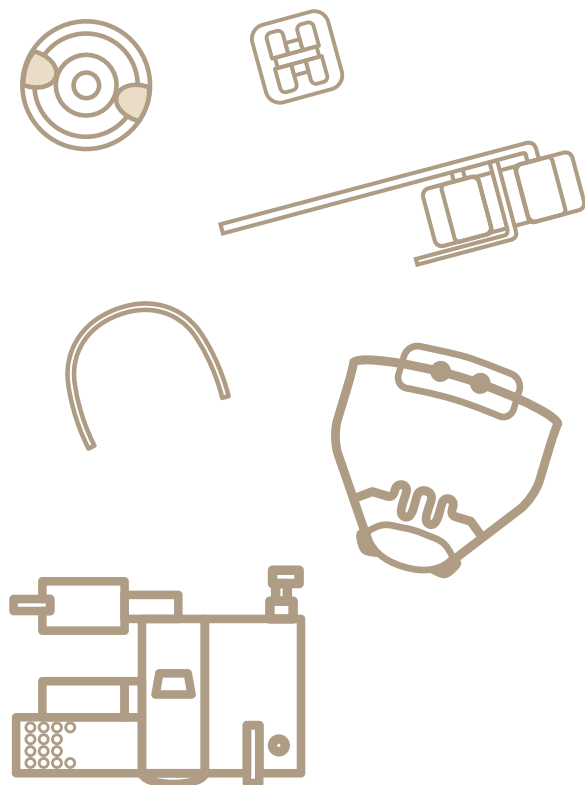

オーソクリスタル／オーソソープ／オーソマックス

オーソクリスタル

ニッシン



普通セット クリアー



粉 100g 液 クリアー 100mL

※セットや粉100gに付属されているノズルキャップの先端は、お好みの位置でカットしてお使いください。(粉の吐出量を任意で調整するため)



オーソクリスタルは矯正用即時重合レジンでフリカケ法、混和法、筆積法に使用できます。特にフリカケ法に用いたとき広い面積を迅速に処理できる仕様としています。硬化時間は21℃で6分です。硬化後の透明度が高く変色が少ないため、粘膜面、歯牙、ワイヤー装置などの状態がよくわかります。

セット	カラー	内容量	包装	商品番号
普通セット	ピンク	100g+100mL	1	OCSETPN 206350084P
	クリアー	100g+100mL	1	OCSETCN C
実習セット	ピンク	20g+15mL	1	OCUNIV 206850690
単品	カラー	内容量	包装	商品番号
液	ピンク	100mL	1	OC100P 206350079P
	クリアー	100mL	1	OC100C C
	ピンク	250mL	1	OC250P 206350083P
	クリアー	250mL	1	OC250C C
粉		100g	1	OC100 206350080
		500g	1	OC500 206350081

医療機器承認番号 21700BZZ00271000 管理



液 250mL ピンク



粉 500g

オーソソープ

下村石膏



オーソソープは模型を約5分原液に浸すだけでソーピング処理ができます。オーソマックスのような白い石膏の白さを引き立て、黄色くありません。またソーピング液特有の臭いをなくし、さわやかな青りんごの香りで快適にご使用いただけます。

- ①乾燥させた模型を原液に5分浸す。
- ②模型を取り出し柔らかなブラシやガーゼで泡立つように磨く。
- ③40℃の温水で泡とともに模型表面のオーソソープを洗い流し再度磨く。
- ④再度乾燥させる。

	内容量	包装	商品番号
オーソソープ	4L	1	OS 206350068

オーソマックス

下村石膏



オーソマックスは矯正用に開発された硬石膏です。

1. 矯正模型で発生する歯列部と台付け部との境界部で生じるラインや色調の差をなくしました。
2. 高度な純白さを追求した白色硬石膏でソーピングによる艶出し効果が良好です。
3. 適度な強度を与えたことによりトリミングが容易で、模型のエッジ出しがシャープに、ペーパー等での切削面もきれいに仕上がります。

	内容量	商品番号
エコボックス	10kg 1箱	OM10 206850691
アルミパック	18kg 1箱 (3kg×6袋)	OM18
エコボックス徳用	18kg 1箱	OM18E 206850693

医療機器届出番号 12B3X10030000004 一般

オーソマックスⅡ

下村石膏



オーソマックスより硬さのある矯正用白色硬石膏です。

1. 流し込み、盛り付け時に適度のチキソトロピー性があり操作性が良い。
2. 高度の純白性があり、歯列部と台付け部の色調の差が出ません。
3. 模型の表面がシャープで精度のある模型ができます。

	内容量	商品番号
エコボックス	10kg 1箱	OM210 206850149
アルミパック	18kg 1箱 (3kg×6袋)	OM218
エコボックス徳用	18kg 1箱	OM218E 206850151

医療機器届出番号 12B3X10030000027 一般

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

なお、オーソソープ、オーソマックス各種についてはメーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。お届けまでにお時間をいただく場合がございます。



オドントシル

リンカイ

オドントシル



オドントシルは常温重合型シリコーン材で収縮が少なく、透明性、耐摩耗性、靱性などが高いことから矯正用ポジショナー、マウスガードなどの用途にご利用いただけます。重合後の硬度がショア硬度で比較的軟らかい50と硬い60の2種類あり、目的により使い分けることが可能です。



	内容量	包装	商品番号
オドントシル 50 クリアー	50mL	2	5038150 206850486C
	50mL	8	5038229 206860594
オドントシル 60 クリアー	50mL	2	5038160 206850487
	50mL	8	5038227 206860593
ミキシングチップ*1		60	641521L 206410521L
カートリッジディスペンシングガン II *2		1	641522 206410522

※ 2本入りにはミキシングチップが10本付属します。
 ※ 8本入りにはミキシングチップは付属しません。

医療機器認証番号 228AGBZX00015000 管理

*1 医療機器届出番号 27B1X00109000201 一般 (JMA)

*2 医療機器届出番号 27B1X00109000202 一般 (JMA)



グラインディングキャップ／グラインディングホルダー

はさみ等では落としきれないバリを落とす時、きれいな研削が可能です。



	サイズ	規格	包装	商品番号
グラインディングキャップ 1	7.0mm	5	38230S1	206850852
グラインディングキャップ 2	10.0mm	5	38230S2	206850853
グラインディングキャップ 3	14.5mm	5	38230S3	206850854
グラインディングホルダー 1	6.5mm	1	38230T1	206850855
グラインディングホルダー 2	9.5mm	1	38230T2	206850856
グラインディングホルダー 3	14.0mm	1	38230T3	206850857

ウルトラトリム (マンドレール付)

オドントシルの最終研磨に使用します。



	包装	商品番号
ヘビー	6	43751M 206850366
ミディアム	12	43752M 206850367
ライト	12	43753M 206850368

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

バキュームフォーマー／コピープラスト／コピープラストC／バイオプラスト／デュラン

このページでは四角いプレートを使用した器材を紹介しています。丸いプレートは第11章をご覧ください。

熱可塑性樹脂吸引成型器

バキュームフォーマー EV2 3A×ディスプレイ



簡単な操作でマウスガードなどを吸引成型する歯科技工用ヒータープレスです。シート of 過熱、ヒーターの切り忘れなどを防ぐために、過熱防止タイマーを設けています。ボディは軽量で強度・耐蝕性に優れたアルミニウムキャストを採用したコンパクトな設計です。

仕様	
商品番号	649030 206490030
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター：530VA モーター：995VA
寸法	180 (W)×240 (D)×310 (H)mm
重量	約7.0kg

医療機器届出番号 27B1X00109000207 一般

コピープラスト ショイデンタル



コピープラストは、非接着性の軟らかいプレートです。接着材やレジンが着かないという特性を生かして、ホワイトニングトレイやテンポラリークラウンの複印象、またはプラスチック模型用の複印象として使用できます。

商品名	色	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラスト	ナチュラル□	0.5×125	10枚	3176 206360097
		1.0×125		3178 206360098
		1.5×125		3174 206360096

医療機器承認番号 20600BZY00561000 管理

コピープラストC ショイデンタル



ハードキャストとコピープラストの中間の硬さを有するプレートです。素材は摩耗しにくく、弾力性にも富んでいますので、インビジブルリテーナー（クリアリテーナー）に適しています。

商品名	色	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラストC	ナチュラル□	1.0×125	10枚	3404 206360095

医療機器承認番号 304AKBZX00021000 管理

バイオプラスト ショイデンタル



バイオプラストは、軟らかいEVAプレートでマウスガードやポジションナーのような弾性を必要とする装置に使用できます。

バイオプラストはレジンと接着できませんが、バイオプラスト同士を加熱軟化して圧着することができます。

商品名	色	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオプラスト	クリアー□	1.0×125	10枚	3269 206360057
		1.5×125		3182 206360054
		2.0×125		3184 206360055
		3.0×125		3186 206360056

医療機器承認番号 20500BZY00731000 管理

デュラン ショイデンタル



デュランは、吸引成型用のプレートの中で硬いものに属し、弾力性に富んだ透明度の高いプレートです。

即時重合レジンと接着しますのでスプリントやナイトガードを製作するのに適しています。また、薄いサイズのものはインビジブルリテーナーにも使用できます。

商品名	色	サイズ (mm)	包装	商品番号
デュラン	クリアー□	0.5×125	10枚	3410 206360005
		0.75×125		3412 206360006
		1.0×125		3414 206360007
		1.5×125		3416 206360008

医療機器承認番号 222AKBZX00102000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



フィニッシングバー／デモ／その他

ショイデンタル

フィニッシングバーセット



フィニッシングバーセットは、バイオスターでプレスしたプレートをカットして仕上げるための一連のバー及びホイール8種類が1本ずつセットになっています。それぞれの単品もご用意しています。

商品名	包装	商品番号	
フィニッシングバーセット	8種類各1本入	33781	206360136

内容：カッティングバー、HM-カーバイドカッター、HM-トライカッターファイン、フィニッシングバー、バイオバームトリマー、ポリフィックス、OSAMUポリッシャー、デモプロスリム



カッティングバー バイオクリルやインプレロンなどの硬いプレートをきれいにカットするために使用
HMカーバイドカッター（イエロー）カッティングバーと同じ用法であるが、カーバイドスチール製
HMTライカッターファイン（グリーン）先端が細く、歯頸部など細かい部分のカットに最適
フィニッシングバー（レッド） 柔らかい金属性のバーでクラスプ等を傷つけない

商品名	包装	商品番号	
カッティングバー	6本入	3214	206360129
HMカーバイドカッター（イエロー）	6本入	3369	206860572
HMTライカッターファイン（グリーン）	6本入	3370	206860669
フィニッシングバー（レッド）	6本入	3377	206860576



バイオバームトリマー（ブルー） バイオプラストなど柔らかいプレートのトリミングや粗研磨用
ポリフィックス（ブラック） バイオバームトリマーと同様の使用法、もしくはデュラソフトのバリ取りに最適
OSAMUポリッシャー（グレー） バイオプラストの仕上げ用

商品名	包装	商品番号	
バイオバームトリマー（ブルー）	2本入	3226	206860571
ポリフィックス（ブラック）	1本入 マンドレール付き	3371	206860573
OSAMUポリッシャー（グレー）	2本入	3247	206860570

デモ



バイオスター用各種プレートのスムージング、研磨用特殊スポンジホイールです。特殊な構造で研磨時に発熱しにくい為、特に従来研磨することが難しかったEVAやポリウレタン・シリコン等の軟質素材に最適です。

デモ コース（ブラウン） 粗研磨用ホイール（写真 上左）
デモ ミディアム（グリーン） 辺縁などの中研磨用ホイール（写真 上中）
デモ ファイン（パープル） 細研磨用ホイール（写真 上右）
デモ プロ（オレンジ） 耐久性重視のホイールでオールラウンドに使用可能（写真 下左）
デモ マンドレール デモ専用マンドレール（写真 下右）

商品名	包装	商品番号	
デモ コース		3382	206860670
デモ ミディアム		3383	206860577
デモ ファイン	10個入（マンドレール1本付）	3384	206860575
デモ プロ		3381	206860574
デモ プロ スリム		3376	206860578
デモ マンドレール	10本入	3380	206860579

その他



セットアップ模型を製作するためのバーならびにディスクです。

- ① セットアップモデルトリマー 石膏模型の垂直方向の切削
- ② ダイヤモンドセパレーティングディスク 石膏模型の細かいカット

商品名	包装	商品番号	
セットアップモデルトリマー	1本入	5371	206860685
ダイヤモンドセパレーティングディスク	1本入（マンドレール付き）	5288	686

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器届出番号 13B2X00107000A24 一般

ブロックアウト用材料／セットアップワックス／フィグゼーター ショイデンタル

ブルーブロッカー



ブルーブロッカーは、光重合タイプのブロックアウト用レジンで、アンダーカットのブロックアウトやセットアップ模型のセパレート部の隙間への充填、ドラッグリテーナーを製作する際のリリース、弾力性があるワイヤーの仮着など、さまざまな目的に使用することができます。380nm～470nmの光照射器で10～30秒照射することにより硬化します。先端のカニューレはマイクロとミニの2種類があります。

商品名	包装	商品番号
ブルーブロッカー	1.5g×4本+カニューレマイクロ2本/ミニ8本	5276 206360304

※ノズル径：マイクロ=0.6mm ミニ=0.9mm

シルキット/ブロッキングアウトパテ



シルキット



ブロッキングアウトパテ

シルキットは可塑性シリコンで、バイオスターでプレートをプレスする前に、模型のアンダーカット部をブロックアウトするために使用します。カラーは半透明のクリアと模型上で視認しやすいレッドをご用意しています。

ブロッキングアウトパテは合成ゴムで、練り消しゴムのようなテクスチャーです。シルキットと同じ用法ですが、広範囲のカバーに適しています。

商品名	容量	商品番号
シルキットクリア	150g	3443 206360135
シルキットレッド	150g	3442 206360193
ブロッキングアウトパテ	250g	3220 206360130

セットアップワックス



ベタつきの少ないユーティリティワックスです。操作性もよく、セットアップ模型製作時の使用等に適しています。

商品名	包装	商品番号
セットアップワックス	25本入り	5268 206360247

医療機器届出番号 13B2X00107000044 一般

フィグゼーター



フィグゼーターは矯正装置を製作するのに便利な構成咬合器です。マウント部に付いているネジを外すことにより、模型を着脱することができます。

商品名	包装	商品番号
フィグゼーター	1個入	5380 206860602



ジョージゲージ

グレートレイクス

正確な咬合採得は、効果的な機能的矯正装置の製作において最も重要なことですが、患者によって適切な咬合位は異なり、術者の推測や目測での採得は理想的な位置とは異なっていることもあります。

ジョージゲージはそういった問題を解決し、咬合採得の正確性と一貫性を向上させるために役立つ補助器具です。



使用方法例



下顎クランプ(写真青色部分)の正中線を下顎の正中に合わせてネジで固定します。下顎前歯の正中が顎骨に対してずれている場合は上下顎骨の正中に合わせます。



適切なバイトフォークを本体に取り付けます。上下顎を軽く閉じ、上顎前歯がV字部の溝に入っていることを確認します。
※下顎クランプは約1mmの厚みがあります。
バイトフォーク選択の際はご注意ください。



下顎を患者の習慣的な閉口時の顎位にもっていきます。その位置でバイトフォークを固定し、スケール上に示された値を記録します。



次に、下顎を複数回、最前方位に移動するトレーニングをしてから、最も前方に移動した時の値を記録します。
これによって可動域が数値化されます。



一度口腔内から取り出し、装置製作に適切と思われる位置で上ネジを締めてバイトフォークを固定します。



バイトフォークにワックスやシリコンバイトなどを付着させ、5.で決定された位置のバイトを採得します。



採得したバイトで模型を固定し、咬合器にマウントします。



マウント完成。

咬合位採得用バイトフォーク



商品名	包装	商品番号	
ジョージゲージキット	1 セット	056-050	206850559
キット内容：ゲージ本体1個、バイトフォーク5mm、2mm 各1本 バイトフォーク5mm L、2mm L 各1本 ※下顎クランプは約1mmの厚みがあります。バイトフォーク選択の際はご注意ください。			
商品名	包装	商品番号	
バイトフォーク2mm	25本入	056-023	206850498
バイトフォーク5mm	25本入	056-024	206850499
バイトフォーク2mm L	25本入	056-032	206860597
バイトフォーク5mm L	25本入	056-033	206860598

※バイトフォークは単回使用です。
※ゲージ本体はオートクレーブが可能です。(推奨条件：121℃、30分間)

医療機器届出番号 13B2X00107000042 一般

睡眠時無呼吸症候群とは？


睡眠時無呼吸症候群とは

空気の通り道である気道の閉塞が原因で、睡眠中に10秒以上の呼吸停止が何回も起こる病気。定義では「1時間に5回以上、6時間では30回以上、無呼吸がある」と睡眠時無呼吸症候群と診断されます。


いびきの音が大きい、呼吸が途切れることで発見されますが、終夜睡眠ポリグラフィ検査による診断が必要です。抜本的治療は手術ですが、症状緩和のため経鼻的持続陽圧呼吸法(CPAP)が用いられており、口腔内装置(OA)も広く使われています。

口腔内装置は下顎と舌を前突位で終夜固定させることによって気道を確保します。

正常な呼吸

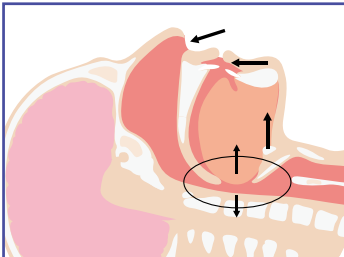

閉塞性の呼吸

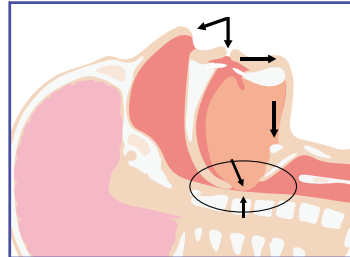

睡眠時無呼吸症候群になりやすい人と影響

- 顎が小さい
- 顎が後退している
- 舌が大きい
- 成人後も扁桃腺が大きい
- 太っている

睡眠時無呼吸症候群が及ぼす心身への影響

- 慢性的な睡眠不足
- 頭痛
- 日中の倦怠感
- 記憶力・集中力の低下
- 高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣病の危険因子
- 突然死

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は男性3.3%、女性0.5%に見られるとされています。睡眠中10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が1時間に5回以上になるとSASと診断されます。

日本睡眠学会による眠気のチェックリスト (Epworth Sleepiness Scale)

A:決して眠くならない B:まれに眠くなる C:しばしば眠くなる D:よく眠くなる

状況	A	B	C	D
1 座って読書をしているとき	0	1	2	3
2 テレビを見ているとき	0	1	2	3
3 公の場所で座って何もしないとき	0	1	2	3
4 1時間続けて車に乗せてもらっているとき	0	1	2	3
5 午後横になって休息するとき	0	1	2	3
6 座って誰かと話をしているとき	0	1	2	3
7 昼食後(お酒を飲まずに)静かに座っているとき	0	1	2	3
8 車中で、交通渋滞で2〜3分止まっているとき	0	1	2	3
合計				

合計点数
10点以下……正常
11点以上……要注意



検査法

終夜睡眠ポリグラフィ検査

脳波、眼球運動、おとがい筋の筋電図、心電図、下肢の筋電図、呼吸気流、胸郭運動、腹壁運動、いびき音、酸素飽和度、体位、睡眠段階

無呼吸低呼吸指数(apnea-hypopnea index:AHI)は1時間当たりの無呼吸数と低呼吸の数の和

軽症 5回から15回
中等症 15回から30回
重症 30回以上

治療法

n-CPAP: 経鼻的持続陽圧呼吸装置で圧力を掛けて就寝時に空気を肺に送り込む。

ダイエット: SAS患者の70%が肥満なので食事療法、運動療法が有効である。

外科手術: 鼻中隔矯正術、粘膜下鼻甲介骨切除術、副鼻腔手術、アデノイド切除術、口腔扁桃摘出術、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術、顎骨延長術、気管切開術

歯科の対応 ▶ 2004年の診療報酬改訂によって「Oral Appliance: OAが有効であると医師に診断され、医科医療機関から診療情報提供料算定に基づきOA治療の依頼を受けた場合」OAの適用が承認されました。





TAP-T / TAP-T Reverse / myTAP

ショイデンタル



いびき防止装置用器具とは

下顎と舌を前突位に位置付けることにより夜間就寝中の気道を確保し、いびきを軽減する装置です。

いびき防止装置用器具

TAP-T



TAP-T



正面

咬合面

TAP-T Reverse



正面

咬合面

myTAP



TAP-Tは、Dr. Thornton の開発したニッケルフリーのチタン製デバイスです。この装置によって下顎を前方で保持することにより、就寝中に軟組織によって閉塞される気道を広げて確保し、いびきを軽減します。専用の調整用六角レンチを用いてフックの位置を前（後）に調節できますので、必要に応じて最も効果の現れる位置に調節することが可能です。

商品名	包装	商品番号
TAP-Tスターターキット	1キット	TAPTK
TAP-T Reverseスターターキット	1キット	TAPTRK
販売終了		
キット内容	TAP-Tスターターキット	TAP-T Reverseスターターキット
①TAP-T上顎用デバイス	1個	①TAP-T Reverse上顎用デバイス
②TAP-T下顎用デバイス	1個	②TAP-T下顎用デバイス
③TAP-T六角レンチ	1個	③TAP-T六角レンチ
④TAP-Tマウンティングデバイス	1個	④TAP-Tマウンティングデバイス
⑤TAP-Tトレーナー	2個	⑤TAP-Tトレーナー
⑥TAP-Tマトリックス	1個	⑥TAP-Tマトリックス
⑦ニューデュラソフトPD (2.5mm)	2枚	⑦ニューデュラソフトPD (2.5mm)
⑧イソフォランフォイル (0.1mm)	2枚	⑧イソフォランフォイル (0.1mm)
付属	・製作マニュアル ・製作マニュアルDVD ・患者用使用説明書	

商品名	色	サイズ (mm)	包装	商品番号
TAP-T 単品				
TAP-T 上顎用デバイス			1 個	9033 206860673
TAP-T 下顎用デバイス			1 個	9032 206860672
TAP-T 六角レンチ			1 個	9035 206860674
TAP-T マウンティングデバイス			5 個	9039 206860676
TAP-T トレーナー			10 個	54701 206860671
TAP-T マトリックス			2 個	9037 206860675
TAP-T Reverse 上顎用デバイス			1 個	9053 206860677
バイオスター (加圧成型器) 専用シート				
ニューデュラソフトPD (2.5mm) *1	クリアー○	2.5×125	10 枚	33871 206360231
イソフォランフォイル (0.1mm)	ナチュラル	0.1×125	100 枚	3207 206360123

*1 医療機器届出番号 13B2X00107000036 一般

睡眠時のいびきを軽減するために使用する、ボイル&バイトタイプの口腔内装置です。上下顎トレーのフィッティング後に位置調節して使用します。


商品名	包装	商品番号
myTAP	1 セット	9070 206860616

IST関連器材／OPMキット


ショイデンタル

いびき防止装置用器具

IST関連器材

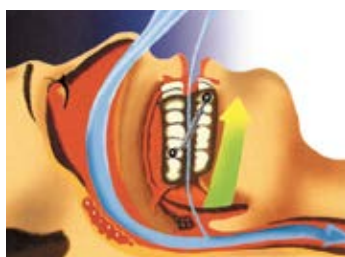

テレスコブ

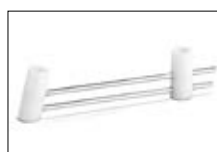

ISTフィキシングパーツポジショニングサポート (上)
 ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ (下左)
 ISTフィキシングパーツ スクリュータイプ (下右)

OPMキット



ISTとは、Intraoral Snoring-Therapy-Applianceの略で、オーラルスクリーンで有名なHinz教授が考案した「いびき防止装置」です。

ショイデンタル社では、この装置を製作する為の部品及び補助装置を揃えました。

Hinz教授によって開発されたISTアプライアンスは、下顎を前方に位置づけることにより、咽頭のエリアを圧迫することを軽減し、いびきを防止することができます。

ISTアプライアンスの上下の連結には、HERNERガイディングテレスコープと呼ばれる装置を使用しますが、これにより下顎が後方に落ち込むことを防ぎ、かつ口を開けたり、前に出したり、左右に動かしたりできるというユニークな構造を持っています。

ISTスターターキット

商品名	包装	商品番号
ISTスターターキット	1セット	206860605
内容：テレスコブ15mmストローク 2本、フィキシングパーツO-リングタイプ 4組、フィキシングパーツポジショニングサポート 1個、セキュリティエキスパンションキー 1個、イソフォランフィルム 2枚、デュランプラス2.0mm 2枚、内容品説明書 1枚		
デュランプラス：医療機器認証番号 222AKBZX00102000 管理		

テレスコブ

商品名	長さ	ストローク	包装	商品番号
テレスコブ	20~28mm	5mm	2本	5449
	25~39mm	9mm		5454
	31~51mm	15mm		5444

ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ (O-リング付)

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ	4セット	5468

ISTフィキシングパーツスクリュータイプ

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ (スクリュータイプ)	4セット	5457

IST O-リング

商品名	包装	商品番号
IST O-リング	10個入	5466

ISTフィキシングパーツポジショニングサポート

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ ポジショニングサポート	1個	5469

OPMは、ISTを簡単にした「いびき防止装置」で、この装置がすぐ作れるようにキットにしました。ISTのテレスコブ部が25~30mm、6種類のプラスチックパーツになっています。

商品名	包装	商品番号
OPMキット	1セット	5495

内容：プラスチックバー (25~30mm) 各1組、O-リング付フィキシングパーツ 4個、プロテクションチューブ 1本、オクルージョントレーナー 1個



※包装変更中につき、写真と異なる場合がございます。



オーソフレイム／SWフラックス

オーソフレイム（ガスボンベ付） センジョー



デンタルバーナーで、取扱いが便利なボタンガスを使用しています。
内炎が鋭利になるよう設計されているので、自在鑑着時に必要な部分に熱を加えられ効率的に作業が行えます。
付属のスクリーンにより炎の確認が容易です。
また、専用スタンドにより角度を自由に選択できます。



工場出荷時にガスは充填されています。
ガスの過剰充填は着火不良の原因となりますのでご注意ください。

	内容量	商品番号
オーソフレイムセット	本体、ガスボンベ、スタンド、スクリーン	OF 206350090
〈単品〉ガスボンベ	130g	OFG 206350089

【仕様】

ボディーグリップ：φ36mm
連続使用時間：約70分（最大炎）
寸法：85（L）×143（H）×46（W）mm
容量：26g
重量：214g
ガスボンベ：130g

SWフラックス YAMAKIN



ペーストタイプのフラックスで、鑑着時の濡れ性の向上と、金属表面の酸化膜や汚れを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。活性温度は、400～900℃です。

	内容量	商品番号
SW フラックス	40g	SWF 206350655

オーソソルダーⅡ モリタデンタルプロダクツ



流ろう性が良く、操作性に優れた歯科用銀ろうです。
液相点：650℃

ワイヤーサイズ（mm）	内容量	長さ（m）	商品番号
0.5	10g 1巻	5.44	SDR05 20688018205
0.6	10g 1巻	3.78	SDR06 06

※長さは目安です

医療機器認証番号 304AGBZX00066000 管理

ニューSTロック モリタデンタルプロダクツ



長年にわたり多くの先生方に愛用され続けてきた、リングアタッチメントの定番装置です。維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損が起りにくい構造です。
遠心方向のコントロールも可能な「エクステンションタイプ」や、維持部を交換せず装置のみを取り替えたいときなどに使用可能な「脚部のみ」もご用意しております。

仕様	包装	商品番号
レギュラー	1組	STLR 206880163LR
	5組	STLR5 206880164LR5
ミニ	1組	STLM 206880163LM
	5組	STLM5 206880164LM5
エクステンション	1組	STLE 206880165
脚部のみ（レギュラー・ミニ共用）	10本	STLF 206880179

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

モデルボックス／スタディーモデル

ANDYモデルボックス

JM Ortho



サイズ（外寸）230×164×70(mm)

包装	商品番号
50	ANDY050 206860680

SAMモデルボックス

JM Ortho

SAM咬合器にマウントした模型がそのまま入ります。

インデックスラベル20枚付
サイズ（外寸）240×160×80(mm)

包装	商品番号
20	SMB20 206850719

※メーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。
お届けまでにお時間をいただく場合がございます。

スタディーモデルゴム枠〈石膏模型の外形、形成用ゴム枠〉 ニッシン

【形態】

H12-A 永久歯顎用 角大型
H12-B 乳歯顎用 角小型
H12-C 永久歯顎用 丸型

【包装】


1組（上下入り）

【材質】

シリコーン製

【色調】

ブルー

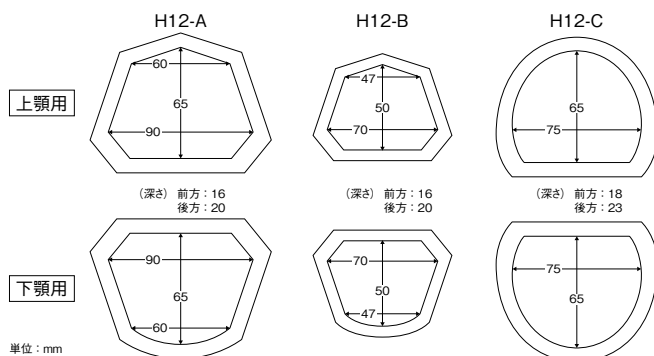

商品番号
H12-A 204520523A
H12-B B
H12-C C

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。