

Polyamide Utility Hook Musashi

JM ORTHO

ムサシー

汎用性の高いユーティリティフック

エラスティック、F.M. リングレットを同時に引っ掛けることができる「二刀流」の形状に設計しました。アライナー・リンガル・ラビアルを問わず、幅広い症例に適用できます。また、従来の審美アタッチメントでは掛けづらかった太めのエラスティックも余裕をもってご使用いただくことが可能です。材質は透明度の高いポリアミド樹脂を採用し、審美的なユーティリティフックを目指しました。



2025.12.23
Debut!!



リングラブラケットとの併用例
エラスティック (4oz 1/4) / F.M. リングレット (LXiIV) * 使用
提供: GOSI 矯正歯科様

* 医療機器認証番号: 20500BZZ01136000 管理

point1 引っ掛けやすい形状を追求



ベース面とフックの間に十分な空間を確保し、患者さんがエラスティックゴムを簡単に引っ掛けられるよう設計しました。さらに、頬粘膜への負担を軽減するため、フックには丸みを持たせ、長さや形状、角度にもこだわり、使いやすさを追求しました。



6oz 1/8 を使用
アライナーとの併用例
提供: GOSI 矯正歯科様


point2 クリスタブレース 3 と同様の スタッドベースを採用

ベースの潰し加工によりアンダーカットを作り、脱離しにくい形状を目指しました。また、歯面のカーブに沿うように内側のスタッドベースをゆるやかに湾曲させています。

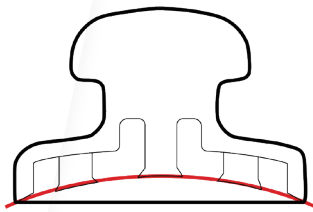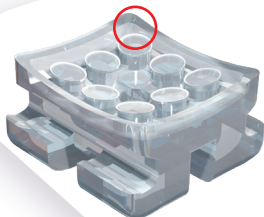

point3 マーキングの付与

透明度が高いため、フックの向きが分かりやすいよう先端にマーキングを付与しました。これにより、エラスティックを掛ける方向に合わせたボンディングが可能になり、患者さんがエラスティックを掛けやすい仕様となっています。

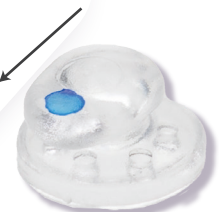

包装: 10 個入

商品名	高さ	商品番号
ポリアミドユーティリティフック Musashi	2.38mm	PUM 206880197

販売名: クリスタブレース 一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号: 222AGBZX00149000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスⅡ)

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
TEL: 03-5281-4711 FAX: 03-5281-4716
https://www.jmortho.co.jp/

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11

*仕様・価格は 2026 年 1 月 21 日時点のものです。*消費税は含まれておりません。*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。