




<スーパーエラスティックNiTiワイヤー ツルフォーム I>

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.012	0.305	25	SETFU012	SETFL012
	.014	0.356	25	SETFU014	SETFL014
	.016	0.406	25	SETFU016	SETFL016
	.018	0.457	25	SETFU018	SETFL018
スクエア	.016 x .016	0.406 x 0.406	25	SETFU1616	SETFL1616
	.018 x .018	0.457 x 0.457	25	SETFU1818	SETFL1818
	.020 x .020	0.508 x 0.508	25	SETFU2020	SETFL2020
レクタングラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	25	SETFU1622	SETFL1622
	.017 x .025	0.432 x 0.635	25	SETFU1725	SETFL1725
	.018 x .025	0.457 x 0.635	25	SETFU1825	SETFL1825
	.019 x .025	0.483 x 0.635	25	SETFU1925	SETFL1925
	.021 x .025	0.533 x 0.635	25	SETFU2125	SETFL2125


上記サイズ以外にもお取り扱いがございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

ISO規格による3点曲げフォーステスト

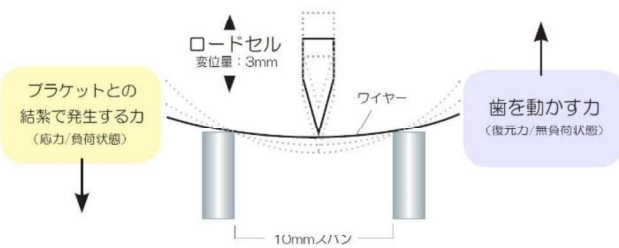



ANSI/ADA Specifications #32, Orthodontic Wires: 2006

応力ひずみ曲線

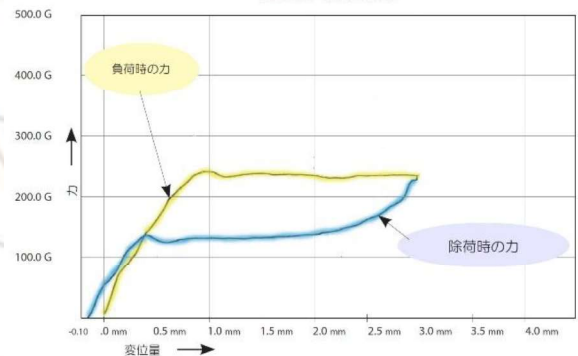

使用ワイヤー：.016 スーパーエラスティックNiTiワイヤー
試験温度：37℃

スーパーエラスティック NiTiワイヤー

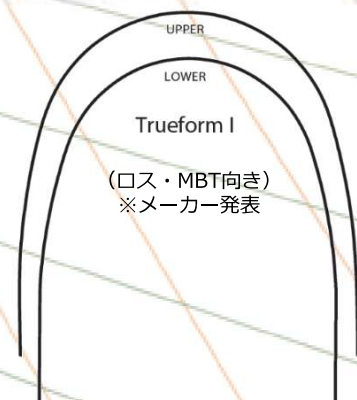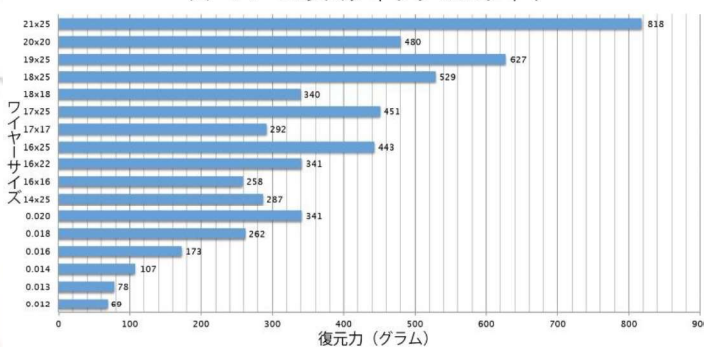


＜サーマルアクチベートNiTiワイヤー ツルフォーム I＞

ワイヤーを18℃以下に冷却することで超軟化し、30℃以上で超弾性化する温度活性性質のワイヤーです。

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)


	サイズ		包装	上顎用 商品番号		下顎用 商品番号	
	inch	mm					
ラウンド	.012	0.305	25	TTFU012	206850916U012	TTFL012	206850916L012
	.014	0.356	25	TTFU014	U014	TTFL014	L014
	.016	0.406	25	TTFU016	U016	TTFL016	L016
	.018	0.457	25	TTFU018	U018	TTFL018	L018
	.020	0.508	25	TTFU020	U020	TTFL020	L020
スクエア	.016 x .016	0.406 x 0.406	25	TTFU1616	206850917U1616	TTFL1616	206850917L1616
	.018 x .018	0.457 x 0.457	25	TTFU1818	U1818	TTFL1818	L1818
	.020 x .020	0.508 x 0.508	25	TTFU2020	U2020	TTFL2020	L2020
レクタングラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	25	TTFU1622	206850917U1622	TTFL1622	206850917L1622
	.017 x .025	0.432 x 0.635	25	TTFU1725	U1725	TTFL1725	L1725
	.018 x .025	0.457 x 0.635	25	TTFU1825	U1825	TTFL1825	L1825
	.019 x .025	0.483 x 0.635	25	TTFU1925	U1925	TTFL1925	L1925
	.021 x .025	0.533 x 0.635	25	TTFU2125	U2125	TTFL2125	L2125

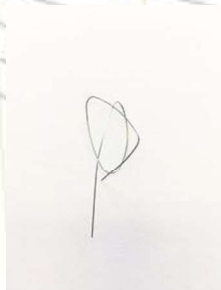

サーマルアクチベートNi-Tiワイヤーは通常のNi-Tiワイヤーに比べ屈曲が容易です。




手で温めます。ワイヤーの温度が上昇していくと...

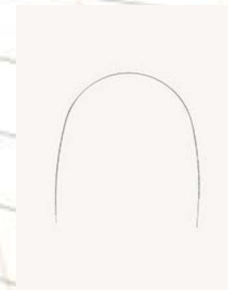


ワイヤーが元の形に戻りました。

スーパーエラスティックNiTiワイヤーとサーマルアクチベートNiTiワイヤーのたわみ量の比較

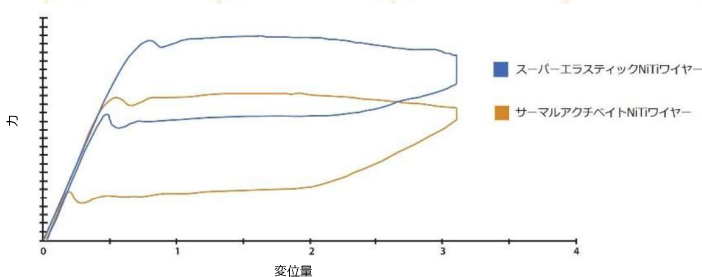


Tested to ANSI/ADA Specification #32, Orthodontic Wires; 2006

サーマルアクチベートNiTiワイヤー

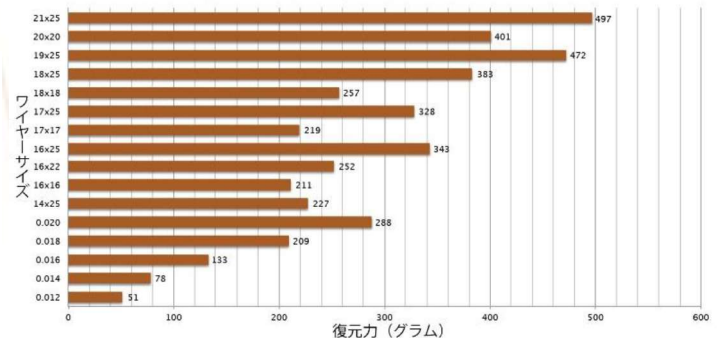

<スーパーエラスティックNiTiワイヤー/ディンプル>

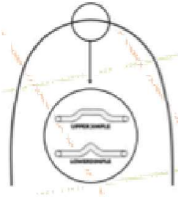

上顎 ディンプル



下顎 ディンプル




(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.012	0.305	25	SETFU012D	206850986U012D
	.014	0.356	25	SETFU014D	U014D
	.016	0.406	25	SETFU016D	U016D
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	25	SETFU1622D	206850987U1622D
	.017 x .025	0.432 x 0.635	25	SETFU1725D	U1725D
	.018 x .025	0.457 x 0.635	25	SETFU1825D	U1825D
	.019 x .025	0.483 x 0.635	25	SETFU1925D	U1925D

上記サイズ以外にもお取り扱いがございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

<サーマルアクチベートNiTiワイヤー/ディンプル>

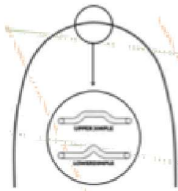

上顎 ディンプル




下顎 ディンプル



(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.014	0.356	25	TTFU014D	206850918U014D
	.016	0.406	25	TTFU016D	U016D
	.018	0.457	25	TTFU018D	U018D
スクエアー	.016 x .016	0.406 x 0.406	25	TTFU1616D	206850919U1616D
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	25	TTFU1622D	206850919U1622D
	.017 x .025	0.432 x 0.635	25	TTFU1725D	U1725D
	.018 x .025	0.457 x 0.635	25	TTFU1825D	U1825D
	.019 x .025	0.483 x 0.635	25	TTFU1925D	U1925D


<リバーカーブNiTiワイヤー アーチⅠ>

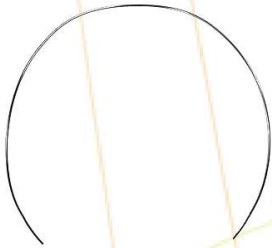

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

	サイズ		包装	上顎用 商品番号		下顎用 商品番号	
	inch	mm					
ラウンド	.014	0.356	10	SERCU014	206850927U014	SERCL014	206850927L014
	.016	0.406	10	SERCU016	U016	SERCL016	L016
	.018	0.457	10	SERCU018	U018	SERCL018	L018
スクエア	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	SERCU1616	206850988U1616	SERCL1616	206850988L1616
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	SERCU1622	206850988U1622	SERCL1622	206850988L1622
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	SERCU1725	U1725	SERCL1725	L1725
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	SERCU1825	U1825	SERCL1825	L1825
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	SERCU1925	U1925	SERCL1925	L1925

<リバーカーブNiTiワイヤー アーチⅢ>

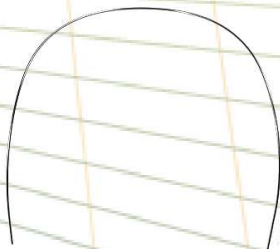

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

	サイズ		包装	上顎用 商品番号		下顎用 商品番号	
	inch	mm					
ラウンド	.012	0.305	10	SERCU3012	206850928U3012	SERCL3012	206850928L3012
	.014	0.356	10	SERCU3014	U3014	SERCL3014	L3014
	.016	0.406	10	SERCU3016	U3016	SERCL3016	L3016
	.018	0.457	10	SERCU3018	U3018	SERCL3018	L3018
スクエア	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	SERCU31616	206850989U31616	SERCL31616	206850989L31616
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	SERCU31622	206850989U31622	SERCL31622	206850989L31622
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	SERCU31725	U31725	SERCL31725	L31725
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	SERCU31825	U31825	SERCL31825	L31825
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	SERCU31925	U31925	SERCL31925	L31925

販売名：サーマルアーチワイヤー 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ
医療機器認証番号：21500BZY00512000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）

お問い合わせ先はこちら

株式会社 JM Ortho

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
TEL 03-5281-4711 FAX 03-5281-4716

ホームページの情報もご覧ください

<https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売元】

株式会社 JM Ortho

【輸入元】

G&H Wire Company, Inc.