

アライナーシート

UNIQ+ pd



UNIQ+ (ユニークプラス) pd は、アライナー矯正の素材研究から改良された、共重合ポリエステル系樹脂のアライナー用単層プレートです。シングルレイヤーでありながら、適度な矯正力を装着期間中長く維持することが期待できます。装着開始から交換まで、矯正力の減衰が緩やかなため予見性の高い治療と、特に装着初期時の患者さんの痛みの軽減に寄与します。

* レジンには接着しますが、材質の性質上、レジンを使用することで材料が脆くなる可能性があります。そのため、レジンを用いた調整は推奨していません。




Point! 装着初期から交換時まで安定した適度な矯正力

アライナー矯正用の材料研究によって改良された原材料により、シングルレイヤーでありながら、装着初期から交換時まで安定し適度な矯正力が維持され、装置の持つ矯正力の減衰がゆるやかです。そのため効率的な歯牙移動による安定した治療が期待できます。自社比較テストでは、本品厚さ 0.625mm のシートで、厚さ 0.75mm 相当の自社ポリエステル製シートと同等の矯正力を発揮することが示されました。

Point! 保護シートできれいな装置

プレートの片面に保護シートがついているため、模型の汚れや樹脂模型使用時の残留物質の装置側への転移を防ぎます。不要な場合は、成型前にはがすことも可能です。
* 詳しくは弊社カタログまたは Web サイトをご覧ください。

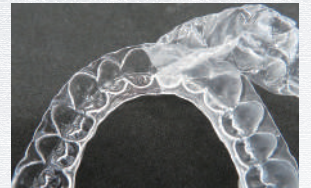

Point! 治療中も安定した品質

原材料の改良・研究により、高い耐久性を有しており、シングルレイヤーであるため、レイヤー間の剥離を憂慮する必要はありません。また、プレートは個包装になっているため、開封後すぐに使用することで、吸湿による気泡発生等のリスクを最大限抑えることが可能です。
* 個包装開封後は 15 分以内に使用してください。

アライナーシート UNIQ+ pd

サイズ (mm)	色	包装	商品番号
0.5×125	クリアー	10 枚	3651 206360260
0.625×125	クリアー	10 枚	3652 206360261
0.75×125	クリアー	10 枚	3653 206360262

販売名：アライナーシート UNIQ 一般的名称：歯科矯正用レジン材料
医療機器認証番号：308AKBZX00014000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）

Machine

Scheu 純正成型器：バイオスター VII



バイオスター VIIは6気圧の加圧力を有する加圧成型器で、高い加圧力により、精密な成型が可能です。Scheu製のプレートの全てが使用可能で、それぞれのプレートに付与されたバーコードをスキャンすることでコードを読み取り、最適な加熱温度・加熱時間・冷却時間をコントロールします。

商品名	商品番号	
バイオスター VII	3021	206850619

販売名：バイオスター VII 一般的名称：歯科技工用成型器
医療機器届出番号：13B2X00107000040 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）

Related Products

ペレットカバー



バイオスター・ミニスターのモデルカップを使用して成型する際、圧接したシートの余剰部にペレットが食い込むことを防ぐカバーです。消費するペレットの量を極力抑えることができ、成型後のスムーズな作業にも寄与します。模型サイズに合わせて2サイズご用意しています。

商品名	包装	商品番号	
ペレットカバー ラージ	5枚入	3006	206360137
ペレットカバー スモール	5枚入	3007	206360138

ディモ プロ（研磨・調整用）



UNIQ+ pd やデュランプラスなど比較的硬い装置のバリ取りはもちろんのこと、軟らかい素材にも使用可能なオールラウンドな研磨用スポンジホイールです。

商品名	包装	商品番号	
ディモ プロ	10個入	3381	206860574

※マンドレール1本付

販売名：フィニッシングパーセット 一般的名称：歯科用研磨器材
医療機器届出番号：13B2X00107000A24 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）
※本品は販売名「フィニッシングパーセット」の構成品です。一般的名称は本品単体に該当するものを記載しています。

IMPRIMO® モデルセパレーター



3Dプリンターで作られたレジン模型を用いて、リテーナーなどの可撤式矯正装置を製作するための水性レジン分離材です。付属のブラシで薄く塗布し、室温もしくは模型乾燥器などでしっかり乾燥させてから、即時重合レジンを築盛してください。

※フィラメントプリンターで作られたレジン模型には使用できません。



商品名	内容量	包装	商品番号	
IMPRIMO® モデルセパレーター	100ml	1本	6551	206860466

※筆が1本付属します。

【製造販売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL:03-5281-4711 FAX:03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

※仕様は2026年5月21日発売時点のものです。*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

【輸入元】SCHEU-DENTAL GmbH（ドイツ）