




2025 → 2027  
CONTENTS



## BRACKETS

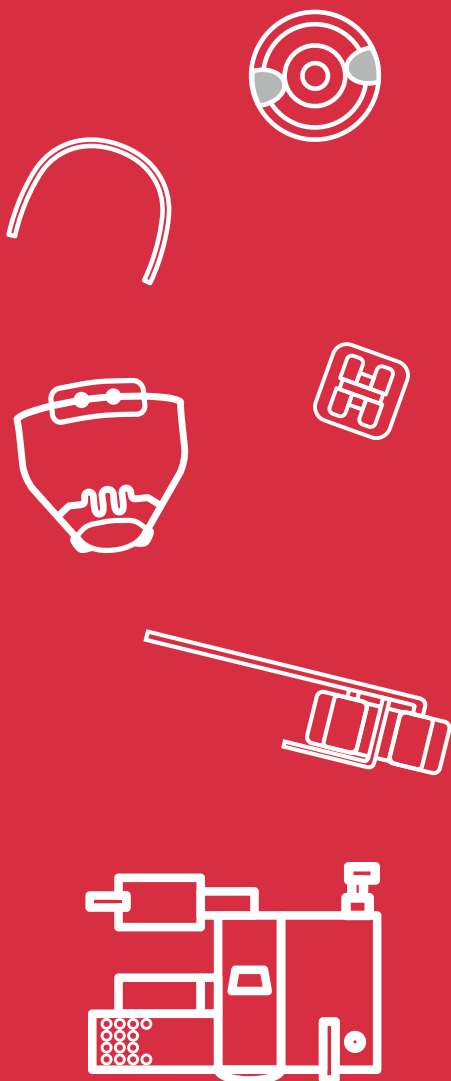

# 01

## ブラケット

- ブラケットの選択 ..... 12
- A-line/S-line/C-line ..... 14
- クリスタブレース 7/ クリスタブレース 3 ..... 20
- クリアブラケット SL+ ..... 26
- クリアスナップ ..... 31
- アリスブラケット ..... 34
- シンシアブレースⅡ ..... 36
- FLI クリア ..... 38
- シグネチャーⅢ ..... 39
- メタルブラケット（モリタデンタルプロダクツ製） ... 40
- シナジーブラケット ..... 42
- ミニトラスブラケット ..... 44
- FLI ツイン ..... 45
- インテグラブラケット ..... 46
- BSC ブラケット ..... 47
- カンノクラシックブラケット ..... 48
- ワンピースブラケット / 太臼歯用ブラケット ..... 49
- chivita（チヴィタ） / シングルブラケット / C-HOOK ブラケット ..... 50
- KSL システム ..... 51
- HS ブラケット L ..... 52
- リンガル関連製品 ..... 53
- KBT マルチブラケット / チューブシステム ..... 55
- 豆知識 ブラケットとチューブの構造ならびに機能とデザイン ... 56

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY  
TREATMENT

INTRAORAL  
EXTRAORAL

EXPANSION  
SCREWS

I-station &

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR  
SYSTEM

LABORATORY  
PRODUCTS


EQUIPMENT

SAM  
SYSTEM

COA  
SOFTWARE

BOOKS

## ブラケットの選択

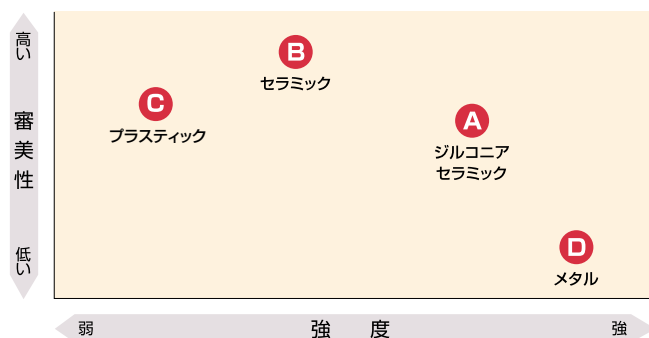

|            | 材質                                         | 特徴                                        | 商品名                                                                                                                                   | 掲載ページ                                                    |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A</b>   | ジルコニアセラミックブラケット                            | ・審美的<br>・高価<br>・破折が起こりにくい                 | シンシアブレースⅡ<br>KBTブラケット (ジルコニアセラミック)                                                                                                    | 36～37<br>55                                              |
| <b>B</b>   | セラミックブラケット                                 | ・審美的<br>・高価<br>・破折が起こりうる                  | C-line<br>FLIクリア<br>シグネチャーⅢ                                                                                                           | 18～19<br>38<br>39                                        |
| <b>C</b>   | プラスチックブラケット                                | ・審美的<br>・安価                               | クリスタブレース7<br>クリスタブレース3<br>クリアブラケット<br>アリス                                                                                             | 20～23<br>24～25<br>26～30<br>34～35                         |
| <b>D</b>   | メタルブラケット                                   | ・審美的でない<br>・安価<br>・破折が起こりにくい<br>・形態にバラエティ | メタルブラケット (モリタデンタルプロダクツ)<br>シナジー<br>ミニトーラス (アレキサンダーのみ)<br>FLIツイン<br>インテグラ<br>BSCブラケット<br>カンノクラシックブラケット<br>ワンピースブラケット<br>KBTブラケット (メタル) | 40～41<br>42～43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>55 |
| <b>その他</b> | セルフライゲーティング<br>リングブラケット<br>※材質はメタルです。      | ・審美的<br>・高価                               | KSLブラケット                                                                                                                              | 51                                                       |
|            | セルフライゲーティング<br>セラミックブラケット<br>※機構にメタルを含みます。 | ・審美的<br>・高価                               | A-line (クリップタイプ)<br>S-line (ドアタイプ)                                                                                                    | 14～15<br>16～17                                           |

ブラケットに使用する接着材につきましてはサブライ章 (157 ページ～) をご確認ください。



## ブラケットの選択


ブラケットに予めトルクやアンギュレーションを入れたストレートワイヤー用のブラケットは開発者のコンセプトによりトルクやアンギュレーションの度数が少しずつ異なります。

ストレートワイヤー用ブラケットを用いても、ワイヤーに全くベンディングを施さないで矯正治療が終わることはほとんどありません。

どのブラケットを採用するかは先生の診断と治療方針によります。

※第一大臼歯、第二大臼歯はチューブの数値を記載しています。また、数値はチューブ選択における目安としてご利用下さい。


### セットアップ別歯種別トルク(インクリネーション)

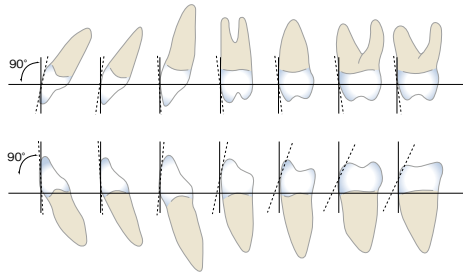

| セットアップ                       | 上 顎 | 中切歯     | 側切歯    | 犬 歯  | 第一小臼歯 | 第二小臼歯 | ※ 第一大臼歯 | ※ 第二大臼歯 |
|------------------------------|-----|---------|--------|------|-------|-------|---------|---------|
| ロスタイプ(シンシアブレースⅡ他)            |     | 12      | 8      | -2~2 | -7    | -7    | -10     | -10~-14 |
| ロスタイプ(モリタデンタルプロダクツ製)         |     | 14      | 7      | 0    | -7    | -7    | -10     | -10     |
| アレキサンダータイプ(ミニトラス)            |     | 14      | 7      | -3   | -7    | -7    | -10     | -10     |
| アレキサンダータイプ(クリアブラケット)         |     | 14      | 7      | -1   | -7    | -7    | —       | —       |
| MBT (A-line, S-line, C-line) |     | 17      | 10     | 0    | -7    | -7    | —       | —       |
| MBT (FLI ツイン、クリスタブレース 7)     |     | 17      | 10     | -7   | -7    | -7    | -14     | -14     |
| BSC                          |     | 0/14/22 | 0/7/14 | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       |
| リケッツタイプ                      |     | 22      | 14     | 7    | 0     | 0     | —       | —       |
| スタンダードエッジワイズ                 |     | 0       | 0      | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       |

| セットアップ                       | 下 顎 | 中切歯   | 側切歯   | 犬 歯  | 第一小臼歯 | 第二小臼歯 | ※ 第一大臼歯 | ※ 第二大臼歯 |
|------------------------------|-----|-------|-------|------|-------|-------|---------|---------|
| ロスタイプ(シンシアブレースⅡ他)            |     | -1~0  | -1~0  | -11  | -17   | -22   | -25~-30 | -25~-30 |
| ロスタイプ(モリタデンタルプロダクツ製)         |     | -1/-5 | -1/-5 | 0/-7 | -11   | -17   | -10~-22 | -17~-27 |
| アレキサンダータイプ(ミニトラス)            |     | -5    | -5    | -7   | -11   | -11   | -22     | -27     |
| アレキサンダータイプ(クリアブラケット)         |     | -1/-5 | -1/-5 | -7   | -11   | -11   | —       | —       |
| MBT (A-line, S-line, C-line) |     | -6    | -6    | 0    | -12   | -17   | —       | —       |
| MBT (FLI ツイン、クリスタブレース 7)     |     | -6    | -6    | -6   | -12   | -17   | -20     | -10     |
| BSC                          |     | 0     | 0     | 7    | 0     | 0     | 0       | 0       |
| リケッツタイプ                      |     | 0     | 0     | 7    | 0     | -14   | —       | —       |
| スタンダードエッジワイズ                 |     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       |

### セットアップ別歯種別アンギュレーション(ティップ)

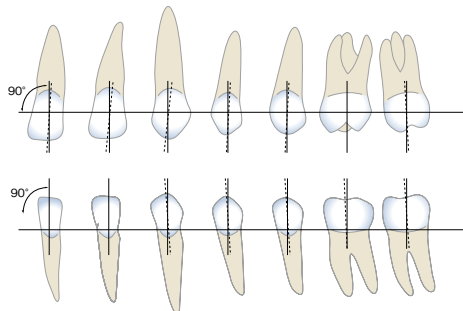

| セットアップ                       | 上 顎 | 中切歯 | 側切歯 | 犬 歯   | 第一小臼歯 | 第二小臼歯 | ※ 第一大臼歯 | ※ 第二大臼歯 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|
| ロスタイプ(シンシアブレースⅡ他)            |     | 5   | 9   | 10~11 | 0     | 0     | 0       | 0       |
| ロスタイプ(モリタデンタルプロダクツ製)         |     | 5   | 8   | 6/10  | 0     | 0     | 0       | 0       |
| アレキサンダータイプ(ミニトラス)            |     | 5   | 8   | 10    | 0     | 0     | 0       | 0       |
| アレキサンダータイプ(クリアブラケット)         |     | 5   | 8   | 10    | 0     | 0     | —       | —       |
| MBT (A-line, S-line, C-line) |     | 4   | 8   | 8     | 0     | 0     | —       | —       |
| MBT (FLI ツイン、クリスタブレース 7)     |     | 4   | 8   | 8     | 0     | 0     | 0~10    | 0~10    |
| BSC                          |     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| リケッツタイプ                      |     | 5   | 8   | 5     | 0     | 0     | —       | —       |
| スタンダードエッジワイズ                 |     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |

| セットアップ                       | 下 顎 | 中切歯 | 側切歯 | 犬 歯 | 第一小臼歯 | 第二小臼歯 | ※ 第一大臼歯 | ※ 第二大臼歯 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------|---------|
| ロスタイプ(シンシアブレースⅡ他)            |     | 0~2 | 0~2 | 5~7 | 0~1   | 0~1   | -1      | -1      |
| ロスタイプ(モリタデンタルプロダクツ製)         |     | 0   | 0   | 6   | 0     | 0     | 0       | 0       |
| アレキサンダータイプ(ミニトラス)            |     | 0   | 0   | 6   | 0     | 0     | -6      | -6      |
| アレキサンダータイプ(クリアブラケット)         |     | 0   | 0   | 6   | 0     | 0     | —       | —       |
| MBT (A-line, S-line, C-line) |     | 0   | 0   | 3   | 2     | 2     | —       | —       |
| MBT (FLI ツイン、クリスタブレース 7)     |     | 0   | 0   | 3   | 2     | 2     | 0       | 0       |
| BSC                          |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0       | 0       |
| リケッツタイプ                      |     | 0   | 0   | 5   | 0     | 0     | —       | —       |
| スタンダードエッジワイズ                 |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0       | 0       |


## A-line

BIOCETEC

A-line®

A-line、それは機能と審美性を兼ね備えたセルフライゲティングブラケット。コンパクトなデザインで、治療中も快適。毎日鏡を見つめたい笑顔へ。

## A-line® の特長

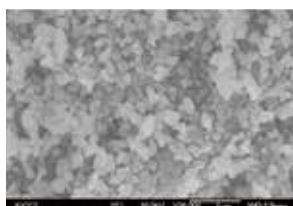

### 高純度セラミック 「AC800」を採用

精細なセラミック粒子を持つ、99.99%高純度セラミック「AC800」の採用により、高い強度と天然歯にマッチする透明度を実現。矯正治療中によるワイヤーのトルクや咬合力、剥離応力におけるブラケットの破損が少なく、術者と患者さん双方のストレスを軽減します。



### 耐久性のある 変形しにくいクリップ

ワイヤーなどからの力や、食べ物など口腔内環境でかかる負荷を考慮し、研究や試験を重ね、構造を最適化。変形しにくく、高い耐久性が期待できます。



製造元による「1000 回開閉」動画はこちら！



### 審美性の高いクリップ

金属部分に 2 層の特殊なロジウムコーティングを採用。耐摩耗性・耐変色性が高く、天然歯に馴染みやすい色合いで、審美性を長く保持します。



### 精度の高いスロット

製造時のセラミックの収縮を抑え、精度の高いスロットを実現。より予測しやすい治療に寄与します。



### 安定した接着強度を実現する ブラケットベースデザイン

2 方向に 25° カットを施したベース構造により、安定した接着強度とストレスの少ないデボンディングが期待できます。



### 丸みがあり、スムーズな ボディとウイング

ハイトが低く、丸みのあるボディで患者さんの不快感を軽減します。また、NP 表面処理\*により滑らかな輪郭構造を実現しました。

\*NP 表面処理：ナノ粒子セラミック研磨表面処理



先端が細い側は、クリップに付与されているホール（穴）に引っかけて使用します。咬合面方向に操作することで、クリップが開きます。



先端がやや厚みのある側は、ウイングとベース面の間にあるクリップのボール部分を押し込んで開く時に使用します。クリップが歯石や残渣等で固着してしまった、あるいはクリップのホールに先端を押し込みにくい時に有効です。ボールを押し込んで半分程度クリップを開いた後、通常どおり細い先端の方でホールに引っかけて完全に開いてください。

## A-line 専用オープニングツールとクリップ開閉方法

A-line のクリップのスムーズな操作に寄与する専用オープニングツールです。片方の先端は細く、もう一方はやや厚みがあります。このツールを用い、下図の方法にてクリップを開きます。閉じる際は、指でクリップのカーブ部分をブラケット本体に押し込みます。







# A-line

BIOCETEC

## A-line (ロスタイプ)

包装:10個

|         | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018 スロット                 | .022 スロット                 |
|---------|-----|-----------|-------|----------|------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   1   | 12  | 5°        | 0°    | 3.6      |      | R          | AR18-1112 206350475UR1    | AR22-1112 206350471UR1    |
|         |     |           |       |          |      | L          | AR18-2112 206350475UL1    | AR22-2112 206350471UL1    |
| 2   2   | 8   | 8°        | 0°    | 3.4      |      | R          | AR18-1208 206350475UR2    | AR22-1208 206350471UR2    |
|         |     |           |       |          |      | L          | AR18-2208 206350475UL2    | AR22-2208 206350471UL2    |
| 3   3   | 2   | 13°       | 4°    | 3.5      | フック付 | R          | AR18-1302H 206350475UR3H  | AR22-1302H 206350471UR3H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AR18-2302H 206350475UL3H  | AR22-2302H 206350471UL3H  |
| 54   45 | -7  | 0°        | 0°    | 3.6      | フック付 | R          | AR18-1407H 206350475UR45H | AR22-1407H 206350471UR45H |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AR18-2407H 206350475UL45H | AR22-2407H 206350471UL45H |
| 21   12 | -1  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R          | AR18-4101 206350475LR12   | AR22-4101 206350471LR12   |
|         |     |           |       |          |      | L          | AR18-3101 206350475LL12   | AR22-3101 206350471LL12   |
| 3   3   | -11 | 7°        | 2°    | 3.6      | フック付 | R          | AR18-4311H 206350475LR3H  | AR22-4311H 206350471LR3H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AR18-3311H 206350475LL3H  | AR22-3311H 206350471LL3H  |
| 4   4   | -17 | 0°        | 4°    | 3.6      | フック付 | R          | AR18-4417H 206350475LR4H  | AR22-4417H 206350471LR4H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AR18-3417H 206350475LL4H  | AR22-3417H 206350471LL4H  |
| 5   5   | -22 | 0°        | 4°    | 3.6      | フック付 | R          | AR18-4522H 206350475LR5H  | AR22-4522H 206350471LR5H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AR18-3522H 206350475LL5H  | AR22-3522H 206350471LL5H  |

### 1 症例キット

|                 | 包装  | フック                | .018 スロット            | .022 スロット            |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3~3             | 12個 | 犬歯のみフック            | AR18-33H 206350476   | AR22-33H 206350472   |
| 5~5             | 20個 | 犬歯・小臼歯フック          | AR18-55H45 206350477 | AR22-55H45 206350473 |
| 上顎 5~5 / 下顎 3~3 | 16個 | 上顎犬歯・小臼歯 / 下顎犬歯フック | AR18-53H45 206350478 | AR22-53H45 206350474 |

## A-line (MBT タイプ)

包装:10個

|         | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .022 スロット                 |
|---------|-----|-----------|-------|----------|------|------------|---------------------------|
| 1   1   | 17  | 4°        | 0°    | 3.6      |      | R          | AM22-1117 206350467UR1    |
|         |     |           |       |          |      | L          | AM22-2117 206350467UL1    |
| 2   2   | 10  | 8°        | 0°    | 3.4      |      | R          | AM22-1210 206350467UR2    |
|         |     |           |       |          |      | L          | AM22-2210 206350467UL2    |
| 3   3   | 0   | 8°        | 0°    | 3.6      | フック付 | R          | AM22-1300H 206350467UR3H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AM22-2300H 206350467UL3H  |
| 54   45 | -7  | 0°        | 0°    | 3.6      | フック付 | R          | AM22-1407H 206350467UR45H |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AM22-2407H 206350467UL45H |
| 21   12 | -6  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R          | AM22-4106 206350467LR12   |
|         |     |           |       |          |      | L          | AM22-3106 206350467LL12   |
| 3   3   | 0   | 3°        | 0°    | 3.6      | フック付 | R          | AM22-4300H 206350467LR3H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AM22-3300H 206350467LL3H  |
| 4   4   | -12 | 0°        | 0°    | 3.6      | フック付 | R          | AM22-4412H 206350467LR4H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AM22-3412H 206350467LL4H  |
| 5   5   | -17 | 0°        | 0°    | 3.5      | フック付 | R          | AM22-4517H 206350467LR5H  |
|         |     |           |       |          | フック付 | L          | AM22-3517H 206350467LL5H  |

### 1 症例キット

|                 | 包装  | フック                | .022 スロット            |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| 3~3             | 12個 | 犬歯のみフック            | AM22-33H 206350468   |
| 5~5             | 20個 | 犬歯・小臼歯フック          | AM22-55H45 206350469 |
| 上顎 5~5 / 下顎 3~3 | 16個 | 上顎犬歯・小臼歯 / 下顎犬歯フック | AM22-53H45 206350470 |

医療機器認証番号 301AKBZX00035000 管理

## A-line 専用オープニングツール

|                    | 商品番号           |
|--------------------|----------------|
| A-line 専用オープニングツール | ALOT 206350479 |

医療機器届出番号 13B2X00107000045 一般

## S-line

BIOCETEC

S-line<sup>E</sup>

高純度のセラミックを使用した、セルフライゲティングブラケットです。ドアの強度や操作性、スロットの精度など、細部にまでこだわったデザインです。下顎の前歯部には、ディープバイトにも対応した「S-line Rタイプ」もご用意しております。

## 高い強度と審美性

より焼成密度の高い「AC800」の採用により、従来の同製品よりも光線透過率が約15.3%向上。口腔内において、よりナチュラルに天然歯にマッチします。強度においても、ドアの引張強度が62%、スロットのトルク強度が28.5%向上しています。Rタイプの下顎小臼歯部においては、他の部位よりもさらに幅の広いドアに設計されているため、特に高い強度を有しています。

※数値はいずれもメーカー試験による



## 幅広で開閉もスムーズなスライディングドア

スライディングドアは幅広にデザイン。ワイヤーをしっかりと把持し、効果的なローテーションコントロールが期待できます。スライディングドアとブラケットボディの間に隙間がないため、食物や歯垢などが挟まりにくく、スムーズにドアを開閉することが可能です。



## 耐久性の高いスライディングドア

スライディングドアは、素材やデザインなど、様々な角度から研究を積み重ねたデザインで、高い耐久性を有しています。



高度なCIM製法で製造されたS-lineのスライディングドアは、400回以上の開閉にも耐えることができ、ドア部分の引張試験でも平均42Nの荷重に耐えられる強度を示しました。

※メーカー試験結果による




## 下顎は選べる2タイプ

下顎前歯部は、通常のデザインの「Eタイプ」と、対合歯に接触する部分を40%カットしたディープバイトの患者さん向け「Rタイプ」をご用意しています。




Eタイプ

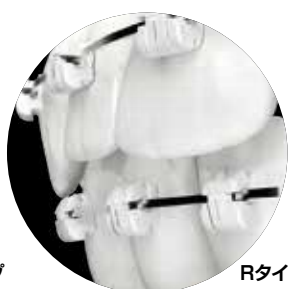

Rタイプ

## ワイヤーの遊びが少ない精密なスロット

フルサイズのワイヤー挿入時、スロットに起因するワイヤーの遊びを少なくするため、スロットを精密に設計。スロットの壁面も、精密に平行で、術者がイメージする安定的なトルクコントロールが期待できます。


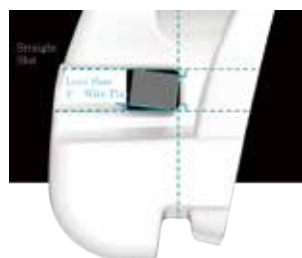


## S-line 専用オープニングツール

S-lineのドア構造の隙間に差し込み、回転させることでドアを簡単に開けることができる、ペンタイプの専用オープニングツールです。



オープニングツールの  
使用方法是こちら！

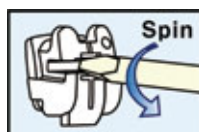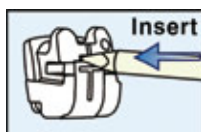

先端チップはジルコニアセラミック製で、摩耗しにくく、開閉時のドアへの着色を大きく防ぎます。滅菌等も可能で、非常に衛生的にご使用いただけます。

| 商品番号        |        |           |
|-------------|--------|-----------|
| 本体+チップ1本    | SLOT3  | 206350869 |
| 交換チップ (2本入) | SLOT3Z | 206350878 |

医療機器届出番号 13B2X00107000045 一般



# S-line

BIOCETEC

S-line<sup>E</sup>

S-line<sup>R</sup>  
Mandibular



※ MBT.022の下顎5番はロス .022の下顎4番と共用です。

※ ドアの機構にステンレススチールを使用しています。

※ T 字インジケータは部位や製造時期によっては、ない場合があります。

※ マーキングには乳清を使用しています。  
水洗での除去が可能です。

## S-line(ロスタイプ)

包装：10個

| トルク     | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | タイプ   | フック   | Right/Left | .018スロット                 | .022スロット                 |
|---------|-----------|-------|---------|-------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   1   | 12°       | 5°    | 0°      | 3.9   |       | R          | SR18-1112 206350854UR1   | SR22-1112 206350857UR1   |
|         |           |       |         |       |       | L          | SR18-2112 UL1            | SR22-2112 UL1            |
| 2   2   | 8°        | 9°    | 0°      | 4.0   |       | R          | SR18-1208 UR2            | SR22-1208 UR2            |
|         |           |       |         |       |       | L          | SR18-2208 UL2            | SR22-2208 UL2            |
| 3   3   | 0°        | 11°   | 4°      | 4.1   | フック付  | R          | SR18-1300H UR3H          | SR22-1300H UR3H          |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR18-2300H UL3H          | SR22-2300H UL3H          |
| 54   45 | -7°       | 0°    | 2°      | 3.9   | フック付  | R          | SR18-1407H UR45H         | SR22-1407H UR45H         |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR18-2407H UL45H         | SR22-2407H UL45H         |
| 21   12 | -1°       | 0°    | 0°      | 3.6   |       | R          | SR18-4101 206350854LR12  | SR22-4101 206350857LR12  |
|         |           |       |         |       |       | L          | SR18-3101 LL12           | SR22-3101 LL12           |
|         |           |       | 3.8     | R タイプ |       | L/R        | SR18-3101R 206350863LL12 | SR22-3101R 206350866LL12 |
| 3   3   | -11°      | 7°    | 2°      | 4.0   | フック付  | R          | SR18-4311H 206350854LR3H | SR22-4311H 206350857LR3H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR18-3311H LL3H          | SR22-3311H LL3H          |
|         |           |       | 3.9     | R タイプ |       | R          | SR18-4311R 206350863LR3  | SR22-4311R 206350866LR3  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SR18-3311R LL3           | SR22-3311R LL3           |
| 4   4   | -17°      | 0°    | 4°      | 3.8   | フック付  | R          | SR18-4417H 206350854LR4H | SR22-4417H 206350857LR4H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR18-3417H LL4H          | SR22-3417H LL4H          |
| 4   4   | -17°      | 0°    | 0°      | 4.0   | R タイプ | R          | SR22-4417H 206350866LR4  | SR22-4417H 206350866LR4  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SR22-3417R LL4           | SR22-3417R LL4           |
| 5   5   | -22°      | 0°    | 4°      | 3.8   | フック付  | R          | SR18-4522H 206350854LR5H | SR22-4522H 206350857LR5H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR18-3522H LL5H          | SR22-3522H LL5H          |
| 5   5   | -22°      | 0°    | 0°      | 4.0   | R タイプ | R          | SR22-4522H 206350866LR5  | SR22-4522H 206350866LR5  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SR22-3522R LL5           | SR22-3522R LL5           |

## 1 症例キット

|                                | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| E タイプ 3~3 上顎のみ                 | 6個  | SR18-3HU 206350885    | SR22-3HU 206350886    |
| E タイプ 5~5 フック付 犬歯・小白歯          | 20個 | SR18-55H45 206350856H | SR22-55H45 206350859H |
| R タイプ 3~3 フック付 上顎犬歯のみ          | 12個 | SR18-33HR 206350864   | SR22-33HR 206350867   |
| R タイプ 5~5 上顎犬歯・小白歯フック付き        | 20個 |                       | SR22-55H45R 206350890 |
| R タイプ 上顎5~5/下顎3~3 フック付上顎犬歯・小白歯 | 16個 | SR18-53H45R 206350865 | SR22-53H45R 206350868 |
| R タイプ 5~5 下顎のみ                 | 10個 |                       | SR22-5RL 206350889    |

## S-line(MBT タイプ)

包装：10個

| トルク     | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | タイプ   | フック   | Right/Left | .022スロット                 |
|---------|-----------|-------|---------|-------|-------|------------|--------------------------|
| 1   1   | 17°       | 4°    | 0°      | 3.9   |       | R          | SM22-1117 206350851UR1   |
|         |           |       |         |       |       | L          | SM22-2117 UL1            |
| 2   2   | 10°       | 8°    | 0°      | 4.1   |       | R          | SM22-1210 UR2            |
|         |           |       |         |       |       | L          | SM22-2210 UL2            |
| 3   3   | 0°        | 8°    | 2°      | 4.1   | フック付  | R          | SM22-1300H UR3H          |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SM22-2300H UL3H          |
| 54   45 | -7°       | 0°    | 2°      | 3.9   | フック付  | R          | SM22-1407H UR45H         |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SM22-2407H UL45H         |
| 21   12 | -6°       | 0°    | 0°      | 3.6   |       | R          | SM22-4106 206350851LR12  |
|         |           |       |         |       |       | L          | SM22-3106 LL12           |
|         |           |       | 3.7     | R タイプ |       | L/R        | SM22-3106R 206350860LL12 |
| 3   3   | 0°        | 3°    | 2°      | 3.9   | フック付  | R          | SM22-4300H 206350851LR3H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SM22-3300H LL3H          |
|         |           |       |         | R タイプ |       | R          | SM22-4300R 206350860LR3  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SM22-3300R LL3           |
| 4   4   | -12°      | 2°    | 0°      | 4.0   | フック付  | R          | SM22-4412H 206350851LR4H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SM22-3412H LL4H          |
| 4   4   | -12°      | 0°    | 0°      | 4.0   | R タイプ | R          | SM22-4412R 206350860LR4  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SM22-3412R LL4           |
| 5   5   | -17°      | 0°    | 4°      | 3.8   | フック付  | R          | SR22-4417H 206350857LR4H |
|         |           |       |         |       | フック付  | L          | SR22-3417H LL4H          |
| 5   5   | -17°      | 0°    | 0°      | 4.0   | R タイプ | R          | SR22-4417R 206350866LR4  |
|         |           |       |         | R タイプ |       | L          | SR22-3417R LL4           |

## 1 症例キット

|                                | 包装  | .022スロット              |
|--------------------------------|-----|-----------------------|
| E タイプ 3~3 上顎のみ                 | 6個  | SM22-3HU 206350884    |
| R タイプ 3~3 フック付 上顎犬歯のみ          | 12個 | SM22-33HR 206350861   |
| R タイプ 5~5 上顎犬歯・小白歯フック付き        | 20個 | SM22-55H45R 206350888 |
| R タイプ 上顎5~5/下顎3~3 フック付上顎犬歯・小白歯 | 16個 | SM22-53H45R 206350862 |
| R タイプ 5~5 下顎のみ                 | 10個 | SM22-5RL 206350887    |

医療機器認証番号 301AKBZX00035000 管理

## C-line


BIOCETEC

C-line™

高純度のセラミックを使用したブラケットです。  
セラミックの粒子が非常に細かいため、最適な透明度と強度を実現し、天然歯にマッチします。  
ベース面は独自性の高いデザインで、高い接着強度と容易なディボンディングを可能にしました。

## 最適な強度と透明度

精細なセラミック粒子が、高い強度と天然歯にマッチする透明度を実現。ブラケットの破損が少なく、審美性が高まり術者・患者双方にとってのストレスを軽減することが可能です。

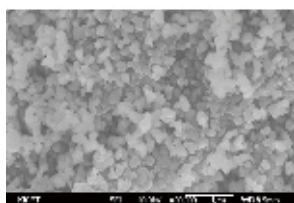

一般的なセラミックより、粒子がとても細かくなっています。

目立ちにくい色調とデザインで天然歯になじみ、ホワイトコーティングワイヤーとの相性も良好です。

※使用ワイヤーはFLIワイヤーです。

## スムーズなスロットエッジ

スロットはラウンドエッジになっており、ブラケットの破折リスクやフリクションを軽減します。



## 高い接着強度と容易なディボンディングを実現したブラケットベース

ブラケットベースは、左右に15°の角度がついたアンダーカットが施されており、高い接着強度と容易なディボンディングが期待できます。



## 歯面にフィットするカントゥアベース

ブラケットベースは、計算されたカントゥアベースで、患者さんの歯面に安定してフィットします。



## 患者さんの快適性を考えたデザイン

ブラケットは丸みを持たせたデザインで、装着時の違和感を軽減します。また、ひし形にデザインされており、歯の形状に対しても自然とマッチし、目立ちにくくなっています。









# C-line

BIOCETEC

C-line™<sup>+</sup>

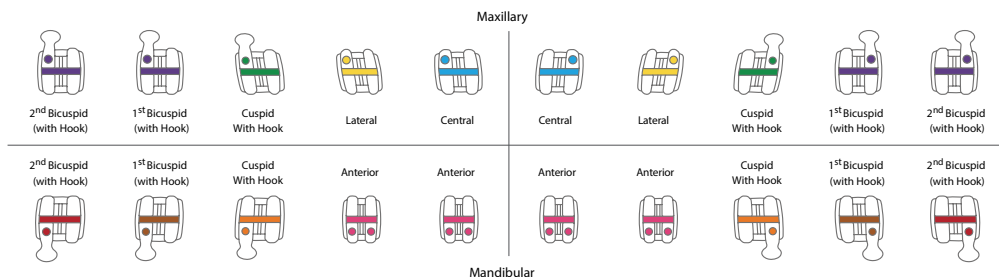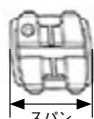

※マーキングには乳清を使用しています。水洗での除去が可能です。

## C-line(ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット                | .022スロット                |
|---------|------|-----------|-------|---------|------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°    | 3.8     |      | R          | CR18-1112 206350845UR1  | CR22-1112 206350848UR1  |
|         |      |           |       |         |      | L          | CR18-2112 UL1           | CR22-2112 UL1           |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°    | 3.8     |      | R          | CR18-1208 UR2           | CR22-1208 UR2           |
|         |      |           |       |         |      | L          | CR18-2208 UL2           | CR22-2208 UL2           |
| 3   3   | 0°   | 11°       | 4°    | 4.4     | フック付 | R          | CR18-1300H UR3H         | CR22-1300H UR3H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CR18-2300H UL3H         | CR22-2300H UL3H         |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 2°    | 3.8     | フック付 | R          | CR18-1407H UR45H        | CR22-1407H UR45H        |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CR18-2407H UL45H        | CR22-2407H UL45H        |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°    | 2.5     |      | R          | CR18-4101 206350845LR12 | CR22-4101 206350848LR12 |
|         |      |           |       |         |      | L          | CR18-3101 LL12          | CR22-3101 LL12          |
| 3   3   | -11° | 7°        | 2°    | 4.2     | フック付 | R          | CR18-4311H LR3H         | CR22-4311H LR3H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CR18-3311H LL3H         | CR22-3311H LL3H         |
| 4   4   | -17° | 0°        | 4°    | 3.8     | フック付 | R          | CR18-4417H LR4H         | CR22-4417H LR4H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CR18-3417H LL4H         | CR22-3417H LL4H         |
| 5   5   | -22° | 0°        | 4°    | 3.8     | フック付 | R          | CR18-4522H LR5H         | CR22-4522H LR5H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CR18-3522H LL5H         | CR22-3522H LL5H         |

## 1症例キット

|                 | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 3~3 フック付 犬歯     | 12個 | CR18-33H 206350846    | CR22-33H 206350849    |
| 5~5 フック付 犬歯・小臼歯 | 20個 | CR18-55H45 206350847H | CR22-55H45 206350850H |

## C-line(MBT タイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .022スロット                |
|---------|------|-----------|-------|---------|------|------------|-------------------------|
| 1   1   | 17°  | 4°        | 0°    | 3.9     |      | R          | CM22-1117 206350842UR1  |
|         |      |           |       |         |      | L          | CM22-2117 UL1           |
| 2   2   | 10°  | 8°        | 0°    | 3.8     |      | R          | CM22-1210 UR2           |
|         |      |           |       |         |      | L          | CM22-2210 UL2           |
| 3   3   | 0°   | 8°        | 2°    | 4.2     | フック付 | R          | CM22-1300H UR3H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CM22-2300H UL3H         |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 2°    | 3.8     | フック付 | R          | CM22-1407H UR45H        |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CM22-2407H UL45H        |
| 21   12 | -6°  | 0°        | 0°    | 3.1     |      | R          | CM22-4106 206350842LR12 |
|         |      |           |       |         |      | L          | CM22-3106 LL12          |
| 3   3   | 0°   | 3°        | 0°    | 4.0     | フック付 | R          | CM22-4300H LR3H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CM22-3300H LL3H         |
| 4   4   | -12° | 2°        | 0°    | 3.8     | フック付 | R          | CM22-4412H LR4H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CM22-3412H LL4H         |
| 5   5   | -17° | 2°        | 0°    | 3.8     | フック付 | R          | CM22-4517H LR5H         |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CM22-3517H LL5H         |

## 1症例キット

|                 | 包装  | .022スロット              |
|-----------------|-----|-----------------------|
| 3~3 フック付 犬歯     | 12個 | CM22-33H 206350843    |
| 5~5 フック付 犬歯・小臼歯 | 20個 | CM22-55H45 206350844H |

## クリスタブレース7

モリタデンタルプロダクツ



CrystaBrace®7

クリスタブレース®7

ガラスと同等の透明性を持つ、機能と審美性を兼ね備えたポリアミド製ブラケットです。

ここに注目!!



ボンディングベース面の改良で  
接着強度アップ

## 1 ガラスのような透明感

患者さんの歯の色調に同化するブラケットボディ

クリスタブレース7はガラスと同等の透過性、屈折率、そしてアッペ数（にじみの少なさ）を有しています。そのため、患者さんの歯の色調に同化します。

## 2 丈夫で長持ち

強度、耐摩耗性、傷つきやすさを大幅に改善

従来の硬質ポリカーボネートと比較し、強度、耐摩耗性、傷つきやすさが大幅に改善されました。

## 3 いつまでも清潔な透明感

よごれや色素の吸着が少なく、いつまでも清潔な透明感を維持

高濃度ターメリック浸透試験においても色素の付着が少ないことが示されました。

## ゴールドスロット

金属スロットにゴールドブレイティングを施すことにより、スロットそのものの目立ちにくさはもちろん、ボディ本体も明るく見え、審美性がより向上します。



## レギュラスロット

金属スロットにメッキを施していないレギュラータイプもございます。







# クリスタブレース7

モリタデンタルプロダクツ

## クリスタブレース7/ ゴールドスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB71001 20688000371001 | CB72001 20688000772001 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71002 71002          | CB72002 72002          |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB71003 71003          | CB72003 72003          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71004 71004          | CB72004 72004          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB71005 71005          | CB72005 72005          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71006 71006          | CB72006 72006          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71009 20688000471009 | CB72009 20688000872009 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71010 71010          | CB72010 72010          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB71018 20688000571018 | CB72018 20688000972018 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71017 71017          | CB72017 72017          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71024 20688000671024 | CB72024 20688001072024 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71023 71023          | CB72023 72023          |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB71007 20688000371007 | CB72007 20688000772007 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71011 20688000471011 | CB72011 20688000872011 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71012 71012          | CB72012 72012          |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB71008 20688000371008 | CB72008 20688000772008 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71013 20688000471013 | CB72013 20688000872013 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71014 71014          | CB72014 72014          |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB71015 20688000571015 | CB72015 20688000972015 |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB71016 71016          | CB72016 72016          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB71019 71019          | CB72019 72019          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71020 71020          | CB72020 72020          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71025 20688000671025 | CB72025 20688001072025 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71026 71026          | CB72026 72026          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB71017 20688000571017 | CB72017 20688000972017 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB71018 71018          | CB72018 72018          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71023 20688000671023 | CB72023 20688001072023 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71024 71024          | CB72024 72024          |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB71021 20688000571021 | CB72021 20688000972021 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71027 20688000671027 | CB72027 20688001072027 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71028 71028          | CB72028 72028          |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB71022 20688000571022 | CB72022 20688000972022 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB71029 20688000671029 | CB72029 20688001072029 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB71030 71030          | CB72030 72030          |

### 1 症例キット

|                     | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|---------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                 | フックなし   | 12個 | CBK71001 20688001171001 | CBK72001 20688001172001 |
| 3~3                 | 犬歯のみフック | 12個 | CBK71004 20688001371004 | CBK72004 20688001372004 |
| 5~5                 | フックなし   | 20個 | CBK71002 20688001271002 | CBK72002 20688001272002 |
| 5~5                 | 犬歯のみフック | 20個 | CBK71005 20688001471005 | CBK72005 20688001472005 |
| 5~5上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK71003 20688001271003 | CBK72003 20688001272003 |

### ※<sup>1</sup> クリスタブレース7 ロスタイプについて

一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。

- 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。
- 下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。
- 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。

### < 1 症例キットについて >

1 症例キットにおいて、複数のトルク / アンギュレーションの選択が可能な部位につきましては、カタログ内に特記事項がある場合を除き、下記の構成となっております。

- ・ 上顎左右犬歯＝トルク 0° / アンギュレーション 10°  
※上顎犬歯 6° アンギュレーションタイプを除く
- ・ 下顎前歯＝トルク -1° / アンギュレーション 0°
- ・ 下顎左右犬歯＝トルク -7° / アンギュレーション 6°

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

## クリスタブレース7

モリタデンタルプロダクツ

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY  
TREATMENTINTRAORAL  
EXTRAORALEXPANSION  
SCREWS

i-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR  
SYSTEMLABORATORY  
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM  
SYSTEMCOA  
SOFTWARE

BOOKS

## クリスタブレース7/ ゴールドスロット (MBT タイプ)

包装 : 10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .022スロット |                |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|----------|----------------|
| 1   1   | 17°  | 4°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB76001  | 206880184UR1   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76002  | 206880184UL1   |
| 2   2   | 10°  | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB76003  | 206880184UR2   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76004  | 206880184UL2   |
| 3   3   | -7°  | 8°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB76005  | 206880184UR3   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76006  | 206880184UL3   |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB76009  | 206880185UR3H  |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB76010  | 206880185UL3H  |
| 4   4   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | L/R        | CB72007  | 20688000772007 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB72011  | 20688000872011 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB72012  | 72012          |
| 5   5   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | L/R        | CB72008  | 20688000772008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB72013  | 20688000872013 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB72014  | 72014          |
| 21   12 | -6°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | L/R        | CB76015  | 206880186L12   |
| 3   3   | -6°  | 3°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB76019  | 206880186LR3   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76020  | 206880186LL3   |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB76025  | 206880187LR3H  |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB76026  | 206880187LL3H  |
| 4   4   | -12° | 2°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB76021  | 206880186LR4   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76022  | 206880186LL4   |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB76027  | 206880187LR4H  |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB76028  | 206880187LL4H  |
| 5   5   | -17° | 2°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB76023  | 206880186LR5   |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB76024  | 206880186LL5   |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB76029  | 206880187LR5H  |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB76030  | 206880187LL5H  |

## 1症例キット

|     | フック       | 包装  | .022スロット |           |
|-----|-----------|-----|----------|-----------|
| 3~3 | フックなし     | 12個 | CBK76001 | 206880188 |
| 3~3 | 犬歯のみフック   | 12個 | CBK76004 | 206880191 |
| 5~5 | フックなし     | 20個 | CBK76002 | 206880189 |
| 5~5 | 犬歯のみフック   | 20個 | CBK76005 | 206880192 |
| 5~5 | 犬歯・小臼歯フック | 20個 | CBK76003 | 206880190 |

## クリスタブレース7/ ゴールドスロット (スタンダードタイプ)

包装 : 10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット | .022スロット       |                        |
|------------------------|-----|-----------|-------|---------|------|------------|----------|----------------|------------------------|
| 21   12 ※              | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB71501  | 20688000171501 | CB72501 20688000172501 |
| 21   12 ※              | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB71502  | 71502          | CB72502 72502          |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB71503  | 71503          | CB72503 72503          |
|                        |     |           |       |         | フック付 | UL/LR      | CB71504  | 20688000271504 | CB72504 20688000272504 |
|                        |     |           |       |         | フック付 | UR/LL      | CB71505  | 71505          | CB72505 72505          |

※上顎側切歯は、患者さんの歯冠サイズに合わせて選択できます。

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理



# クリスタブレース7

モリタデンタルプロダクツ

## クリスタブレース7/レギュラースロット (ロスタイプ)

包装：10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB73001 20688001673001 | CB74001 20688002074001 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73002 73002          | CB74002 74002          |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB73003 73003          | CB74003 74003          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73004 73004          | CB74004 74004          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB73005 73005          | CB74005 74005          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73006 73006          | CB74006 74006          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB73009 20688001773009 | CB74009 20688002174009 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB73010 73010          | CB74010 74010          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB73014 20688001873014 | CB74014 20688002274014 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73013 73013          | CB74013 74013          |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB73007 20688001673007 | CB74007 20688002074007 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      |            |                        |                        |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB73008 73008          | CB74008 74008          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      |            |                        |                        |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB73011 20688001873011 | CB74011 20688002274011 |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB73012 73012          | CB74012 74012          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB73015 73015          | CB74015 74015          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73016 73016          | CB74016 74016          |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB73019 20688001973019 | CB74019 20688002374019 |
|                        |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB73020 73020          | CB74020 74020          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB73013 20688001873013 | CB74013 20688002274013 |
|                        |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB73014 73014          | CB74014 74014          |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB73017 73017          | CB74017 74017          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      |            |                        |                        |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB73018 73018          | CB74018 74018          |
|                        |      |           |       |         | ●  |      |            |                        |                        |

## 1症例キット

|                     | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|---------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                 | フックなし   | 12個 | CBK73001 20688002473001 | CBK74001 20688002474001 |
| 3~3                 | 犬歯のみフック | 12個 | CBK73004 20688002673004 | CBK74004 20688002674004 |
| 5~5                 | フックなし   | 20個 | CBK73002 20688002573002 | CBK74002 20688002574002 |
| 5~5                 | 犬歯のみフック | 20個 | CBK73005 20688002773005 | CBK74005 20688002774005 |
| 5~5上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK73003 20688002573003 | CBK74003 20688002574003 |

## クリスタブレース7/レギュラースロット (スタンダードタイプ)

包装：10個

|           | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|-----------|-----|-----------|-------|---------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12 ※ | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     | R/L        | CB73501 20688001573501 | CB74501 20688001574501 |
| 2   2 ※   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     | R/L        | CB73502 73502          | CB74502 74502          |
| 543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     | R/L        | CB73503 73503          | CB74503 74503          |

※上顎側切歯は、患者さんの歯冠サイズに合わせて選択できます。

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理


## ※<sup>1</sup> クリスタブレース7 ロスタイプについて

一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。

- 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。
- 下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。
- 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。

## クリスタブレース3

モリタデンタルプロダクツ

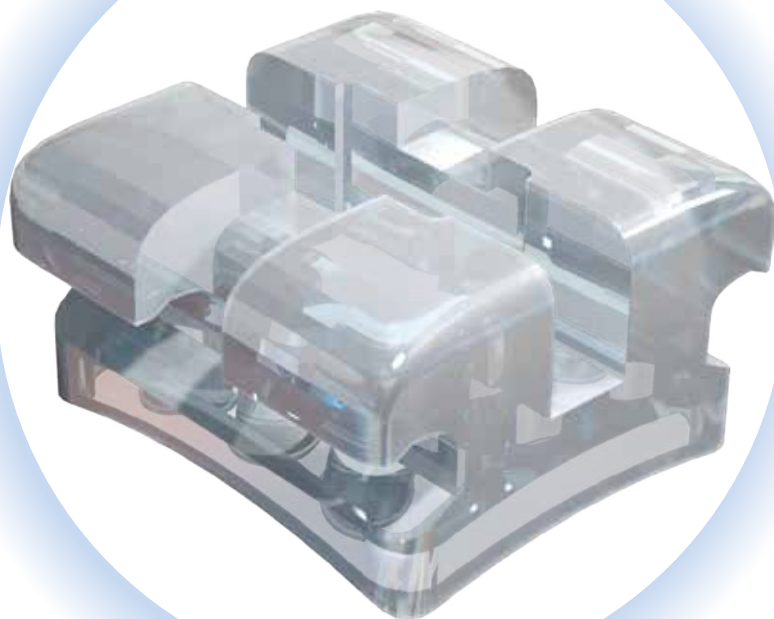CrystaBrace®3  
クリスタブレース®3ボンディングベース面の改良で  
接着強度アップガラスと同等の透明性を持つ、審美性の高い  
ポリアミド製ブラケットです。

## 1 目立たない

ガラスと同等の透明性。歯のシェードにかかわらず、  
ブラケットは目立ちません。

## 2 からだにやさしい

メタルフリーで金属アレルギーの方にも対応。

## 3 経済的

お求めやすい価格で、医院様の材料コストを軽減。

## &lt;1症例キットについて&gt;

1 症例キットにおいて、複数のトルク / アンギュレーションの  
選択が可能な部位につきましては、カタログ内に特記事項がある  
場合を除き、右記の構成となっております。

- ・上顎左右犬歯=トルク 0° / アンギュレーション 10°  
※上顎犬歯 6° アンギュレーションタイプを除く
- ・下顎前歯=トルク -1° / アンギュレーション 0°
- ・下顎左右犬歯=トルク -7° / アンギュレーション 6°



# クリスタブレース3

モリタデンタルプロダクツ

## クリスタブレース3 (ロスタイプ)

包装：10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | ID | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|----------|----|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      | ●  | R          | CB31001 20688003431001 | CB32001 20688003732001 |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31002 31002          | CB32002 32002          |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      | ●  | R          | CB31003 31003          | CB32003 32003          |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31004 31004          | CB32004 32004          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      | ●  | R          | CB31005 31005          | CB32005 32005          |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31006 31006          | CB32006 32006          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      | ●  | R          | CB31012 31012          | CB32012 32012          |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31011 31011          | CB32011 32011          |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | ●  | R/L        | CB31007 31007          | CB32007 32007          |
|                        |      |           |       |          | ●  |            |                        |                        |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | ●  | R/L        | CB31008 31008          | CB32008 32008          |
|                        |      |           |       |          | ●  |            |                        |                        |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      | ●  | R/L        | CB31009 31009          | CB32009 32009          |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      | ●  | R/L        | CB31010 31010          | CB32010 32010          |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      | ●  | R          | CB31013 31013          | CB32013 32013          |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31014 31014          | CB32014 32014          |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      | ●  | R          | CB31011 31011          | CB32011 32011          |
|                        |      |           |       |          | ●  | L          | CB31012 31012          | CB32012 32012          |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      | ●  | R/L        | CB31015 31015          | CB32015 32015          |
|                        |      |           |       |          | ●  |            |                        |                        |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      | ●  | R/L        | CB31016 31016          | CB32016 32016          |
|                        |      |           |       |          | ●  |            |                        |                        |

## 1症例キット

|                     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|---------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                 | 12個 | CBK31001 206880035      | CBK32001 206880038      |
| 5~5                 | 20個 | CBK31002 20688003631002 | CBK32002 20688003932002 |
| 5~5 上顎犬歯6°アンギュレーション | 20個 | CBK31003 31003          | CBK32003 32003          |

## クリスタブレース3 (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|-----|-----------|-------|----------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12 ※              | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB31501 20688002831501 | CB32501 20688003132501 |
| 2   2 ※                | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      | R/L        | CB31502 31502          | CB32502 32502          |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB31503 31503          | CB32503 32503          |

※上顎側切歯は、患者さんの歯冠サイズに合わせて選択できます。

## 1症例キット (上顎側切歯はスパン3.0mm です)

|     | 包装  | .018スロット           | .022スロット           |
|-----|-----|--------------------|--------------------|
| 3~3 | 12個 | CBK31501 206880029 | CBK32501 206880032 |
| 5~5 | 20個 | CBK31502 206880030 | CBK32502 206880033 |

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

## ※<sup>1</sup> クリスタブレース3 ロスタイプについて

一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。


- 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。
- 下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。
- 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。



## クリアブラケット SL+(スーパーロック+) モリタデンタルプロダクツ



ゴールドスロット

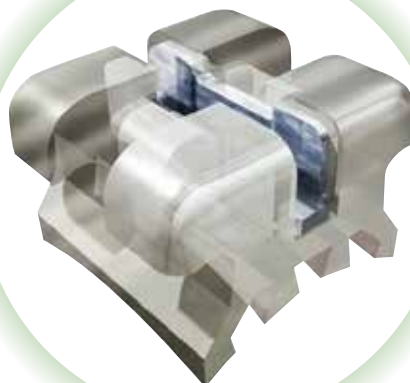

レギュラスロット

浅井保彦先生(岐阜市:浅井矯正歯科)が開発に携わられた  
ポリカーボネート製のプラスチックブラケットです。

### 1 審美性が高く粘りの強い特殊コンポジットボディ

特殊コンポジットボディの採用により、高い審美性と耐久性をそなえております。また歯質より軟らかいポリカーボネート製なので、治療中の対合歯摩耗やディボンディング時のエナメル質へのダメージが軽減されます。

### 2 多くのボンディング材と相性のよいメカニカルベースのデザイン


メカニカルベース面は代表的な化学重合型ボンディング材はもちろん、ほとんどの光重合型ボンディング材でも接着が可能です。

※ハイトルクタイプは、メカニカルベースではないため、光重合型ボンディング材を用いた接着は推奨されません。



### 3 特殊構造のパワースロットを採用

特殊構造のパワースロットにより、ワイヤーのトルクによるスロットの変形やスロットの歪みがおこりにくくなります。また摩擦抵抗を低く抑える設計になっており、より良いワイヤーの滑りが期待できます。

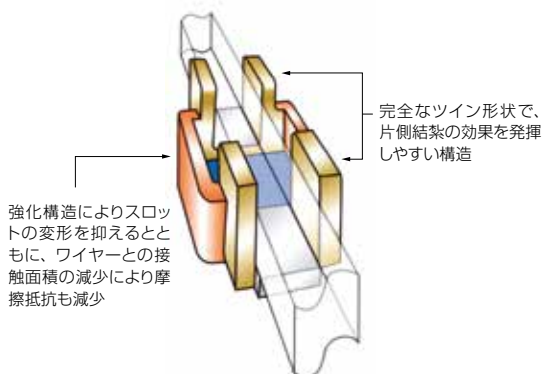

#### <1症例キットについて>

1症例キットにおいて、複数のトルク/アンギュレーションの選択が可能な部位につきましては、カタログ内に特記事項がある場合を除き、下記の構成となっております。

- ・上顎左右犬歯＝トルク 0° / アンギュレーション 10°  
※上顎犬歯 6° アンギュレーションタイプを除く
- ・下顎前歯＝トルク -1° / アンギュレーション 0°  
※アレキサンダータイプを除く
- ・下顎左右犬歯＝トルク -7° / アンギュレーション 6°



# クリアブラケット SL+(スーパーロック+) モリタデンタルプロダクツ

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (ロスタイプ) 包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1   | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB01001 2068800441001 | CB02001 2068800482001 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01002 1002          | CB02002 2002          |
| 2   2   | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB01003 1003          | CB02003 2003          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01004 1004          | CB02004 2004          |
| 3   3   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB01005 1005          | CB02005 2005          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01006 1006          | CB02006 2006          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01009 2068800451009 | CB02009 2068800492009 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01010 1010          | CB02010 2010          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB01018 2068800461018 | CB02018 2068800502018 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01017 1017          | CB02017 2017          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01024 2068800471024 | CB02024 2068800512024 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01023 1023          | CB02023 2023          |
| 4   4   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB01007 2068800441007 | CB02007 2068800482007 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01011 2068800451011 | CB02011 2068800492011 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01012 1012          | CB02012 2012          |
| 5   5   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB01008 2068800441008 | CB02008 2068800482008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01013 2068800451013 | CB02013 2068800492013 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01014 1014          | CB02014 2014          |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB01015 2068800461015 | CB02015 2068800502015 |
|         | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB01016 1016          | CB02016 2016          |
| 3   3   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB01019 1019          | CB02019 2019          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01020 1020          | CB02020 2020          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01025 2068800471025 | CB02025 2068800512025 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01026 1026          | CB02026 2026          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB01017 2068800461017 | CB02017 2068800502017 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB01018 1018          | CB02018 2018          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01023 2068800471023 | CB02023 2068800512023 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01024 1024          | CB02024 2024          |
| 4   4   | -11° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB01021 2068800461021 | CB02021 2068800502021 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01027 2068800471027 | CB02027 2068800512027 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01028 1028          | CB02028 2028          |
| 5   5   | -17° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB01022 2068800461022 | CB02022 2068800502022 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB01029 2068800471029 | CB02029 2068800512029 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB01030 1030          | CB02030 2030          |

## 1 症例キット ※構成については26ページをご覧ください。

|                      | フック     | 包装  | .018スロット               | .022スロット               |
|----------------------|---------|-----|------------------------|------------------------|
| 3~3                  | フックなし   | 12個 | CBK01001 206880060     | CBK02001 206880064     |
| 3~3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK01004 206880062     | CBK02004 206880066     |
| 5~5                  | フックなし   | 20個 | CBK01002 2068800611002 | CBK02002 2068800652002 |
| 5~5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK01005 206880063     | CBK02005 206880067     |
| 5~5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK01003 2068800611003 | CBK02003 2068800652003 |

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (スタンダードタイプ) 包装：10個

|           | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|-----------|-----|-----------|-------|---------|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 21   12   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB03505 2068800403505 | CB04505 2068800404505 |
| 2   2     | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB03501 3501          | CB04501 4501          |
| 543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB03502 3502          | CB04502 4502          |
|           |     |           |       |         | フック付 | UL/LR      | CB03503 2068800413503 | CB04503 2068800414503 |
|           |     |           |       |         | フック付 | UR/LL      | CB03504 3504          | CB04504 4504          |
| 21   12   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB03506 2068800403506 | CB04506 2068800404506 |
| シングル      |     |           |       |         |      |            |                       |                       |

※上顎側切歯は、患者さんの歯冠サイズに合わせて選択できます。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

# クリアブラケット SL+(スーパーロック+) モリタデンタルプロダクツ

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY  
TREATMENTINTRAORAL  
EXTRAORALEXPANSION  
SCREWS

I-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR  
SYSTEMLABORATORY  
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM  
SYSTEMCOA  
SOFTWARE

BOOKS

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (アレキサンダータイプ)

包装：10個

|                      | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック | Right/Left | .018スロット |               |
|----------------------|------|-----------|-------|---------|----|-----|------------|----------|---------------|
| 1   1 ※ <sup>1</sup> | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |     | R          | CB01001  | 2068800441001 |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB01002  | 1002          |
| 2   2 ※ <sup>1</sup> | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |     | R          | CB01003  | 1003          |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB01004  | 1004          |
| 3   3                | -1°  | 10°       | 0°    | 6.3     | ●  |     | R          | CB05001  | 2068800725001 |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB05002  | 5002          |
| 4   4                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB05003  | 5003          |
| 5   5                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB05004  | 5004          |
| 21   12              | -1°  | 0°        | 0°    | 4.4     | ●  |     | R/L        | CB05005  | 2068800725005 |
|                      | -5°  | 0°        | 0°    | 4.4     | ●  |     | R/L        | CB05006  | 5006          |
| 3   3                | -7°  | 6°        | 0°    | 6.3     | ●  |     | R          | CB05007  | 5007          |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB05008  | 5008          |
| 4   4                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB05009  | 5009          |
| 5   5                | -17° | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB05010  | 5010          |

※<sup>1</sup>アレキサンダータイプの上顎切歯はロスタイプの上顎切歯と同一商品になります。

### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット |           |
|-----|-----|----------|-----------|
| 3~3 | 12個 | CBK05001 | 206880075 |
| 5~5 | 20個 | CBK05002 | 206880076 |

※1症例キットの下顎切歯のトルクは -5° となります。

## クリアブラケット/ ゴールドスロット (ハイトルクタイプ)


包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット |               |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|----------|---------------|
| 1   1   | 22°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB07001  | 2068800687001 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB07002  | 7002          |
| 2   2   | 14°  | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB07003  | 7003          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB07004  | 7004          |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB07005  | 7005          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB07006  | 7006          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB07008  | 2068800697008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB07009  | 7009          |
| 54   45 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB07007  | 2068800687007 |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB07010  | 2068800707010 |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB07011  | 7011          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB07012  | 7012          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB07015  | 2068800717015 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB07016  | 7016          |
| 4   4   | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB07013  | 2068800707013 |
| 5   5   | -14° | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB07014  | 7014          |

※ハイトルクタイプのベースはSL(スーパーロック)になっておりません。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

### クリアブラケット カラーコード

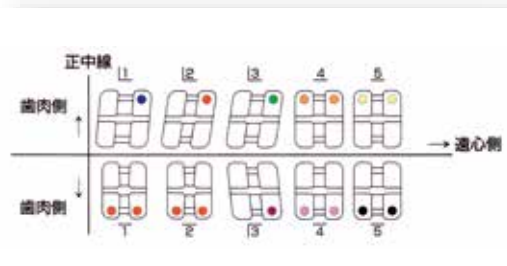

注：一部異なるブラケットがございます。



# クリアブラケット SL+(スーパーロック+) モリタデンタルプロダクツ

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1   | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB11001 20688008211001 | CB12001 20688008612001 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11002 11002          | CB12002 12002          |
| 2   2   | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB11003 11003          | CB12003 12003          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11004 11004          | CB12004 12004          |
| 3   3   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB11005 11005          | CB12005 12005          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11006 11006          | CB12006 12006          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11009 20688008311009 | CB12009 20688008712009 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11010 11010          | CB12010 12010          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB11018 20688008411018 | CB12018 20688008812018 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11017 11017          | CB12017 12017          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11024 20688008511024 | CB12024 20688008912024 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11023 11023          | CB12023 12023          |
| 4   4   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB11007 20688008211007 | CB12007 20688008612007 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11011 20688008311011 | CB12011 20688008712011 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11012 11012          | CB12012 12012          |
| 5   5   | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB11008 20688008211008 | CB12008 20688008612008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11013 20688008311013 | CB12013 20688008712013 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11014 11014          | CB12014 12014          |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB11015 20688008411015 | CB12015 20688008812015 |
|         | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB11016 11016          | CB12016 12016          |
| 3   3   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB11019 11019          | CB12019 12019          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11020 11020          | CB12020 12020          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11025 20688008511025 | CB12025 20688008912025 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11026 11026          | CB12026 12026          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB11017 20688008411017 | CB12017 20688008812017 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB11018 11018          | CB12018 12018          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11023 20688008511023 | CB12023 20688008912023 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11024 11024          | CB12024 12024          |
| 4   4   | -11° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB11021 20688008411021 | CB12021 20688008812021 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11027 20688008511027 | CB12027 20688008912027 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11028 11028          | CB12028 12028          |
| 5   5   | -17° | 0°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R/L        | CB11022 20688008411022 | CB12022 20688008812022 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB11029 20688008511029 | CB12029 20688008912029 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB11030 11030          | CB12030 12030          |

### 1症例キット ※構成については26ページをご覧ください。

|                      | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|----------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                  | フックなし   | 12個 | CBK11001 206880052      | CBK12001 206880056      |
| 3~3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK11004 206880054      | CBK12004 206880058      |
| 5~5                  | フックなし   | 20個 | CBK11002 20688005311002 | CBK12002 20688005712002 |
| 5~5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK11005 206880055      | CBK12005 206880059      |
| 5~5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK11003 20688005311003 | CBK12003 20688005712003 |

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|-----|-----------|-------|---------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12                | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB13505 20688007913505 | CB14505 20688008114505 |
| 2   2<br>21   12       | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB13501 20688007713501 | CB14501 20688007914501 |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB13502 13502          | CB14502 14502          |
|                        |     |           |       |         | フック付 | UL/LR      | CB13503 20688007813503 | CB14503 20688008014503 |
|                        |     |           |       |         | フック付 | UR/LL      | CB13504 13504          | CB14504 14504          |
| 21   12<br>シングル        | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB13506 20688007913506 | CB14506 20688008114506 |

※上顎側切歯は、患者さんの歯冠サイズに合わせて選択できます。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

# クリアブラケット SL+(スーパーロック+) モリタデンタルプロダクツ

## クリアブラケット SL+/レギュラースロット (アレキサンダータイプ)

包装：10個

|                      | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック | Right/Left | .018スロット |                |
|----------------------|------|-----------|-------|---------|----|-----|------------|----------|----------------|
| 1   1 ※ <sup>1</sup> | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |     | R          | CB11001  | 20688008211001 |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB11002  | 11002          |
| 2   2 ※ <sup>1</sup> | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |     | R          | CB11003  | 11003          |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB11004  | 11004          |
| 3   3                | -1°  | 10°       | 0°    | 6.3     | ●  |     | R          | CB15001  | 20688009415001 |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB15002  | 15002          |
| 4   4                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB15003  | 15003          |
| 5   5                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB15004  | 15004          |
| 21   12              | -1°  | 0°        | 0°    | 4.4     | ●  |     | R/L        | CB15005  | 20688009415005 |
|                      | -5°  | 0°        | 0°    | 4.4     | ●  |     | R/L        | CB15006  | 15006          |
| 3   3                | -7°  | 6°        | 0°    | 6.3     | ●  |     | R          | CB15007  | 15007          |
|                      |      |           |       |         | ●  |     | L          | CB15008  | 15008          |
| 4   4                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB15009  | 15009          |
| 5   5                | -17° | 0°        | 0°    | 5.1     | ●  |     | R/L        | CB15010  | 15010          |

※<sup>1</sup>アレキサンダータイプの上顎切歯はロスタイプの上顎切歯と同一商品になります。

### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット |           |
|-----|-----|----------|-----------|
| 3~3 | 12個 | CBK15001 | 206880073 |
| 5~5 | 20個 | CBK15002 | 206880074 |

※1症例キットの下顎切歯のトルクは-5° となります。

## クリアブラケット/レギュラースロット (ハイトルクタイプ)


包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット |                |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|----------|----------------|
| 1   1   | 22°  | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB17001  | 20688009017001 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB17002  | 17002          |
| 2   2   | 14°  | 8°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | CB17003  | 17003          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB17004  | 17004          |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB17005  | 17005          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB17006  | 17006          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB17008  | 20688009117008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB17009  | 17009          |
| 54   45 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB17007  | 20688009017007 |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.0     | ●  |      | R/L        | CB17010  | 20688009217010 |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R          | CB17011  | 17011          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | CB17012  | 17012          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | CB17015  | 20688009317015 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | CB17016  | 17016          |
| 4   4   | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB17013  | 20688009217013 |
| 5   5   | -14° | 0°        | 0°    | 3.5     | ●  |      | R/L        | CB17014  | 17014          |

※ハイトルクタイプのベースはSL(スーパーロック)になっておりません。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

### クリアブラケット カラーコード

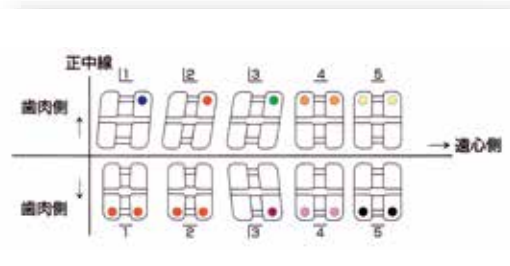

注：一部異なるブラケットがございます。





# クリアスナップ

モリタデンタルプロダクツ

## 装着するだけで、ローフリクション治療を実現する結紮装置

### 1 セルフ／ノンセルフライゲーション切り替え可能

スナップをクリスタブレースシリーズ、クリアブラケットへ装着するだけで必要な部位や必要な治療ステージだけをローフリクションにすることができます。

### 2 装置の破損によるブラケットの付け替えが不要

クリアスナップとブラケットは完全なセパレートタイプなので、一体型にありがちなセルフライゲेटィング部分が破損したためブラケットを付け替えなければならない、という心配がありません。

### 3 カラーコードで部位が分かりやすい

スナップの持ち手部分には部位ごとにカラーマーキングがあり、識別しやすくなっています。

クリスタブレース7との組み合わせ



クリスタブレース3との組み合わせ



クリアブラケットとの組み合わせ



経済性を考慮し、  
3種類のブラケットへの  
共通使用を実現しました。

## クリアスナップ

モリタデンタルプロダクツ


## クリアスナップの装着方法



スナップをお手持ちのモスキート  
プライヤーなどで把持します。



歯頸部側のウイングに掛けます。

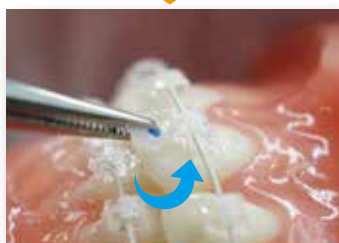

歯面に押し付けるように切端側のウイング  
に押し込みます。



回転させてホームベース形状の持ち手を  
撤去します。

装着完了

## 小臼歯メタルブラケット用スナップ

小臼歯部位はメタルブラケットを併用される先生  
方のご要望にお応えし、小臼歯メタルブラケット  
用のスナップもございます。

小臼歯メタルブラケット用スナップは全部位共用  
の為、経済的にお使いいただけます。





# クリアスナップ

## モリタデンタルプロダクツ

### クリアスナップ ロスタイプ レギュラー

|         | ID | フック  | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |               |
|---------|----|------|------------|----|-------------|---------------|
| 1   1   | ●  |      | R          | 10 | CSRUR1      | 206880113UR1  |
|         | ●  |      | L          |    | CSRUL1      | UL1           |
| 2   2   | ●  |      | R          | 10 | CSRUR2      | UR2           |
|         | ●  |      | L          |    | CSRUL2      | UL2           |
| 3   3   | ●  |      | R          | 10 | CSRUR3      | UR3           |
|         | ●  |      | L          |    | CSRUL3      | UL3           |
|         | ●  | フック付 | R          |    | CSRUR3H     | 206880115UR3H |
|         | ●  | フック付 | L          |    | CSRUL3H     | UL3H          |
| 54   45 | ●  |      | R/L        | 20 | CSRU45      | 206880116U45  |
| 21   12 | ●  |      | R/L        | 20 | CSRL12      | 206880116L12  |
| 3   3   | ●  |      | R          | 10 | CSRLR3      | 206880117LR3  |
|         | ●  |      | L          |    | CSRL3       | LL3           |
|         | ●  | フック付 | R          |    | CSRLR3H     | 206880118LR3H |
|         | ●  | フック付 | L          |    | CSRL3H      | LL3H          |
| 54   45 | ●  |      | R/L        | 20 | CSRL45      | 206880116L45  |

### 1症例キット5〜5

|     | フック   | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|-----|-------|------------|----|-------------|-----------|
| 5〜5 | フックなし |            | 20 | CSRK        | 206880112 |

### クリアスナップ スタンダードタイプ レギュラー

|           | フック  | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|-----------|------|------------|----|-------------|-----------|
| 切歯・犬歯・小臼歯 |      | R/L        | 20 | CSSK        | 206880110 |
|           | フック付 | R/L        |    | CSSHK       | 206880111 |

### クリアスナップ メタルブラケット用(小臼歯)

|                    | フック | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|--------------------|-----|------------|----|-------------|-----------|
| 54   45<br>54   45 |     | R/L        | 20 | CSR45M      | 206880180 |

### クリアスナップ ロスタイプ ニュー

|         | ID | フック | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |              |
|---------|----|-----|------------|----|-------------|--------------|
| 1   1   | ●  |     | R          | 10 | CSRNU1      | 206880119UR1 |
|         | ●  |     | L          |    | CSRNU1      | UL1          |
| 2   2   | ●  |     | R          | 10 | CSRNU2      | UR2          |
|         | ●  |     | L          |    | CSRNU2      | UL2          |
| 3   3   | ●  |     | R          | 10 | CSRNU3      | UR3          |
|         | ●  |     | L          |    | CSRNU3      | UL3          |
| 54   45 | ●  |     | R/L        | 20 | CSRNU45     | 206880120U45 |
| 21   12 | ●  |     | R/L        | 20 | CSRNL12     | 206880120L12 |
| 3   3   | ●  |     | R          | 10 | CSRNL3      | 206880121LR3 |
|         | ●  |     | L          |    | CSRNL3      | LL3          |
| 54   45 | ●  |     | R/L        | 20 | CSRNL45     | 206880122    |

医療機器承認番号 21500BZZ00512000 管理

#### ・レギュラーの利点

治療初期の叢生が強い部位でも装着が可能です。

#### ・ニューの利点

ローテーションコントロールの確実性が向上しました。

スライディングによる  
犬歯の遠心移動用に  
フック付きもご用意し  
ております。



## アリスブラケット プラスティックブラケット

RMO

POLYURETHANE BRACKET

*Alice* アリス

A  
L  
I  
C  
E  
Admirable  
Low-Profile  
Impressive  
Clear-Composite  
Esthetic

アリスブラケットは  
ポリウレタン製のブラケットで  
コストパフォーマンスに優れた  
審美ブラケットです。



### ■ ポリウレタン

プラスチックの中では機械的強度が大きく  
耐久性に優れています。

### ■ 優れた審美性

透明感があるため天然歯になじみます。

### ■ 安価

審美性のあるブラケットの中ではお求めやすい  
価格です。



### ■ ロープロファイル

上顎中切歯のハイトは約1.9mm。患者さんの  
違和感は少なくなります。

### ■ 接着が容易


ベース部のアンダーカットにより機械的維持力  
があるため脱落が少ない構造です。

### ■ ディボンディング

ディボンディング時にベースが一部だけ残る  
ことがなく扱い易くなっています。

### ■ 対合歯に優しい

下顎前歯切端側のウイングが薄くなっている  
ので対合歯に当たりにくくなっています(ロス  
タイプのみ)。

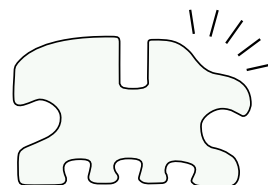



# アリスブラケット プラスティックブラケット

RMO

## アリス (スタンダードタイプ)

包装：10個

|         | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 3.9      | R/L        | C02000 2068604442000 | C02020 2068604442020 |
| 2   2   | 3.3      | R/L        | C02002 2002          | C02022 2022          |
| 3   3   | 3.3      | R/L        | C02004 2004          | C02024 2024          |
| 54   45 | 3.3      | R/L        | C02006 2006          | C02026 2026          |
| 21   12 | 2.8      | R/L        | C02008 2008          | C02028 2028          |

### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 5~5 | 20個 | KC02000 2068604452000 | KC02020 2068604452020 |
| 3~3 | 12個 | KC02010 2068604462010 | KC02030 2068604462030 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

## アリス (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン(mm) | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|------|-----------|---------|---------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°      | 3.9     | R          | C01000 2068604401000 | C01100 2068604401100 |
|         |      |           |         |         | L          | C01001 1001          | C01101 1101          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°      | 3.4     | R          | C01002 1002          | C01102 1102          |
|         |      |           |         |         | L          | C01003 1003          | C01103 1103          |
| 3   3   | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.3     | R          | C01004 1004          | C01104 1104          |
|         |      |           |         |         | L          | C01005 1005          | C01105 1105          |
|         | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.3     | フック付 R     | C01006 1006          | C01106 1106          |
|         |      |           |         |         | フック付 L     | C01007 1007          | C01107 1107          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 0°      | 3.3     | R/L        | C01008 1008          | C01108 1108          |
|         |      |           |         |         | フック付 R/L   | C01010 1010          | C01110 1110          |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°      | 2.8     | R/L        | C01022 2068604401022 | C01122 2068604401122 |
| 3   3   | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.3     | R          | C01024 1024          | C01124 1124          |
|         |      |           |         |         | L          | C01025 1025          | C01125 1125          |
|         | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.3     | フック付 R     | C01026 1026          | C01126 1126          |
|         |      |           |         |         | フック付 L     | C01027 1027          | C01127 1127          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 0°      | 3.4     | R/L        | C01028 1028          | C01128 1128          |
|         |      |           |         |         | フック付 R/L   | C01030 1030          | C01130 1130          |
| 5   5   | -22° | 0°        | 0°      | 3.4     | R/L        | C01032 1032          | C01132 1132          |
|         |      |           |         |         | フック付 R/L   | C01034 1034          | C01134 1134          |

### 1症例キット


|               | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 5~5 フックなし     | 20個 | KC01000 2068604411000 | KC01100 2068604411100 |
| フック付 犬歯のみ     | 20個 | KC01001 1001          | KC01101 1101          |
| フック付 犬歯・小臼歯   | 20個 | KC01002 1002          | KC01102 1102          |
| 3~3 フックなし     | 12個 | KC01010 2068604421010 | KC01110 2068604421110 |
| フック付          | 12個 | KC01011 1011          | KC01111 1111          |
| 3~3 上顎のみ フック付 | 6個  | KC01012 2068604431012 | KC01112 2068604431112 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

MO ... Mesial Offset

医療機器認証番号 223AKBZX00062000 管理

### マーキングカラー ロスタイプ

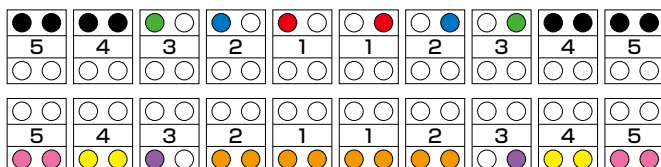



## シンシアブレースⅡ ジルコニアセラミックブラケット

横手精工


*Sincere BraceⅡ*

## ■ ジルコニアの高い強度と粘り強さ

シンシアブレースⅡはジルコニアセラミック製ブラケットで、高い強度としなやかさが特長です。その優れた強度と性質から「白いメタル」とも呼ばれ、その特長を活かしてスマートなシルエットになっています。ジルコニアセラミックは生体親和性に優れており、金属アレルギーをお持ちの方にも使用できます。

## ■ 結紮しやすい形状

ウイングの厚みが薄く長く作られており、結紮線や結紮用Oリングが入りやすくなっています。ハイトは2.1mm\*です。\*ロスタイプ 上顎側切歯のみ2.2mm

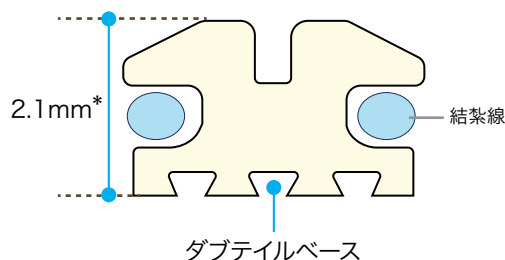


## ■ 安定した接着力

ダブテイルベース（逆三角形のアンダーカット）を採用し、接着材の種類に左右されることなく安定した接着力を発揮します。

## &lt;ロスタイプについて&gt;

これまでロスタイプのベースは「近遠心方向」への曲面のみでしたが、犬歯～小臼歯部位に「切端－歯頸部方向」のカーブを付与し、より歯面にフィットするようリデザインしました。

新たに曲面構造を付与しました

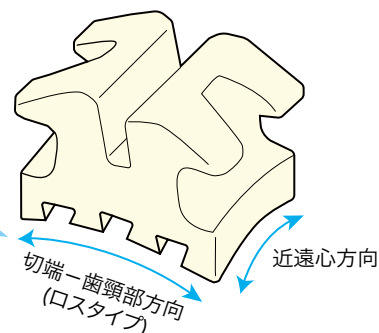



# シンシアブレースⅡ ジルコニアセラミックブラケット

横手精工

## シンシアブレースⅡ (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                    | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット |               |
|--------------------|----------|------------|----------|---------------|
| 1   1              | 3.4      | R/L        | SIS1010  | 2068606431010 |
| 2   2              | 3.0      | R/L        | SIS1020  | 2068606431020 |
| 3   3              | 3.0      | R/L        | SIS1030  | 2068606431030 |
| 54   45<br>54   45 | 3.0      | R/L        | SIS1040  | 2068606431040 |
| 21   12            | 2.9      | R/L        | SIS1050  | 2068606431050 |


### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット |           |
|-----|-----|----------|-----------|
| 5~5 | 20個 | SISK1000 | 206860644 |
| 3~3 | 12個 | SISK1010 | 645       |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

### マーキングカラー

#### .018スタンダード

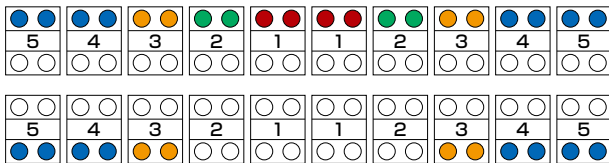

## シンシアブレースⅡ (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット |               |
|---------|------|-----------|---------|----------|------------|----------|---------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°      | 3.4      | R          | SIS2010  | 2068604832010 |
|         |      |           |         |          | L          | SIS2011  | 2011          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°      | 3.0      | R          | SIS2020  | 2068604832020 |
|         |      |           |         |          | L          | SIS2021  | 2021          |
| 3   3   | -2°  | 11°       | 0°      | 3.0      | R          | SIS2030  | 2068604832030 |
|         |      |           |         |          | L          | SIS2031  | 2031          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 0°      | 3.0      | R/L        | SIS2040  | 2068604832040 |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°      | 2.9      | R/L        | SIS2050  | 2068604832050 |
| 3   3   | -11° | 7°        | 0°      | 3.0      | R          | SIS2060  | 2068604832060 |
|         |      |           |         |          | L          | SIS2061  | 2061          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 0°      | 3.0      | R/L        | SIS2070  | 2068604832070 |
| 5   5   | -22° | 0°        | 0°      | 3.0      | R/L        | SIS2080  | 2068604832080 |


### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット |           |
|-----|-----|----------|-----------|
| 5~5 | 20個 | SISK2000 | 206860484 |
| 3~3 | 12個 | SISK2010 | 206860485 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

### マーキングカラー

#### .018ロス

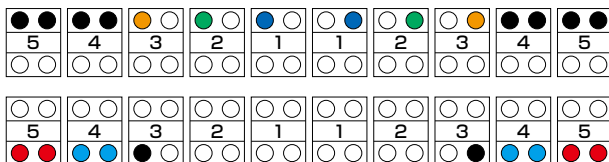

医療機器認証番号 302AKBZX00056000 管理

## FLI クリア セラミックブラケット

RMO



FLI クリアは、高い透明感を保ちながら光の反射をおさえた目立ちにくいセラミックブラケットです。審美性はもちろんのこと、強度や操作性といった機能面と患者さんの快適性にこだわったデザインが特長です。マッシュルームベースを採用し、安定したボンディングとスムーズなディボンディングも期待できます。

マーキングカラー  
ロスタイプ

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

## FLI クリア(ロスタイプ)

包装：5個

|         |  | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット |               | .022スロット |               |
|---------|--|------|-----------|---------|----------|------|------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1   1   |  | 12°  | 5°        | 0°      | 3.9      |      | R          | Q07200   | 2068604707200 | Q07300   | 2068604707300 |
|         |  |      |           |         |          |      | L          | Q07201   | 7201          | Q07301   | 7301          |
| 2   2   |  | 8°   | 9°        | 0°      | 3.4      |      | R          | Q07202   | 7202          | Q07302   | 7302          |
|         |  |      |           |         |          |      | L          | Q07203   | 7203          | Q07303   | 7303          |
| 3   3   |  | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.3      |      | R          | Q07204   | 7204          | Q07304   | 7304          |
|         |  |      |           |         |          |      | L          | Q07205   | 7205          | Q07305   | 7305          |
|         |  | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.3      | フック付 | R          | Q07206   | 7206          | Q07306   | 7306          |
|         |  |      |           |         |          | フック付 | L          | Q07207   | 7207          | Q07307   | 7307          |
| 54   45 |  | -7°  | 0°        | 0°      | 3.3      |      | R/L        | Q07208   | 7208          | Q07308   | 7308          |
|         |  |      |           |         |          | フック付 | R/L        | Q07210   | 7210          | Q07310   | 7310          |
| 21   12 |  | 0°   | 0°        | 0°      | 2.8      |      | R/L        | Q07220   | 2068604707220 | Q07320   | 2068604707320 |
| 3   3   |  | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.3      |      | R          | Q07224   | 7224          | Q07324   | 7324          |
|         |  |      |           |         |          |      | L          | Q07225   | 7225          | Q07325   | 7325          |
|         |  | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.3      | フック付 | R          | Q07226   | 7226          | Q07326   | 7326          |
|         |  |      |           |         |          | フック付 | L          | Q07227   | 7227          | Q07327   | 7327          |
| 4   4   |  | -17° | 0°        | 0°      | 3.4      |      | R/L        | Q07228   | 7228          | Q07328   | 7328          |
|         |  |      |           |         |          | フック付 | R/L        | Q07230   | 7230          | Q07330   | 7330          |
| 5   5   |  | -22° | 0°        | 0°      | 3.4      |      | R/L        | Q07232   | 7232          | Q07332   | 7332          |
|         |  |      |           |         |          | フック付 | R/L        | Q07234   | 7234          | Q07334   | 7334          |

## 1 症例キット

|                 | 包装  | .018スロット |               | .022スロット |               |
|-----------------|-----|----------|---------------|----------|---------------|
| 5~5 フックなし       | 20個 | KQ07200  | 2068604717200 | KQ07300  | 2068604717300 |
| 5~5 フック付 犬歯のみ   | 20個 | KQ07201  | 7201          | KQ07301  | 7301          |
| 5~5 フック付 犬歯・小臼歯 | 20個 | KQ07202  | 7202          | KQ07302  | 7302          |
| 3~3 上顎のみフック付    | 6個  | KQ07203  | 2068604737203 | KQ07303  | 2068604737303 |
| 3~3 フックなし       | 12個 | KQ07204  | 2068604727204 |          |               |
| 3~3 フック付        | 12個 | KQ07205  | 7205          |          |               |

MO… Mesial Offset

チューブ・FLI チューブにつきましては 57 ページ以降を御覧下さい。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 223AKBZX00132000 管理



## シグネチャーⅢ セラミックブラケット

RMO



シグネチャーⅢはロングセラーのセラミックブラケットです。ダブルテイルベースを採用し、接着材の種類や歯面形状に左右されることなく安定したボンディング・ディボンディングを実現しました。

### シグネチャーⅢ (スタンダードタイプ)

包装：5個

|         | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 3.9      | R/L        | Q09000 2068507519000 | Q09020 2068507519020 |
| 2   2   | 3.3      | R/L        | Q09002 9002          | Q09022 9022          |
| 3   3   | 3.3      | R/L        | Q09004 9004          | Q09024 9024          |
| 54   45 | 3.3      | R/L        | Q09006 9006          | Q09026 9026          |
| 21   12 | 2.8      | R/L        | Q09008 9008          | Q09028 9028          |

### 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット          | .022スロット          |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 3~3 | 12個 | KQ09042           | KQ09060 206850755 |
| 5~5 | 20個 | KQ09042 206850754 | KQ09062 206850757 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

### シグネチャーⅢ (ロスタイプ)

包装：5個

|         | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|------|-----------|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°      | 3.8      | R          | Q03010 2068507443010 | Q03030 2068507443030 |
|         |      |           |         |          | L          | Q03011 3011          | Q03031 3031          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°      | 3.2      | R          | Q03012 3012          | Q03032 3032          |
|         |      |           |         |          | L          | Q03013 3013          | Q03033 3033          |
| 3   3   | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.2      | R          | Q03018 3018          | Q03038 3038          |
|         |      |           |         |          | L          | Q03017 3017          | Q03037 3037          |
|         | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.2      | フック付 R     | Q03014 3014          | Q03034 3034          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | Q03015 3015          | Q03035 3035          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 0°      | 3.3      | R/L        | Q03019 3019          | Q03039 3039          |
|         |      |           |         |          | フック付 R/L   | Q03016 3016          | Q03036 3036          |
| 21   12 | 0    | 0°        | 0°      | 2.8      | R/L        | Q03029 2068507443029 | Q03049 2068507443049 |
| 3   3   | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.2      | R          | Q03025 3025          | Q03045 3045          |
|         |      |           |         |          | L          | Q03026 3026          | Q03046 3046          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | Q03021 3021          | Q03041 3041          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | Q03022 3022          | Q03042 3042          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 0°      | 3.3      | R/L        | Q03027 3027          | Q03047 3047          |
|         |      |           |         |          | フック付 R/L   | Q03023 3023          | Q03043 3043          |
| 5   5   | -22° | 0°        | 0°      | 3.3      | R/L        | Q03028 3028          | Q03048 3048          |
|         |      |           |         |          | フック付 R/L   | Q03024 3024          | Q03044 3044          |

### 1症例キット

|                 | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 3~3 フックなし       | 12個 |                       | KQ03040 2068507453040 |
| 3~3 フック付        | 12個 | KQ03022 2068507453022 | KQ03042 206850748     |
| 3~3 上顎のみ フック付   | 6個  | KQ03013 206850746     | KQ03033 206850749     |
| 5~5 フックなし       | 20個 | KQ03024 2068507473024 | KQ03044 2068507503044 |
| 5~5 フック付 犬歯のみ   | 20個 | KQ03025 3025          | KQ03045 3045          |
| 5~5 フック付 犬歯・小臼歯 | 20個 | KQ03026 3026          | KQ03046 3046          |

MO … Mesial Offset

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器承認番号 20400BZY01242000 管理

## メタルブラケット

モリタデンタルプロダクツ



コンパクトなボディと丸みを帯びたデザインで  
患者さんの治療中の負担を軽減します。

削り出しによる製造により、金属強度が強くスロットの潰れや開きなどの変化が少ないブラケットです。

## メタルブラケット / レギュラスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | ID | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|---------|------|-----------|-------|---------|----|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1   | 14°  | 5°        | 0°    | 3.2     | ●  |      | R          | MBR1001 2068800951001 | MBR2001 2068800992001 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1002 1002          | MBR2002 2002          |
| 2   2   | 7°   | 8°        | 0°    | 2.6     | ●  |      | R          | MBR1003 1003          | MBR2003 2003          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1004 1004          | MBR2004 2004          |
| 3   3   | 0°   | 10°       | 0°    | 2.9     | ●  |      | R          | MBR1005 1005          | MBR2005 2005          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1006 1006          | MBR2006 2006          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1009 2068800961009 | MBR2009 2068801002009 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1010 1010          | MBR2010 2010          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R          | MBR1017 2068800971017 | MBR2017 2068801012017 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1016 1016          | MBR2016 2016          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1023 2068800981023 | MBR2023 2068801022023 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1022 1022          | MBR2022 2022          |
| 4   4   | -7°  | 0°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R/L        | MBR1007 2068800951007 | MBR2007 2068800992007 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1011 2068800961011 | MBR2011 2068801002011 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1012 1012          | MBR2012 2012          |
| 5   5   | -7°  | 0°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R/L        | MBR1008 2068800951008 | MBR2008 2068800992008 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1013 2068800961013 | MBR2013 2068801002013 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1014 1014          | MBR2014 2014          |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°    | 2.3     | ●  |      | R/L        | MBR1015 2068800971015 | MBR2015 2068801012015 |
| 3   3   | -7°  | 6°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R          | MBR1018 1018          | MBR2018 2018          |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1019 1019          | MBR2019 2019          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1024 2068800981024 | MBR2024 2068801022024 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1025 1025          | MBR2025 2025          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R          | MBR1016 2068800971016 | MBR2016 2068801012016 |
|         |      |           |       |         | ●  |      | L          | MBR1017 1017          | MBR2017 2017          |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1022 2068800981022 | MBR2022 2068801022022 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1023 1023          | MBR2023 2023          |
| 4   4   | -11° | 0°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R/L        | MBR1020 2068800971020 | MBR2020 2068801012020 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1026 2068800981026 | MBR2026 2068801022026 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1027 1027          | MBR2027 2027          |
| 5   5   | -17° | 0°        | 0°    | 2.9     | ●  |      | R/L        | MBR1021 2068800971021 | MBR2021 2068801012021 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | R          | MBR1028 2068800981028 | MBR2028 2068801022028 |
|         |      |           |       |         | ●  | フック付 | L          | MBR1029 1029          | MBR2029 2029          |

## 1 症例キット

|           | 包装  | .018スロット               | .022スロット               |
|-----------|-----|------------------------|------------------------|
| 5~5 フックなし | 20個 | MBRK1001 2068801031001 | MBRK1002 2068801031002 |

医療機器認証番号 21000BZZ00656000 管理

## &lt;1 症例キットについて&gt;

1 症例キットにおいて、複数のトルク / アンギュレーションの選択が可能な部位につきましては、カタログ内に特記事項がある場合を除き、右記の構成となっております。

- ・上顎左右犬歯＝トルク 0° / アンギュレーション 10°
- ・下顎左右犬歯＝トルク -7° / アンギュレーション 6°





# メタルブラケット／クリアスナップ

モリタデンタルプロダクツ

## メタルブラケット スタンダードタイプ

包装：10個

|         | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|---------|-----|-----------|-------|----------|-----|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.3      |     | R/L        | MBS1501 2068801041501 | MBS2501 2068801042501 |
| ※大バージョン |     |           |       | 3.7      |     | R/L        | MBS1502 1502          | MBS2502 2502          |
| 2   2   | 0°  | 0°        | 0°    | 2.7      |     | R/L        | MBS1503 1503          | MBS2503 2503          |
| 3   3   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.1      |     | R/L        | MBS1504 1504          | MBS2504 2504          |
| 54   45 | 0°  | 0°        | 0°    | 2.9      |     | R/L        | MBS1505 1505          | MBS2505 2505          |
| 21   12 | 0°  | 0°        | 0°    | 2.3      |     | R/L        | MBS1506 1506          | MBS2506 2506          |
| 6   6   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.7      |     | UL/LR      | MBS1507 1507N         |                       |
|         |     |           |       |          |     | UR/LL      | MBS1508 1508N         |                       |

## 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット               | .022スロット               |
|-----|-----|------------------------|------------------------|
| 5~5 | 20個 | MBSK1001 2068801051001 | MBSK1002 2068801051002 |

※スタンダードタイプの1症例キットについて、上顎中切歯は大バージョンとなります。

医療機器認証番号 21000BZZ00656000 管理

## 〈関連器材〉

### 小臼歯メタルブラケット用スナップ

小臼歯部位はメタルブラケットを併用される先生方のご要望にお応えし、

小臼歯メタルブラケット用のスナップもございます。

小臼歯メタルブラケット用スナップは全部位共用の為、経済的にお使いいただけます。



## クリアスナップ メタルブラケット用(小臼歯)

|         | Right/Left | 入数 | .018/.022共通      |
|---------|------------|----|------------------|
| 54   45 | R/L        | 20 | CSR45M 206880180 |

医療機器承認番号 21500BZZ00512000 管理

## ブラケットケース



ブラケットやチューブが上下顎 1~7番まで収納できるプラスチックケースで、10~20症例分の収納が可能です。

コンパクトなデザインでチェアサイドでも場所をとらず、ブラケット類の収納に大変便利です。


| 寸法 (cm)          | 包装 | 商品番号          |
|------------------|----|---------------|
| W18.2× D13× H2.6 | 1  | BKC 206850193 |

## シナジーブラケット

RMO

## ■ トリートメントタイムの短縮

3対のウィングがローテーションコントロールを容易にします。  
 スロットエンドが開いているのでレクタングラーワイヤーの早期装着が可能です。

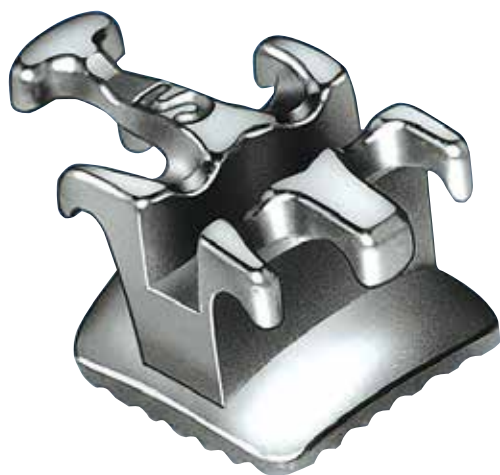

シナジーH.S.ブラケット

## シナジーブラケットの4大特長

- フリーフリクション
- 曲面構造で摩擦が小さい
- ハイトが低く患者さんに優しい
- 力のコントロールが容易



センター掛け



片掛け



2個掛け



スタンダード



8の字掛け

## シナジーH.S. (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | スパン (mm) | ハイト (mm) | .018スロット             | .022スロット             |
|------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 1   1                  | 3.6      | 1.6      | M07600 2068603937600 | M07620 2068603937620 |
| 2   2                  | 3.2      | 1.6      | M07601 7601          | M07621 7621          |
| 543   345<br>543   345 | 3.2      | 1.6      | M07604 7604          | M07624 7624          |
|                        | 3.2      | フック付     | M07606 7606          | M07626 7626          |
| 21   12                | 2.0      | 1.6      | M07610 7610          | M07630 7630          |

## 1 症例キット

|                | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 5~5 フックなし      | 20個 | KM07600 2068504227600 | KM07620 2068504227620 |
| 5~5 フック付犬歯のみ   | 20個 | KM07601 7601          | KM07621 7621          |
| 5~5 フック付犬歯・小臼歯 | 20個 | KM07602 7602          | KM07622 7622          |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器承認番号 20500BZY00861000 管理



# シナジィブラケット

RMO

## シナジィ (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|------|-----------|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°      | 3.6      | R          | M02300 2068603902300 | M02400 2068603902400 |
|         |      |           |         |          | L          | M02301 2301          | M02401 2401          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°      | 3.2      | R          | M02302 2302          | M02402 2402          |
|         |      |           |         |          | L          | M02303 2303          | M02403 2403          |
| 3   3   | 0°   | 11°       | 4° MO   | 3.2      | R          | M02304 2304          | M02404 2404          |
|         |      |           |         |          | L          | M02305 2305          | M02405 2405          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M02306 2306          | M02406 2406          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M02307 2307          | M02407 2407          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 2° DO   | 3.2      | R          | M02308 2308          | M02408 2408          |
|         |      |           |         |          | L          | M02309 2309          | M02409 2409          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M02310 2310          | M02410 2410          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M02311 2311          | M02411 2411          |
| 1   1   | -1°  | 2°        | 0°      | 2.2      | R          | M02320 2068603902320 | M02420 2068603902420 |
|         |      |           |         |          | L          | M02321 2321          | M02421 2421          |
| 2   2   | -1°  | 2°        | 0°      | 2.2      | R          | M02322 2322          | M02422 2422          |
|         |      |           |         |          | L          | M02323 2323          | M02423 2423          |
| 3   3   | -11° | 5°        | 2° MO   | 3.2      | R          | M02324 2324          | M02424 2424          |
|         |      |           |         |          | L          | M02325 2325          | M02425 2425          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M02326 2326          | M02426 2426          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M02327 2327          | M02427 2427          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 4° DO   | 3.2      | R          | M02328 2328          | M02428 2428          |
|         |      |           |         |          | L          | M02329 2329          | M02429 2429          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M02330 2330          | M02430 2430          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M02331 2331          | M02431 2431          |
| 5   5   | -22° | 0°        | 4° DO   | 3.2      | R          | M02332 2332          | M02432 2432          |
|         |      |           |         |          | L          | M02333 2333          | M02433 2433          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M02334 2334          | M02434 2434          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M02335 2335          | M02435 2435          |

## 1 症例キット

|                | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 5~5 フックなし      | 20個 | KM02300 2068504202300 | KM02400 2068504202400 |
| 5~5 フック付犬歯のみ   | 20個 | KM02301 2301          | KM02401 2401          |
| 5~5 フック付犬歯・小臼歯 | 20個 | KM02302 2302          | KM02402 2402          |

MO … Mesial Offset DO … Distal Offset

医療機器承認番号 20500BZY00861000 管理

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

## ミニトラスブラケット

RMO

ミニトラスブラケットは CAD/CAM デザインによる M.I.M（金属粉末射出成形法）で精密に製造されたコンパクトで丸みを基調にしたメタルブラケットです。

必要にして十分なスパンを確保しつつ、全体的にエッジを排除し、違和感を軽減、患者さんに優しい形状で、操作性にも優れています。

## ミニトラス（アレキサンダータイプ）パーティカルスロット付（.018×.020）

包装：10個

|                                                                                     | トルク  | アンギュレーション | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|----------|---------------|
| <u>1   1</u>                                                                        | 14°  | 5°        | 3.6      | R          | M01600   | 2068603541600 |
|    |      |           |          | L          | M01601   | 1601          |
| <u>2   2</u>                                                                        | 7°   | 8°        | 2.9      | R          | M01602   | 1602          |
|                                                                                     |      |           |          | L          | M01603   | 1603          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 R     | M01604   | 1604          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 L     | M01605   | 1605          |
| <u>3   3</u>                                                                        | -3°  | 10°       | 6.1      | R          | M01606   | 1606          |
|    |      |           |          | L          | M01607   | 1607          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 R     | M01608   | 1608          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 L     | M01609   | 1609          |
| <u>54   45</u>                                                                      | -7°  | 0°        | 5.1      | R/L        | M01610   | 1610          |
|   |      |           |          |            |          |               |
| <u>21   12</u>                                                                      | -5°  | 0°        | 4.5      | R/L        | M01620   | 2068603551620 |
|  |      |           |          | フック付 R/L   | M01624   | 1624          |
| <u>3   3</u>                                                                        | -7°  | 6°        | 6.1      | R          | M01626   | 1626          |
|  |      |           |          | L          | M01627   | 1627          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 R     | M01628   | 1628          |
|                                                                                     |      |           |          | フック付 L     | M01629   | 1629          |
| <u>4   4</u>                                                                        | -11° | 0°        | 5.1      | R/L        | M01630   | 1630          |
|  |      |           |          |            |          |               |
| <u>5   5</u>                                                                        | -17° | 0°        | 5.1      | R/L        | M01634   | 1634          |

## 1症例キット

|              | 包装  | .018スロット          |
|--------------|-----|-------------------|
| 5~5 フックなし    | 20個 | KM01600 206850212 |
| 5~5 フック付犬歯のみ | 20個 | KM01601 206850213 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

医療機器承認番号 20500BZY00861000 管理


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



# FLI ツイン

RMO

FLI ツインはシンプルで伝統的なツインメタルブラケットです。患者さんにとって快適な丸みを帯びた形態と歯牙に合ったベースデザインで、ボンディングが効率的になります。

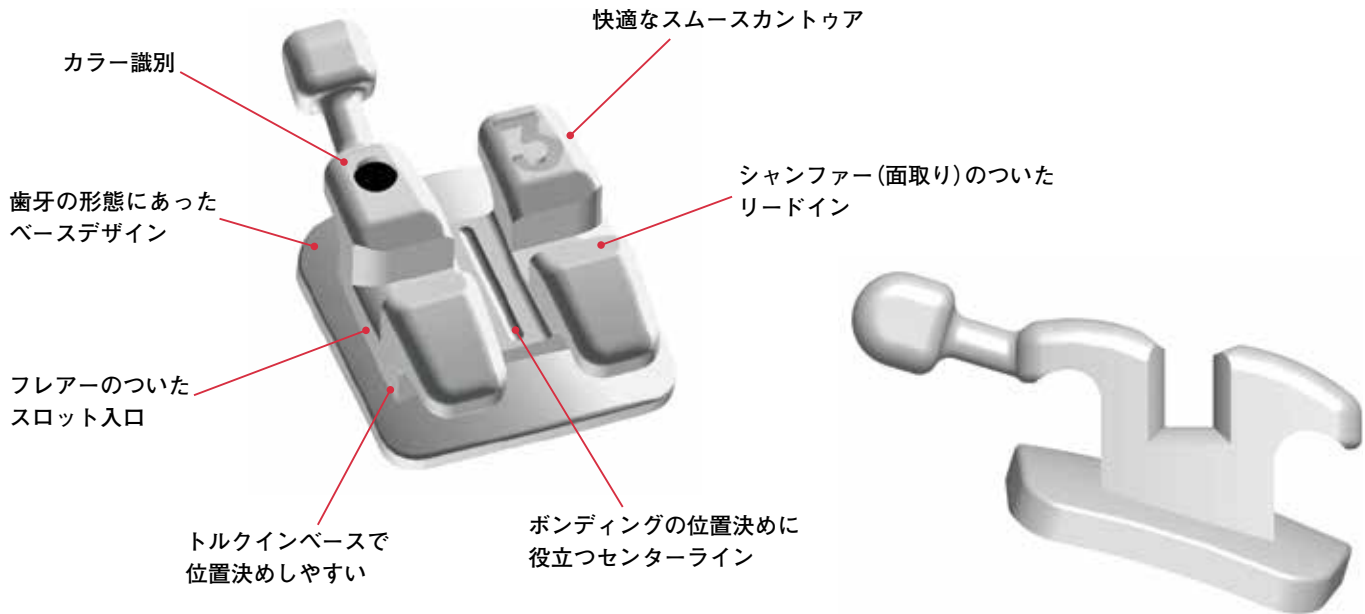

## FLI ツイン(MBT タイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | ディスタルオフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット             | .022スロット             |
|---------|------|-----------|------------|---------|------|------------|----------------------|----------------------|
| 1   1   | 17°  | 4°        | 0°         | 3.6     |      | R          | M05000 2068604865000 | M05100 2068604865100 |
|         |      |           |            |         |      | L          | M05001 5001          | M05101 5101          |
| 2   2   | 10°  | 8°        | 0°         | 2.9     |      | R          | M05002 5002          | M05102 5102          |
|         |      |           |            |         |      | L          | M05003 5003          | M05103 5103          |
| 3   3   | -7°  | 8°        | 0°         | 2.9     | フック付 | R          | M05006 5006          | M05106 5106          |
|         |      |           |            |         | フック付 | L          | M05007 5007          | M05107 5107          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 0°         | 2.9     | フック付 | R          | M05010 5010          | M05110 5110          |
|         |      |           |            |         | フック付 | L          | M05011 5011          | M05111 5111          |
| 21   12 | -6°  | 0°        | 0°         | 2.4     |      | R/L        | M05020 2068604865020 | M05120 2068604865120 |
| 3   3   | -6°  | 3°        | 0°         | 2.9     | フック付 | R          | M05026 5026          | M05126 5126          |
|         |      |           |            |         | フック付 | L          | M05027 5027          | M05127 5127          |
| 4   4   | -12° | 2°        | 0°         | 2.9     | フック付 | R          | M05030 5030          | M05130 5130          |
|         |      |           |            |         | フック付 | L          | M05031 5031          | M05131 5131          |
| 5   5   | -17° | 2°        | 0°         | 2.9     | フック付 | R          | M05034 5034          | M05134 5134          |
|         |      |           |            |         | フック付 | L          | M05035 5035          | M05135 5135          |

## 1 症例キット

|          | 包装  | .018スロット              | .022スロット              |
|----------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 5~5 フック付 | 20個 | KM05002 2068604875002 | KM05102 2068604875102 |

※ FLI チューブはロスタイプのみで、MBT タイプでのご用意はございません。

※ チューブ・FLI チューブにつきましては 57 ページ以降を御覧ください。


医療機器認証番号 223AKBZX00130000 管理



## インテグラブラケット

RMO

## インテグラブラケット

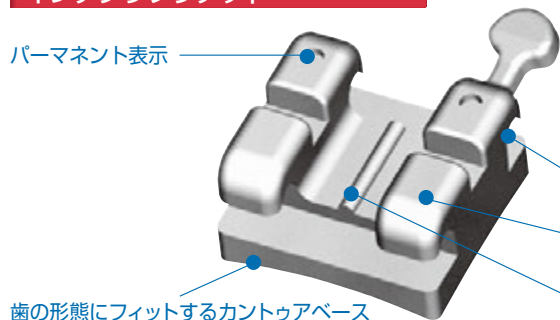

インテグラは M.I.M. (金属粉末射出成形法) で製造されたベース一体型メタルブラケットです。  
シンプルにして必要十分な機能を備えたデザインは快適性を重視しロープロファイル化されています。  
またボンディング機能を十分確保したベース設計によりスムーズなプレイスメントが可能です。

容易な結紮を可能にするデザイン

ロープロファイル&amp;スムーズデザイン

クリニカルクラウンアキスを考慮したセンター表示

## インテグラ (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | ローテーション | スパン (mm) | Right/Left | .018 スロット             | .022 スロット             |
|---------|------|-----------|---------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°      | 3.6      | R          | M09100 206860410M9100 | M09200 206860410M9200 |
|         |      |           |         |          | L          | M09101 M9101          | M09201 M9201          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°      | 2.9      | R          | M09102 M9102          | M09202 M9202          |
|         |      |           |         |          | L          | M09103 M9103          | M09203 M9203          |
| 3   3   | 2°   | 10°       | 4° MO   | 2.9      | R          | M09104 M9104          | M09204 M9204          |
|         |      |           |         |          | L          | M09105 M9105          | M09205 M9205          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M09106 M9106          | M09206 M9206          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M09107 M9107          | M09207 M9207          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 2° DO   | 2.9      | R          | M09108 M9108          | M09208 M9208          |
|         |      |           |         |          | L          | M09109 M9109          | M09209 M9209          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M09110 M9110          | M09210 M9210          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M09111 M9111          | M09211 M9211          |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°      | 2.3      | R/L        | M09120 206860410M9120 | M09220 206860410M9220 |
| 3   3   | -11° | 7°        | 2° MO   | 2.9      | R          | M09122 M9122          | M09222 M9222          |
|         |      |           |         |          | L          | M09123 M9123          | M09223 M9223          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M09124 M9124          | M09224 M9224          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M09125 M9125          | M09225 M9225          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 4° DO   | 2.9      | R          | M09126 M9126          | M09226 M9226          |
|         |      |           |         |          | L          | M09127 M9127          | M09227 M9227          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M09128 M9128          | M09228 M9228          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M09129 M9129          | M09229 M9229          |
| 5   5   | -22° | 0°        | 4° DO   | 2.9      | R          | M09130 M9130          | M09230 M9230          |
|         |      |           |         |          | L          | M09131 M9131          | M09231 M9231          |
|         |      |           |         |          | フック付 R     | M09132 M9132          | M09232 M9232          |
|         |      |           |         |          | フック付 L     | M09133 M9133          | M09233 M9233          |

## 1 症例キット

|                | 包装  | .018 スロット               | .022 スロット               |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 5~5            | 20個 | KM09100 206850923KM9100 | KM09200 206850923KM9200 |
| 5~5 フック付犬歯のみ   | 20個 | KM09101 KM9101          | KM09201 KM9201          |
| 5~5 フック付犬歯・小白歯 | 20個 | KM09102 KM9102          | KM09202 KM9202          |

MO ... Mesial Offset DO ... Distal Offset

チューブにつきましては57ページ以降を御覧ください。


医療機器承認番号 20500BZY00861000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



# BSC ブラケット

カンノ

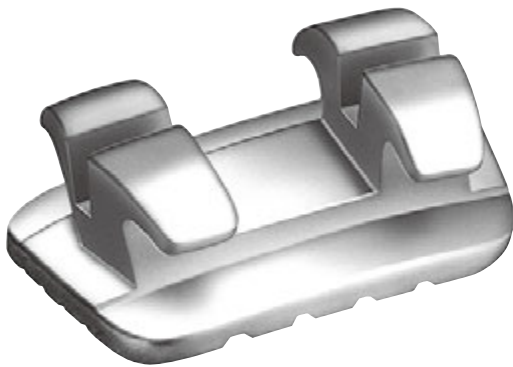

BSC ブラケットはスタンダードエッジワイズをベースにした診断に直結したシステムで構成されたワンピースメタルブラケットです。

ロープロファイル化とセミウェッジにデザインされたハイトはわずか1.7mmに設定され、さらに結紮しやすくするため、ウイング下にエリアが確保されています。またインターブラケットスパンを十分得られるよう、ブラケットの近遠心の幅はエキストラワイドとワイドの中間型を採用しています。

犬歯用ブラケットには、フックなしのタイプと遠心移動用フック付タイプの2種類を用意しました。

## トルクの特徴

ブラケットは全てマット仕上げになっており、トルク付ブラケットは、分かり易くカラーコードになっております。

さらにトルクインディケーターが判別を容易にします。

| カラーコード | トルクインディケーター | 1   | 2   | 3  |
|--------|-------------|-----|-----|----|
| レッド    | 2本          | 22° | 14° |    |
| イエロー   | 1本          | 14° | 7°  |    |
| ブルー    | 1本          |     |     | 7° |

## BSC ブラケット

包装：10個

|                                                                                     | トルク | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-----------|
| 1   1                                                                               | 0°  | 4.0      | R/L        | BSC-100   | 206350495 |
|  | 14° | 4.0      | R/L        | BSC-102   | 206850623 |
|                                                                                     | 22° | 4.0      | R/L        | BSC-104   | 206850624 |
| 2   2                                                                               | 0°  | 3.2      | R/L        | BSC-200   | 206350496 |
|  | 7°  | 3.2      | R/L        | BSC-202   | 206850626 |
|                                                                                     | 14° | 3.2      | R/L        | BSC-204   | 206850627 |
| 3   3                                                                               | 0°  | 3.8      | R/L        | BSC-300   | 206350497 |
|  |     | 3.8      | フック付 R     | BSC-300HR | 206850629 |
|                                                                                     |     | 3.8      | フック付 L     | BSC-300HL | 206850628 |
| 4   4                                                                               | 0°  | 3.4      | R/L        | BSC-400   | 206350498 |
|  | 0°  | 3.4      | R/L        | BSC-500   | 206350499 |
| 5   5                                                                               | 0°  | 2.4      | R/L        | BSC-101   | 206850622 |
|  | 0°  | 2.4      | R/L        | BSC-201   | 206850625 |
| 1   1                                                                               | 0°  | 2.4      | R/L        | BSC-101   | 206850622 |
| 2   2                                                                               | 0°  | 2.4      | R/L        | BSC-201   | 206850625 |
| 3   3                                                                               | 7°  | 3.8      | R/L        | BSC-301   | 206850630 |
|  |     | 3.8      | フック付 R     | BSC-301HR | 206850632 |
|                                                                                     |     | 3.8      | フック付 L     | BSC-301HL | 206850631 |
| 4   4                                                                               | 0°  | 3.4      | R/L        | BSC-401   | 206850633 |
|  | 0°  | 3.4      | R/L        | BSC-501   | 206850634 |
| 5   5                                                                               | 0°  | 3.4      | R/L        | BSC-501   | 206850634 |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

## カンノ クラシックブラケット

カンノ

## カンノ クラシックブラケット

独自の切り出し加工により製造された、シンプルなメタルブラケットです。

※.022スロットでのご用意はございません。

## カンノ クラシックブラケット (スタンダードタイプ/フックなし)

包装：10個

|         |                                                                                   | 1.9mm ハイット |          |          |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|
|         |                                                                                   | トルク        | スパン (mm) | .018スロット |               |
| 1   1   |  | 0°         | 3.2      | KCB1010  | 2068509781010 |
| 2   2   |  | 0°         | 2.5      | KCB1020  | 1020          |
| 3   3   |  | 0°         | 2.8      | KCB1030  | 1030          |
| 54   45 |  | 0°         | 2.7      | KCB1040  | 1040          |
| 21   12 |  | 0°         | 2.3      | KCB1050  | 1050          |

\* 1 症例キットによる販売はございません。

## カンノ クラシックブラケット (ロスタイプ/フックなし)

包装：10個

| 部位      | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット |               |
|---------|------|-----------|-------|----------|------------|----------|---------------|
| 1   1   | 12°  | 5°        | 0°    | 3.2      | R          | KCB2010  | 2068502592010 |
|         |      |           |       |          | L          | KCB2011  | 2011          |
| 2   2   | 8°   | 9°        | 0°    | 2.5      | R          | KCB2020  | 2020          |
|         |      |           |       |          | L          | KCB2021  | 2021          |
| 3   3   | -2°  | 9°        | 0°    | 2.8      | R          | KCB2030  | 2030          |
|         |      |           |       |          | L          | KCB2031  | 2031          |
| 54   45 | -7°  | 0°        | 0°    | 2.7      | R/L        | KCB2040  | 2040          |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°    | 2.3      | R/L        | KCB2050  | 2050          |
| 3   3   | -11° | 7°        | 0°    | 2.8      | R          | KCB2060  | 2060          |
|         |      |           |       |          | L          | KCB2061  | 2061          |
| 4   4   | -17° | 0°        | 0°    | 2.7      | R/L        | KCB2070  | 2070          |
| 5   5   | -22° | 0°        | 0°    | 2.7      | R/L        | KCB2080  | 2080          |

## 1 症例キット

|     | 包装  | .018スロット |           |
|-----|-----|----------|-----------|
| 5~5 | 20個 | KCBK2000 | 206850275 |

## マーキングカラー

## .018ロス

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



# ワンピースブラケット／大臼歯用ブラケット

## ワンピースブラケット

包装：10個

|          |     | 1.7mm ハイット |              |          |             | 1.9mm ハイット |              |
|----------|-----|------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|
| スパン (mm) |     | .018スロット   |              | .022スロット |             | .018スロット   |              |
|          | 4.0 | AE-01      | 20635093001  | AT-01    | 20635093101 | HAE-01     | 20635003501  |
|          | 3.2 | AE-01S     | 20635093001S |          |             | HAE-01S    | 20635003501S |
|          | 2.6 | AE-01S     | 20635093001S |          |             | HAE-01S    | 20635003501S |
|          | 3.2 | AE-02      | 20635093002  | AT-02    | 20635093102 | HAE-02     | 20635003502  |
|          | 2.6 | AE-02S     | 20635093002S |          |             | HAE-02S    | 20635003502S |
|          | 2.0 | AE-02S     | 20635093002S |          |             | HAE-02S    | 20635003502S |
|          | 3.8 | AE-03      | 20635093003  | AT-03    | 20635093103 | HAE-03     | 20635003503  |
|          | 3.0 | AE-03S     | 20635093003S |          |             | HAE-03S    | 20635003503S |
|          | 2.4 | AE-03S     | 20635093003S |          |             | HAE-03S    | 20635003503S |
|          | 3.4 | AE-45      | 20635093045  | AT-45    | 20635093145 | HAE-45     | 20635003545  |
|          | 2.4 | BE-12      | 20635093212  | BT-12    | 20635093312 | HBE-12     | 20635003712  |
|          | 2.0 | BE-12      | 20635093212  | BT-12    | 20635093312 | HBE-12     | 20635003712  |
|          | 3.8 | BE-03      | 20635093203  | BT-03    | 20635093303 | HBE-03     | 20635003703  |
|          | 3.0 | BE-03S     | 20635093203S |          |             | HBE-03S    | 20635003703S |
|          | 2.4 | BE-03S     | 20635093203S |          |             | HBE-03S    | 20635003703S |
|          | 3.4 | BE-45      | 20635093245  | BT-45    | 20635093345 | HBE-45     | 20635003745  |
|          |     |            |              |          |             |            |              |
|          |     |            |              |          |             |            |              |

チューブにつきましては57ページ以降を御覧下さい。

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

## ワンピースブラケットエクストリームワイド 018/022 スタンダードタイプ

包装：10個

|  |       | A (mm) | B (mm) | C (mm) | スパン (mm) | .018スロット | .022スロット  |
|--|-------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
|  | 6/6/6 | 3.7    | 4.5    | 3.4    | 4.5      | AE06EXW  | 206860416 |
|  | 6/6/6 |        |        |        |          | AT06EXW  | 206860545 |

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

## 大臼歯用ブラケット

包装：10個

|  |       | トルク | アンギュレーション | ディスタルオフセット | スパン (mm) | .018スロット  |
|--|-------|-----|-----------|------------|----------|-----------|
|  | 6/6/6 | 0°  | 0°        | 10°        | 4.6      | KAE06     |
|  | 6/6/6 |     |           |            |          | 206350954 |

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

## .036スロットブラケット

GMR3636 (GUMMETAL .036" × .036") を用いて、舌側からの側方拡大に使用します。

### 第一大臼歯用 WELD ブラケット 036

包装：10個

|  |     | トルク | スロット          | スパン | ウェルド / DBS | 商品番号      |
|--|-----|-----|---------------|-----|------------|-----------|
|  | 10° | 10° | .036" × .036" | 4mm | ウェルド       | AE036W    |
|  |     |     |               |     |            | 206860176 |

### 第一大臼歯用 DBS ブラケット 036

包装：10個

|  |     | トルク | スロット          | スパン | ウェルド / DBS | 商品番号      |
|--|-----|-----|---------------|-----|------------|-----------|
|  | 10° | 10° | .036" × .036" | 4mm | DBS        | AE036B    |
|  |     |     |               |     |            | 206860147 |

※ GMR3636につきましては、85ページを御覧下さい。

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

## chivita/シングルブラケット/チューブラ/C-HOOK ブラケット


## chivita (チヴィタ)

モリタデンタルプロダクツ

Polyamide Single Bracket

chivita

- チヴィター -

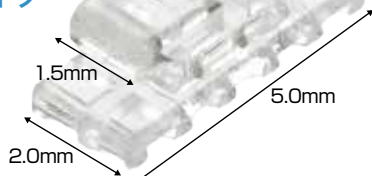

シングルブラケット chivita (チヴィタ) は、クリスタブレースシリーズと同じポリアミド樹脂を使用したシングルプラスチックブラケットです。



臨床写真提供：名古屋矯正歯科診療所様


|                | 包装 | 商品番号             |
|----------------|----|------------------|
| chivita (チヴィタ) | 10 | SBC018 206880193 |

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

## ワンピースシングルブラケット

## ワンピースシングルブラケット(カンノ)

包装：10個
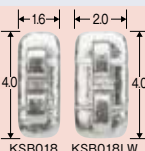
|                                                                                   | トルク | スパン (mm) | スロット          | 商品番号   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|-----------|
|  | 0°  | 0.8      | .018" × .025" | KSB018 | 206860170 |
|  | 0°  | 0.8      | .022" × .026" | KSB022 | 206860298 |



LW  
(ロングウィングワイドベース)

0° 0.8 .018" × .025" KSB018LW 206860408

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

## チューブラ (シングルブラケット&amp;チューブ)

チューブとしてもブラケットとしても使用できます。

## チューブラ(カンノ)

包装：10個

|                                                                                     | トルク | スロット                                          | スパン   | ウェルド / DBS | 商品番号    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|
|  | 0°  | .018" × .018" (チューブ)<br>.018" × .025" (ブラケット) | 0.8mm | DBS        | KSBT018 | 206860424 |

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理







## C-HOOK ブラケット

アンカースクリューやアライナーと併用が可能です。

フックの向きは2種類があり、上下左右を問わず、部位に合わせたボンディングが可能です。

## C-HOOK ブラケット(カンノ)

包装：10個
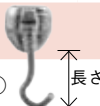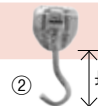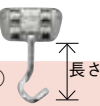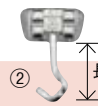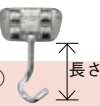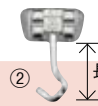
| *1                                                                                  | スロット            | 長さ     | ウェルド / DBS | 商品番号       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|
|  | ① .022" × .025" | 5.5mm  | DBS        | DBSHB1     | 2068601711 |
|  | ② .022" × .025" | 5.5mm  | DBS        | DBSHB2     | 2          |
| 大白歯用*2                                                                              | スロット            | 長さ     | ウェルド / DBS | 商品番号       |            |
|  | ① .018" × .025" | 6.45mm | DBS        | DBSHMB1    | 2068607311 |
|  | ② .018" × .025" | 6.45mm | DBS        | DBSHMB2    | 2          |
|  | ① .022" × .028" | 6.45mm | DBS        | DBSH022MB1 | 2068607291 |
|  | ② .022" × .028" | 6.45mm | DBS        | DBSH022MB2 | 2          |

\*1 医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

\*2 医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理





# KSL システム

カンノ

## 独自のセルフライゲーティングメカニズム

着実な蓋の保持と耐久性があります。



KSL システムは、パッシブタイプのセルフゲーティングリソナルシステムです。

0.016" 以下のワイヤーを使用することでフリクションフリーになり、早いレベリングが期待できます。ハイトは1.7mm ~ 2.1mm と低く抑えられているため、口腔内での違和感が軽減されます。

また、結紮が可能な構造となっているため、最終ステージでエラスティックを使用する際に、簡単に結紮を行うことができます。

### KSL ブラケット

包装：10個

|                 |  |  | トルク     | スパン (mm) | スロット | 商品番号          |        |               |
|-----------------|--|--|---------|----------|------|---------------|--------|---------------|
| 前歯部用            |  |  | 321 123 | 55°      | 1.5  | .018" × .025" | KSU123 | 206850261U123 |
|                 |  |  | 321 123 | 40°      | 1.2  | .018" × .025" | KSL123 | L123          |
| 小臼歯部用           |  |  | 54 45   | 8°       | 1.4  | .018" × .025" | KSU45  | U45           |
|                 |  |  | 54 45   | 0°       | 1.4  | .018" × .025" | KSL45  | L45           |
| 第一大臼歯用<br>フック付き |  |  | 6       | 8°       | 3.6  | .018" × .025" | KSU06R | 206850262U06R |
|                 |  |  | 6       | 8°       | 3.6  | .018" × .025" | KSU06L | U06L          |
|                 |  |  | 6       | 0°       | 3.6  | .018" × .025" | KSL06R | L06R          |
|                 |  |  | 6       | 0°       | 3.6  | .018" × .025" | KSL06L | L06L          |
| 第二大臼歯用<br>フック付き |  |  | 7       | 8°       | 2.8  | .018" × .025" | KSU07R | U07R          |
|                 |  |  | 7       | 8°       | 2.8  | .018" × .025" | KSU07L | U07L          |
|                 |  |  | 7       | 0°       | 2.8  | .018" × .025" | KSL07R | L07R          |
|                 |  |  | 7       | 0°       | 2.8  | .018" × .025" | KSL07L | L07L          |

在庫限りで販売終了

| 商品番号    | 商品名               | 包装  | モリタコード    |
|---------|-------------------|-----|-----------|
| KSK0500 | KSLシステム5-5キット上顎のみ | 10個 | 206850265 |
| KSK1000 | KSLシステム5-5キット     | 20個 | 206850264 |
| KSK2000 | KSLシステム7-7キット     | 28個 | 206850263 |


医療機器認証番号 20700BZZ01012000 管理

## HS ブラケット L

カンノ

シングルブラケットリンガルの新デザイン

## H/S Bracket L

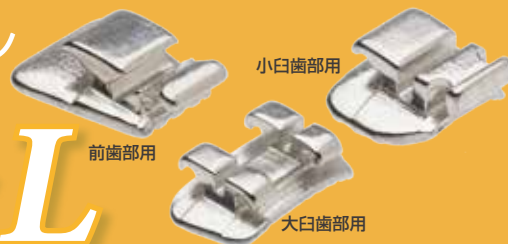

販売中の「シングルブラケットリンガル」のラインナップに新デザイン「H/S Bracket L」(ひらの矯正歯科 平野 正芳先生、すが矯正歯科クリニック 菅 蔵人先生考案) が加わりました! 「H/S Bracket L」は、従来のシングルブラケットリンガルに比べ、より歯の傾斜や捻転の抑制が可能なデザインです。従来からある前歯部用、小臼歯部用に加え、大臼歯部用もご用意しております。

## 幅広いブラケットスパン

ブラケットスパンを従来の 1.5mm から 2mm\* にしたことで、リングレット等を用いた移動の際、歯の傾斜や捻転を抑制し、より歯体移動に近い歯の移動を行うことができます。

\*大臼歯部用は 4.6mm

## ロープロファイル

ブラケットスパンを広くしたことで、インターブラケットスパンが短くなることが懸念されますが、本商品はハイトを低く設計しているため、その懸念による影響を可能な限り抑えることができます。

## ジンジバルオフセット

スロットの位置を 0.4mm 歯肉側に近づけるジンジバルオフセットを採用したことで、対合歯に当たりにくくなりました。また、スロットが歯の抵抗中心\* に近くなったことで、歯の回転を抑制し、歯を平行に移動しやすくなりました。


\*力を加えた時に歯が回転せずに平行移動する点



部位により  
高さが  
異なります。



## H/S Bracket L

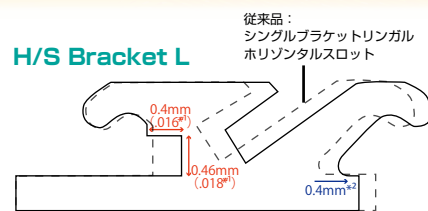

\*1: inch 表記は目安です。  
\*2: 従来品と比較した上部構造の移動量

## HS スロットの追加

従来からある水平スロットに加え、HS スロットが追加されたことで、2 本のワイヤーが挿入出来るようになりました。

HS スロットは捻転を抑制する働きを持つことから、傾斜を抑制する水平スロットと相互に補い合い、さらに歯体移動に近い歯の移動を可能にします。

※○: HS スロット

前歯部用



小臼歯部用



大臼歯部用



※HS スロット



使用ワイヤー径: .016"×.016" (水平スロット) / .014" (HS スロット)



2 本のワイヤーを使用し、捻転と傾斜を抑制しながら歯の遠心移動を歯体移動で行った。  
使用ワイヤー: 水平スロット .016 ステンレスワイヤー / HS スロット .014 ステンレスワイヤー

提供: すが矯正歯科クリニック様

| 部位         | トルク | スパン (mm) | ハイト (mm) | 水平スロット        | HS スロット*      | 包装  | 商品番号                   |
|------------|-----|----------|----------|---------------|---------------|-----|------------------------|
| 321 123    | 58° | 2        | 1.54     | .018" × .025" | .016" × .018" | 10個 | HSBL58VH 20686073258VH |
| 321 123    | 48° | 2        | 1.53     | .018" × .025" | .016" × .018" | 10個 | HSBL48VH 20686073248VH |
| 54 45      | 9°  | 2        | 1.46     | .018" × .025" | .016" × .018" | 10個 | HSBL09VH 20686073209VH |
| 54 45      | 0°  | 2        | 1.46     | .018" × .025" | .016" × .018" | 10個 | HSBL00VH 20686073200VH |
| 6 6<br>6 6 | —   | 4.6      | 1.79     | .018" × .025" | .016" × .018" | 10個 | HSBL600EXW 206860733   |

※inch 表記は目安です。

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理



# リンガル関連製品

カンノ

| シングルブラケットリンガル DBS |           | 包装：10個 |          |               |         |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|---------|
|                   |           | トルク    | スパン (mm) | スロット          | 商品番号    |
|                   | 321   123 | 58°    | 1.5      | .018" × .025" | KSBL58H |
|                   | 321   123 | 48°    | 1.5      | .018" × .025" | KSBL48H |
|                   | 54   45   | 9°     | 1.5      | .018" × .025" | KSBL09H |
|                   | 54   45   | 0°     | 1.5      | .018" × .025" | KSBL00H |

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

| ワンピースシングルブラケット |                       | 包装：10個 |          |               |          |
|----------------|-----------------------|--------|----------|---------------|----------|
|                |                       | トルク    | スパン (mm) | スロット          | 商品番号     |
|                |                       | 0°     | 0.8      | .018" × .025" | KSB018   |
|                |                       | 0°     | 0.8      | .022" × .026" | KSB022   |
|                | LW<br>(ロングウイングワイドベース) | 0°     | 0.8      | .018" × .025" | KSB018LW |

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

| ワンピースブラケットエクストリームワイド018 |       | 包装：10個 |          |               |         |
|-------------------------|-------|--------|----------|---------------|---------|
|                         |       | トルク    | スパン (mm) | スロット          | 商品番号    |
|                         | 6   6 | 0°     | 4.5      | .018" × .025" | AE06EXW |

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

| ユーキャンシー大臼歯用チューブ                  |    | 包装：10個 |          |               |           |
|----------------------------------|----|--------|----------|---------------|-----------|
| ワイヤーを咬合面側より挿入しやすいように切れ込みをいれています。 |    | トルク    | スパン (mm) | スロット          | 商品番号      |
|                                  | 76 | 9°     | 3.2      | .018" × .025" | UCSL09BHR |
|                                  | 67 | 9°     | 3.2      | .018" × .025" | UCSL09BHL |
|                                  | 76 | 0°     | 4.0      | .018" × .025" | UCS67BHR  |
|                                  | 67 | 0°     | 4.0      | .018" × .025" | UCS67BHL  |

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

| シングルチューブフック付(リンガル用リボンワイズ) |          | 包装：10個 |          |               |          |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------------|----------|
| スロットの縦横比が通常のタイプと逆になっています。 |          | トルク    | スパン (mm) | スロット          | 商品番号     |
|                           | 左右兼用フック付 | 0°     | 3.2      | .025" × .018" | SE2518BH |


医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

# リンガル関連 アタッチメント／器材／リングレット／スレッド／ワイヤー


## アタッチメント各種

接着面積の狭い歯面への装着やアップライトなど様々なケースでご使用いただけます。(UAシリーズ詳細は66ページへ)

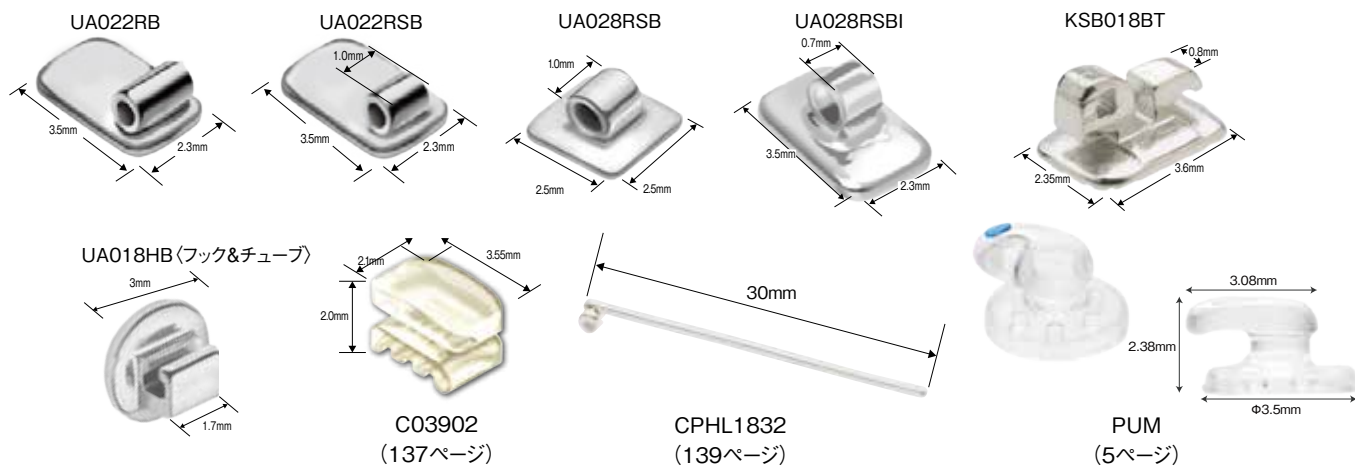


## F.M.リングレット各種

### ● F.M.リングレット

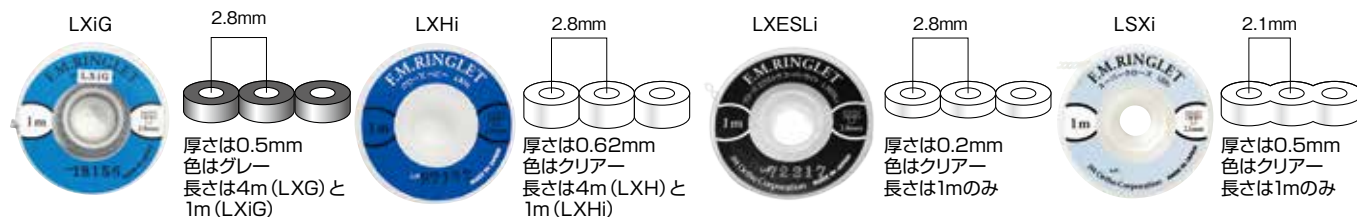

## F.M.スーパースレッド各種

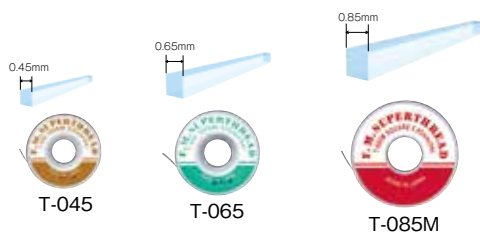

## ドライフィールド



例) 300 - 401 (ラージ)

## ゴムメタル アーチブランクス (リンガルテクニック用)

|         | サイズ   |               | 包装            | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 頂部径 | 商品番号 |                           |
|---------|-------|---------------|---------------|--------|---------|-----|------|---------------------------|
|         | inch  | mm            |               |        |         |     |      |                           |
|         | ラウンド  | .016          | 0.406         | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM16-1E 206850698161E     |
|         | スクエアー | .016 × .016   | 0.406 × 0.406 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM1616-1E 20685069816161E |
|         |       | .0175 × .0175 | 0.445 × 0.445 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM175175-1E 2068506951E   |
|         |       | .0175 × .0175 | 0.445 × 0.445 | 5      | 68      | 83  | 32φ  | GM175175-4E 4E            |
| レクタングラー |       | .016 × .022   | 0.406 × 0.559 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM1622-1E 20685069816221E |
|         |       | .017 × .025   | 0.432 × 0.635 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM1725-1E 17251E          |
|         |       | .018 × .022   | 0.457 × 0.559 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM1822-1E 18221E          |
|         |       | .018 × .025   | 0.457 × 0.635 | 5      | 62      | 80  | 26φ  | GM1825-1E 18251E          |





## KBT マルチブラケット／チューブシステム

横手精工

# KBTマルチブラケット/チューブシステム

「すべては患者さんのために」


目指したのは3つのS

Simple：構成や術式がシンプル

Smart：問題が起きにくい洗練された形態

Speedy：すべてがスピーディ

Minimal InterventionとMinimum Complianceを実現し、初心者には簡単に、熟練者には応用を利かせられる、従来の様々なシステムのいいところ取りの2+1 スロット Begg システム

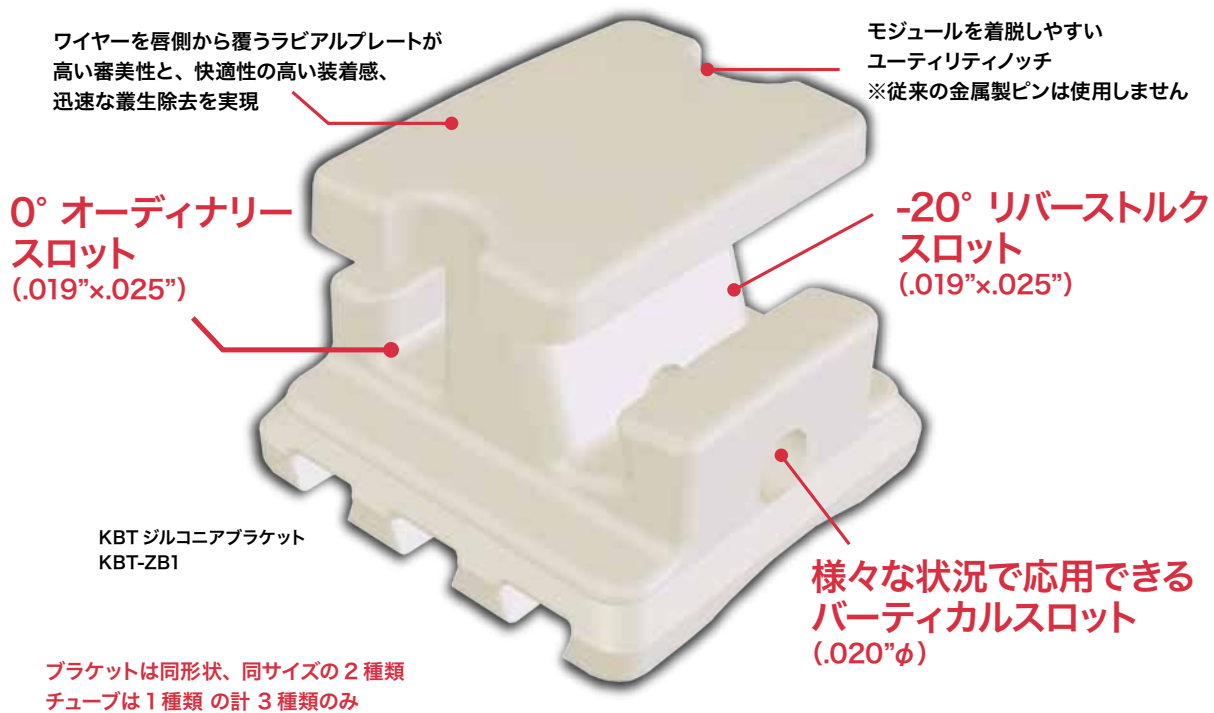

KBT メタルブラケット  
KBT-MB1



KBT チューブ  
KBT-MT2

- ・ワイヤーベンディングは基本的に必要ありません。
- ・ワイヤーサイズにより、術者がフリクションフリーから摩擦の大きさを調節することができます。
- ・使用するワイヤー（～.018"×.025"）はエッジワイズシステムと共通です。
- ・より長いブラケット（チューブ）間距離を確保しています。

### KBT マルチブラケット／チューブシステム

包装：10個

|                                                                                     |                                                                                     |                  | トルク       | スパン (mm) | 商品番号    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|-----------|
|  |  | KBT ジルコニアブラケット*1 | 0° / -20° | 3.20     | KBT-ZB1 | 206860653 |
|  |  | KBT メタルブラケット*2   | 0° / -20° | 3.20     | KBT-MB1 | 206860651 |
|  |  | KBT チューブ*3       | 0° / -20° | 5.45     | KBT-MT2 | 206860652 |

\*1 医療機器認証番号 223AKBZX00099000 管理

\*2 医療機器認証番号 223AKBZX00100000 管理


\*3 医療機器認証番号 223AKBZX00098000 管理




## 豆知識 ブラケットとチューブの構造ならびに機能とデザイン

### ブラケットの構造

①スロット：ワイヤーを挿入する溝です。通常2種類で、.018スロットと.022スロットがあります。単位はインチです。

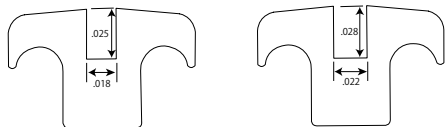

②スパンは横幅を示します。


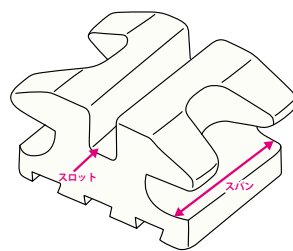


### ブラケットとチューブの機能とデザイン

ワイヤーが作る矯正力を歯牙に対し方向付けしコントロールします。


#### 1) イン/アウト（歯体移動：舌側方向へ）

ブラケットによって特定歯牙の位置を決めるために、ベースとスロットとの基底部との距離を変更します。

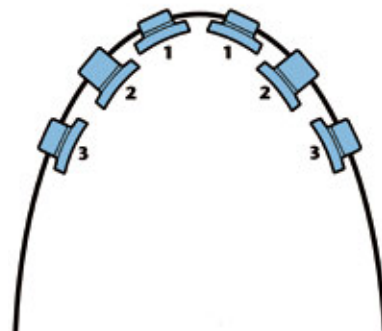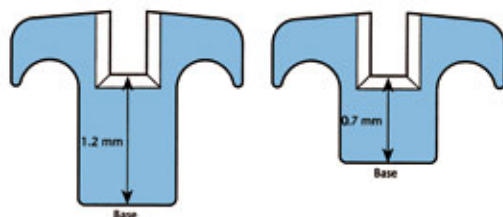


#### 2) アンギュレーション（根の移動：近遠心方向へ）

矯正終了時は通常、上顎中切歯にはアンギュレーションが与えられるべきですが、この目標を達成するために、ブラケットデザインが工夫され、スロット部にその角度が付与されています。

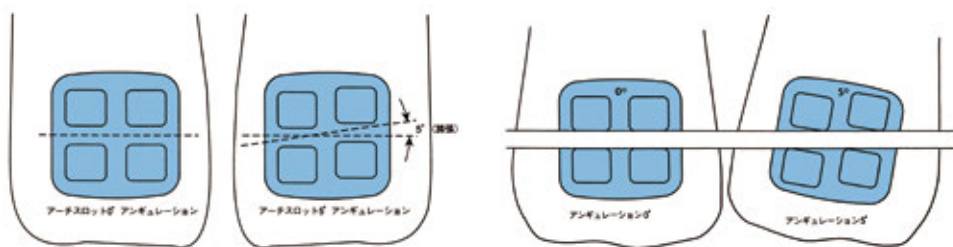

#### 3) トルク（根の移動：唇舌方向へ）

トルクとは、歯根の唇舌方向への動きを示します。

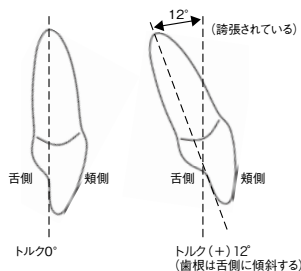


ブラケットのトルクは、下図のようにスロットに与えられます。トルクは、ベース上でも与えられることができます。




#### 4) ローテーション（捻転）


ローテーションとは歯牙咬合面から見て時計方向または時計と逆方向に歯牙が捻れた状態をいいます。

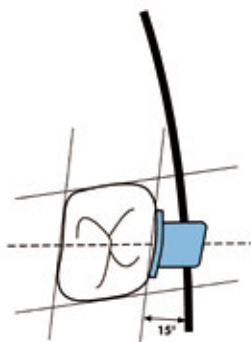

チューブにオフセットを与えることで捻転を与え良好な位置をつくります。

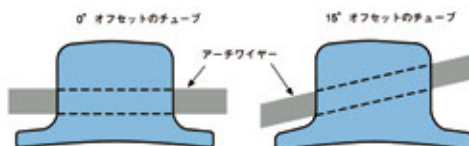

#### 5) 歯牙の高さ（圧下と挺出）

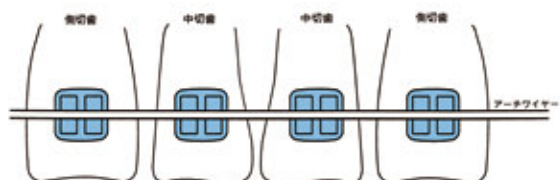

側切歯の圧下をする場合、側切歯のブラケットは咬合面寄りに装着します。

