




INTRAORAL/
EXTRAORAL

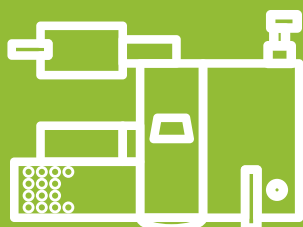

06

口腔内・外補助装置

- F.M. リングレット 134
- F.M. スーパースレッド／O-リング・リガチャー／
タフオー 135
- エナジーバック（エラスティック） 136
- アリスボタン／リンガルボタン／chivita／
クリスタボタン／クリアボタン 137
- C-HOOK／ユーティリティアタッチメント 138
- クリンパブルフック／クリンパブルストップ 139
- GM アタッチメント 140
- ニュー ST ロック 141
- フェイスクリブ 142
- フェイスクリブ／
グルモンズ・プロトラクションフェイスマスク 143
- ヘッドギア／Jフック 144
- シンプルリトラクター／KT チンキャップ 145
- セーフティヘッドギア／ネットキャップ／
フェイスボウ 146

F.M.リングレット

ポリマー技研

F.M.リングレット

スーパークローズ

LSXi



クローズ

LX



アジョイン

LA



ナロー

LN



ワイド

LW



F.M.リングレットは高精度の加工技術によって製造された熱硬化性ポリウレタン素材のエラスティックチェーンです。

伸びに対する戻り変形が少なく安定した矯正力を発揮します。

結紮、スペースクローズ、歯牙移動補助装置との併用など利用目的に合わせて豊富な種類からお選びいただけます。ラテックスフリーです。

F.M. リングレットクリアとの比較






← クリアー

← アイボリー

← グレー

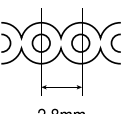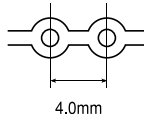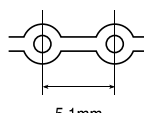


形状		厚さ	色	長さ	商品番号	モリタコード
スーパークローズ						
	標準	0.5mm	クリアー	1m	LSXi	206350085LSXi
クローズ						
	ヘビー	0.62mm	クリアー	4m	LXH	206350051LXH
				1m	LXHi	206350085LXHi
	標準	0.5mm	クリアー	4m	LX	206350051LX
				1m	LXi	206350085LXi
	ライト	0.4mm	クリアー	4m	LXL	206350051LXL
				1m	LXLi	206350085LXLi
	スーパーライト	0.3mm	クリアー	4m	LXSL	206350051LXSL
				1m	LXSLi	206350085LXSLi
	エクストラスーパーライト	0.2mm	クリアー	1m	LXESLi	206350085LXESLi
	標準	0.5mm	グレー	4m	LX-G	206350053LXG
				1m	LX-iG	206350054LXIG
	標準	0.5mm	アイボリー	1m	LXi-IV	206350052LXi
	ライト	0.4mm		1m	LXLi-IV	206350052LXLi
	スーパーライト	0.3mm		1m	LXSLi-IV	206350052LXSLi
アジョイン						
	標準	0.5mm	クリアー	4m	LA	206350051LA
				1m	LAi	206350085LAi
ナロー						
	標準	0.5mm	クリアー	4.7m	LN	206350051LN
				1m	LNi	206350085LNI
	ライト	0.4mm	クリアー	4.7m	LNL	206350051LNL
				1m	LNLi	206350085LNLi
	スーパーライト	0.3mm	クリアー	4.7m	LNSL	206350051LNSL
				1m	LNSLi	206350085LNSLi
	標準	0.5mm	グレー	4.7m	LN-G	206350053LNG
				1m	LN-iG	206350054LNIg
ワイド						
	標準	0.5mm	クリアー	4.7m	LW	206350051LW
				1m	LWi	206350085LWi
	ライト	0.4mm	クリアー	4.7m	LWL	206350051LWL
				1m	LWLi	206350085LWLi
	スーパーライト	0.3mm	クリアー	4.7m	LWSL	206350051LWSL
				1m	LWSLi	206350085LWSLi
	標準	0.5mm	グレー	4.7m	LW-G	206350053LWG
				1m	LW-iG	206350054LWiG



F.M.スーパースレッド／O-リング・リガチャー／タフオー ポリマー技研

F.M.カラーリングレット

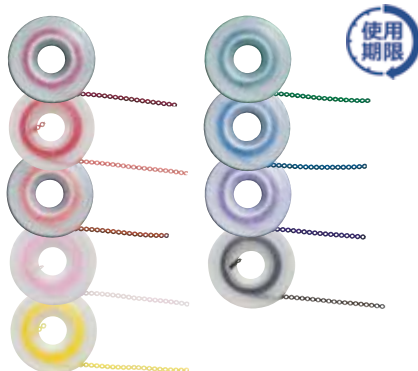


おしゃれ感覚を取り入れたリングレットです。
カラーバリエーションも9色と豊富にご用意しております。
食品などへの使用も認められている色素を使用しています。ラテックスフリーです。
リング間距離：クローズ (2.8mm)
厚さ：標準 (0.5mm)

包装：1m巻

商品番号		
レッド	LXi-RD	206350311R
ボルシェレッド	LXi-PR	PR
オレンジ	LXi-OR	O
ライトピンク	LXi-LP	LP
イエロー	LXi-YL	Y
グリーン	LXi-GR	G
ブルー	LXi-BL	BL
パープル	LXi-PL	V
ブラック	LXi-BK	B

医療機器認証番号 20500BZZ01136000 管理

F.M.スーパースレッド

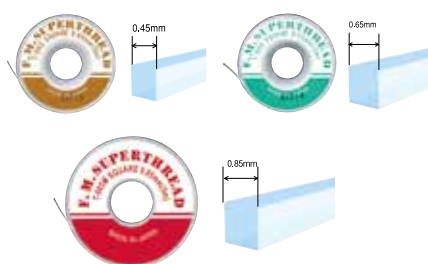

F.M.リングレットと同じ熱硬化性ポリウレタンを使用したスレッド (糸) です。
断面が正方形ですので、ほつれにくく、結び目がしっかりとホールドされます。
ラテックスフリーです。

包装：5m巻

サイズ mm	サイズ inch	商品番号
0.45×0.45	.018×.018	T-045 206350059
0.65×0.65	.026×.026	T-065 206350058
0.85×0.85	.034×.034	T-085M 206350057

※inch表記は目安です。

医療機器認証番号 20500BZZ01136000 管理

O-リング・リガチャー



熱硬化性ポリウレタン製リガチャー用O-リングで、専用インスツルメント「クイックリガチャープレーサー」で容易に装着できます。ラテックスフリーです。

厚さ mm	内径 mm	外径 mm	包装	商品番号
クリアー	0.54	1.40	500	K-2 206350749C
グレー	0.54	1.40	500	K-2G GR

医療機器認証番号 20500BZZ01136000 管理

包装	商品番号
専用インスツルメント クイックリガチャープレーサー	1 NK-1 206350747

医療機器届出番号 13B2X00107000A02 一般

タフオー



タフオーに比べ、琥珀色に近い色合いで、天然歯にマッチします。

独自の熱可塑性ポリウレタンを採用。従来性能が良いとされてきた熱硬化性ポリウレタンよりも高い応力緩和率を発揮します。

また、タフオーライトはタフオーに比べ10%ほど軟らかく、より操作性が向上しました。急激に引き伸ばすと破断することがありますので、装着時には「クイックリガチャープレーサー」等リングに強い負荷をかけないインスツルメントをご利用下さい。ラテックスフリーです。


厚さ mm	内径 mm	外径 mm	包装	商品番号
タフオー	0.8	1.20	20粒付30本入	TO-N 206350752
タフオーライト	0.8	1.20	20粒付30本入	TO-NL 206350310

医療機器認証番号 225AKBZX00097000 管理

参考資料

結紮モジュール3種の張力の比較です。
初期値が高いほど、強さ(硬さ)がより感じられやすくなります。ただし、O-リング・リガチャーは、タフオーシリーズよりも内径が大きいため、数値としては大きくなりますが、体感としては異なる場合があります。
また、装着後は口腔内環境や経時的な消耗により、数値は弱くなっていきます。

初期値は検討の目安であり、保管環境やロットごとにより差が出る可能性があります。本データは製品選択の一助としてご利用ください。

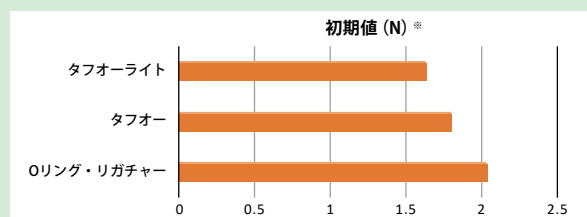

※内径の4倍に伸張した状態で5秒保ち、その後3倍にまで戻したときの値。(JIS T6531規格より)

エナジーパック (エラスティック)

RMO

エナジーパック (エラスティック) 【従来品】

mediumは3oz/85g、heavyは1/8" (3mm) のみ3.5oz/99g
その他4種は、4.5oz/128gです。



仕様	インディケーター (乗り物)	1袋 (100粒入り) 商品番号	1箱 (50袋入り) 商品番号
1/8" heavy	サーフボード (surfboard)	J01120-1	J01120
3/16" medium	キャンピングカー (motor home)	J01111-1	J01111
1/4" medium	トラック (truck)	J01112-1	J01112
5/16" medium	電車・汽車 (train)	J01113-1	J01113
3/16" heavy	モーターバイク (motorcycle)	J01131-1	J01131
1/4" heavy	レーシングカー (racecar)	J01132-1	J01132
5/16" heavy	車 (car)	J01133-1	J01133
3/8" medium	モノレール (monorail)	J01114-1	J01114
3/8" heavy	スノーモービル (snowmobile)	J01134-1	J01134

在庫限りで販売終了

医療機器認証番号 15500BZY01975000 管理



<お知らせ>

「エナジーパック (エラスティック) 【従来品】」は、製造元のリブランディングに伴い、国内在庫限りで販売を終了いたしました。
それに伴い、「エナジーパック (エラスティック) 【後継品】」を販売させていただいております。

エナジーパック (エラスティック) 【後継品】



RMO社製エラスティック「エナジーパック」がこれまでの品質や
原材料はそのままにパッケージや張力をリニューアルしました！

※従来品と張力の標榜値が同一でないものがございます。
その場合は近い張力のものをご利用ください。

<パッケージイメージ>

内径
張力

LIGHT
2.5 oz
70g

MEDIUM
4.5 oz
125g

HEAVY
6.5 oz
185g

1/8" 3mm	○		B	C
3/16" 5mm	○	A	B	C
1/4" 6mm	○	A	B	C
5/16" 8mm	○	A	B	C
3/8" 10mm	○	A	B	

※注意※

RMO 社で取り扱っている製品であっても、弊社では
取り扱いのない製品も一部ございます。

包装	張力	内径	商品番号
1袋 (100粒入)	ライト - 2.5oz/70g - A	3/16" 5mm	J01501-1
		1/4" 6mm	J01502-1
		5/16" 8mm	J01503-1
		3/8" 10mm	J01504-1
	ミディアム - 4.5oz/125g - B	1/8" 3mm	J01507-1
		3/16" 5mm	J01508-1
		1/4" 6mm	J01509-1
		5/16" 8mm	J01510-1
		3/8" 10mm	J01511-1
1箱 (50袋入)	ライト - 2.5oz/70g - A	3/16" 5mm	J01501
		1/4" 6mm	J01502
		5/16" 8mm	J01503
		3/8" 10mm	J01504
	ミディアム - 4.5oz/125g - B	1/8" 3mm	J01507
		3/16" 5mm	J01508
		1/4" 6mm	J01509
		5/16" 8mm	J01510
		3/8" 10mm	J01511
10袋 (1袋: 100粒入)	ヘビー - 6.5oz/185g - C	1/8" 3mm	J01512T
		3/16" 5mm	J01513T
		1/4" 6mm	J01514T
		5/16" 8mm	J01515T

※ヘビーは10袋入のみのご用意となります。

医療機器認証番号 15500BZY01975000 管理

エナジーパックに顎外用 (エクストラオーラル) も加わりました！

顎外用ゴムスペック一覧 顎外用 16.0 oz 455g

張力16.0oz/455g-E



5/16" 8mm	○	E
1/2" 13mm	○	E

内径	包装	商品番号
5/16" 8mm	30袋 (1袋: 50粒入)	J01586
1/2" 13mm	30袋 (1袋: 50粒入)	J01587

エラスティックブレーサー

RMO

患者さんが口腔内でエラスティックを装着する際の負担を軽減するサポートツールです。



包装	商品番号
エラスティックブレーサー	J00560



アリスボタン／リンガルボタン／chivita／クリスタボタン／クリアボタン

アリスボタン

RMO



ポリウレタン製のボタンです。アンダーカットにより、強固な接着が可能です。

	W	D	H (mm)	包装	商品番号
アリスボタン	3.55	2.1	2.0	10	C03902

206860447
医療機器認証番号 223AKBZX00062000 管理

リンガルボタン

RMO



	幅 (mm)	包装	商品番号
リンガルボタン (メタル) バンド溶接用	2.0	10	A00047

206350112
医療機器承認番号 16000BZY00357000 管理

chivita (チヴィタ)

モリタデンタルプロダクツ



シングルブラケットchivita (チヴィタ) は、クリスタブレースシリーズと同じポリアミド樹脂を使用したシングルプラスチックブラケットです。



臨床写真提供：名古屋矯正歯科診療所様

	包装	商品番号
chivita (チヴィタ)	10	SBC018

206880193
医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

クリスタボタン/クリアボタン

モリタデンタルプロダクツ



〈材質〉
クリスタボタン：ポリアミド
クリアボタン：ポリカーボネート

	寸法 (mm)		
	縦(W)	横(D)	高さ(H)
クリスタボタン	3.2	2.6	2.0
クリアボタン レギュラー	3.2	2.6	2.0
クリアボタン Sサイズ	2.9	2.3	2.0

前歯部位の舌側転移や重度の叢生により、ブラケットを装着できない部位に適用するアタッチメントです。歯冠半分程度までの叢生であればオープンコイルを用いた拡大を行わずに改善可能です。中央のラウンドホールに.010" ~ .014" 程度のNiTi系のワイヤーを通してご使用下さい。

クリアボタン

臨床写真提供：つか矯正歯科様



結紮線を使用した場合

ワイヤーを通して使用した場合

	包装	商品番号
クリスタボタン	10	CRBN


206880108
医療機器認証番号 223AGBZX00116000 管理

	包装	商品番号
クリアボタン レギュラー	10	CBN
クリアボタン Sサイズ	10	CBNS

206880106CBN
206880107CBNS
医療機器承認番号 21600BZZ00454000 管理

プラスチックアタッチメント ロングタイプ

モリタデンタルプロダクツ

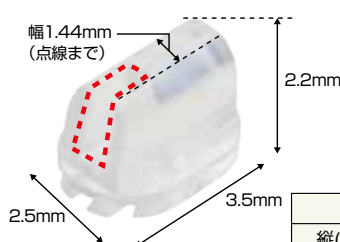

〈材質〉
ポリカーボネート

	寸法 (mm)		
	縦(W)	横(D)	高さ(H)
プラスチックアタッチメント ロングタイプ	2.5	3.5	2.2

プラスチックアタッチメント ロングタイプは、通常のブラケットより35%*上下幅が短く、ブラケットの装着が難しい狭小部分に装着可能なアタッチメントです。*クリスタブレースシリーズ/クリアブラケットとの比較

プラスチックアタッチメント
ロングタイプ

使用ワイヤー許容径：.021"×.025"



約1か月後

PALを用いて上顎側切歯の舌側転位を改善した症例

	包装	商品番号
プラスチックアタッチメント ロングタイプ	10	PAL


206880107
医療機器認証番号 225AGBZX00072000 管理

C-HOOK／ユーティリティーアタッチメント


C-HOOK

カンノ


C-HOOK

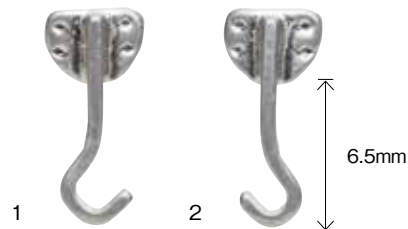


C-HOOK ブラケット

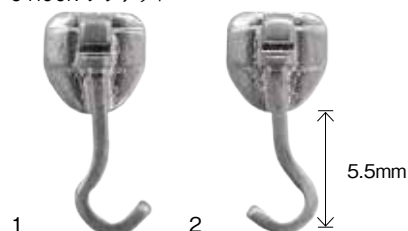

C-HOOK チューブ

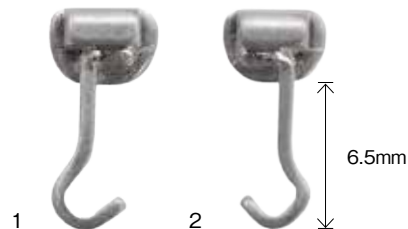

C-HOOK ブラケット大臼歯用

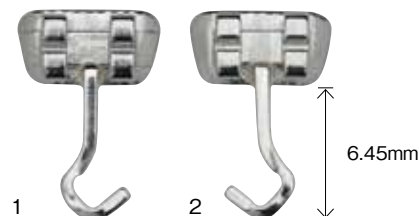

アンカースクリューやアライナーと併用できます。

フックの向きは2種類あり、上下左右を問わず、部位に合わせたボンディングが可能です。

			長さ	包装	商品番号	
C-HOOK	DBS用	1	6.5mm	10	DBSH1	2068604191
		2	6.5mm	10	DBSH2	2

医療機器認証番号 15200BZZ00917000 管理

			長さ	包装	商品番号	
C-HOOK ブラケット (.022"×.025"スロット)	DBS用	1	5.5mm	10	DBSHB1	2068601711
		2	5.5mm	10	DBSHB2	2

医療機器認証番号 15100BZZ01314000 管理

			長さ	包装	商品番号	
C-HOOK チューブ (.022"×.028"スロット)	DBS用	1	6.5mm	10	DBSHT1	2068601721
		2	6.5mm	10	DBSHT2	2

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

			長さ	包装	商品番号	
C-HOOK ブラケット大臼歯用 (.018"×.025"スロット)	DBS用	1	6.45mm	10	DBSHMB1	2068607311
		2	6.45mm	10	DBSHMB2	2
	DBS用	1	6.45mm	10	DBSH022MB1	2068607291
		2	6.45mm	10	DBSH022MB2	2

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理




C-HOOK ブラケット大臼歯用

※C-HOOK使用イメージ

ユーティリティーアタッチメント

カンノ

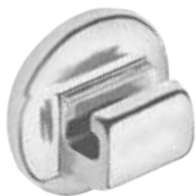

	トルク	スロット	スロット幅	ウェルド / DBS	包装	商品番号	
フック&チューブタイプ	0°	.018"×.025"	1.7mm	DBS	10	UA018HB	206860412

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理



クリンパブルフック／クリンパブルストップ


クリンパブルフック／クリンパブルストップ／フッククリンピングブライヤー

カンノ／TASK (シオダ)



	包装	商品番号	
クリンパブルフック ショート (2.9mm)	10	CPH29S	206860688
クリンパブルフック ミドル (3.9mm)	10	CPH39M	206860689
クリンパブルストップ	30	CPS018	206850925
フッククリンピングブライヤー*	1	P-220	206860270

医療機器認証番号 20800BZZ00815000 管理
※ 医療機器届出番号 09B2X00010000154 一般

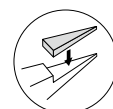

フッククリンピングブライヤー

マルチクリンピングブライヤー

TASK (シオダ)

先端にある4つのピークでフックをワイヤーに圧接します。この上下4つのピークで圧接する構造が、ワイヤーの変形や歪みを軽減します。従来品は、設計上、一定方向からの圧接しかできませんが、本製品は上下を気にすることなく、圧接することが可能です。

※GUMMETAL、NiTiワイヤー専用品です。
ステンレススティール、コバルトクロムワイヤーには使用できません。



	包装	商品番号	
マルチクリンピングブライヤー	1	CUTMCDN	206860131

医療機器届出番号 09B2X00010R00017 一般


クリンパブルフック ダブルタイプ モリタデンタルプロダクツ

アーチワイヤーの任意の位置に装着できるフックです。また、症例にあわせて2種類の高さをお選びいただけます。

使用ワイヤー許容径：
.016"×.016"～.021"×.025"



デュアルトップコイルスプリングとの併用
臨床写真提供：吉住 淳 先生
(SMILE ACCESS矯正歯科吉祥寺)

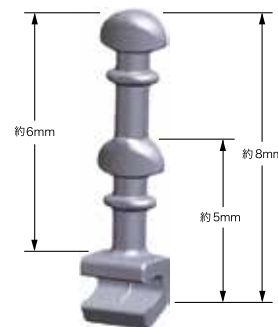

	包装	商品番号	
クリンパブルフック ダブルタイプ	10	CPHW	206880109

医療機器認証番号 225AGBZX00071000 管理

クリンパブルフックリンガル

カンノ



リンガル用のクリンパブルフックです。



	包装	商品番号	
クリンパブルフックリンガル	10	CPHL1832	206860549

医療機器認証番号 20800BZZ00815000 管理

GMアタッチメント

若吉製作所


GMアタッチメント



GMアタッチメント102 DBS用

ゴムメタルの巻線を用いて側方拡大装置をつくるためのアタッチメントです。チタン製の102はDBS用、ステンレススティール製の201はバンドに溶接して使用するウェルド用です。

咬合面側をカットした形状はどちらも同じで、許容径は.040"です。

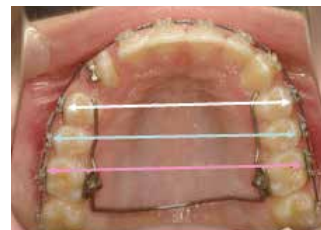


バンドに装着したGMアタッチメント201ウェルド用

	包装	商品番号
GMアタッチメント102キット*1 (DBS)	1キット	GMA102K 206850270
GMアタッチメント102単品	10個	GMA102 206850271
トランスファー用アタッチメント (共用)	10個	GMA102T 206850272
ドライバー (共用)	1本	GMA101D 206850267
GMアタッチメント201キット*2 (ウェルド)	1キット	GMA201K 206850273
GMアタッチメント201単品	10個	GMA201 206850274
トランスファー用アタッチメント (共用)	10個	GMA102T 206850272
ドライバー (共用)	1本	GMA101D 206850267

*1 医療機器認証番号 227AKBZX00006000 管理

*2 医療機器認証番号 227AKBZX00005000 管理

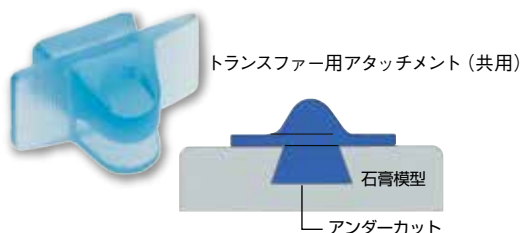

ゴムメタルアタッチメントのトランスファー方法



1. ゴムメタルアタッチメントを口腔内に装着します。



2. 印象採得を行います。



3. トランスファー用アタッチメントを装着し、印象に石膏を注入します。



4. 作業模型にトランスファー用アタッチメントが設置された状態。



5. ゴムメタルワイヤーを作業用模型に合わせてベンディングします。

※技工用のゴムメタルワイヤーは、85ページをご覧ください



6. ワイヤーを口腔内に装着し、ゴムメタルアタッチメントにねじ留めして完成です。



ニューSTロック/ユーティリティプライヤークラシック/サンプラチナ矯正線/SWフラックス/オーソソルダーII

ニューSTロック モリタデンタルプロダクツ



リングアタッチメントの定番装置です。維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損が起こりにくい構造です。
遠心方向のコントロールも可能な「エクステンションタイプ」や、維持部を交換せず装置のみを取り替えたいときなどに使用可能な「脚部のみ」もご用意しております。

★ニューSTロックは様々な装置に応用可能です。
臨床応用レポートをご用意しております。
当社ホームページ舌側弧線装置の項目の症例集をご参照ください。

材質		
脚部	主線 (0.9mm)	コバルトクロム合金
	副線	
	ストッパー	ステンレス合金
維持部		ニッケルクロム合金

▼ニューSTロックの臨床レポート



ニューSTロックレギュラーを使用して遠心移動を行った症例

仕様	包装	商品番号	
レギュラー	1組	STLR	206880163LR
	5組	STLR5	206880164LR5
ミニ	1組	STLM	206880163LM
	5組	STLM5	206880164LM5
エクステンション	1組	STLE	206880165
脚部のみ(レギュラー・ミニ共用)	10本	STLF	206880179

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

ユーティリティプライヤークラシック TASK (シオダ)



ハンドルがほかのユーティリティプライヤーに比べ丈夫に設計されているため、ニューSTロックの適合や着脱などに適したインスツルメントです。

商品番号
CUT003TC
206860133

医療機器届出番号 09B2X00010R00016 一般

サンプラチナ矯正線 モリタデンタルプロダクツ



歯科技工用コバルトクロム合金です。 長さ：30cm

ワイヤーサイズ (mm)	包装	商品番号	
0.4	5	SP04	2068801660.4
0.5	5	SP05	0.5
0.6	5	SP06	0.6
0.7	5	SP07	0.7
0.8	5	SP08	0.8
0.9	5	SP09	0.9
1.0	5	SP10	1.0
1.2	5	SP12	1.2
1.5	5	SP15	206880181

医療機器認証番号 220AGBZX00200000 管理

<関連器材>

SWフラックス YAMAKIN

ペーストタイプのフラックスで、
鑲着時の濡れ性の向上と、金属
表面の酸化膜や汚れを除去し、
銀ろうの流れをスムーズにします。
活性温度は、400-900℃です。



	内容量	商品番号	
SW フラックス	40g	SWF	206350655

オーソソルダーII モリタデンタルプロダクツ

流ろう性が高く、操作性の良い
歯科用銀ろうです。



液相点：650℃

ワイヤーサイズ(mm)	内容量	商品番号	
0.5	10g 1巻	SDR05	20688018205
0.6	10g 1巻	SDR06	06

医療機器認証番号 304AGBZX00066000 管理

フェイスクリブ

グレートレイクス

前方牽引用フェイシャルマスク

フェイスクリブ




軽量素材によるシンプルな設計と装着感の良さが疲労感を軽減

ゲル状クッションとウォッシュャブル素材を組み合わせたゲルライナーの採用で快適性が向上

■機能


● III級症例：上顎歯列弓の前方牽引 ● 歯列の部分的な前方牽引 ● II級症例：下顎歯列弓の前方牽引

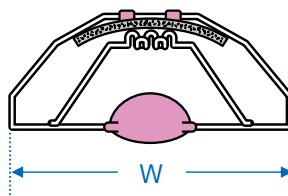

■仕様

重量	24~25 g			
目安寸法 (mm)	幅 (W)	約140		
	長さ (L)	サイズ	L	約168
			M	約135
			S	約117

サイズはAの角度の違いによるものです。
長さは実測値です。
製造上個体差が見られる可能性があります。

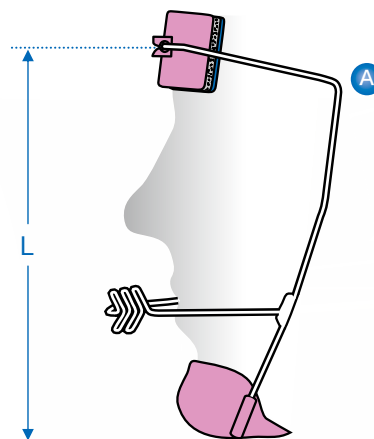

■ サイズ/カラー

・S、M、Lの3サイズ、カラーはベージュ、ブルー、レッド、バイオレット、ピンクの5色。

■ フレーム/マウスボウ

- ・軽量で丈夫なステンレスワイヤー (0.075 インチ) を採用。
- ・視界を妨げないデザインで眼鏡をかけたままでも装着できます。
- ・口腔内固定装置との併用も可能です。
- ・簡単な調整でどんな顔にもフィットします。

フェイスクリブ (ゲルライナー・レストパッド付) 包装：1個

カラー	サイズ S	サイズ M	サイズ L
	商品番号	商品番号	商品番号
ベージュ	FCS 206350925S-BG	FCM 206350925M-BG	FCL 206350925L-BG
ブルー	FCS-BL S-BL	FCM-BL M-BL	FCL-BL L-BL
レッド	FCS-RD S-R	FCM-RD M-R	FCL-RD L-R
バイオレット	FCS-VL S-V	FCM-VL M-V	FCL-VL L-V
ピンク	FCS-PK S-P	FCM-PK M-P	FCL-PK L-P

医療機器届出番号 13B2X00107000A07 一般

● フェイスクリブ調整時の注意点

フェイスクリブの調整をする際は、マウスボウとフレームの溶接部に過度な力がかからないよう、両方をプライヤーで把持して屈曲して下さい。

正しい調整例



誤った調整例

・遠くを
持たないこと・把持する位置に
注意

・指で曲げないこと



フェイスクリブ／グルモンズ・プロトラクションフェイスマスク グレートレイクス

レストパッド／ゲルライナー



丈夫な軽量プラスチック①の内側にゲル状クッション②とウォッシュابل素材③を組み合わせたゲルライナーの採用により、快適性が向上しました。

- ・レストパッドは簡単に取り外し、交換が可能です。
- ・チンカップをフレームに固定することで回転やズレの防止を図りました。

〈使用上の注意〉

本品に天然ゴム系の素材は含有されていませんが、長時間化学繊維を皮膚に密着させることにより、患者さんによってはまれにかぶれることがあります。その場合はガーゼや綿布をパッドの間に挟むことで、緩和される可能性があります。

ゲルライナーは使用の度に洗浄し、ダメージの状態にかかわらず1～3ヶ月を目安に交換してください。

レストパッド（レストパッド用ゲルライナー付）

包装：1個

カラー	商品番号
ベージュ	FCRP 206350922BG
ブルー	FCRP-BL BL
レッド	FCRP-RD R
バイオレット	FCRP-VL V
ピンク	FCRP-PK P

医療機器届出番号 13B2X00107000A07 一般

交換用ゲルライナー

内容品	商品番号
チンカップ用+レストパッド用（各1枚）	861 206350923
レストパッド用（2枚）	857 206350905
チンカップ用（2枚）	855 206350904

医療機器届出番号 13B2X00107000A07 一般

フェイスクリブ専用 巾着袋 JM Ortho



フェイスクリブの持ち運びに便利な専用巾着袋です。

フェイスクリブをモチーフにしたかわいいキャラクターがデザインされています。

サイズ：(W) 200mm × (H) 270mm ※マチなし

材質：コットン

商品番号	包装
FCB	5 206860328

グルモンズ・プロトラクションフェイスマスク



TMJに負荷をかけずに前方牽引可能な前方牽引装置で、専用のヘッドキャップが同封されています。

グルモンズプロトラクションフェイスマスク

サイズ	商品番号	包装
フリー	VFM	1 206850729

ゲルライナー

商品番号	包装
V22	1 206350924

(チークボーンレスト用ライナー2枚、レストパッド用ライナー1枚のセットです)

グルモンズベルクロヘッドキャップ

サイズ	商品番号	包装
フリー	GVHC	1 206860660

医療機器届出番号 13B2X00107000A25 一般

ヘッドギア／Jフック

グレートレイクス

バリアブルストレートブルヘッドギア

(Nola)



バリアブルストレートブルヘッドギアは専用の“J”フックとチューブを組み合わせ、“C”プレートに固定することで牽引方向を自在に調整できる大変便利なりトラクションヘッドギアです。

ヘッドギア本体／スナップオンパッド付

カラー	包装	商品番号	
ブラウン	5	300-102	206350070

※

チューブ（単品）

	包装	商品番号	
	10	300-131	206860656

“J”フック（単品）


※エラスティックは付属しておりません。

	シャンク幅	包装	商品番号	
スタンダード	10mm	5組	300-121	206850732121
	15mm	5組	300-122	122
ロング	10mm	5組	300-123	123

交換用スナップオンパッド（単品）

	包装	商品番号	
	20枚	300-135	206850469

※

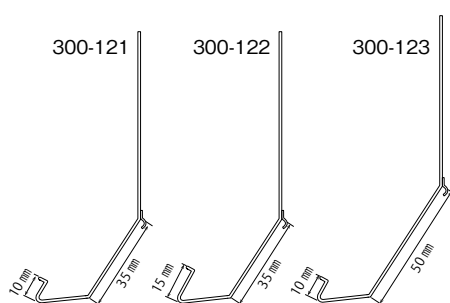

※寸法は実測値です。



Jフック+チューブ



チューブ



交換用スナップオンパッド

クイックフィット

(Nola)



スナップオンチューブ



スナップオンフック

クイックフィットはストラップ調整、専用チューブ、専用フックなどをワンタッチで調整可能なスナップオンタイプのオールプラスチック製バリアブルヘッドギアです。なお、Jフックは#300-121、300-122、300-123をご利用下さい。

クイックフィットセット（スナップオンパッド、スナップオンチューブ、スナップオンフック付）

カラー	包装	商品番号	
ネイビー	5組	300-104	206850731

※


交換用パーツ（単品）

	包装	商品番号	
スナップオンパッド	20枚	300-135	206850469
スナップオンチューブ	10個入	300-132	206860104
スナップオンフック	10個入	300-133	206850467

※

ハイブルヘッドギア

(Nola)

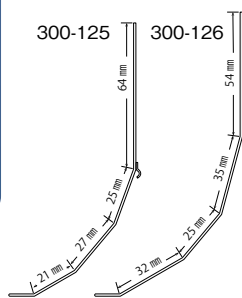

※寸法は実測値です。

ハイブルヘッドギアは“J”フック用チューブがプラスチックプレートに組み込まれたハイブルタイプのリトラクションヘッドギアです。

ヘッドギア本体／スナップオンパッド付

カラー	包装	商品番号	
ブラウン	5組	300-105	206350074

※

専用“J”フック（ハイブル用）

※エラスティックは付属しておりません。

	包装	商品番号	
スタンダード	5組	300-125	206850732125
ロング	5組	300-126	126

アクセサリ

	包装	商品番号	
スリップオンパッド	20枚	300-134	206850468
交換用スナップオンパッド	20枚	300-135	206850469

※



スリップオンパッド

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



シンプルリトラクター／KTチンキャップ

モリタデンタルプロダクツ

シンプルリトラクター



着脱操作が容易で頭部に局部圧がかからず、装着感が良好なリトラクターです。

サイズの目安 ※必ず患者に試適し適合するサイズをご使用下さい。

シンプルリトラクターのサイズ 目安となる頭周囲（帽子サイズ）

S.....51cm/M.....53cm

L.....55cm/LL.....57cm



内容品	1個入	5個入
リトラクター本体	1個	5個
フック（予備）	2個	10個
あご紐（予備）	1本	5本


カラー：ブラック

	サイズ	包装	商品番号	
シンプルリトラクター	S	1	SRSN	206880194S
	M	1	SRMN	M
	L	1	SRLN	L
	LL	1	SRLLN	LL
	S	5	SRS5N	206880195S
	M	5	SRM5N	M
	L	5	SRL5N	L
	LL	5	SRL5N	LL

※エラスティックは付属しておりません。別売の専用エラスティックをご利用下さい。

医療機器届出番号 09B1X10006000001 一般

エラスティック円周 イメージ図

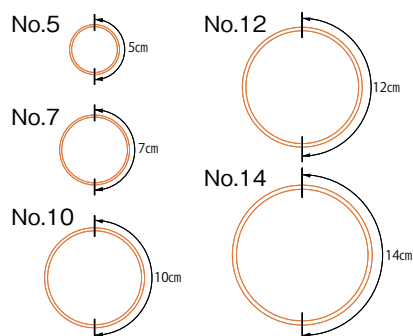

シンプルリトラクター用エラスティック

	仕様	内容量	本数の目安	商品番号	
No.5	円周の半分 5cm	100g	303本	SRE5	2068801715
No.7	円周の半分 7cm	100g	222本	SRE7	7
No.10	円周の半分 10cm	100g	150本	SRE10	10
No.12	円周の半分 12cm	100g	132本	SRE12	12
No.14	円周の半分 14cm	100g	105本	SRE14	14

※本数は目安であり、実際の本数とは異なることもございます。

厚み：1.1mm（輪ゴムの肉厚） 幅：3mm（輪ゴムの幅）

KT チンキャップ



■用途：下顎前突矯正用

■組成：アルミニウム99.5%以上

サイズ	包装	商品番号	
S	1	KTCCS	206880168S
L	1	KTCCCL	L
S	10	KTCCS10	206880169

※チンキャップのサイズにつきましては当社Webサイトをご確認下さい。

医療機器届出番号 09B1X10006000002 一般

チンキャップパッド



チンキャップにこのパッドを付けて使用することにより、汗を吸収し顎の皮膚炎症を防ぎます。

包装	商品番号	
20枚×10包	KTCCP	206880170

セーフティヘッドギア／ネットキャップ／フェイスボウ

セーフティヘッドギア


RMO



ハイブルヘッドストラップ (モジュール付)



サービカルネックパッド (モジュール付)

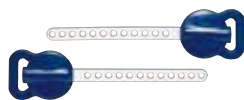

モジュール

セーフティ機能付モジュールを採用したヘッドギアで過大な力が加わるとモジュール部のクリップがリリースされます。

			包装	商品番号	
ハイブルヘッドストラップ (モジュール付)	ミディアム	14oz	1	J00392	206850400392
	ヘビー	18oz	1	J00393	393

			包装	商品番号	
サービカルネックパッド (モジュール付)	ミディアム	14oz	1	J00390	206850399390
	ヘビー	18oz	1	J00391	391


			包装	商品番号	
ネックパッド			1	J00394	206850401
ハイブルヘッドストラップ			1	J00395	206850402
モジュール	ミディアム	14oz	1組	J00396	206850403396
	ヘビー	18oz	1組	J00397	397

※お届けのタイミングにより、モジュールのカラーがブラックの場合がございます。

医療機器届出番号 13B2X00107000A19 一般

ネットキャップ

ウィルデント

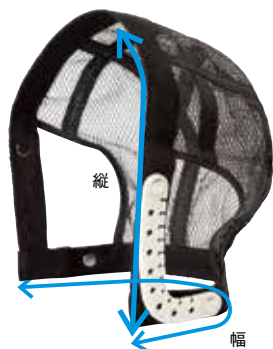

本体を患者さんの頭部を包み込むようにかぶせ、口腔内に装着した歯列矯正用器材に固定して使用します。

特長

- 洗濯が可能です。
- プラスティック部を金具で挟みこんでいるため、強い加力に耐えられます。
- メッシュ素材のため局部圧がかかりにくく装着感が良好です。
- プラスティック部の凹部および穴を多く設けることにより牽引・加力方向を幅広く設定できます。
- チンキャップ、フェイスボウ、Jフック等、他製品との併用が可能です。

		サイズ	寸法 (cm)	商品番号	
ネットキャップ	S	22.5	27.0	NCS	206850404S
	M	23.0	28.5	NCM	M
	L	24.0	31.0	NCL	L
	XL	25.0	32.5	NCXL	XL

縦：頭頂部からエラ辺り（端）まで

幅：首周り（端から端）

※寸法については多少の誤差があります。

医療機器届出番号 27B1X00118000001 一般

			包装	商品番号	
ネットキャップ用チンキャップ			1個	NCC	206350651

※チンキャップのサイズにつきましては当社Webサイトをご確認ください。

※エラスティックゴムは付属していません。

医療機器届出番号 27B1X00118000012 一般

フェイスボウ

カンノ



オーソドックスなデザインで、必要にして十分な機能性を持たせたスタンダードなフェイスボウです。フリクションストップが施されています。

- アウターボウ：.078" (1.98mm)
- インナーボウ：.045" (1.14mm)

			包装	商品番号	
フェイスボウ			1個入	KFB	206350709

医療機器認証番号 15900BZZ00978000 管理