



WIRES



04

ワイヤー

● ワイヤーの選択	78
● ワイヤー	80
● 審美ワイヤーのご紹介	81
● ゴムメタル	82
● ゴムメタルストレートワイヤー	84
● ゴムメタルフロッシュ／ゴムメタル TYPE II	86
● ゴムメタルホワイト	87
● ナノホワイト ～ホワイトコーティングワイヤー～	88
● GHOST ワイヤー (旧 FLI ワイヤー) ～ホワイトワイヤー～	90
● タイニロイワイヤー	91
● XPress SE ワイヤー (旧オーソノルワイヤー) TRANSFORM HA ワイヤー (旧サーマロイワイヤー)	93
● G&H NiTi アーチワイヤー	94
● エルジロイワイヤー	96
● SUS ワイヤー	98
● ツルクロームワイヤー	100
● ベンダロイワイヤー	102
● ツイストワイヤー	103
● コイルスプリング	104
● リガチャーワイヤー (結紮線)	105
● テクノフレックス／クラスプ／その他	106
● ニュー ST ロック／サンブラチナ矯正線／ オーソソルダーII	107
● クワッドヘリックス	108

ワイヤーの選択

商品名	性質	形態	アーチ形状	特長
アラインメント レベリング				
サーマルアクチベイトNiTiワイヤー TRANSFORM HA (旧サーマロイ) サーマルアクチベイトNiTi	温度活性化+超弾性	アーチワイヤー	ナチュラルフォーム ツルフォーム I	温度活性により変態温度までは軟らかい。 マルテンサイトからオーステナイトに変わるの は、サーマルアクチベイトNiTi 37度です。口腔 内で適度な硬さになります。
アラインメント レベリング				
NiTiワイヤー XPress SE (旧オーソノル) GHOST NiTi (旧FLI NiTi) スーパーエラスティック NiTi タイニロイシリーズ	超弾性	アーチワイヤー リバースカーブ コイルスプリング	ナチュラルフォーム ツルフォーム I	超弾性のため温度活性化タイプより硬めですが 一定の軟らかさを継続的に保ちます。
レベリング スペースクロージング フィニッシング				
TiMoワイヤー ベンダロイ	屈曲可能	アーチワイヤー ストレートワイヤー	ナチュラルロング フォーム	Ni フリーでステンレス線より軟らかく、スプリ ング特性に優れています。
レベリング スペースクロージング フィニッシング				
TiNbワイヤー ゴムメタル ゴムメタルホホワイト	超弾性+屈曲可能	アーチワイヤー ストレートワイヤー	ナチュラルアーチ アーチブランクス	Ni フリーでNiTiより軟らかく、スプリング特性 を持ち、かつTiMoより折れにくいワイヤーです。
スペースクロージング フィニッシング				
CoCrワイヤー エルジロイ テクノフレックス サンブラチナ矯正線	屈曲可能	アーチワイヤー ストレートワイヤー コイルスプリング	ナチュラルロング フォーム ユーロフォーム スタンダードフォーム	スプリング特性により、3種の弾性係数に加え、 熱処理で硬さを変えることも可能です。CoCrの 標準品となっています（テクノフレックス、サン ブラチナ矯正線を除く）。
アラインメント レベリング スペースクロージング フィニッシング				
ステンレスワイヤー ツルクローム GHOST SS (旧FLI SS) SUSワイヤーシリーズ	屈曲可能	アーチワイヤー ストレートワイヤー リガチャーワイヤー フレックスワイヤー	ナチュラルロング フォーム ユーロフォーム スタンダードフォーム	屈曲による加工硬化を焼きなまし（GHOSTワイ ヤーSS、SUSワイヤー ナノホホワイトを除く） でひずみを除去することが可能です。弊社取扱 い製品の中で最も安価な矯正用ワイヤーです。



ワイヤーの選択


各種ワイヤーの主な使用材料

商品名	材質
TRANSFORM HA (旧サマーロイ)	ニッケル、チタン、炭素、コバルト、銅、クロム、水素、鉄、ニオブ、窒素、酸素
XPress SE (旧オーソノル)	ニッケル、チタン、炭素、コバルト、銅、クロム、水素、鉄、ニオブ、窒素、酸素
GHOSTワイヤー-NiTi (旧FLIワイヤー-NiTi)	ニッケル、チタン、炭素、コバルト、銅、クロム、水素、鉄、ニオブ、窒素、酸素／コーティング：テフロン
サーマルアクチベイトNiTiワイヤー	ニッケル、チタン、炭素、コバルト、銅、クロム、水素、鉄、ニオブ、窒素、酸素
スーパーエラスティックNiTiワイヤー	ニッケル、チタン、炭素、コバルト、銅、クロム、水素、鉄、ニオブ、窒素、酸素
タイニロイワイヤーシリーズ	ニッケル、チタン、酸素、炭素 コーティング ナノホワイト：PEN樹脂（ポリエチレンナフタレート、酸化チタン） レモンゴールド：金 ピーチゴールド：金・パラジウム
ベンダロイ	チタン、モリブデン、ジルコニウム、スズ、酸素、鉄、コバルト、アルミニウム、炭素、窒素、水素
ゴムメタル	チタン、ニオブ、ジルコニウム、タンタル、酸素
ゴムメタルホワイト	チタン、ニオブ、ジルコニウム、タンタル、酸素／コーティング材：ロジウム
エルジロイ	コバルト、クロム、鉄、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、ベリリウム ※詳細は96ページをご覧ください。
テクノフレックス	コバルト、クロム、ニッケル、鉄、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄
サンブラチナ矯正線	コバルト、クロム、ニッケル、タングステン、モリブデン、マンガン、鉄
ツルクローム	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、窒素)
GHOSTワイヤー-SS (旧FLIワイヤー-SS)	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、窒素)／コーティング材：テフロン
SUSワイヤーシリーズ	鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄 コーティング ナノホワイト：PEN樹脂（ポリエチレンナフタレート、酸化チタン） レモンゴールド：金 ピーチゴールド：金・パラジウム
ツイストワイヤー	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、窒素)
コイルスプリング(オーソノル)	ニッケル、チタン／アイレット部：ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄)
コイルスプリング(エルジロイ)	コバルト、クロム、鉄、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、ベリリウム
3Dクワッドヘリックス (垂直可撤式)	コバルト、クロム、鉄、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、ベリリウム ポスト部はステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、リン、硫黄、炭素、窒素)
クワッドヘリックス (蠟着用、リケッツタイプ)	コバルト、クロム、鉄、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、ベリリウム
クワッドヘリックス (水平可撤式)	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、リン、硫黄、炭素、窒素)
リガチャーワイヤー (RMO)	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、リン、硫黄、炭素)
歯列矯正用結紮線 (モリタデンタルプロダクツ)	ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル)
オーソソルダーⅡ	銀、銅、亜鉛、スズ


それぞれのワイヤーに関する使用上の注意などにつきましては、電子添文等をご確認ください。

ワイヤー


アーチワイヤー

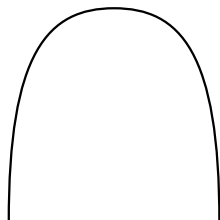ナチュラルフォーム
ナチュラルロングフォーム



ユーロフォーム

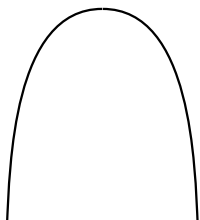

スタンダードフォーム

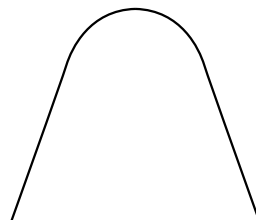

ツルフォーム I

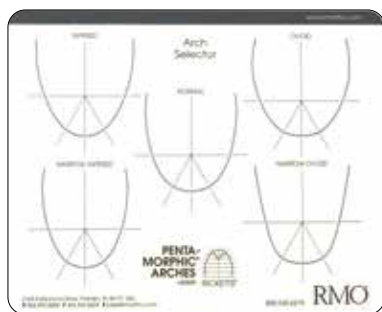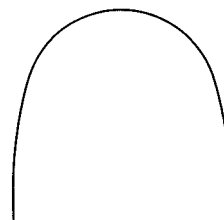

Dr.リケッツ考案の模型からアーチ形状を選択するテンプレートです。

ペンタモーフィックアーチフォームセレクトター


RMO

規格 (mm)	包装	商品番号
254×203	1	i00509

206350610

アーチフォームについて（モリタデンタルプロダクツ製）

2種類のアーチフォームをご用意しております。

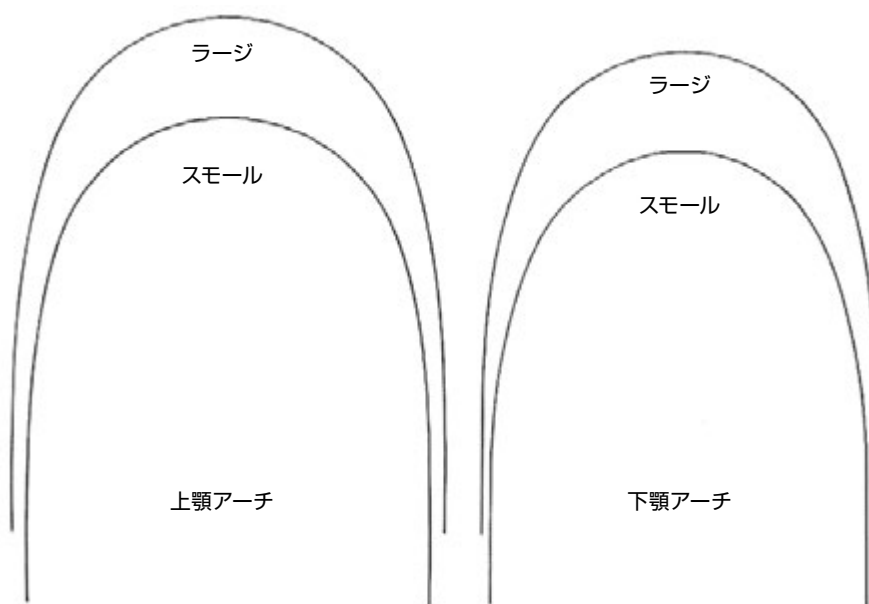

標準的な日本人の歯列弓形態に合わせて作られたアーチフォームです。
サイズはラージとスモールの2種類で、犬歯間幅径が異なります。

※原寸大ではありません。



審美ワイヤーのご紹介

JM Orthoでは、ワイヤーが治療中に目立たない「審美ワイヤー」をご用意しております。

*装着ブラケット：クリスタブレース3（掲載ページ：24～25）

※色味は様々な条件によって異なって見えることがあります。イメージとしてご参考下さい。

ホワイトコーティング



ナノホワイト（掲載ページ：88～89）

特殊ナノコーティング技術を採用しているため、はがれにくく、美しさが長持ちします。全面にコーティングが施されており、金属の露出がなく、審美性に優れています。

材質：ステンレススティール（SUSワイヤー）
ニッケルチタン（タイニロイ）



GHOSTワイヤー（旧FLIワイヤー）（掲載ページ：90）

ワイヤーの唇側面にのみPTFE（テフロン）コーティングが施されているため、ワイヤーの滑りが損なわれません。ナノホワイトに比べるとやや歯冠色に近く、様々な審美ブラケットとの併用に最適です。

材質：ステンレススティール、ニッケルチタン

ゴールドブレーティング

モリタデンタルプロダクツ製の「タイニロイワイヤーFX」ならびに「SUSワイヤー」では、ゴールドブレーティング処理が施された「レモンゴールド」「ピーチゴールド」をご用意しています。

金属色が目立ちにくく、ナチュラルな色合いが特長です。

掲載ページ：「タイニロイワイヤーFX」→91／「SUSワイヤー」→98

レモンゴールド



ピーチゴールド



ロジウムコーティング



ゴムメタルでは、ロジウムコーティングを施した「ゴムメタルホワイト」がございます。

プラチナのような落ち着いた色合いで、ニッケルアレルギーをお持ちの患者さんにもご使用いただけます。

掲載ページ：87

*装着しているブラケットはアリスブラケット（掲載ページ：34～35）です



ゴムメタル

JM Ortho

GUMMETAL[®]

Niフリーの
ベータ チタン合金
Ti . Nb . Zr . Ta


高い回復力と
屈曲性を同時に
実現

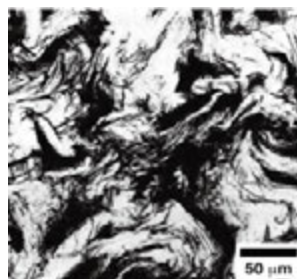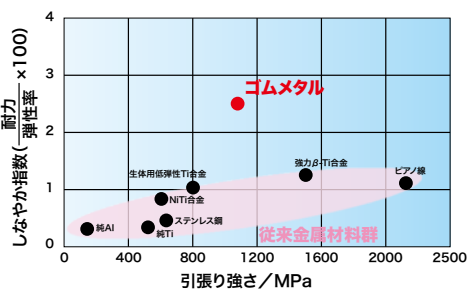


合金製造過程における90%以上の強冷間加工がマーブル状の微細組織構造を作りGUMMETALの特異な性質を生みだします。熱処理は厳禁です。
(資料提供: 豊田中央研究所)

■ ゴムメタル[®]の回復力

▶ ISO規格での三点曲げ試験

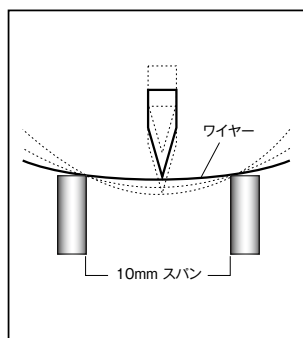


ワイヤーの種類と弾性 (φ.016仕様の場合)

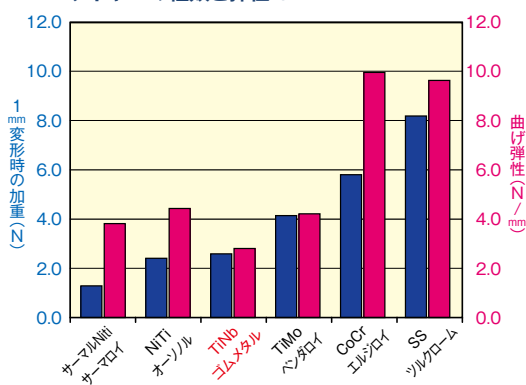


曲げ弾性 (N/mm): 3点曲げグラフにおける傾き


ゴムメタルの太さと硬さ

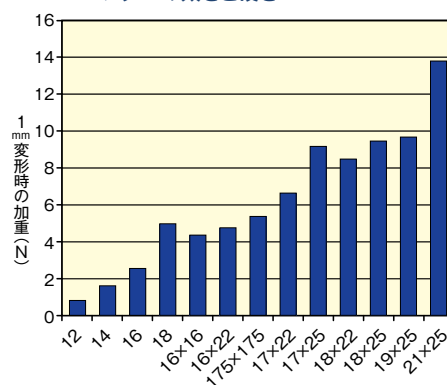■ ゴムメタル[®]の摩擦力

▶ 表面仕上げとしなやかさで摩擦力はTiMoの半分以下の値です。

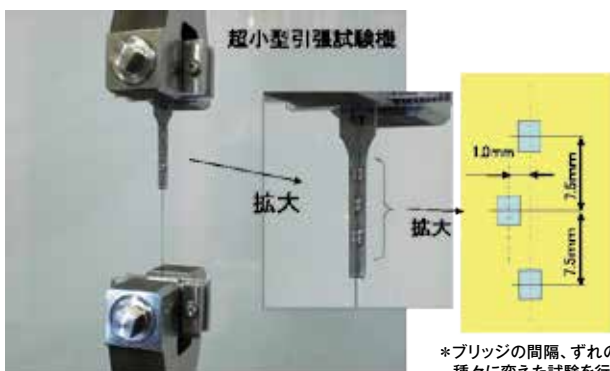

*ブリッジの間隔、ずれの長さを種々に変えた試験を行って、最適な寸法を決定

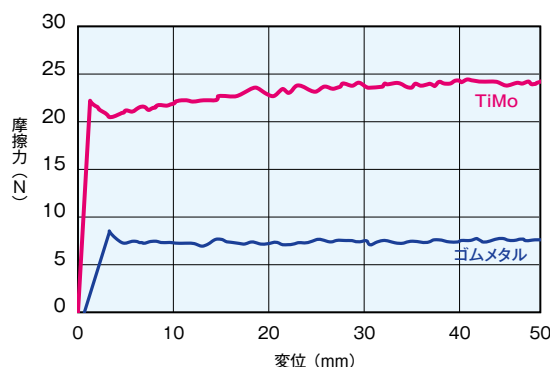

1. ゴムメタルは非常にしなやかなワイヤーです。
従来に比べ治療早期から大きなサイズの角ワイヤーの装着が可能ですので、レベリングの過程からトルクコントロールを加味することができます。
2. 実用弾性域がきわめて広く、同時に歪量に対して応力がリニアに増加しないので活性化量を最大化することができます。
3. 摩擦が小さく抜歯症例のスライディングにも好適です。



ゴムメタル

JM Ortho




1. GUMMETALワイヤーは太さの割にしなやかさがあるため、非常にマイルドな矯正力を得ることができます。
2. 早い治療ステージから角ワイヤーが使用可能であり、ブラケットに付与されたトルクを反映できます。
3. 容易に屈曲することができ、さらに応力による屈曲後の後戻りがきわめて少ないため、個々の患者さんに合わせたパーソナルな調節が随意となります。
4. 屈曲時の感覚が従来のCoCr合金に近く、曲げ難さがありません。
5. 応力歪特性が曲線で推移する超弾性の性質があるにもかかわらずヒステリシスがないため、術者が望む矯正力を正確に付与できます。



開咬症例

アーチワイヤーナチュラルフォーム


	サイズ		包装	商品番号	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.014	0.356	5	GM14UE	20685068814UE	GM14LE	20685068814LE	
	.016	0.406	5	GM16UE	16UE	GM16LE	16LE	
	.018	0.457	5	GM18UE	18UE	GM18LE	18LE	
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	5	GM1616UE	2068506891616UE	GM1616LE	2068506891616LE	
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	5	GM1622UE	2068506941622UE	GM1622LE	2068506941622LE	
	.017×.022	0.432×0.559	5	GM1722UE	1722UE	GM1722LE	1722LE	
	.017×.025	0.432×0.635	5	GM1725UE	1725UE	GM1725LE	1725LE	
	.018×.022	0.457×0.559	5	GM1822UE	1822UE	GM1822LE	1822LE	
	.018×.025	0.457×0.635	5	GM1825UE	1825UE	GM1825LE	1825LE	
	.019×.025	0.483×0.635	5	GM1925UE	1925UE	GM1925LE	1925LE	
	.021×.025	0.553×0.635	5	GM2125UE	2125UE	GM2125LE	2125LE	

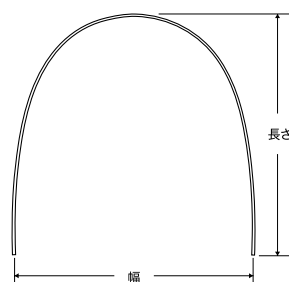

上顎 幅60×長さ75mm
下顎 幅55×長さ70mm

アーチブランク (リングルテクニック用)

	サイズ		包装	幅 (mm)	長さ (mm)	頂部径	商品番号	
	inch	mm					商品番号	
ラウンド	.016	0.406	5	62	80	26φ	GM16-1E	206850698161E
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	5	62	80	26φ	GM1616-1E	20685069816161E
	.0175×.0175	0.445×0.445	5	62	80	26φ	GM175175-1E	2068506951E
	.0175×.0175	0.445×0.445	5	68	83	32φ	GM175175-4E	4E
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	5	62	80	26φ	GM1622-1E	20685069816221E
	.017×.025	0.432×0.635	5	62	80	26φ	GM1725-1E	17251E
	.018×.022	0.457×0.559	5	62	80	26φ	GM1822-1E	18221E
	.018×.025	0.457×0.635	5	62	80	26φ	GM1825-1E	18251E

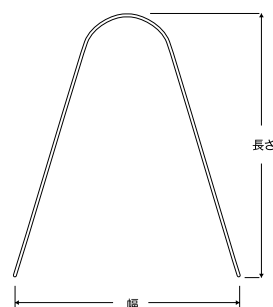

BRACKETS
TUBES
BANDS
WIRES
EARLY TREATMENT
INTRAORAL EXTRAORAL
EXPANSION SCREWS
I-station α
SUPPLIES
INSTRUMENTS
BIOSTAR SYSTEM
LABORATORY PRODUCTS
EQUIPMENT
SAM SYSTEM
COA SOFTWARE
BOOKS

ゴムメタルストレートワイヤー（切線）

JM Ortho

■ 切線（矯正線）

プラスチック管に入っています。



ゴムメタルストレートワイヤー（切線/長さ：355mm）

	サイズ		包装	商品番号	
	inch	mm			
ラウンド	.012	0.305	5	GMC12	20685068512
	.014	0.356	5	GMC14	14
	.016	0.406	5	GMC16	16
	.018	0.457	5	GMC18	18
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	5	GMC1616	2068506861616
	.0175×.0175	0.445×0.445	5	GMC175175	175175
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	5	GMC1622	2068506871622
	.017×.022	0.432×0.559	5	GMC1722	1722
	.017×.025	0.432×0.635	5	GMC1725	1725
	.018×.022	0.457×0.559	5	GMC1822	1822
	.018×.025	0.457×0.635	5	GMC1825	1825
	.019×.025	0.483×0.635	5	GMC1925	1925
	.021×.025	0.553×0.635	5	GMC2125	2125

医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理

GMトルキングブライヤー

TASK（シオダ）

商品番号

GMTP2



206850814



ツイードのアーチベンディングブライヤーを横に倒した形で目安となる20度の口角が使いやすいさを演出します。

医療機器届出番号 09B2X00010R00012 一般

CUT006T

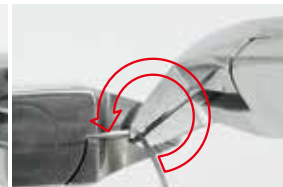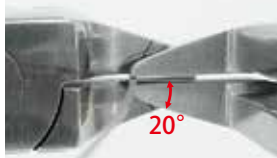

ゴムメタルアーチャーレット


TASK（シオダ）

商品番号

CUTGMAT

206860695

ゴムメタルワイヤーのターレットとしてだけでなく、10°、20°の溝を設けているので、ゴムメタルワイヤーにトルクを付与するツールとしてもお使いいただけます。

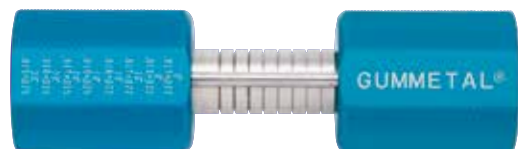

スロットサイズ	トルク	代表的な使用例
.017" × .022"	0°	アーチフォームの屈曲
.018" × .022"	0°	アーチフォームの屈曲
.017" × .022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.018" × .022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.019" × .025"	10°	前歯部トルクの屈曲
.017" × .025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.018" × .025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.019" × .025"	20°	前歯部トルクの屈曲

ゴムメタルアーチャーレット ZERO

TASK（シオダ）

商品番号

CUTGMATZ

206860180

ゴムメタルワイヤーのアーチフォーミングに使用するターレットで、トルクは全て0°です。



スロットサイズ	トルク
.016" × .022"	0°
.017" × .022"	0°
.017" × .025"	0°
.018" × .022"	0°
.018" × .025"	0°
.019" × .025"	0°
.021" × .025"	0°

注意事項：

- ゴムメタルワイヤー以外のワイヤーには使用しないで下さい。
- ゴムメタルワイヤーは、他のワイヤーと異なり超弾性的性質を有するため、各スロットに表示しているトルク角は各ワイヤーサイズにおける100%のトルク角の屈曲が得にくいことがあります。本来のワイヤーサイズよりも大きいサイズのスロットを選択し、スロット内のがたつきを利用して、強めのトルクを屈曲することも可能です。



ゴムメタルストレートワイヤー（巻線）

JM Ortho




●ゴムメタルの矯正力

		.032インチ (0.813mm)				.036インチ (0.914mm)			
		GUM METAL	TiMo	ステンレス	CoCr	GUM METAL	TiMo	ステンレス	CoCr
ヤング率 (3点曲げ逆計算)	E(GPa)	47	79	157	189	44	59	162	178
曲げ荷重									
上顎 (大臼歯-大臼歯) 110mm→64mm	F(N)	1.3	1.7	2.6	2.9	1.6	1.9	3.8	4.1

対象とした金属はTiMo（ベンダロイ）、ステンレス（ツルクローム）、CoCr（エルジロイ）です。

指で曲げた感覚に近いのは量りに押し当てる測定法です。

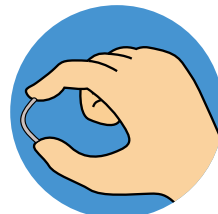

（長さ110mm）

GMR28	110g
GMR32	140g
GMR36	175g
GMR40	230g

●巻線タイプ

ワイヤーはビニルチューブに入っています。



●用途

- ・マリガンのオーバーレイアーチ
- ・クワドヘリックスの代わりに
- ・機能的矯正装置
- ・保定装置
- ・パーシャルデンチャーのクラスプ



2010.9.21

2010.11.18

ゴムメタルのオーバーレイアーチは持続的な弱い力で効率的に側方拡大します。オーバーレイアーチには前歯のフレアアウトが抑制できる長所があります。

●固定式拡大装置にはアタッチメントを使用します。

ゴムメタルストレートワイヤー（巻線）

サイズ

	inch	mm	長さ	商品番号	
ラウンド	.028	0.711	3.2m	GMR28	206850654
	.032	0.813	2.5m	GMR32	206850655
	.036	0.914	2.0m	GMR36	206850684
	.040	1.016	1.6m	GMR40	206850656
	.048	1.219	1.1m	GMR48	206850699
スクエア	.036×.036	0.914×0.914	1.5m	GMR3636	206860696

医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理

GMアタッチメントは140ページ ▶

- BRACKETS
- TUBES
- BANDS
- WIRES
- EARLY TREATMENT
- INTRAORAL EXTRAORAL
- EXPANSION SCREWS
- I-station α
- SUPPLIES
- INSTRUMENTS
- BIOSTAR SYSTEM
- LABORATORY PRODUCTS
- EQUIPMENT
- SAM SYSTEM
- COA SOFTWARE
- BOOKS

ゴムメタルフロッシュ／ゴムメタル TYPE II

JM Ortho

ゴムメタルフロッシュ



フロッシュワイヤーはスプリント（熱可塑性プレート）と併用して使用する GUMMETAL ワイヤーで、両端がスプリントと接合しやすい形状になっています。

「フロッシュ」とはドイツ語で「カエル」という意味ですが、ゴムメタルはカエルの脚力の様なバネ特性を持っています。フロッシュワイヤーは、極めてしなやかかつ高強度であるゴムメタルの特性を活かして作られたコネクティングワイヤーです。

フロッシュワイヤーと上下顎スプリントを用いて作製された装置が「フロッシュアプライアンス」です。咬合力をアクティブな圧下力として前歯部に荷重をかけることで、咬合平面を変更し顎位を改善する機能的装置です。スプリントにフロッシュワイヤーを即時重合レジンで固定した後、GUMMETAL ベンダーなどを用いてアクチベートして使用します。


（スプリントに使用するプレートは、ニューインプレロン S PD 2.0mm を推奨しています。）

適応症例


- 対象年齢 dental age Ⅲ A（全ての第 1 大臼歯と前歯萌出完了期）～Ⅲ C（第 2 大臼歯萌出開始時期）
- Ⅰ級開咬、Ⅱ級 1 類の機能的不正咬合
- 思春期までのマルチブラケット治療における咬合挙上とⅠ級関係の獲得をフロッシュアプライアンスに委ねて、マルチブラケット装着期間を短縮



フロッシュアプライアンスの製作方法は
ホームページからご覧ください →

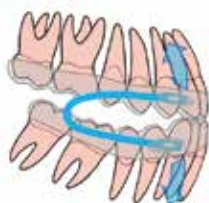

Ⅱ級 1 類：前歯の圧下

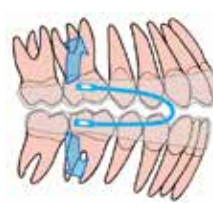


開咬：臼歯部の圧下



	径	包装	商品番号	
1 症例セット	.071 インチ	2	GMF71C1	206850423
3 症例キット	(1.8mm)	6	GMF71C3	206850424

医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理

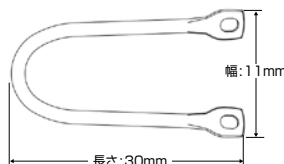

GUMMETAL ベンダー TASK(シオダ)

GUMMETAL ワイヤーは傷が付くと折れやすい性質がありますが、GUMMETAL ベンダーのようにベンディング面に丸みのあるプライヤーを使用すると傷つけずにアーチを広げることが出来ます。

包装	商品番号	
1	CUTGMB	206850653
医療機器届出番号 09B2X00010R00013 一般		



ゴムメタル TYPE II



ゴムメタル TYPE II は、個々の歯の移動を 1 ステップずつ行うのではなく、歯列全体を同時に整直させる歯の一括移動「en bloc」movement」を目的として長谷川 信先生が開発されたワイヤーです。

適応症例として、咬合平面を積極的に変える必要がある開咬、Ⅱ級 1 類などの症例、前歯部を口蓋側にリトラクトする必要がある症例などで使用します。



* 下顎用のご用意はございません。

* ゴムメタル TYPE II を臼歯部のチューブのみ挿入した際の曲がり方

サイズ	包装	商品番号	
.018 × .022 インチ (0.457 × 0.559mm)	3	GMT21822UE	206850425




医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理



ゴムメタルホワイト

JM Ortho


●アーチワイヤー

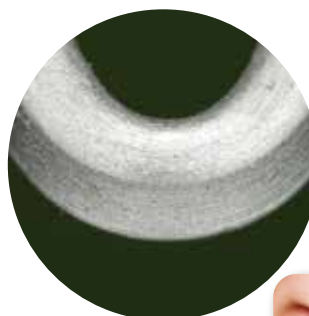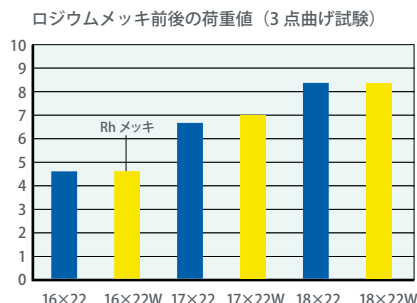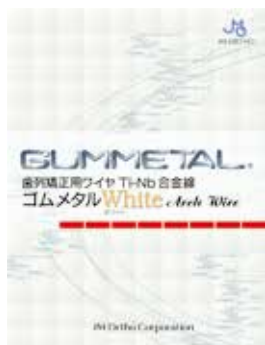


Ni フリーの TiNbTaZr 合金
高い回復力と屈曲性を同時に実現
塑性変形時の結晶転位が起きない



線返し曲げテスト

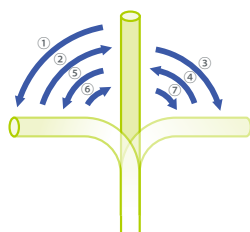


ロジウム厚さ 0.2 ~ 0.6 μm
曲げても剥がれにくく作っています。

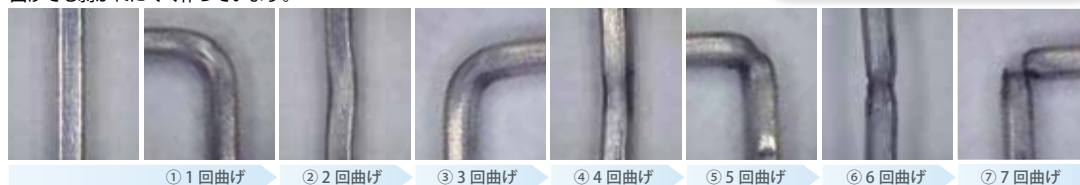

① 1 回曲げ 直角に曲げる ② 2 回曲げ 真っ直ぐに伸ばす ③ 3 回曲げ 再度逆側に曲げる ④ 4 回曲げ また伸ばす ⑤ 5 回曲げ 1 回目側に曲げる ⑥ 6 回曲げ また伸ばす ⑦ 7 回曲げ さらに曲げると折れました

アーチワイヤーナチュラルフォーム

	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch	mm		商品番号	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.014	0.356	5	GMW14UE	20685042814UE	GMW14LE	20685042814LE
	.016	0.406	5	GMW16UE	16UE	GMW16LE	16LE
	.018	0.457	5	GMW18UE	18UE	GMW18LE	18LE
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	5	GMW1616UE	2068506971616UE	GMW1616LE	2068506971616LE
レクタンギュラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	5	GMW1622UE	1622UE	GMW1622LE	1622LE
	.017 × .022	0.432 × 0.559	5	GMW1722UE	1722UE	GMW1722LE	1722LE
	.017 × .025	0.432 × 0.635	5	GMW1725UE	1725UE	GMW1725LE	1725LE
	.018 × .022	0.457 × 0.559	5	GMW1822UE	1822UE	GMW1822LE	1822LE
	.018 × .025	0.457 × 0.635	5	GMW1825UE	1825UE	GMW1825LE	1825LE
	.019 × .025	0.483 × 0.635	5	GMW1925UE	1925UE	GMW1925LE	1925LE
	.021 × .025	0.553 × 0.635	5	GMW2125UE	2125UE	GMW2125LE	2125LE

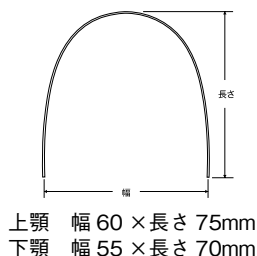

※ゴムメタルホワイト アーチワイヤーにはセンターマーキングはございません。

●ストレートワイヤー巻線

- ・ゴムメタルはロウ着や溶接はできません。熱により冷間加工で得たゴムメタルの特性が失われます。
- ・ゴムメタルワイヤーに傷を付けないようギザの付いたプライヤーは使わないで下さい。破折の原因となります。
- ・ゴムメタルワイヤーは軽く握って下さい。強く握ると凹みがつきます。
- ・ゴムメタル_® は豊通マテリアルの登録商標です。



オーバーレイアーチの例(上顎がホワイト)



ゴムメタルストレートワイヤー (巻線)

	サイズ			商品番号	
	inch	mm	長さ		
ラウンド	.032	0.813	1.25m	GMWR32	206850657
	.036	0.914	1.00m	GMWR36	206850658

医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理

BRACKETS
TUBES
BANDS
WIRES
EARLY TREATMENT
INTRAORAL EXTRAORAL
EXPANSION SCREWS
I-station α
SUPPLIES
INSTRUMENTS
BIOSTAR SYSTEM
LABORATORY PRODUCTS
EQUIPMENT
SAM SYSTEM
COA SOFTWARE
BOOKS

ナノホワイト ホワイトコーティングワイヤー モリタデンタルプロダクツ

ホワイトコーティングワイヤー ナノホワイト ニッケルチタン・ステンレススティール



はがれにくい特殊ナノコーティング技術を採用した
ホワイトコーティングワイヤーです。

ナノ粒子*を使ったコーティング技術により、はがれにくく美しさ
が続きます。

*1nm (ナノメートル) = 100万分の1mm

レベリングからフィニッシュまで一貫してホワイトワイヤーを使
えるようになりました。

また、ワイヤーはすべて個包装で衛生的です。

正中のマーキングは上顎は黒色、下顎は赤色となっています。

主 な 特 長

特長①


全面コーティングだから
金属の露出がない



特長②

はがれにくく、白さ長持ち

試験前のナノホワイト

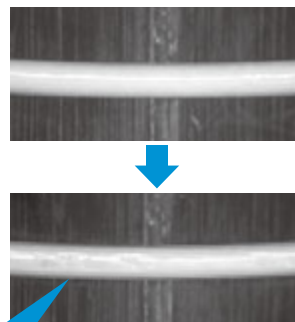

歯ブラシ摩擦20,000回試験の結果、コート下地の金属が
露出せず、見た目がほとんど変わらないことが示されています。

(自社実験データ / SUSワイヤーを使用)


は が れ に く い 理 由

理由①

ナノレベルの微粒子構造をもつ
特殊コーティング技術を採用

ナノ粒子が金属の凸凹に隙間なく密着、
高い耐剥離性を実現

Nano White
ナノホワイト

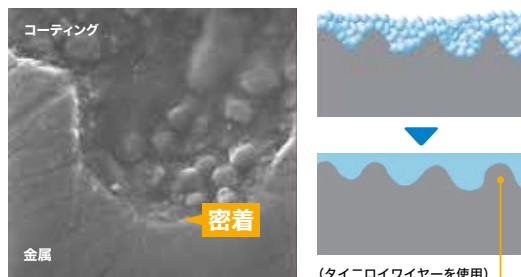

(タイニロワイヤーを使用)

さらに熱溶解し、
金属と
一体化させる

理由②


はがれやすいところに
厚みを持たせ耐摩耗性を向上

ブラッシングやスロット干渉等、日常的に
摩耗が発生する唇側面のみを厚くコーティング
また、全面にコーティングしているので、
金属の露出がありません

スロットの端にあたり
摩耗しやすい角に
厚みを持たせた特殊構造

角が
特に厚い

唇側のみ
厚い

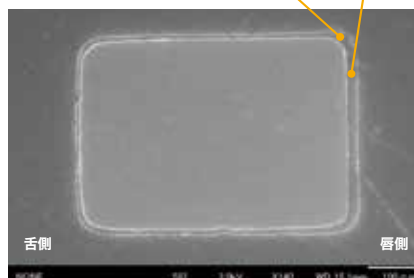

電顕写真×140 (タイニロワイヤーを使用)



ナノホワイト ホワイトコーティングワイヤー モリタデンタルプロダクツ

タイニロイワイヤー ナノホワイト (ニッケルチタンワイヤー) プリフォームドアーチ

	実寸		フォーム		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	サイズ	商品番号		商品番号	
ラウンド	.012	0.30	10	スモール	TNW12US	20688014212US	TNW12LS	20688014212LS
			10	ラージ	TNW12UL	12UL	TNW12LL	12LL
	.014	0.36	10	スモール	TNW14US	14US	TNW14LS	14LS
			10	ラージ	TNW14UL	14UL	TNW14LL	14LL
	.016	0.41	10	スモール	TNW16US	16US	TNW16LS	16LS
			10	ラージ	TNW16UL	16UL	TNW16LL	16LL
	.018	0.46	10	スモール	TNW18US	18US	TNW18LS	18LS
			10	ラージ	TNW18UL	18UL	TNW18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.41 x 0.41	10	スモール	TNW1616US	2068801431616US	TNW1616LS	2068801431616LS
			10	ラージ	TNW1616UL	1616UL	TNW1616LL	1616LL
レクタングラー	.016 x .022	0.41 x 0.56	10	スモール	TNW1622US	2068801431622US	TNW1622LS	2068801431622LS
			10	ラージ	TNW1622UL	1622UL	TNW1622LL	1622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.64	10	スモール	TNW1725US	1725US	TNW1725LS	1725LS
			10	ラージ	TNW1725UL	1725UL	TNW1725LL	1725LL
	.019 x .025	0.48 x 0.64	10	スモール	TNW1925US	1925US	TNW1925LS	1925LS
			10	ラージ	TNW1925UL	1925UL	TNW1925LL	1925LL

タイニロイワイヤー ナノホワイト (ニッケルチタンワイヤー) プリフォームドアーチ アソート

	包装ワイヤーサイズ	包装	フォームサイズ	商品番号	
アソート	.012/.014/.016	10	ラージ	TNWA	206880114
	.016 x .016/.016 x .022	(上下顎各1本)			
アソート .022用	.014/.016/.018	12	ラージ	TNWA22	206880196
	.016 x .022/.017 x .025/.019 x .025	(上下顎各1本)			

※「タイニロイワイヤー ナノホワイト」は表記サイズはコーティング膜厚も含めたサイズ（製品実寸）であるため、ワイヤーの持つ矯正力は表記されたサイズよりもやや小さくなります。 医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理


SUS ワイヤー ナノホワイト (ステンレススティールワイヤー) プリフォームドアーチ

	原線サイズ		フォーム		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	サイズ	商品番号		商品番号	
コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です)								
ラウンド	.014	0.35	10	スモール	SNW14US	20688014014US	SNW14LS	20688014014LS
			10	ラージ	SNW14UL	14UL	SNW14LL	14LL
	.016	0.40	10	スモール	SNW16US	16US	SNW16LS	16LS
			10	ラージ	SNW16UL	16UL	SNW16LL	16LL
	.018	0.45	10	スモール	SNW18US	18US	SNW18LS	18LS
			10	ラージ	SNW18UL	18UL	SNW18LL	18LL
コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です)								
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	スモール	SNW1616US	2068801411616US	SNW1616LS	2068801411616LS
			10	ラージ	SNW1616UL	1616UL	SNW1616LL	1616LL
コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です)								
レクタングラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	スモール	SNW1622US	2068801411622US	SNW1622LS	2068801411622LS
			10	ラージ	SNW1622UL	1622UL	SNW1622LL	1622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	スモール	SNW1725US	1725US	SNW1725LS	1725LS
			10	ラージ	SNW1725UL	1725UL	SNW1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	スモール	SNW1825US	1825US	SNW1825LS	1825LS
			10	ラージ	SNW1825UL	1825UL	SNW1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	スモール	SNW1925US	1925US	SNW1925LS	1925LS
			10	ラージ	SNW1925UL	1925UL	SNW1925LL	1925LL

※ ナノホワイトシリーズのワイヤーサイズについて

ナノホワイトシリーズの実寸ならびに原線サイズは、表記されたサイズに対して下図のように異なります。ご注文の際はご注意ください。

(例) .016"表記の場合

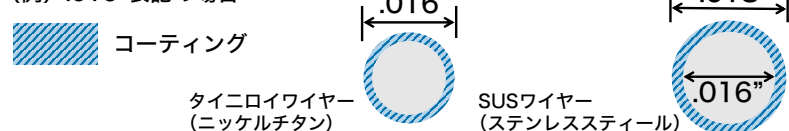

GHOST ワイヤー (旧 FLI ワイヤー)

RMO

Aesthetic Archwires

GHOST™

ホワイトコーティングワイヤー “ゴースト™”


旧 FLI ワイヤーとの
商品番号対照表はこちら▶

RMO 社製ワイヤー新ブランド「GHOST™」誕生！

RMO 社製ワイヤー「FLI ワイヤー」が「GHOST™ (ゴースト) ワイヤー」としてリブランディングしました！
「GHOST™ ワイヤー」は「FLI ワイヤー」と同様、唇・頬側面にのみ剥がれにくいトゥースカラーコーティングが施されており、自然な見た目で目立ちにくい審美ワイヤーです。コーティングが唇・頬側面のみのため、ワイヤーの滑りを阻害することなく、セラミックやプラスチック製ブラケットとの併用で審美性の高い矯正治療が行えます。材質は NiTi と SS の 2 種類です。

アーチ形状について

アーチ形状はナチュラルフォームのみの取り扱いです。

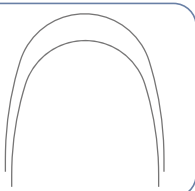

GHOST ワイヤー NiTi (ニッケルチタン) *1



	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch	mm		商品番号		商品番号	
ラウンド	.012	0.305	10	W11AU012A	206860790U012A	W11AL012A	206860790L012A
	.014	0.356	10	W11AU014A	U014A	W11AL014A	L014A
	.016	0.406	10	W11AU016A	U016A	W11AL016A	L016A
	.018	0.457	10	W11AU018A	U018A	W11AL018A	L018A
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	10	W11AU1616A	206860791U1616A	W11AL1616A	206860791L1616A
レクタングラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	10	W11AU1622A	206860791U1622A	W11AL1622A	206860791L1622A
	.017 × .025	0.432 × 0.635	10	W11AU1725A	U1725A	W11AL1725A	L1725A
	.018 × .025	0.457 × 0.635	10	W11AU1825A	U1825A	W11AL1825A	L1825A
	.019 × .025	0.483 × 0.635	10	W11AU1925A	U1925A	W11AL1925A	L1925A

GHOST ワイヤー SS (ステンレススティール) *2



	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch	mm		商品番号		商品番号	
ラウンド	.014	0.356	10	W20AU014A	206860792U014A	W20AL014A	206860792L014A
	.016	0.406	10	W20AU016A	U016A	W20AL016A	L016A
	.018	0.457	10	W20AU018A	U018A	W20AL018A	L018A
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	10	W20AU1616A	206860793U1616A	W20AL1616A	206860793L1616A
レクタングラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	10	W20AU1622A	206860793U1622A	W20AL1622A	206860793L1622A
	.017 × .025	0.432 × 0.635	10	W20AU1725A	U1725A	W20AL1725A	L1725A
	.018 × .025	0.457 × 0.635	10	W20AU1825A	U1825A	W20AL1825A	L1825A
	.019 × .025	0.483 × 0.635	10	W20AU1925A	U1925A	W20AL1925A	L1925A

* 1 医療機器認証番号 224AKBZX00093000 管理

* 2 医療機器認証番号 224AKBZX00103000 管理



タイニロワイヤー(NiTiワイヤー)

モリタデンタルプロダクツ



- ソフトな力で安定した超弾性を実現した NiTiワイヤーです。
- スムーズな表面性状となっています。
- より審美性の高いゴールドブレーティング処理を施した「レモンゴールド」「ピーチゴールド」もご用意しております。
- アーチワイヤーはすべて個包装で、衛生的です。
- 正中のマーキングは上顎は黒色、下顎は赤色となっています。

タイニロワイヤーFX

レモンゴールド プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		包装	フォーム サイズ	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.012	0.30	10	スモール	TLG12US	20688014412US	TLG12LS	20688014412LS
			10	ラージ	TLG12UL	12UL	TLG12LL	12LL
	.014	0.36	10	スモール	TLG14US	14US	TLG14LS	14LS
			10	ラージ	TLG14UL	14UL	TLG14LL	14LL
	.016	0.41	10	スモール	TLG16US	16US	TLG16LS	16LS
			10	ラージ	TLG16UL	16UL	TLG16LL	16LL
	.018	0.46	10	スモール	TLG18US	18US	TLG18LS	18LS
			10	ラージ	TLG18UL	18UL	TLG18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.41 x 0.41	10	スモール	TLG1616US	2068801451616US	TLG1616LS	2068801451616LS
			10	ラージ	TLG1616UL	1616UL	TLG1616LL	1616LL
レクタングュラー	.016 x .022	0.41 x 0.56	10	スモール	TLG1622US	2068801451622US	TLG1622LS	2068801451622LS
			10	ラージ	TLG1622UL	1622UL	TLG1622LL	1622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.64	10	スモール	TLG1725US	1725US	TLG1725LS	1725LS
			10	ラージ	TLG1725UL	1725UL	TLG1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.46 x 0.64	10	スモール	TLG1825US	1825US	TLG1825LS	1825LS
			10	ラージ	TLG1825UL	1825UL	TLG1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.64	10	スモール	TLG1925US	1925US	TLG1925LS	1925LS
			10	ラージ	TLG1925UL	1925UL	TLG1925LL	1925LL

ピーチゴールド プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		包装	フォーム サイズ	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.012	0.30	10	スモール	TPG12US	20688014812US	TPG12LS	20688014812LS
			10	ラージ	TPG12UL	12UL	TPG12LL	12LL
	.014	0.36	10	スモール	TPG14US	14US	TPG14LS	14LS
			10	ラージ	TPG14UL	14UL	TPG14LL	14LL
	.016	0.41	10	スモール	TPG16US	16US	TPG16LS	16LS
			10	ラージ	TPG16UL	16UL	TPG16LL	16LL
	.018	0.46	10	スモール	TPG18US	18US	TPG18LS	18LS
			10	ラージ	TPG18UL	18UL	TPG18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.41 x 0.41	10	スモール	TPG1616US	2068801491616US	TPG1616LS	2068801491616LS
			10	ラージ	TPG1616UL	1616UL	TPG1616LL	1616LL
レクタングュラー	.016 x .022	0.41 x 0.56	10	スモール	TPG1622US	2068801491622US	TPG1622LS	2068801491622LS
			10	ラージ	TPG1622UL	1622UL	TPG1622LL	1622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.64	10	スモール	TPG1725US	1725US	TPG1725LS	1725LS
			10	ラージ	TPG1725UL	1725UL	TPG1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.46 x 0.64	10	スモール	TPG1825US	1825US	TPG1825LS	1825LS
			10	ラージ	TPG1825UL	1825UL	TPG1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.64	10	スモール	TPG1925US	1925US	TPG1925LS	1925LS
			10	ラージ	TPG1925UL	1925UL	TPG1925LL	1925LL

医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理

タイニロイワイヤー(NiTiワイヤー)

モリタデンタルプロダクツ

タイニロイワイヤー-FX

レギュラー プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		包装	フォーム サイズ	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.012	0.30	10	スモール	TFX12US	20688014612US	TFX12LS	20688014612LS
			10	ラージ	TFX12UL	12UL	TFX12LL	12LL
	.014	0.36	10	スモール	TFX14US	14US	TFX14LS	14LS
			10	ラージ	TFX14UL	14UL	TFX14LL	14LL
	.016	0.41	10	スモール	TFX16US	16US	TFX16LS	16LS
			10	ラージ	TFX16UL	16UL	TFX16LL	16LL
	.018	0.46	10	スモール	TFX18US	18US	TFX18LS	18LS
			10	ラージ	TFX18UL	18UL	TFX18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.41 x 0.41	10	スモール	TFX1616US	2068801471616US	TFX1616LS	2068801471616LS
			10	ラージ	TFX1616UL	1616UL	TFX1616LL	1616LL
レクタングュラー	.016 x .022	0.41 x 0.56	10	スモール	TFX1622US	2068801471622US	TFX1622LS	2068801471622LS
			10	ラージ	TFX1622UL	1622UL	TFX1622LL	1622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.64	10	スモール	TFX1725US	1725US	TFX1725LS	1725LS
			10	ラージ	TFX1725UL	1725UL	TFX1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.46 x 0.64	10	スモール	TFX1825US	1825US	TFX1825LS	1825LS
			10	ラージ	TFX1825UL	1825UL	TFX1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.64	10	スモール	TFX1925US	1925US	TFX1925LS	1925LS
			10	ラージ	TFX1925UL	1925UL	TFX1925LL	1925LL

医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理

ワイヤー保管用器材





XPress SEワイヤー (旧オーソソルワイヤー) / TRANSFORM HAワイヤー (旧サマロワイヤー) RMO

SuperElastic NiTi

XPress™ SE



旧オーソソルワイヤーとの
商品番号対照表はこちら▶



スーパーエラスティック NiTi ワイヤー “エクスプレス SE”

RMO 社製ワイヤー新ブランド「XPress™ SE」が誕生！

RMO 社製ワイヤー「オーソソルワイヤー」が「XPress™ SE ワイヤー」としてリブランディングいたしました！
「XPress™ SE ワイヤー」は安定した柔らかい力を継続的に発揮する超弾性のニッケル・チタンの合金ワイヤーです。
スムーズな表面処理によりブラケットスロット内での滑りが良いため、ワイヤー自体の変形が少ないことも特徴です。

XPress™ SEワイヤー ナチュラルフォーム (旧名称：ナチュラルアーチ)

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.012	0.305	25	W11AU012	206850276AU012	W11AL012 206850276AL012
	.014	0.356	25	W11AU014	U014	W11AL014 L014
	.016	0.406	25	W11AU016	U016	W11AL016 L016
	.018	0.457	25	W11AU018	U018	W11AL018 L018
スクエア / レクタングル	.014 × .025	0.356 × 0.635	25	W11AU1425	206850277AU1425	W11AL1425 206850277AL1425
	.016 × .016	0.406 × 0.406	25	W11AU1616	U1616	W11AL1616 L1616
	.016 × .022	0.406 × 0.559	25	W11AU1622	U1622	W11AL1622 L1622
	.016 × .025	0.406 × 0.635	25	W11AU1625	U1625	W11AL1625 L1625
	.017 × .025	0.432 × 0.635	25	W11AU1725	U1725	W11AL1725 L1725
	.018 × .018	0.457 × 0.457	25	W11AU1818	U1818	W11AL1818 L1818
	.018 × .025	0.457 × 0.635	25	W11AU1825	U1825	W11AL1825 L1825
	.019 × .025	0.483 × 0.635	25	W11AU1925	U1925	W11AL1925 L1925
	.021 × .025	0.533 × 0.635	25	W11AU2125	U2125	W11AL2125 L2125

XPress™ SEワイヤー リバースカーブ

XPress™ SE ワイヤー・リバースカーブはニッケル・チタン合金ワイヤーで、スムーズな表面はローフリクションにより、ワイヤー自体の変形が少なく、柔らかいフォースによりリバースカーブの効果が継続的に発揮されます。特に、咬合挙上、バイトクロージング、スペースクロージングなどの目的に適したアーチです。

XPress™ SEワイヤー リバースカーブ

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.016	0.406	10	W11OU016	206850278OU016	W11OL016 206850278OL016
	.018	0.457	10	W11OU018	U018	W11OL018 L018
スクエア / レクタングル	.016 × .016	0.406 × 0.406	10	W11OU1616	U1616	W11OL1616 L1616
	.016 × .022	0.406 × 0.559	10	W11OU1622	U1622	W11OL1622 L1622
	.017 × .025	0.432 × 0.635	10	W11OU1725	U1725	W11OL1725 L1725
	.019 × .025	0.483 × 0.635	10	W11OU1925	U1925	W11OL1925 L1925

医療機器認証番号 307AKBZX00093000 管理

Heat-Activated NiTi

TRANSFORM™ HA



旧サマロワイヤーとの
商品番号対照表はこちら▶



ヒートアクチベート NiTi “トランスフォーム HA”

RMO 社製ワイヤー新ブランド「TRANSFORM™ HA」が誕生！

RMO 社製ワイヤー「サマロワイヤー」が「TRANSFORM HA™ ワイヤー」としてリブランディングいたしました！
「TRANSFORM HA™ ワイヤー」は室温ではしなやかで軟らかく、ブラケットスロットへの挿入、結さつが容易に行えます。
また、口腔内で温められることで弾性を回復し、形状・サイズに応じた矯正力を発揮する温度活性型 NiTi 合金ワイヤーです。

TRANSFORM HA™ ワイヤー ナチュラルフォーム (旧名称：ナチュラルアーチ)

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.013	0.330	25	W12AU013	206850247AU013	W12AL013 206850247AL013
	.014	0.356	25	W12AU014	U014	W12AL014 L014
	.016	0.406	25	W12AU016	U016	W12AL016 L016
	.018	0.457	25	W12AU018	U018	W12AL018 L018
スクエア / レクタングル	.014 × .025	0.356 × 0.635	25	W12AU1425	206850248AU1425	W12AL1425 206850248AL1425
	.016 × .016	0.406 × 0.406	25	W12AU1616	U1616	W12AL1616 L1616
	.016 × .022	0.406 × 0.559	25	W12AU1622	U1622	W12AL1622 L1622
	.016 × .025	0.406 × 0.635	25	W12AU1625	U1625	W12AL1625 L1625
	.017 × .025	0.432 × 0.635	25	W12AU1725	U1725	W12AL1725 L1725
	.018 × .025	0.457 × 0.635	25	W12AU1825	U1825	W12AL1825 L1825
	.019 × .025	0.483 × 0.635	25	W12AU1925	U1925	W12AL1925 L1925
	.021 × .025	0.533 × 0.635	25	W12AU2125	U2125	W12AL2125 L2125

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 307AKBZX00093000 管理

G&H NiTiアーチワイヤー


G&H

G&H NiTiアーチワイヤーは、非温度活性型の「スーパーエラスティック」と温度活性型の「サーマルアクチベイト」の2種類をご用意しています。正中に上顎3本・下顎1本のパーマネントマーキングが付与されています。

スーパーエラスティック ツルフォームⅠ

G&H製アーチワイヤーの中でもっとも標準的なアーチ形状のワイヤーです。

スーパーエラスティックNiTiワイヤー ツルフォームⅠ

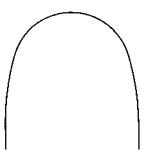	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch			商品番号		商品番号	
	ラウンド	.012	25	SETFU012	206850983U012	SETFL012	206850983L012
		.014	25	SETFU014	U014	SETFL014	L014
		.016	25	SETFU016	U016	SETFL016	L016
		.018	25	SETFU018	U018	SETFL018	L018
スクエア		.016×.016	25	SETFU1616	206850984U1616	SETFL1616	206850984L1616
		.018×.018	25	SETFU1818	U1818	SETFL1818	L1818
		.020×.020	25	SETFU2020	U2020	SETFL2020	L2020
レクタングュラー		.016×.022	25	SETFU1622	206850984U1622	SETFL1622	206850984L1622
		.017×.025	25	SETFU1725	U1725	SETFL1725	L1725
		.018×.025	25	SETFU1825	U1825	SETFL1825	L1825
		.019×.025	25	SETFU1925	U1925	SETFL1925	L1925
		.021×.025	25	SETFU2125	U2125	SETFL2125	L2125


スーパーエラスティック

ツルフォームⅠ ディンプルタイプ

ミッドラインマークとして正中にベンドが入っているタイプのワイヤーです。矯正治療の進行によるワイヤーの左右へのズレを防ぐことができます。パーマネントマーキングは付与されていません。




スーパーエラスティックNiTiワイヤー／ディンプル

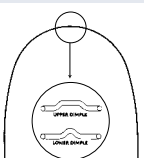
	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch			商品番号		商品番号	
	ラウンド	.012	25	SETFU012D	206850986U012D	SETFL012D	206850986L012D
		.014	25	SETFU014D	U014D	SETFL014D	L014D
		.016	25	SETFU016D	U016D	SETFL016D	L016D
レクタングュラー		.016×.022	25	SETFU1622D	206850987U1622D	SETFL1622D	206850987L1622D
		.017×.025	25	SETFU1725D	U1725D	SETFL1725D	L1725D
		.018×.025	25	SETFU1825D	U1825D	SETFL1825D	L1825D
		.019×.025	25	SETFU1925D	U1925D	SETFL1925D	L1925D

サーマルアクチベイト ツルフォームⅠ

- ・ワイヤーを20℃以下に冷却することで超軟化し、装置への装着が簡単になります。
- ・37℃の体温で適切な矯正力を発揮する温度活性性質です。
- ・チェアタイムを削減し、治療期間中のアポイント間隔を長めに設定することが可能です。
- ・正中に上顎3本下顎1本のパーマネントマーキングが施されています。

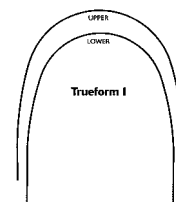

サーマルアクチベイトNiTiワイヤー ツルフォームⅠ

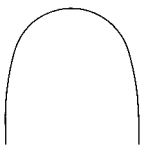	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch	mm		商品番号		商品番号	
	ラウンド	.012	25	TTFU012	206850916U012	TTFL012	206850916L012
		.014	25	TTFU014	U014	TTFL014	L014
		.016	25	TTFU016	U016	TTFL016	L016
		.018	25	TTFU018	U018	TTFL018	L018
スクエア		.020	25	TTFU020	U020	TTFL020	L020
		.016×.016	25	TTFU1616	206850917U1616	TTFL1616	206850917L1616
		.018×.018	25	TTFU1818	U1818	TTFL1818	L1818
		.020×.020	25	TTFU2020	U2020	TTFL2020	L2020
レクタングュラー		.016×.022	25	TTFU1622	206850917U1622	TTFL1622	206850917L1622
		.017×.025	25	TTFU1725	U1725	TTFL1725	L1725
		.018×.025	25	TTFU1825	U1825	TTFL1825	L1825
		.019×.025	25	TTFU1925	U1925	TTFL1925	L1925
		.021×.025	25	TTFU2125	U2125	TTFL2125	L2125

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 21500BZY00512000 管理



G&H NiTiアーチワイヤー

G&H

スーパーエラスティック リバースカーブ

リバースカーブ アーチⅠ

G&Hオリジナルのカーブ形状です。なだらかなカーブで後端がトーインになっています。




リバースカーブ アーチⅢ

後端がトーインになっておらず、ストレートになっています。ツルフォームⅠのアーチフォームに近い形状です。




リバースカーブNiTiワイヤー アーチⅠ

	サイズ inch	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.014	10	SERCU014 206850927U014	SERCL014 206850927L014
	.016	10	SERCU016	U016SERCL016 L016
	.018	10	SERCU018	U018SERCL018 L018
スクエア	.016×.016	10	SERCU1616 206850988U1616	SERCL1616 206850988L1616
レクタングラー	.016×.022	10	SERCU1622 206850988U1622	SERCL1622 206850988L1622
	.017×.025	10	SERCU1725	U1725SERCL1725 L1725
	.018×.025	10	SERCU1825	U1825SERCL1825 L1825
	.019×.025	10	SERCU1925	U1925SERCL1925 L1925

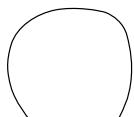

リバースカーブNiTiワイヤー アーチⅢ

	サイズ inch	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.012	10	SERCU3012 206850928U3012	SERCL3012 206850928L3012
	.014	10	SERCU3014	U3014 SERCL3014 L3014
	.016	10	SERCU3016	U3016 SERCL3016 L3016
	.018	10	SERCU3018	U3018 SERCL3018 L3018
スクエア	.016×.016	10	SERCU31616 206850989U31616	SERCL31616 206850989L31616
レクタングラー	.016×.022	10	SERCU31622 206850989U31622	SERCL31622 206850989L31622
	.017×.025	10	SERCU31725	U31725 SERCL31725 L31725
	.018×.025	10	SERCU31825	U31825 SERCL31825 L31825
	.019×.025	10	SERCU31925	U31925 SERCL31925 L31925

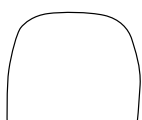

医療機器認証番号 21500BZY00512000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

エルジロイワイヤー

RMO

Archwires

Elgiloy®



アーチワイヤー「エルジロイ」

旧エルジロイアーチワイヤー
との商品番号対照表はこちら▶

RMO 社製ワイヤー「Elgiloy®」がリブランディングしました！

「Elgiloy® ワイヤー」は3種類の弾力性（レジリエンス）が得られるように特殊加工されたコバルトクロム合金ワイヤーです。それぞれベンディングやフォーミングをした後、熱処理することにより、一段階硬く（弾力性が増す）することもできます。アーチフォームは、ナチュラルロングフォーム、ユーロフォーム、スタンダードフォームの3種類をご用意しております。

エルジロイとツルクローム（ステンレス）の硬度比較



※濃い部分は熱処理前の硬度を示します。うすい部分は熱処理によるバネ硬度の増加を示します。

【主な特徴】

- ①スプリング力の持続 ②折れにくい ③高いスプリング性
④劣化が少ない ⑤磁性を帯びにくい

【主な成分】

コバルト 39.0～41.0%、クロム 19.0～21.0%、
ニッケル 14.0～16.0%、モリブデン 6.0～8.0%、
ベリリウム 0.001%以下、鉄 残量
その他（マンガ、ケイ素、炭素、リン、硫黄）5%以下

Elgiloy ワイヤー ナチュラルロングフォーム（旧名称：ナチュラルアーチ）

	サイズ			上顎用	ブルー	下顎用	上顎用	グリーン	下顎用
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.016	0.406	10				W44FU016	206350401FU016	W44FL016 206350401FL016
	.018	0.457	10				W44FU018	U018	W44FL018 L018
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	W45FU1616	206350402FU1616	W45FL1616	206350402FL1616		
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	10	W45FU1622	206350402FU1622	W45FL1622	206350402FL1622		
	.017×.025	0.432×0.635	10	W45FU1725	U1725	W45FL1725	L1725		
	.018×.025	0.457×0.635	10	W45FU1825	U1825	W45FL1825	L1825		

Elgiloy ワイヤー ユーロフォーム（旧名称：アイディアルアーチ）

	サイズ			上顎用	ブルー	下顎用	上顎用	グリーン	下顎用
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.018	0.457	10				W44BU018	206350401BU018	W44BL018 206350401BL018
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	W45BU1616	206350402BU1616	W45BL1616	206350402BL1616		
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	10	W45BU1622	206350402BU1622	W45BL1622	206350402BL1622		
	.017×.025	0.432×0.635	10	W45BU1725	U1725	W45BL1725	L1725		

Elgiloy ワイヤー スタンダードフォーム（旧名称：アーチブランク）

	サイズ			上顎用	グリーン	下顎用	上顎用	ブルー	下顎用
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	商品番号
ラウンド	.016	0.406	10	W44EU016	206350401EU016	W44EL016	206350401EL016		
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	W45EU1616	206350402EU1616	W45EL1616	206350402EL1616		
レクタングラー	.016×.022	0.406×0.559	10	W45EU1622	206350402EU1622	W45EL1622	206350402EL1622		
	.017×.025	0.432×0.635	10	W45EU1725	U1725	W45EL1725	L1725		
	.018×.025	0.457×0.635	10	W45EU1825	U1825	W45EL1825	L1825		
	.019×.025	0.483×0.635	10	W45EU1925	U1925	W45EL1925	L1925		

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理



エルジロイワイヤー


RMO

※ストレートワイヤー各種はリブランディングしておりません。

エルジロイワイヤーストレート(長さ:35.56cm/14inch)

	inch	mm	包装	ブルー商品番号	イエロー商品番号	グリーン商品番号	レッド商品番号	
ラウンド 	.014	0.356	30			在庫限りで販売終了		
	.016	0.406	30	在庫限りで販売終了		在庫限りで販売終了	E00206 206	
	.018	0.457	20	E00203 283		在庫限りで販売終了		
	.020	0.508	20	E00204 282	E00205 206	在庫限りで販売終了		
	.022	0.559	20	E00202 222	E00203 283			
	.025	0.635	10	E00225 225	E00205 206			
	.028	0.711	10	E00228 228	E00206 206			
	.030	0.762	10	E00230 230	E00207 207			
	.032	0.813	10	E00232 232	E00208 208			
	.036	0.914	10	E00236 236	E00208 208			
	.038	0.965	10	E00221 221				
	.040	1.016	6	E00237 237				
	.045	1.143	6	E00238 238				
	.060	1.524	5	在庫限りで販売終了				

	inch	mm	包装	ブルー商品番号	イエロー商品番号	
スクエア 	.016×.016	0.406×0.406	10	E00304	E00300	
	.019×.019	0.483×0.483	10	E00242		

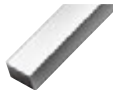	inch	mm	包装	ブルー商品番号	イエロー商品番号	
レクタングラー 	.016×.022	0.406×0.559	10	E00306	E00302	
	.017×.022	0.432×0.559	10	E00307		
	.017×.025	0.432×0.635	10	E00345	E00308	
	.018×.025	0.457×0.635	10	E00245	E00293	
	.019×.025	0.483×0.635	10		E00259	
	.019×.026	0.483×0.660	10	E00294		

医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理

〈関連器材〉

アーチャーレット

TASK (シオダ)



- ・サイドバーを付与し、従来品より曲げやすくなりました
- ・ステンレス製の芯棒にワイヤーサイズとトルクを刻印し、一目で分かりやすくなりました

60-841

206860268

リンガルアーチャーレット

TASK (シオダ)



60-850

206860269

スタンダードアーチャーレット

TASK (シオダ)



CUTPTAT

206860179

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

SUSワイヤー(ステンレススチールワイヤー) モリタデンタルプロダクツ



- 摩擦抵抗が少なく、適度な弾性をもつステンレススチールワイヤーです。
- ゴールドブレーティング処理を施した審美性の高いレモンゴールドとピーチゴールドもご用意しております。
- 標準的な日本人の歯列弓形態に合わせたプリフォームドアーチもございます。
*ゴールドシリーズはスモールサイズのご用意はございません。
* 35cmストレートはレギュラーのみご用意しております。
- アーチワイヤーはすべて個包装で衛生的です。
- 正中のマーキングは上顎は黒色、下顎は赤色となっています。

SUS ワイヤー

レモンゴールド プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		パッケージ	フォーム サイズ	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.016	0.40	10	ラージ	SLG16UL	20688015216UL	SLG16LL	20688015216LL
	.018	0.45	10	ラージ	SLG18UL	18UL	SLG18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	ラージ	SLG1616UL	2068801531616UL	SLG1616LL	2068801531616LL
レクタンギュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	ラージ	SLG1622UL	2068801531622UL	SLG1622LL	2068801531622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	ラージ	SLG1725UL	1725UL	SLG1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	ラージ	SLG1825UL	1825UL	SLG1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	ラージ	SLG1925UL	1925UL	SLG1925LL	1925LL

レモンゴールド ストレートワイヤー 長さ:35cm

	ワイヤーサイズ		パッケージ	商品番号
	inch	mm		
ラウンド	.014	0.35	10	SLG14 20688015014
	.016	0.40	10	SLG16 16
	.018	0.45	10	SLG18 18
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	SLG1616 2068801511616
レクタンギュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	SLG1622 2068801511622
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	SLG1725 1725
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	SLG1825 1825
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	SLG1925 1925

在庫限りで販売終了

SUS ワイヤー

ピーチゴールド プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		パッケージ	フォーム サイズ	上顎用		下顎用	
	inch	mm			商品番号		商品番号	
ラウンド	.016	0.40	10	ラージ	SPG16UL	20688015616UL	SPG16LL	20688015616LL
	.018	0.45	10	ラージ	SPG18UL	18UL	SPG18LL	18LL
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	ラージ	SPG1616UL	2068801571616UL	SPG1616LL	2068801571616LL
レクタンギュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	ラージ	SPG1622UL	2068801571622UL	SPG1622LL	2068801571622LL
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	ラージ	SPG1725UL	1725UL	SPG1725LL	1725LL
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	ラージ	SPG1825UL	1825UL	SPG1825LL	1825LL
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	ラージ	SPG1925UL	1925UL	SPG1925LL	1925LL

ピーチゴールド ストレートワイヤー 長さ:35cm

	ワイヤーサイズ		パッケージ	商品番号
	inch	mm		
ラウンド	.014	0.35	10	SPG14 20688015414
	.016	0.40	10	SPG16 16
	.018	0.45	10	SPG18 18
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	SPG1616 2068801551616
レクタンギュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	SPG1622 2068801551622
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	SPG1725 1725

在庫限りで販売終了



SUSワイヤー(ステンレススティールワイヤー) モリタデンタルプロダクツ

SUS ワイヤー

レギュラー プリフォームドアーチ

	ワイヤーサイズ		包装	フォーム サイズ	商品番号	上顎用		下顎用	
	inch	mm				商品番号		商品番号	
ラウンド	.014	0.35	20	スモール	SUS14US	20688016114US	SUS14LS	20688016114LS	
			20	ラージ	SUS14UL	14UL	SUS14LL	14LL	
	.016	0.40	20	スモール	SUS16US	16US	SUS16LS	16LS	
			20	ラージ	SUS16UL	16UL	SUS16LL	16LL	
	.018	0.45	20	スモール	SUS18US	18US	SUS18LS	18LS	
			20	ラージ	SUS18UL	18UL	SUS18LL	18LL	
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	スモール	SUS1616US	2068801621616US	SUS1616LS	2068801621616LS	
			10	ラージ	SUS1616UL	1616UL	SUS1616LL	1616LL	
レクタングュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	スモール	SUS1622US	2068801621622US	SUS1622LS	2068801621622LS	
			10	ラージ	SUS1622UL	1622UL	SUS1622LL	1622LL	
	.017 x .022	0.43 x 0.56	10	スモール	SUS1722US	1722US	SUS1722LS	1722LS	
			10	ラージ	SUS1722UL	1722UL	SUS1722LL	1722LL	
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	スモール	SUS1725US	1725US	SUS1725LS	1725LS	
			10	ラージ	SUS1725UL	1725UL	SUS1725LL	1725LL	
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	スモール	SUS1825US	1825US	SUS1825LS	1825LS	
			10	ラージ	SUS1825UL	1825UL	SUS1825LL	1825LL	
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	スモール	SUS1925US	1925US	SUS1925LS	1925LS	
			10	ラージ	SUS1925UL	1925UL	SUS1925LL	1925LL	
	.021 x .025	0.53 x 0.63	10	スモール	SUS2125US	2125US	SUS2125LS	2125LS	
			10	ラージ	SUS2125UL	2125UL	SUS2125LL	2125LL	
	.0215 x .028	0.55 x 0.70	10	スモール	SUS21528US	1528US	SUS21528LS	1528LS	
			10	ラージ	SUS21528UL	1528UL	SUS21528LL	1528LL	

レギュラー ストレートワイヤー 長さ:35cm

	ワイヤーサイズ		包装	商品番号
	inch	mm		
ラウンド	.012	0.30	40	SUS12 20688015812
	.014	0.35	40	SUS14 14
	.016	0.40	40	SUS16 16
	.018	0.45	40	SUS18 18
	.020	0.50	40	SUS20 20
スクエア	.016 x .016	0.40 x 0.40	10	SUS1616 2068801601616
レクタングュラー	.016 x .022	0.40 x 0.56	10	SUS1622 2068801601622
	.017 x .022	0.43 x 0.56	10	SUS1722 1722
	.017 x .025	0.43 x 0.63	10	SUS1725 1725
	.018 x .025	0.45 x 0.63	10	SUS1825 1825
	.019 x .025	0.48 x 0.63	10	SUS1925 1925
	.021 x .025	0.53 x 0.63	10	SUS2125 2125
	.0215 x .028	0.55 x 0.70	10	SUS21528 21528
ラボワイヤー	.028	0.70	25	SUS28 20688015928
	.032	0.80	25	SUS32 32
	.036	0.90	25	SUS36 36

医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

ワイヤー関連器材

アーチマーカ

G&H

ディスプレイで衛生的なアーチマーカです。
赤と白をご用意しております。
(ディスペンサーのご用意はございません)



	包装	商品番号	
赤	100本	AMP020	206350671R
白	100本	AMP020W	W

ツルクロームワイヤー(ステンレススティール)

RMO

Stainless Steel

TRU-CHROME

ステンレススティールワイヤー “ツルクローム”

旧ツルクロームワイヤー
との商品番号対照表はこちら▶


RMO 社製ワイヤー「TRU-CHROME®」がリブランディングしました！

「TRU-CHROME® ワイヤー」は安定した品質と厳格な品質管理に基づいて製造されたステンレスワイヤーです。

用途により弾力性（レジリエンス）が設定されており、臨床に適した仕様になっています。また、ワイヤーに熱を加えることにより、屈曲操作によって生じた内部ひずみを取り除くことができます。アーチフォームは、ナチュラルロングフォーム、ユーロフォーム、スタンダードフォームの3種類をご用意しております。


TRU-CHROMEワイヤー ナチュラルロングフォーム（旧名称：ナチュラルアーチ）

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	
ラウンド	.014	0.356	25	W20FU014	206350410FU014	W20FL014 206350410FL014
	.016	0.406	25	W20FU016	U016	W20FL016 016
	.018	0.457	25	W20FU018	U018	W20FL018 018
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	25	W20FU1616	206350411FU1616	W20FL1616 206350411FL1616
	.018 × .018	0.457 × 0.457	25	W20FU1818	U1818	W20FL1818 L1818
レクタンギュラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	25	W20FU1622	206350411FU1622	W20FL1622 206350411FL1622
	.017 × .025	0.432 × 0.635	25	W20FU1725	U1725	W20FL1725 L1725
	.018 × .025	0.457 × 0.635	25	W20FU1825	U1825	W20FL1825 L1825
	.019 × .025	0.483 × 0.635	25	W20FU1925	U1925	W20FL1925 L1925
	.021 × .025	0.533 × 0.635	25	W20FU2125	U2125	W20FL2125 L2125

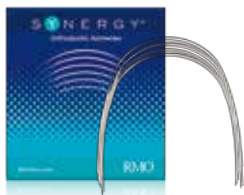


TRU-CHROMEワイヤー ユーロフォーム（旧名称：アイディアルアーチ）

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	
ラウンド	.014	0.356	25	W20BU014	206350404BU014	W20BL014 206350404BL014
	.016	0.406	25	W20BU016	U016	W20BL016 016
	.018	0.457	25	W20BU018	U018	W20BL018 018
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	25	W20BU1616	206350405BU1616	W20BL1616 206350405BL1616
	.018 × .018	0.457 × 0.457	25	W20BU1818	U1818	W20BL1818 L1818
レクタンギュラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	25	W20BU1622	206350405BU1622	W20BL1622 206350405BL1622
	.017 × .025	0.432 × 0.635	25	W20BU1725	U1725	W20BL1725 L1725
	.018 × .025	0.457 × 0.635	25	W20BU1825	U1825	W20BL1825 L1825
	.019 × .025	0.483 × 0.635	25	W20BU1925	U1925	W20BL1925 L1925
	.021 × .025	0.533 × 0.635	25	W20BU2125	U2125	W20BL2125 L2125

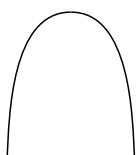

TRU-CHROMEワイヤー スタンダードフォーム（旧名称：アーチブランクス）

	サイズ		上顎用		下顎用	
	inch	mm	包装	商品番号	商品番号	
ラウンド	.016	0.406	25	W20EU016	206350407EU016	W20EL016 206350407EL016
	.018	0.457	25	W20EU018	U018	W20EL018 018
	.020	0.508	25	W20EU020	U020	W20EL020 020
スクエア	.016 × .016	0.406 × 0.406	25	W20EU1616	206350408EU1616	W20EL1616 206350408EL1616
レクタンギュラー	.016 × .022	0.406 × 0.559	25	W20EU1622	206350408EU1622	W20EL1622 206350408EL1622
	.017 × .025	0.432 × 0.635	25	W20EU1725	U1725	W20EL1725 L1725
	.018 × .025	0.457 × 0.635	25	W20EU1825	U1825	W20EL1825 L1825
	.019 × .025	0.483 × 0.635	25	W20EU1925	U1925	W20EL1925 L1925

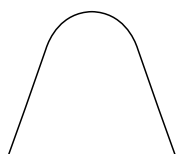

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理



ツルクロームワイヤー(ステンレススティール)

RMO

※ストレートワイヤー各種はリブランディングしておりません。

ツルクロームワイヤーストレート (長さ:35.56cm/14inch)

	inch	mm	包装	商品番号	
ラウンド	.012	0.305	30	E00005	2063504205
	.014	0.356	30	E00007	7
	.016	0.406	30	E00009	9
	.018	0.457	20	E00010	10
	.020	0.508	20	E00011	11
	.022	0.559	20	E00013	13
	.025	0.635	10	E00015	15
	.028	0.711	10	E00016	16
	.030	0.762	10	E00017	17
	.032	0.813	10	E00018	18
	.036	0.914	10	E00019	19
	.040	1.016	6	E00020	20
	.045	1.143	6	E00021	21
	.050	1.270	5	E00022	22
	.060	1.524	5	E00024	24



リテーナーワイヤーNo.2硬度


ツルクロームワイヤーよりも軟らかく、容易に屈曲して保定装置にあわせることができます。ワイヤーの屈曲はワイヤーを加工硬化させ、実用的な弾力性を与えます。

.028	0.711	10	E00080	20635042480
.030	0.762	10	E00081	81
.032	0.813	10	E00082	82
.036	0.914	10	E00083	83
.040	1.016	6	E00084	84

	inch	mm	包装	商品番号	
スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	E00313	206350448313
	.017×.017	0.432×0.432	10	E00314	314



	inch	mm	包装	商品番号	
レクタングル	.016×.022	0.406×0.559	10	E00098	20635042898
	.017×.022	0.432×0.559	10	E00099	99
	.017×.025	0.432×0.635	10	E00311	206350448311
	.018×.022	0.457×0.559	10	E00096	20635042896
	.018×.025	0.457×0.635	10	E00097	97
	.019×.026	0.483×0.660	10	E00095	95
	.021×.025	0.533×0.635	10	E00090	20635042690

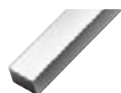

医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ベンダロイワイヤー

RMO

Beta Titanium Archwires

BENDALOYパッケージは
パープル!

ベータチタニウムワイヤー “ベンダロイ”

旧ベンダロイワイヤーとの
商品番号対照表はこちら▶



RMO 社製ワイヤー「BENDALOY®」がリブランディングしました!

「BENDALOY® ワイヤー」はニッケルを含まないチタン・モリブデン合金の矯正ワイヤーで、すぐれたバネ性があります。

また、ベンディングが容易で、トルクを入れることが可能なほか、ベンディングによる破折が少なく、複雑なベンドも付与することができます。

アーチワイヤー




ベンダロイ・ナチュラルロングフォーム (旧名称: ナチュラルアーチ)

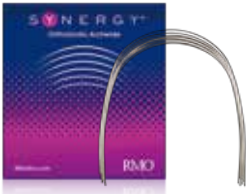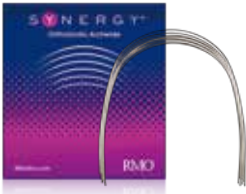	サイズ		包装	上顎用		下顎用	
	inch	mm		商品番号			
	ラウンド	.016	0.406	10	W30FU016	206350348FU016	W30FL016 206350348FL016
		.018	0.457	10	W30FU018	U018	W30FL018 L018
	スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	W30FU1616	206350349FU1616	W30FL1616 206350349FL1616
	レクタングュラー	.016×.022	0.406×0.559	10	W30FU1622	206350349FU1622	W30FL1622 206350349FL1622
		.017×.025	0.432×0.635	10	W30FU1725	U1725	W30FL1725 L1725
		.019×.025	0.483×0.635	10	W30FU1925	U1925	W30FL1925 L1925
		.021×.025	0.533×0.635	10	W30FU2125	U2125	W30FL2125 L2125

ストレートワイヤー

※ストレートワイヤー各種はリブランディングしておりません。

ベンダロイ・ストレート

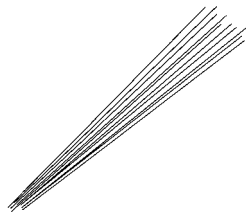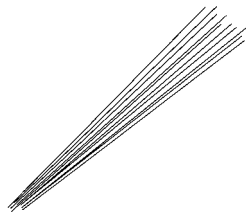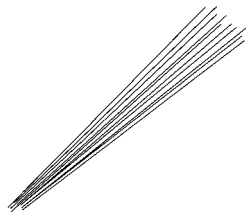	サイズ		包装	商品番号	
	inch	mm			
	ラウンド	.016	0.406	10	E00620 206850770620
		.018	0.457	10	E00621 621
	スクエア	.016×.016	0.406×0.406	10	E00622 206850771622
	レクタングュラー	.016×.022	0.406×0.559	10	E00623 206850771623
		.017×.025	0.432×0.635	10	E00624 624
	ラウンドラボワイヤー	.032	0.813	10	E00626 206350454626
		.036	0.914	10	E00627 627

医療機器認証番号 21100BZY00683000 管理



ツイストワイヤー／デュアルトップコイルスプリング RMO

トリフレックス

熱処理を施し弾性化されたツイステッドレベリングワイヤーは、ベンドを加えたりカットした場合でもバラバラになりません。
3本編みによるツイストは弱いフォースから、強いレベルに達するまでより大きなたわみにも耐えます。ステンレススティール製です。
(熱処理を施しているため、ワイヤーの色が赤褐色に近い色味となっています。)

	inch	mm	包装	商品番号	
ラウンド ストレート (35.56cm)	.0155	0.394	10	E00175	206350435E175
	.0175	0.445	10	E00176	206350437
	.0195	0.495	10	E00177	206350435E177
	.0215	0.546	10	E00178	E178

医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理

スブラフレックス

6本編みのツイストは、ライトフォースで長時間の持続力をもっており、ベンドもできます。
また、トリフレックス同様カットしても解けません。ステンレススティール製です。

	inch	mm	包装	商品番号	
ラウンド ストレート (35.56cm)	.0155	0.394	10	E00179	206350436E179
	.0175	0.445	10	E00180	E180
	.0195	0.495	10	E00181	E181
	.0215	0.546	10	E00182	E182

医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理

フレックスⅧ (エイト)

Braided Archwires
FLEXⅧ
ツイストワイヤー “フレックスⅧ”



旧フレックスⅧ
との商品番号対照表はこちら▶



RMO 社製ワイヤー「FLEXⅧ」がリブランディングしました！

「フレックスⅧ」は、ステンレススティールで8本編みされた角線のツイストワイヤーです。
アーチ形状はナチュラルフォームで、「トリフレックス」や「スブラフレックス」と同様に、カットしても解けません。
※従来のフレックスⅧとアーチ形状が異なります。

	サイズ		包装	商品番号	上顎用	商品番号	下顎用
	inch	mm					
スクエア&レクタングラー	.016×.016	0.406×0.406	10	W28AU1616	206850389AU1616	W28AL1616	206850389AL1616
	.016×.022	0.406×0.558	10	W28AU1622	U1622	W28AL1622	L1622
	.017×.025	0.431×0.635	10	W28AU1725	U1725	W28AL1725	L1725
	.018×.025	0.457×0.635	10	W28AU1825	U1825	W28AL1825	L1825
	.019×.025	0.483×0.635	10	W28AU1925	U1925	W28AL1925	L1925

医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理

デュアルトップコイルスプリング

デュアルトップオートスクリュー（株式会社プロシード社取扱JBタイプ）に適合するアイレット付きのクローズドコイルスプリングです。スーパーエラストックNiTiワイヤーで作られており、超弾性であるため、時間の経過によるフォースの低下がほとんどありません。

	inch	mm	長さ	包装	商品番号	
	.010×.030	0.254×0.762	9	10	G00301	206850050301
	.010×.030	0.254×0.762	12	10	G00302	302

医療機器承認番号 20200BZY01057000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

コイルスプリング

RMO

オープンタイプ (コンプレッション)



クローズタイプ (エクステンション)


アイレット付



ストップワウンドタイプ (ディスタライジング)



コイルスプリング

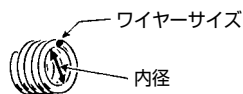

オープンタイプ



クローズタイプ



オーソノールコイルスプリングはニッケル・チタン合金の超弾性特性を活かしたコイルスプリングです。

ワイヤーサイズ×内径		長さ	包装	商品番号	
inch	mm				
.010×.030	0.254×0.762	7" (17.78cm)	3	F00300	206850464300
.012×.030	0.305×0.762	7" (17.78cm)	3	F00301	301
.012×.045	0.305×1.143	7" (17.78cm)	3	F00302	302

ワイヤーサイズ×内径		長さ (mm)	包装	商品番号	
inch	mm				
.010×.030	0.254×0.762	9	10	F00320	206850961320
.010×.030	0.254×0.762	12	10	F00321	321
.011×.030	0.279×0.762	9	10	F00322	322
.011×.030	0.279×0.762	12	10	F00323	323
.012×.030	0.305×0.762	9	10	F00324	324
.012×.030	0.305×0.762	12	10	F00325	325

ワイヤーサイズ×内径		長さ	包装	商品番号	
inch	mm				
.010×.045	0.254×1.143	7" (17.78cm)	3	F00340	206850961340

医療機器承認番号 20200BZY01057000 管理

エルジロイ製コイルスプリングで熱処理は不要です。非常に弾性に富み、耐久力があります。オープンタイプ(コンプレッション)又はクローズタイプ(エクステンション)より症例に応じて選択してください。

ワイヤーサイズ×内径			オープンタイプ 商品番号	クローズタイプ 商品番号	
inch	mm	長さ (cm)			
.007×.028	0.178×0.711	60	F00096	20635046096	
.007×.030	0.178×0.762	60	F00098	98	
.008×.022	0.203×0.559	60	F00022	22	
.008×.025	0.203×0.635	60	F00024	24	
.008×.028	0.203×0.711	60	F00026	26	
.008×.030	0.203×0.762	60	F00028	28	F00029 20635046229
.008×.032	0.203×0.813	60	F00030	30	
.008×.036	0.203×0.914	60	F00032	32	F00033 33
.009×.028	0.229×0.711	60	F00042	42	
.009×.030	0.229×0.762	60	F00044	44	F00045 45
.009×.032	0.229×0.813	60	F00046	46	F00047 47
.009×.036	0.229×0.914	60	F00048	48	
.009×.040	0.229×1.016	60	F00050	50	
.010×.028	0.254×0.711	60	F00058	58	
.010×.030	0.254×0.762	60	F00060	60	F00061 61
.010×.032	0.254×0.813	60	F00062	62	
.010×.036	0.254×0.914	60	F00064	64	F00065 65
.010×.040	0.254×1.016	60	F00066	66	
.010×.045	0.254×1.143	60	F00080	80	

医療機器認証番号 301AKBZX00067000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



リガチャーワイヤー（結紮線）

プリフォームドリガチャーワイヤー

RMO



硬度はデッドソフト（軟性）で、精密にプリフォーム加工されているため、スピーディーに結紮できます。ステンレススティール製です。

inch	mm	包装	商品番号	
.008	0.203	1000	E00700	206350457E700
.009	0.228	1000	E00701	E701
.010	0.254	1000	E00702	E702
.011	0.279	1000	E00703	E703
.012	0.304	1000	E00704	E704
.010	0.254	250	E00702-1	206350456

医療機器認証番号 301AKBZX00068000 管理

リガチャータイフック（コバヤシフック）

RMO



精密にプリフォームされた先端に、予めフックが溶接されていますので、アーチワイヤーを交換することなく、スピーディーにフックをかけられます。ステンレススティール製です。

inch	mm	包装	商品番号	
.012	0.304	100	A01202	2063502981202
.014	0.355	100	A01203	1203

医療機器認証番号 301AKBZX00068000 管理

リガチャーワイヤー（spool）

RMO



1オンス巻（28g）

バルクタイプのツルクロームリガチャーワイヤーです。ステンレススティール製です。

1オンス（28g）

inch	mm	包装	長さ（m）	商品番号	
.007	0.177	28g	145.7	E00120	206350432120
.008	0.203	28g	111.3	E00121	121
.009	0.228	28g	87.8	E00122	122
.010	0.254	28g	71.0	E00123	123
.012	0.304	28g	49.4	E00125	125
.014	0.355	28g	36.3	E00126	126
.016	0.406	28g	27.7	E00128	128
.018	0.457	28g	22.0	E00129	129
.020	0.508	28g	17.7	E00130	130

医療機器認証番号 301AKBZX00068000 管理

歯列矯正用結紮線

モリタデンタルプロダクツ



ステンレススティール製の結紮線（リガチャーワイヤー）をスプールで巻いたタイプです。プリフォームドタイプでは長さが足りない連続結紮などに便利です。

inch	mm	包装	商品番号	
.008	0.20	10m	LGS02	20688018302
.010	0.25	10m	LGS025	025
.012	0.30	10m	LGS03	03

※inchの値は換算目安です。

医療機器認証番号 304AGBZX00074000 管理

テクノフレックス／クラスプ／その他

テクノフレックス

齋藤歯研



【主な成分】

コバルト	42.00 ～ 43.00%
クロム	21.00 ～ 22.00%
ニッケル	16.50 ～ 17.50%
鉄	REST
モリブデン	5.80 ～ 6.80%
マンガン	0.90 ～ 1.50%
ケイ素	< 0.50%
炭素	0.10 ～ 0.15%
リン	< 0.030%
硫黄	< 0.015%

テクノフレックスは、矯正技工用ワイヤーに要求されるベンディングの容易さと弾力性(形状回復性)という相反した条件を高い次元で融合させることに成功したコバルトクロムワイヤーです。

【主な用途】

リテーナー、リンガルアーチ、アクチベーター、クラスプ、補助弾線 他 技工関係


長さ：30cm

サイズ (mm)	包装	商品番号	
0.40	5	TEC-04	2063504580.4
0.50	5	TEC-05	0.5
0.60	5	TEC-06	0.6
0.70	5	TEC-07	0.7
0.80	5	TEC-08	0.8
0.90	5	TEC-09	0.9
1.00	5	TEC-10	1.0
1.20	5	TEC-12	1.2

医療機器認証番号 20100BZZ01899000 管理

ボール リテーナー クラスプ

ショイデンタル

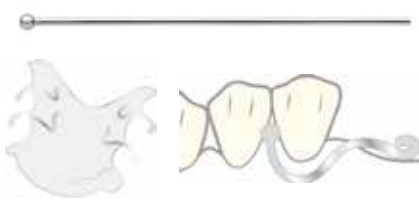


ワイヤーサイズ inch mm	ボール径 inch mm	包装	商品番号	
.024 0.60	.048 1.4	10	2048	2063501850.6
.028 0.70	.067 1.7	10	2049	0.7
.032 0.80	.064 1.8	10	2050	0.8
.035 0.90	.079 2.0	10	2051	0.9
.040 1.00	.080 2.0	10	2052	1.0
.047 1.20	.091 2.3	10	2053	1.2

医療機器認証番号 301AKBZX00062000 管理

アダムス クラスプ

ショイデンタル

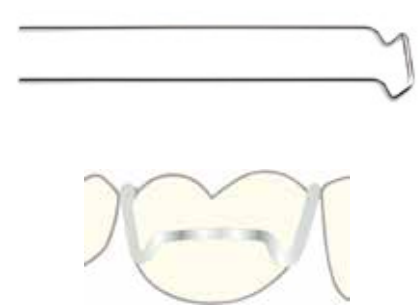

ワイヤーサイズ inch mm	近遠心距離 mm	包装	商品番号	
.028 0.711	6.0	10	2104	2063501816
.028 0.711	7.0	10	2105	7
.028 0.711	8.0	10	2106	8
.028 0.711	9.0	10	2107	9
.028 0.711	10.0	10	2108	10
.028 0.711	11.0	10	2109	11

医療機器認証番号 301AKBZX00062000 管理

アンテリアートルキングスプリング

RMO

(Warren)



前歯部の各歯牙ごとにトルクを入れる場合に便利なエルジロイ製スプリングで、アーチワイヤーに挿入して使用します。なお、指定サイズの角アーチワイヤー以外にはご使用になれません。

スプリングサイズ inch mm	指定アーチワイヤーサイズ inch mm	包装	商品番号	
.011 0.279	.016×.022 0.406×0.559	10	A00466	206350212466
.011 0.279	.018×.025 0.457×0.635	10	A00474	474
.011 0.279	.019×.025 0.483×0.635	10	A00467	467

医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ニューSTロック／サンプラチナ矯正線／オーソソルダーII

ニューSTロック モリタデンタルプロダクツ



リンガルアタッチメントの定番装置です。維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損が起こりにくい構造です。遠心方向のコントロールも可能な「エクステンションタイプ」や、維持部を交換せず装置のみを取り替えたいときなどに使用可能な「脚部のみ」もご用意しております。

★ニューSTロックは様々な装置に応用可能です。臨床応用レポートをご用意しております。当社ホームページ舌側弧線装置の項目の症例集をご参照ください。

▼STロックの臨床レポート



ニューSTロックレギュラーを使用して遠心移動を行った症例

材質

脚部	主線 (0.9mm)	コバルトクロム合金
	副線	ステンレス合金
維持部	ストッパー	ニッケルクロム合金


仕様	包装	商品番号
レギュラー	1組	STLR 206880163LR
	5組	STLR5 206880164LR5
ミニ	1組	STLM 206880163LM
	5組	STLM5 206880164LM5
エクステンション	1組	STLE 206880165
脚部のみ (レギュラー・ミニ共用)	10本	STLF 206880179

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

サンプラチナ矯正線

モリタデンタルプロダクツ

歯科技工用コバルトクロム合金です。

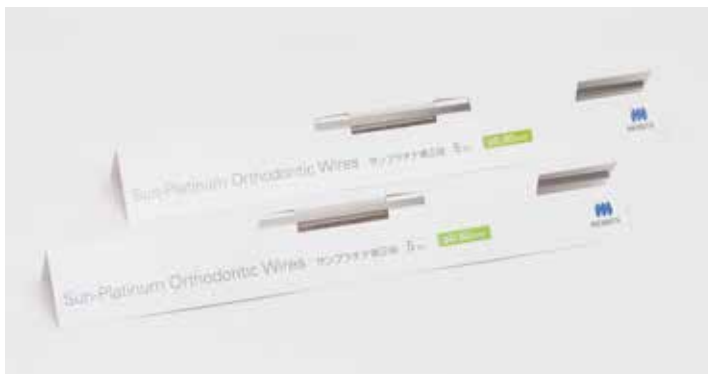

長さ：30cm

ワイヤーサイズ (mm)	包装	商品番号
0.40	5	SP04 2068801660.4
0.50	5	SP05 0.5
0.60	5	SP06 0.6
0.70	5	SP07 0.7
0.80	5	SP08 0.8
0.90	5	SP09 0.9
1.00	5	SP10 1.0
1.20	5	SP12 1.2
1.50	5	SP15 206880181

医療機器認証番号 220AGBZX00200000 管理

<関連器材>

SWフラックス

YAMAKIN

ペーストタイプのフラックスで、鋳着時の濡れ性の向上と、金属表面の酸化膜や汚れを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。活性温度は、400-900℃です。



	内容量	商品番号
SW フラックス	40g	SWF 206350655

オーソソルダーII

モリタデンタルプロダクツ

流ろう性が高く、操作性の良い歯科用銀ろうです。



液相点：650℃


ワイヤーサイズ (mm)	内容量	商品番号
0.5	10g1巻	SDR05 20688018205
0.6	10g1巻	SDR06 06

医療機器認証番号 304AGBZX00066000 管理

クワッドヘリックス

RMO

3Dクワッドヘリックス (垂直可撤式)

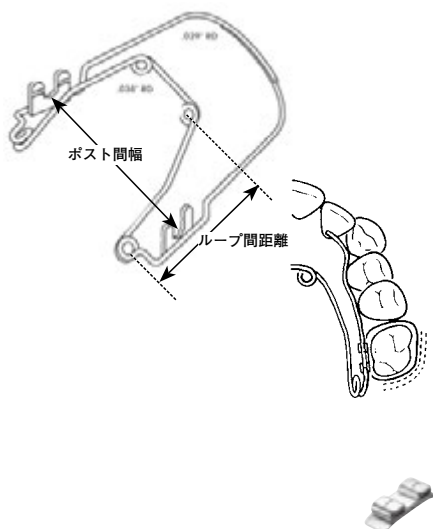


遠心部に溶接されているポストを垂直方向に専用チューブへ差し込みます。前歯部にはエクステンダーが備わっていますので、指様弾線を鑑着する手間が省けます。ブルーエルジロイ製です。

サイズ	ポスト間幅	ループ間距離	包装	商品番号
1	25mm	13mm	3	A04308 206350315A4308
2	27mm	13mm	3	A04309 A4309
3	31mm	16mm	3	A04310 A4310
3.5	34mm	19mm	3	A04317 A4317
4	34mm	22mm	3	A04311 A4311
5	37mm	26mm	3	A04312 A4312
6	40mm	31mm	3	A04313 A4313

アソート 1~6 (3.5は除く) 各1 K00770 206350770
医療機器認証番号 301AKBX00046000 管理

3Dリンガルチューブ 10 A04315 206350392
医療機器承認番号 16000BZY00356000 管理

クワッドヘリックス (水平可撤式)

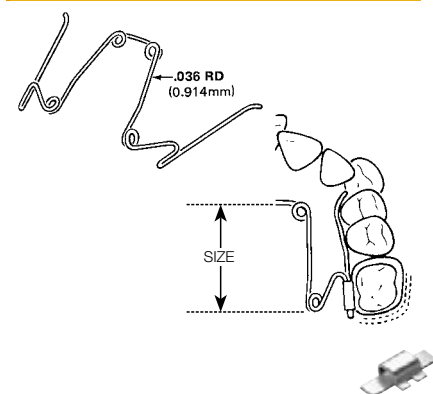


遠心部のワイヤーを水平方向に専用シースへ差し込み、使用します。ステンレススティール製です。

サイズ	包装	商品番号
1 21mm	3	A01230 2063502991230
2 23mm	3	A01231 1231
3 24mm	3	A01232 1232
4 26mm	3	A01233 1233

アソート 1~4 各1 K00722 206850419
医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理

リンガルシース 10 A00186 206350157
医療機器承認番号 16000BZY00356000 管理

クワッドヘリックス (鑑着用、リケッツタイプ)

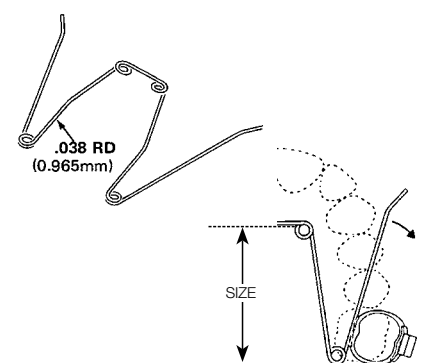

遠心部のワイヤーを大臼歯バンドの舌側部分に鑑着し使用する固定式タイプです。Dr.リケッツが考案したことからリケッツタイプとも呼ばれています。ブルーエルジロイ製です。

サイズ	包装	商品番号
1 14mm	3	A00510 206350225510
2 18mm	3	A00511 511
3 24mm	3	A00512 512
4 28mm	3	A00513 513
5 37mm	3	A00514 514

アソート 1~5 各1 K00690 206850418
医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。